


Lumineszenzröhre S 1000615

Bedienungsanleitung

01/17 ALF

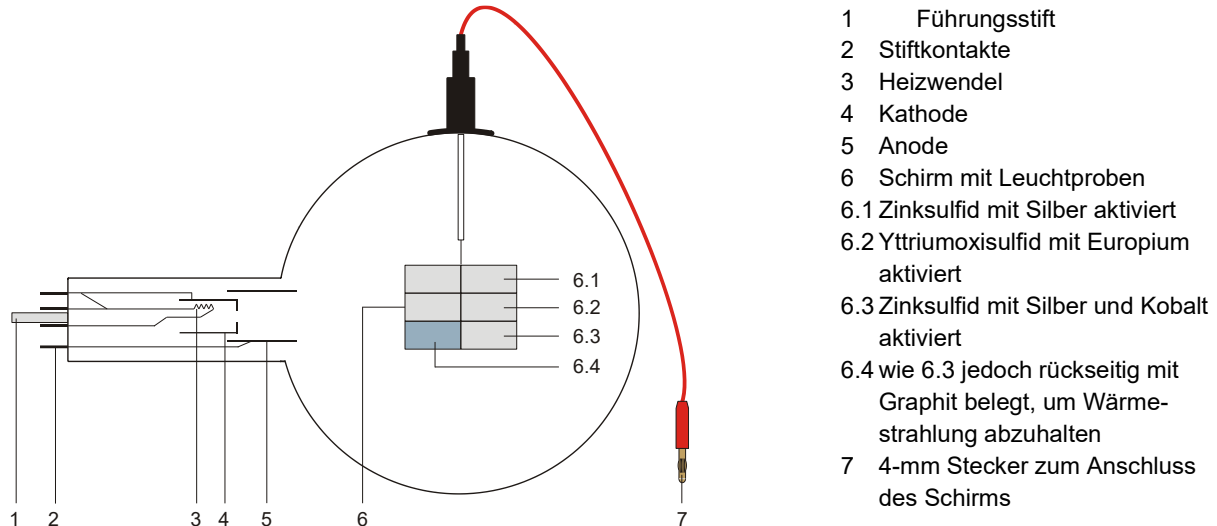

- 1 Führungsstift
- 2 Stiftkontakte
- 3 Heizwendel
- 4 Kathode
- 5 Anode
- 6 Schirm mit Leuchtproben
- 6.1 Zinksulfid mit Silber aktiviert
- 6.2 Yttriumoxisulfid mit Europium aktiviert
- 6.3 Zinksulfid mit Silber und Kobalt aktiviert
- 6.4 wie 6.3 jedoch rückseitig mit Graphit belegt, um Wärmestrahlung abzuhalten
- 7 4-mm Stecker zum Anschluss des Schirms

1. Sicherheitshinweise

Glühkathodenröhren sind dünnwandige, evakuierte Glaskolben. Vorsichtig behandeln: Implosionsgefahr!

- Röhre keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Verbindungskabel keinen Zugbelastungen aussetzen.
- Röhre nur in den Röhrenhalter S (1014525) einsetzen.

Zu hohe Spannungen, Ströme sowie falsche Kathodenheiztemperatur können zur Zerstörung der Röhre führen.

- Die angegebenen Betriebsparameter einhalten.
- Für Anschlüsse nur Sicherheits-Experimentierkabel verwenden.
- Schaltungen nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten vornehmen.
- Röhren nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten ein- und ausbauen.

Im Betrieb wird der Röhrenhals erwärmt.

- Röhre vor dem Ausbau abkühlen lassen.

Die Einhaltung der EC-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit ist nur mit den empfohlenen Netzgeräten garantiert.

2. Beschreibung

Die Lumineszenzröhre dient zur Demonstration der Lumineszenz verschiedener Leuchtproben bei Anregung durch Elektronenbeschuss (Kathodenlumineszenz) oder Bestrahlung mit UV-Licht (Fotolumineszenz).

Die Lumineszenzröhre ist eine Hochvakuum-Röhre mit einer Elektronenkanone, bestehend aus einem Heizfaden aus reinem Wolfram in einer mit einer Öffnung versehenen „Kathodendose“ und einer zylinderförmigen Anode in einem durchsichtigen, evakuierten Glaskolben. An einem Träger ist ein Schirm mit drei Leuchtproben befestigt.

3. Technische Daten

Heizspannung:	6,0 V AC/DC (8,0 V max.)
Heizstrom:	1,6 A typ. bei $U_F = 6,0$ V
Anodenspannung:	2000 - 5000 V DC
Anodenstrom:	160 μ A typ. bei $U_A = 4500$ V
Strom am Schirm:	100 μ A typ. bei $U_S = 4500$ V
Glaskolben:	ca. 130 mm $\varnothing$
Gesamtlänge:	ca. 260 mm

Leuchtproben:

- 6.1: blau leuchtend, ca. 450 nm, mittlere Zerfallzeit
- 6.2: rot leuchtend, ca. 625 nm, mittelkurze Zerfallzeit
- 6.3: grün leuchtend, ca. 510 nm fluoreszierend, ca. 515 nm phosphoreszierend, lange Zerfallzeit

4. Bedienung

Zur Durchführung der Experimente mit der Lumineszenzröhre sind folgende Geräte zusätzlich erforderlich:

1 Röhrenhalter S	1014525
1 Hochspannungsnetzgerät 5 kV @115 V	1003309
oder	
1 Hochspannungsnetzgerät 5 kV @230 V	1003310
1 Analog Multimeter Escola 100	1013527
1 Quecksilber Hochdrucklampe	1000852
1 Drossel für Spektrallampen @115 V	1003195
oder	
1 Drossel für Spektrallampen @230 V	1003196
1 Infrarot Lichtquelle	

4.1 Einsetzen der Röhre in den Röhrenhalter

- Röhre nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten ein- und ausbauen.
- Röhre mit leichtem Druck in die Fassung des Röhrenhalters schieben bis die Stiftkontakte vollständig in der Fassung sitzen, dabei auf eindeutige Position des Führungsstiftes achten.

4.2 Entnahme Röhre aus dem Röhrenhalter

- Zum Entnehmen der Röhre mit dem Zeigefinger der rechten Hand von hinten auf den Führungsstift drücken bis sich die Kontaktstifte lösen. Dann die Röhre entnehmen.

5. Experimentierbeispiele

5.1 Anregung durch Elektronenbestrahlung

- Zur besseren Beobachtung der Lumineszenz Experiment im verdunkelten Raum durchführen.
- Lumineszenzröhre gemäß Fig. 1 beschalten.
- Sowohl den Schirm als auch die Anode erden.

- Netzgerät einschalten, aber noch keine Hochspannung einstellen. Schirm im Weißlicht der Röhrenheizung betrachten.

Es ist keine Leuchterscheinung zu beobachten.

- Anodenspannung U_A von ca. 3500 V einstellen.
- Lumineszenz beobachten.

Die drei Leuchtproben leuchten in verschiedenen Wellenlängen (Farben).

- Anodenspannung U_A zwischen 2500 V und 4500 V variieren.
- Veränderung der Leuchterscheinungen beobachten.

Während sich die Intensität der Leuchterscheinungen mit der Spannung ändert, verändert sich die Wellenlänge nicht.

- Bei einer Spannung U_A von 4500 V mit einem Handspektroskop die Spektren der verschiedenen Leuchtproben betrachten.

Im Spektrum des roten Phosphors sind die Spektrallinien besonders gut ausgeprägt.

- Netzgerät abschalten und das Nachleuchten (Phosphoreszenz) beobachten.

Nach Entfernen der Anregungsquelle hören die Leuchtproben auf zu leuchten. Im grünen Phosphor ist die Phosphoreszenz besonders gut zu beobachten.

5.2 Anregung durch UV-Licht

- Lumineszenzröhre gemäß Fig. 2 beschalten.
- Netzgerät nicht einschalten.

Bei Raumbeleuchtung sind keine Leuchterscheinungen zu beobachten.

- Experiment bei Raumverdunklung fortführen.
- Schirm auf der Elektronenkanonenseite mit einer Ultraviolett-Lichtquelle bestrahlen und die Reaktionszeit der verschiedenen Leuchtproben beobachten. Nicht in das Licht der UV-Lampe blicken.

Die drei Leuchtproben leuchten in den gleichen Farben wie bei der Anregung durch Elektronenbestrahlung.

- UV-Lampe abschalten und das Nachleuchten (Phosphoreszenz) beobachten.

Das Nachleuchten im grünen Phosphor scheint länger anzuhalten als im Experiment mit Elektronenbestrahlung. Der Grund dafür ist, dass die Phosphoreszenz dieses Materials durch Infrarot-Strahlung gelöscht wird. Nach Abschalten der

Heizspannung der Röhre verbleibt noch genügend Infrarot-Strahlung von der Heizwendel, um das Nachleuchten teilweise zu löschen.

- Spannung von 4500 V einstellen und den fließenden Strom messen (typischerweise ca. $0,02 \mu\text{A}$ Kriechstrom in der Röhre).
- Leuchtproben erneut mit UV-Licht anregen.

Es ist keine Stromzunahme zu beobachten. Aus diesem Grund ist es ersichtlich, dass die Leuchterscheinungen durch Anregungsvorgänge und nicht durch Ionisation verursacht werden.

5.3 Phosphoreszenz und Löschung

- Verkabelung der Röhre entfernen (siehe Fig. 3).
- Ultraviolett-Lichtquelle aufbauen, so dass die Elektronenkanonenseite des Schirms bestrahlt werden kann.
- Infrarot-Lichtquelle aufbauen, so dass die Rückseite des Schirms bestrahlt werden kann.
- Schirm mit UV-Licht bestrahlen bis die Lumineszenz des grünen Phosphors in voller Intensität sichtbar ist.
- UV-Lichtquelle abschalten und sofort die Infrarot-Lichtquelle einschalten.

Die Phosphoreszenz des grünen Phosphors mit der unbelegten Rückseite wird gelöscht, während die Leuchtprobe mit der geschützten Rückseite nicht davon betroffen ist.

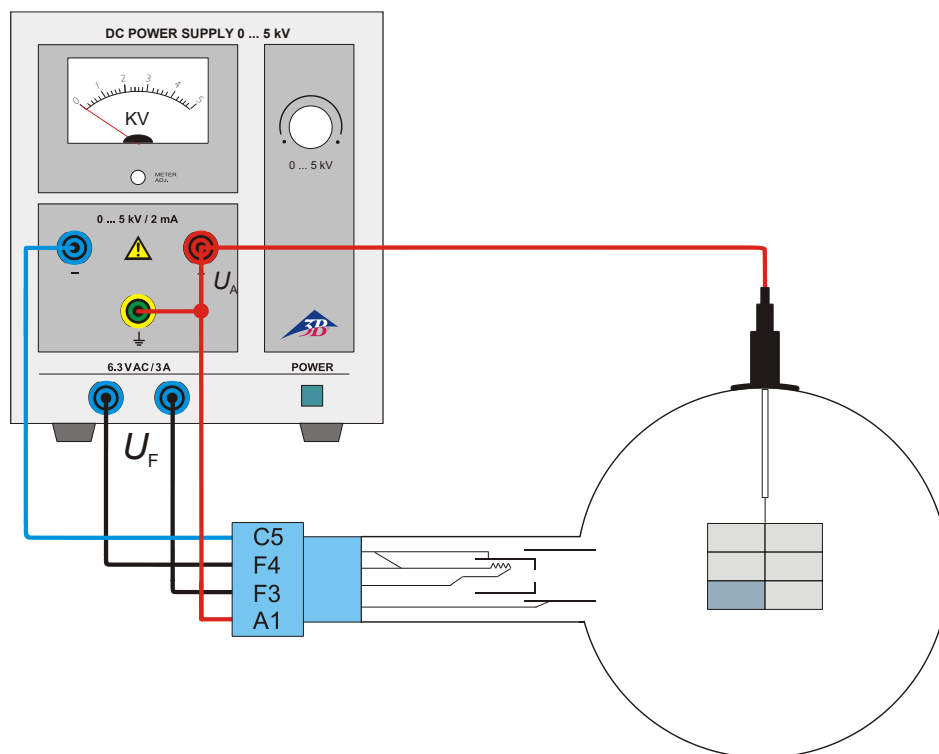


Fig. 1 Anregung durch Elektronenbestrahlung

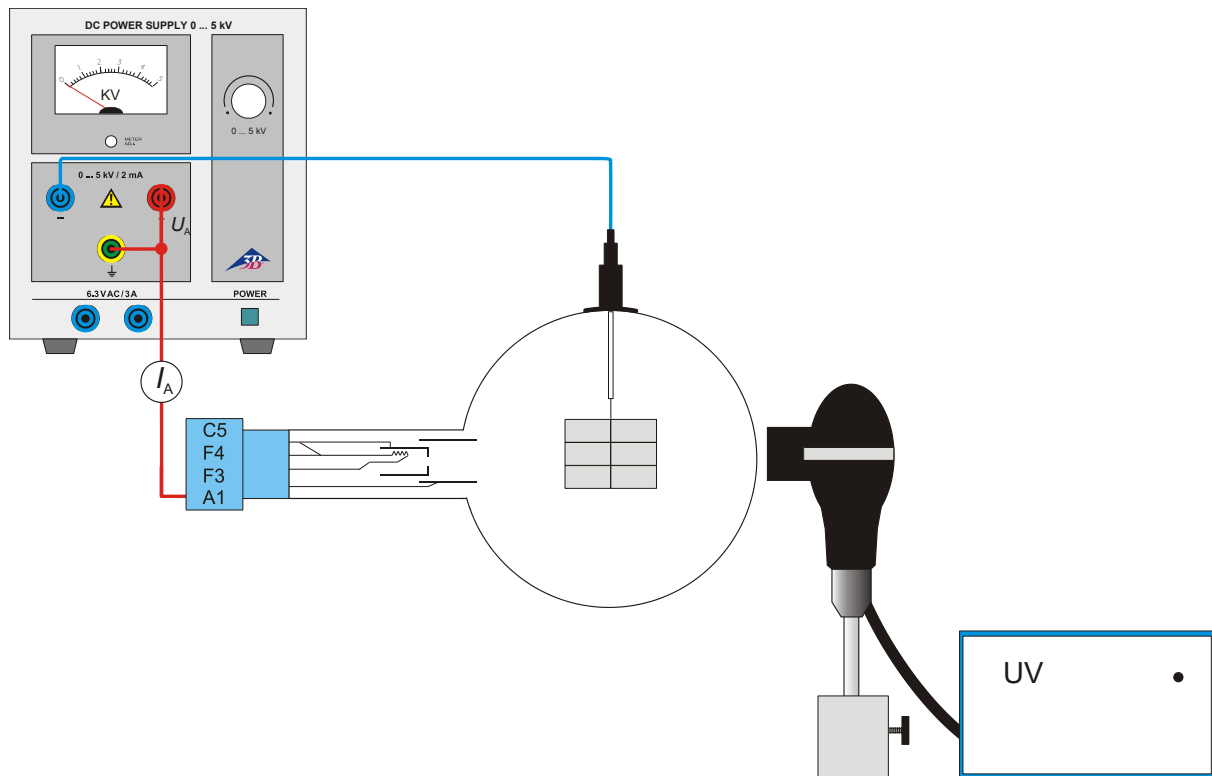


Fig. 2 Anregung durch UV-Licht

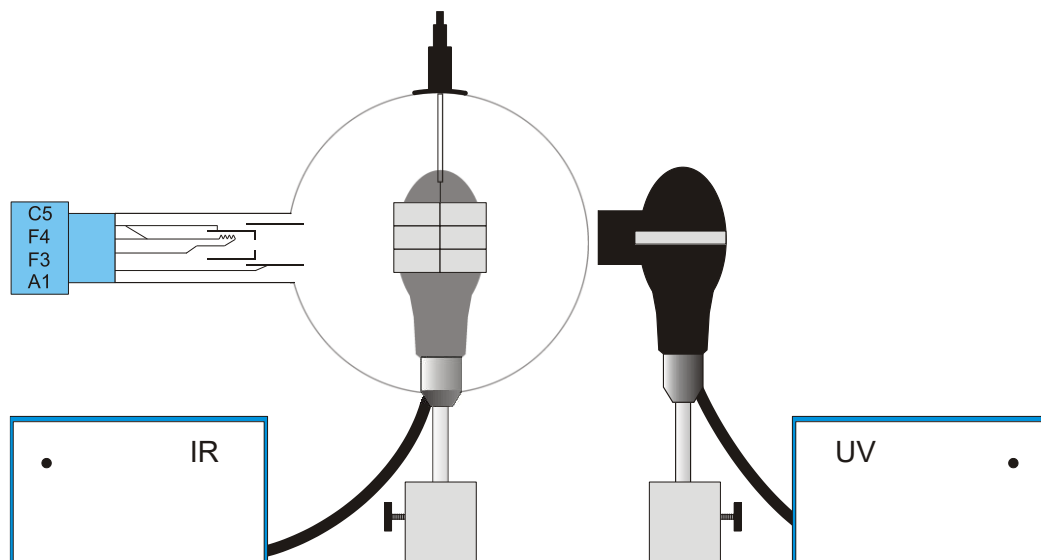


Fig. 3 Phosphoreszenz und Löschung