


Gastriode S mit Ne-Füllung 1000619

Bedienungsanleitung

05/18 ALF

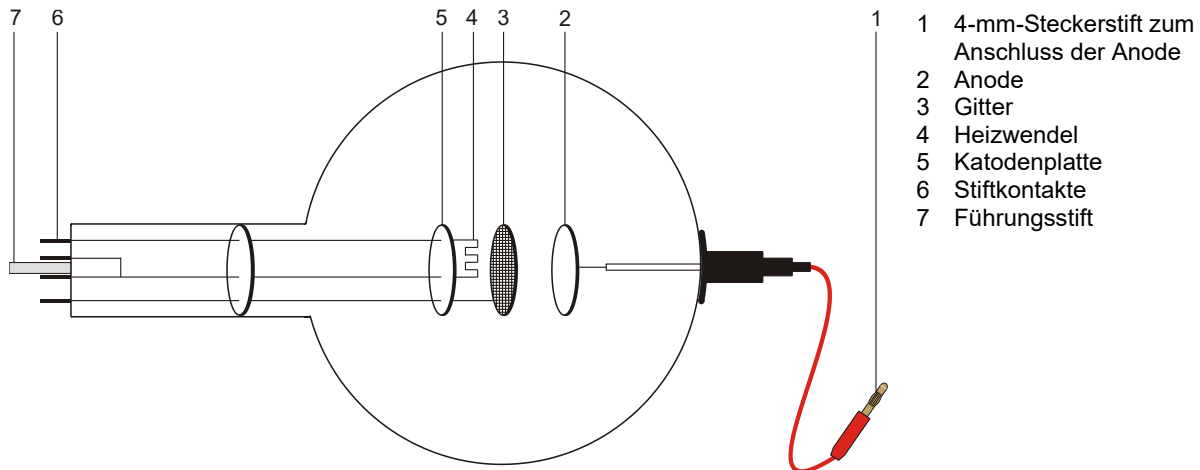

1. Sicherheitshinweise

Glühkatodenröhren sind dünnwandige, evakuierte Glaskolben. Vorsichtig behandeln: Implosionsgefahr!

- Röhre keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Verbindungskabel keinen Zugbelastungen aussetzen.
- Die Röhre nur in den Röhrenhalter S (1014525) einsetzen.

Beim Betrieb der Röhren können am Anschlussfeld berührungsgefährliche Spannungen und Hochspannungen anliegen.

- Für Anschlüsse nur Sicherheits-Experimentierkabel verwenden.
- Schaltungen nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten vornehmen.
- Röhren nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten ein- und ausbauen.

Zu hohe Spannungen, Ströme sowie falsche Katodenheiztemperatur können zur Zerstörung der Röhre führen.

- Die angegebenen Betriebsparameter einhalten.

Im Betrieb wird der Röhrenhals erwärmt.

- Röhre vor dem Ausbau abkühlen lassen.

Der Betrieb über längere Zeit bei heftiger Gasentladung kann zum Abtragen von

Elektrodenmaterial führen, das sich auf dem Glaskolben niederschlägt und diesen verdunkelt. Die Einhaltung der EC-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit ist nur mit den empfohlenen Netzgeräten garantiert.

2. Beschreibung

Die Gastriode ermöglicht die Aufnahme der $I_A - U_A$ – Kennlinie eines Thyatron, Beobachtung der selbständigen und unselfständigen Entladung sowie der diskontinuierlichen Energieabgabe von Ne-Atomen beim unelastischen Stoß mit freien Elektronen.

Die Gastriode ist eine mit Neon befüllte Röhre mit einem Heizfaden (Katode) aus reinem Wolfram, einer runden Metallplatte (Anode) und einem dazwischen liegenden Drahtgitter in einem durchsichtigen Glaskolben. Katode, Anode und Drahtgitter sind parallel zueinander angeordnet. Diese planare Bauform entspricht dem herkömmlichen Triodensymbol. Eine an einer der Heizfadenzuführungen befestigte runde Metallplatte sorgt für ein gleichförmigeres elektrisches Feld zwischen Katode und Anode.

3. Technische Daten

Gasfüllung:	Neon
Heizung:	$\leq 7,5$ V AC/DC
Anodenspannung:	max. 400 V DC
Anodenstrom:	typ. 10 mA bei $U_A = 300$ V
Gitterspannung:	max. 30 V
Glaskolben:	ca. 130 mm $\varnothing$
Gesamtlänge:	ca. 260 mm

4. Bedienung

Zum Betrieb der Gastriode sind folgende Geräte zusätzlich erforderlich:

1 Röhrenhalter S	1014525
1 DC Netzgerät 500 V @115 V oder @230 V	1003307
2 Analog Multimeter ESCOLA 100	1013527

4.1 Einsetzen der Röhre in den Röhrenhalter

- Röhre nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten ein- und ausbauen.
- Röhre mit leichtem Druck in die Fassung des Röhrenhalters schieben bis die Stiftkontakte vollständig in der Fassung sitzen, dabei auf eindeutige Position des Führungsstiftes achten.

4.2 Entnahme der Röhre aus dem Röhrenhalter

- Zum Entnehmen der Röhre mit dem Zeigefinger der rechten Hand von hinten auf den Führungsstift drücken bis sich die Kontaktstifte lösen. Dann die Röhre entnehmen.

5. Experimentierbeispiele

5.1 Entladung, Nachweis der positiven Ladungsträger

- Schaltung gemäß Fig. 1 herstellen.
- Zum Nachweis der positiven Ladungsträger (Ne^+ – Ionen) bei der Gasentladung bei maximaler Heizspannung U_F den Strom I_G unter Beachtung des Vorzeichens messen.

5.2 Unselbständige Entladung

- Schaltung gemäß Fig. 2 herstellen.
- Kennlinie $I_A - U_A (= U_G)$ für verschiedene Heizspannungen U_F (5 V ... 7,5 V) aufnehmen.

Bei etwa 25 V steigt der Anodenstrom I_A stark an. Dieser Anstieg ist begleitet von einem violetten Leuchten. Beim Ladungstransport sind sehr viel mehr Ladungsträger beteiligt als in der Hochvakuum-Triode (neben den Glühelktronen auch Ne^+ – Ionen).

5.3 Selbständige Entladung

- Schaltung gemäß Fig. 3 herstellen.
- Langsam die Anodenspannung U_A erhöhen und die Zündspannung U_Z für die Gasentladung bestimmen.
- Anodenspannung U_A wieder erniedrigen bis die selbständige Entladung stoppt. Löschespannung U_L registrieren.

5.4 Vereinfachte Frank-Hertz-Anordnung

Experiment zum Nachweis der diskontinuierlichen Energieabgabe bei inelastischen Stößen der Elektronen mit Neon-Atomen. Die Elektronen fliegen in ein zwischen Gitter und Anode liegendes Gegenfeld. Sie erreichen die Anode nur, wenn sie genügend kinetische Energie besitzen, und tragen zum Strom I_A von der Anode zur Masse bei.

- Schaltung gemäß Fig. 4 herstellen.
- Bei einer Gegenspannung U_R von 6 V Beschleunigungsspannung U_A langsam von 0 auf 70 V erhöhen und dabei Anodenstrom I_A messen.
- Anodenstrom in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung grafisch darstellen.

Bis zu einer Beschleunigungsspannung von ca. 24 V nimmt der Anodenstrom zu um dann sprunghaft abzunehmen. Bei weiterer Erhöhung der Beschleunigungsspannung steigt der Strom wieder an um nach weiteren ca. 20 V wieder abzunehmen.

Im Verlauf des Anodenstroms müssen 2 Maxima deutlich sichtbar sein. Falls dies nicht der Fall ist, Heizspannung etwas erniedrigen.

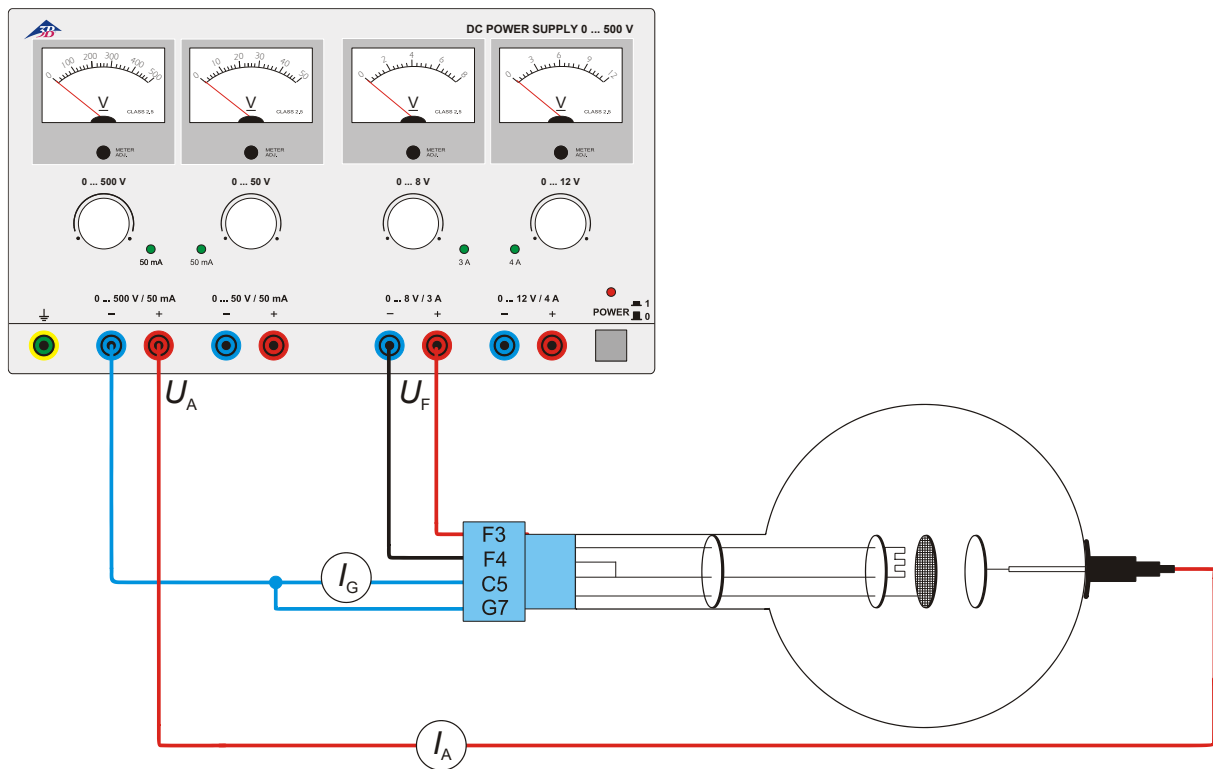


Fig. 1 Nachweis der positiven Ladungsträger

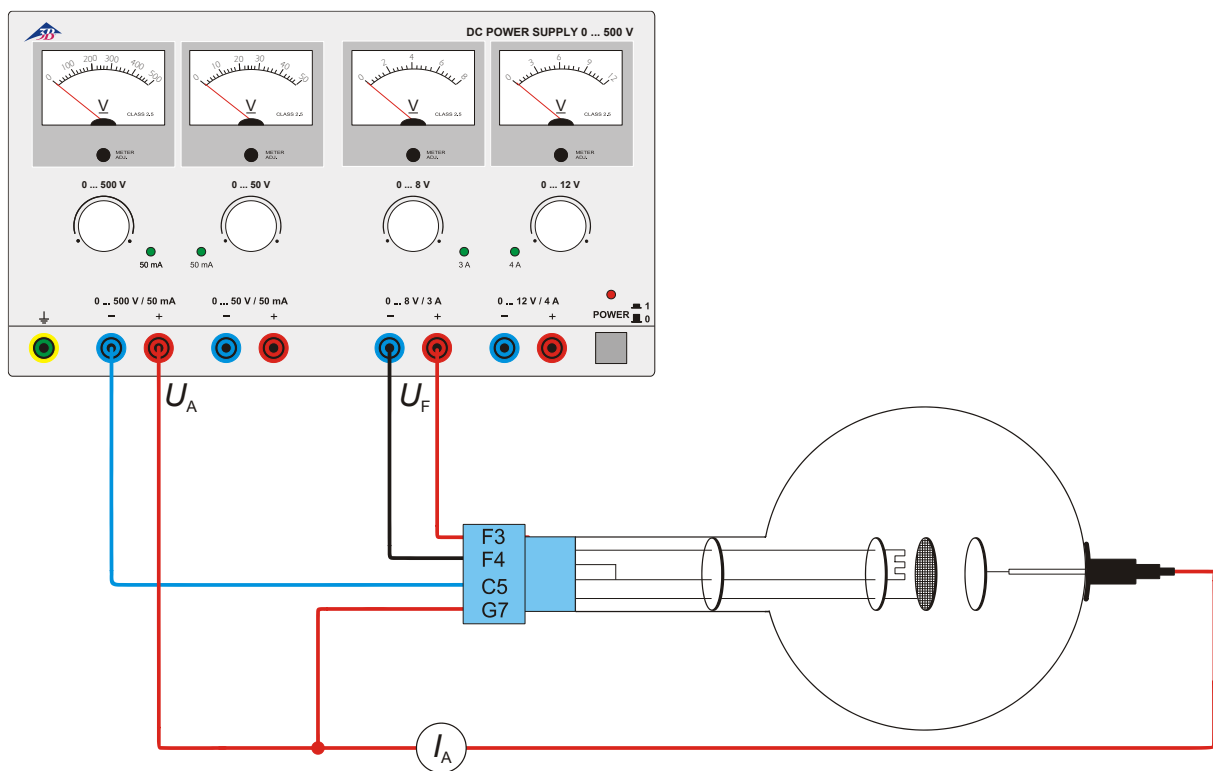


Fig. 2 Unselbständige Entladung

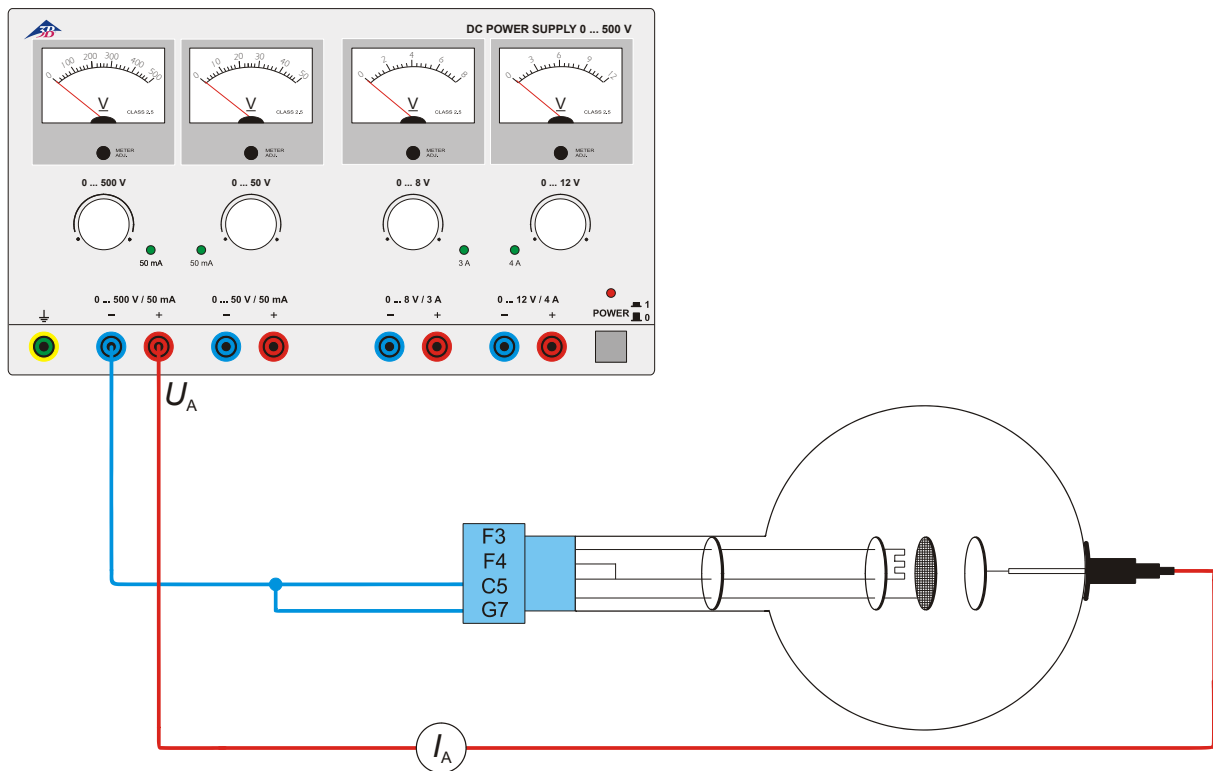


Fig. 3 Selbständige Entladung


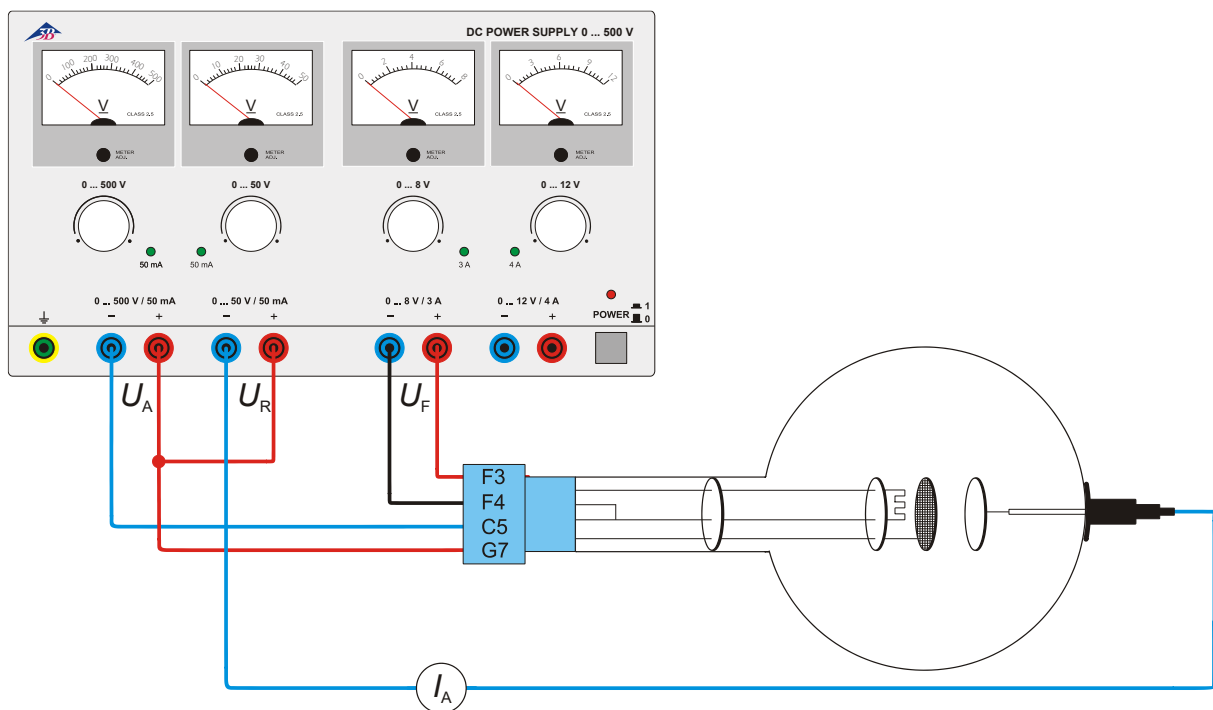


Fig. 4 Franck-Hertz-Anordnung

Gas Triode S with Ne-Filling 1000619

Instruction sheet

05/18 ALF

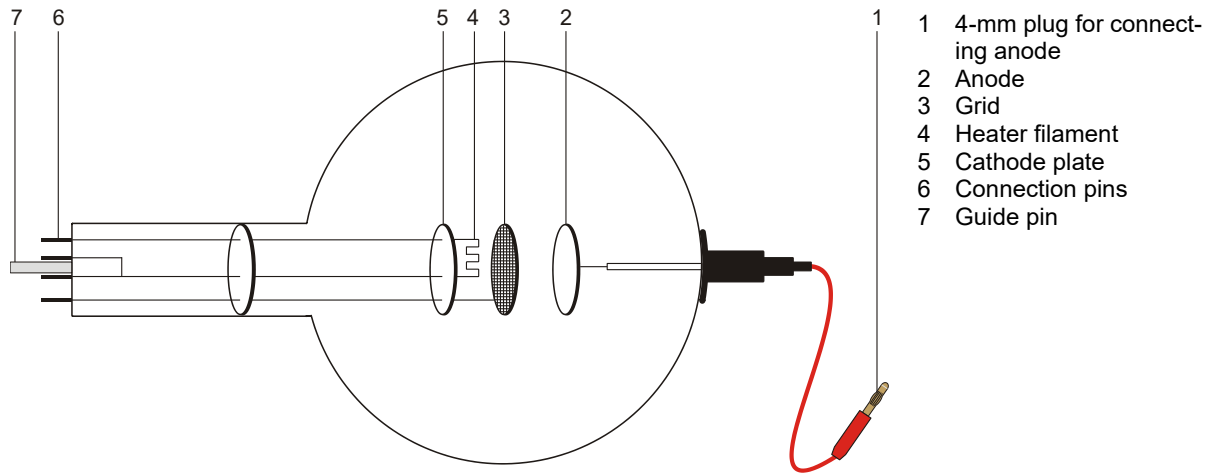

1. Safety instructions

Hot cathode tubes are thin-walled, highly evacuated glass tubes. Treat them carefully as there is a risk of implosion.

- Do not subject the tube to mechanical stresses.
- Do not subject the connection leads to any tension.
- The tube may only be used with tube holder S (1014525).

When the tube is in operation, the terminals of the tube may be at high voltages with which it is dangerous to come into contact.

- Only use safety experiment leads for connecting circuits.
- Only change circuits with power supply equipment switched off.
- Only exchange tubes with power supply equipment switched off.

If voltage or current is too high or the cathode is at the wrong temperature, it can lead to the tube becoming destroyed.

- Do not exceed the stated operating parameters.

When the tube is in operation, the stock of the tube may get hot.

- Allow the tube to cool before dismantling.

Use of the equipment over long periods and involving hefty gas discharges can cause loss of

material from the electrodes, which is deposited on the glass of the tube itself resulting in darkening of the surface.

The compliance with the EC directive on electromagnetic compatibility is only guaranteed when using the recommended power supplies.

2. Description

The gas triode allows recording of the $I_A - U_A$ characteristic of a thyatron, observation of excited and non-excited discharge and of the discontinuous transfer of energy by helium atoms in inelastic collision with free electrons.

The gas triode is a neon-filled tube with a pure tungsten heater filament (cathode) and a round metal plate (anode) with a wire grid between them, all inside a clear glass bulb. The cathode, anode and grid are all aligned parallel to one another. This planar configuration corresponds to the conventional symbol for a triode. A circular metal plate attached as a backing to the filament ensures that the electric field between the anode and cathode is uniform.

3. Technical data

Gas filling:	Neon
Filament voltage:	≤ 7.5 V AC/DC
Anode voltage:	max. 400 V DC max.
Anode current:	10 mA typ. at $U_a = 300$ V
Grid voltage:	max. 30 V
Glass bulb:	130 mm diam. approx
Length of tube:	260 mm approx.

4. Operation

To perform experiments using the gas triode the following equipment is also required:

1 Tube holder S	1014525
1 DC Power supply 500 V @115 V or @230 V	1003307 1003308
2 Analogue multimeter ESCOLA 100	1013527

4.1 Setting up the tube in the tube holder

- The tube should not be mounted or removed unless all power supplies are disconnected.
- Press tube gently into the stock of the holder and push until the pins are fully inserted. Take note of the unique position of the guide pin.

4.2 Removing the tube from the tube holder

- To remove the tube, apply pressure with the middle finger on the guide pin and the thumb on the tail-stock until the pins loosen, then pull out the tube.

5. Example experiments

5.1 Discharge, evidence of positive charge carriers

- Set up the circuit as in fig. 1.
- To demonstrate the existence of positive charge carriers (Ne^+ ions) for gas discharge at a maximum heater filament voltage U_F , measure the current I_G taking note of the sign.

5.2 Non-self-sustaining discharge

- Set up the circuit as in fig. 2.
- Record a characteristic curve of I_A against U_A ($= U_G$) for various filament voltages U_F (5 V ... 7.5 V).

At about 25 V the anode current I_A increases considerably in the gas triode. This increase is accompanied by the appearance of a violet luminescence. It is apparent that there are many more charge carriers transporting charge than in the vacuum triode (since there are Ne^+ ions as well as thermal electrons).

5.3 Self-sustaining discharge

- Set up the circuit as in fig. 3.
- Gradually increase the anode voltage U_A and determine the striking voltage U_S for the gas discharge.
- Reduce the anode voltage U_A again until the self-sustaining discharge ceases. Record this extinguishing voltage U_E .

5.4 Simplified Franck-Hertz-set-up

Experiment for demonstrating discontinuous energy emission resulting from inelastic collisions between electrons and neon atoms. The electrons have to travel through a decelerating reverse-potential field between the grid and anode, so that they only arrive at the anode if they possess sufficient kinetic energy. Only then do they contribute to the current I_A between anode and ground.

- Set up the circuit as in fig. 4.
- For a reverse polarity U_R of 6 V, gradually raise the accelerating potential U_A from 0 V to 70 V and measure the anode current I_A .
- Plot a graph of the anode current as a function of the accelerating voltage.

Up to an accelerating potential of about 24 V, the anode current increases but then it drops suddenly. As the accelerating potential is further increased the current increases once again but after another 20 V or so it drops again.

A plot of the anode current should exhibit two clear maxima. If this is not perceptible, the filament voltage should be lowered somewhat.

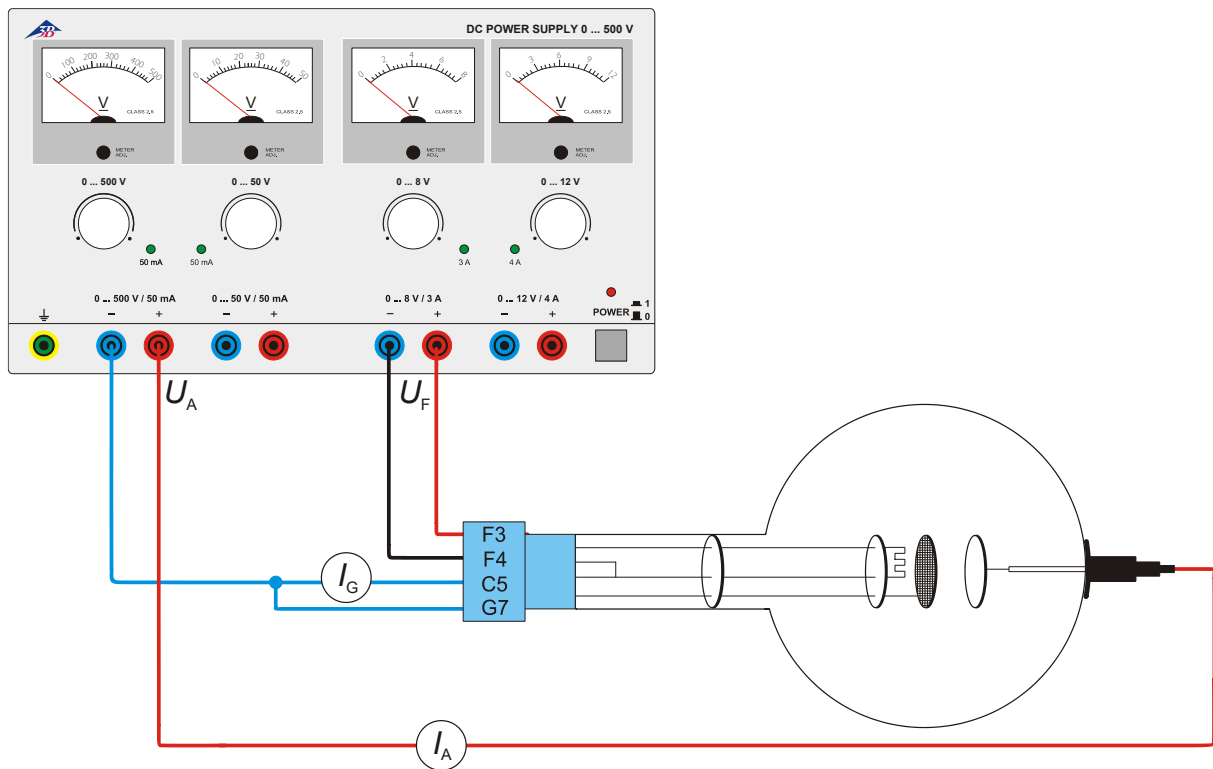


Fig. 1 Evidence for positive charge carriers

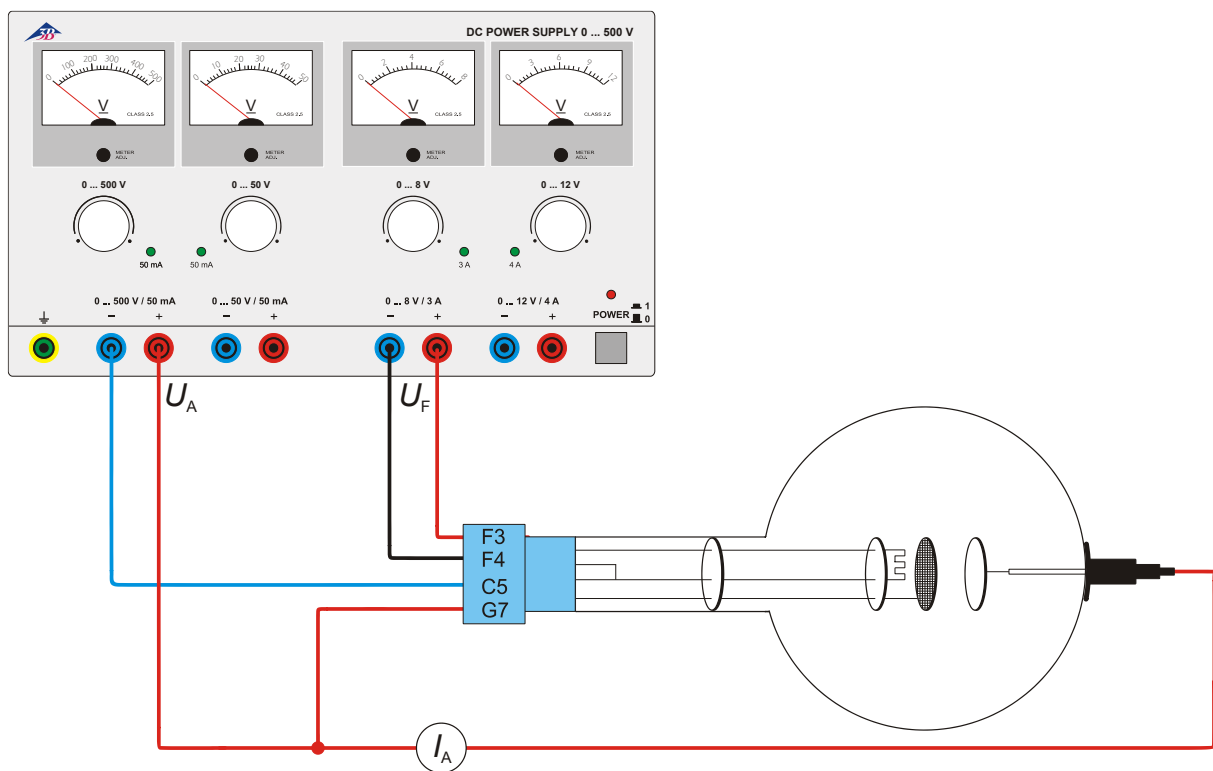


Fig. 2 Non-self-sustaining discharge

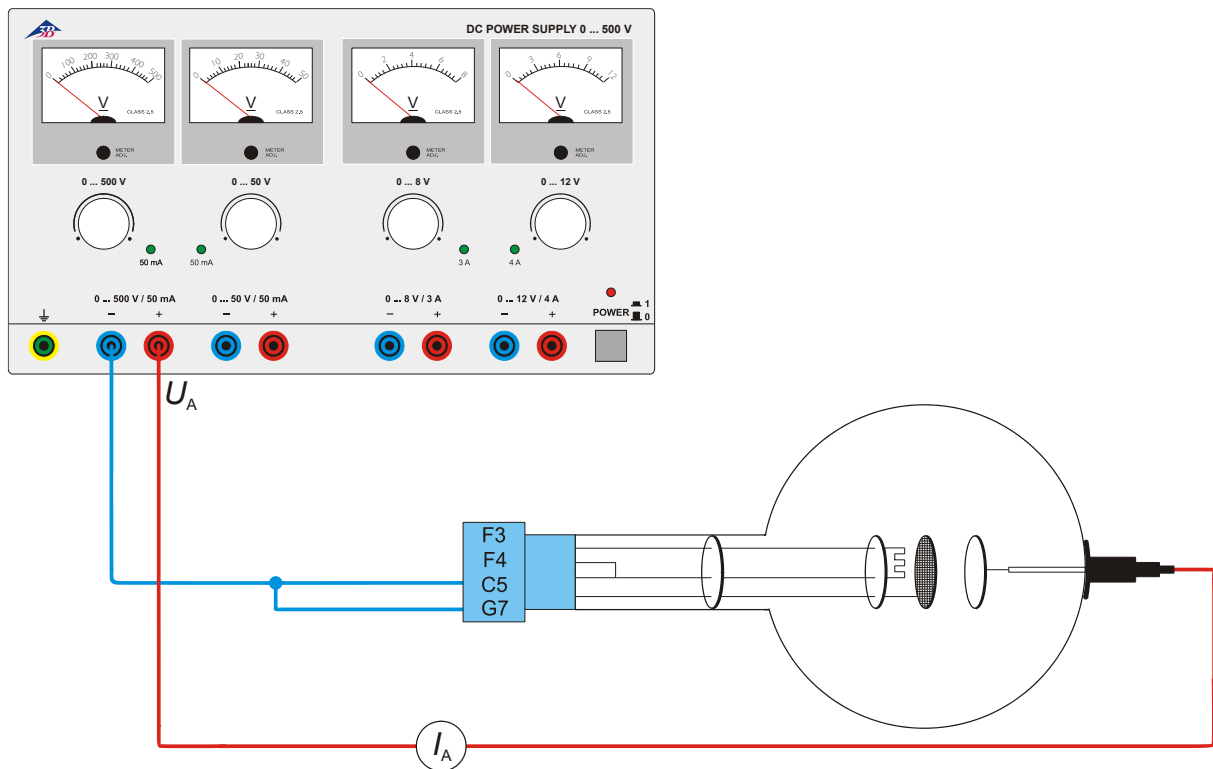


Fig.3 Self-sustaining discharge


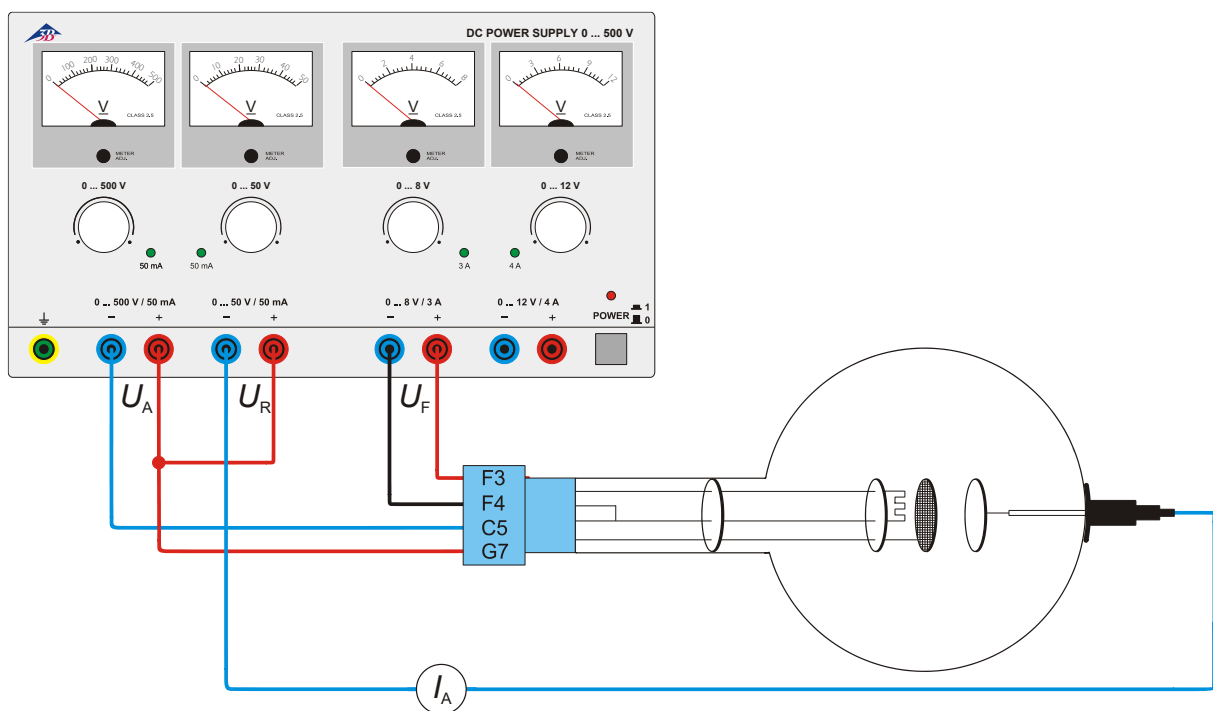


Fig. 4 Franck-Hertz set-up

Triodo de gas S, llenado de neón 1000619

Instrucciones de manejo

05/18 ALF

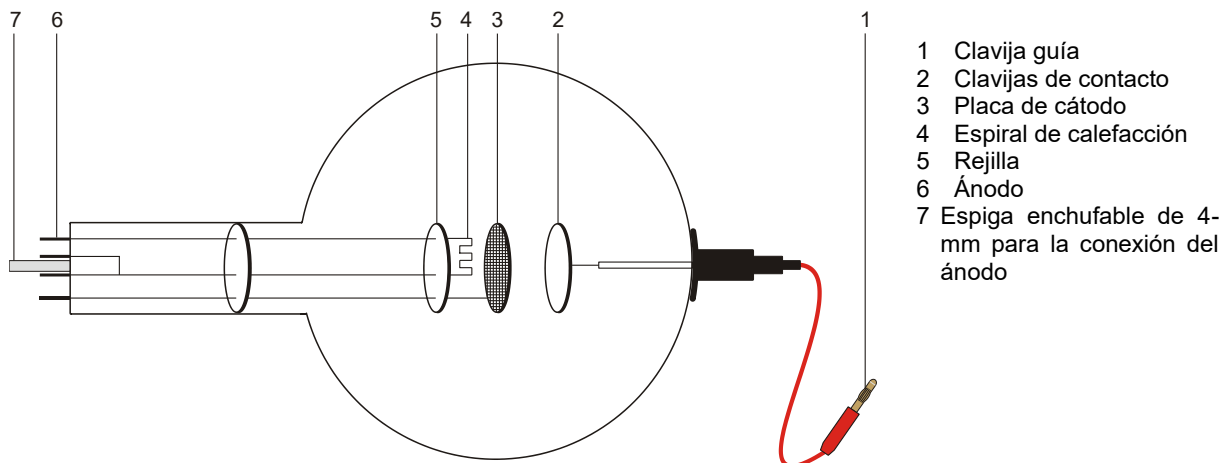

1. Advertencias de seguridad

Los tubos catódicos incandescentes son ampollas de vidrio, al vacío y de paredes finas. Manipular con cuidado: ¡riesgo de implosión!

- No someter los tubos a ningún tipo de esfuerzos físicos.
- No someter a tracción el cables de conexión.
- El tubo se debe insertar únicamente en el soporte para tubos S (1014525).

Durante el funcionamiento de los tubos, pueden presentarse tensiones peligrosas al contacto y altas tensiones en el campo de conexión.

- Para las conexiones sólo deben emplearse cables de experimentación de seguridad.
- Solamente efectuar las conexiones de los circuitos con los dispositivos de alimentación eléctrica desconectados.
- Los tubos solo se pueden montar o desmontar con los dispositivos de alimentación eléctrica desconectados.

Las tensiones excesivamente altas y las corrientes o temperaturas de cátodo erróneas pueden conducir a la destrucción de los tubos.

- Respetar los parámetros operacionales indicados.

Durante el funcionamiento, el cuello del tubo se calienta

- De ser necesario, permita que los tubos se enfríen antes de desmontarlos.

El funcionamiento durante largo tiempo con descarga de gas muy fuerte puede conducir a un desgaste del material de los electrodos, el cual se deposita en el tubo de vidrio conduciendo a que éste se oscurezca.

El cumplimiento con las directrices referentes a la conformidad electromagnética de la UE se puede garantizar sólo con las fuentes de alimentación recomendadas.

2. Descripción

El triodo de gas hace posible el registro de la curva característica $I_A - U_A$ de un tiratrón, la observación de la descarga autónoma, de la descarga no autónoma y la entrega de energía discontinua de los átomos de He durante el choque inelástico con electrones libres.

El triodo de gas es un tubo lleno de helio con un filamento calefactor (cátodo) de tungsteno puro, una placa metálica redonda (ánodo) y una rejilla de alambre entre los dos electrodos, todo dentro de una ampolla de vidrio transparente. Cátodo, ánodo y la rejilla de alambre están ordenados paralelamente entre sí. Esta forma de construcción planar corresponde al símbolo tradicional de un triodo. Una placa metálica redonda fijada en una de las entradas de alimentación del filamento calefactor hace que se cree un campo eléctrico uniforme entre el cátodo y el ánodo.

3. Datos técnicos

Llenado de gas:	Neón
Tensión de caldeo:	$\leq 7,5$ V AC/CC
Tensión anódica:	max. 400 V CC
Corriente anódica:	tipo 10 mA con $U_A = 300$ V
Tensión de rejilla:	max. 30 V
Ampolla de vidrio:	aprox. 130 mm Ø
Longitud total:	aprox. 260 mm

4. Manejo

Para la realización de pruebas con el trío de gas se necesitarán los siguientes aparatos adicionales:

1 Soporte de tubos S	1014525
1 Fuente de alimentación CC 500 V @115 V	1003307
ó @230 V	1003308
2 Multímetro analógico ESCOLA 100	1013527

4.1 Colocación del tubo en el portatubo

- Montar y desmontar el tubo solamente con los dispositivos de alimentación eléctrica desconectados.
- Introducir el tubo en la toma hembra del portatubos presionando ligeramente hasta que las clavijas de contacto estén colocadas correctamente en la toma, asegurándose de que la clavija-guía está en la posición correcta.

4.2 Retirada del tubo del portatubos.

- Para retirar el tubo, presionar desde atrás la clavija-guía con el dedo índice de la mano derecha, hasta que las clavijas de contacto queden libres. A continuación, retirar el tubo.

5. Ejemplos de experimentos

5.1 Descarga, comprobación de los portadores de carga positivos

- Se monta el circuito de acuerdo con la fig. 1.
- Para la comprobación de los portadores de carga positivos (iones de Ne^+) se mide la corriente I_G durante la descarga de gas, manteniendo la tensión de caldeo U_F en máximo, teniendo en cuenta el signo.

5.2 Descarga no autónoma

Se monta el circuito de acuerdo con la fig. 2. Se mide la curva característica $I_A - U_A (= U_G)$ para diferentes tensiones de caldeo U_F (5 V ... 7,5 V). Con una tensión de aprox. 25 V la corriente de ánodo I_A aumenta fuertemente en el trío de gas. Esta subida está acompañada de una luminiscencia violeta. En el transporte de cargas participan más portadores de carga que en el trío de alto vacío (además de los electrones de incandescencia también los iones de Ne^+).

5.3 Descarga autónoma

Se monta el circuito de acuerdo con la fig. 3.

- Se aumenta lentamente la tensión de ánodo U_A y se determina la tensión de encendido U_z para la descarga del gas.

Se reduce nuevamente la tensión de ánodo U_A hasta que se detenga la descarga autónoma. Se registra la tensión de apagado U_L .

5.4 Disposición de Frank-Hertz simplificada

Experimento para la comprobación de la entrega de energía discontinua durante los choques inelásticos de los electrones con los átomos de Neón. Los electrones se mueven en un campo contrario activo entre la rejilla y el ánodo. Ellos logran llegar al ánodo sólo cuando tienen suficiente energía cinética y contribuyen a la corriente I_A del ánodo a masa.



Se monta el circuito de acuerdo con la fig. 4.

Con una tensión contraria U_R de 6 V, se aumenta lentamente la tensión de aceleración U_A desde 0 hasta 70 V y midiendo al mismo tiempo la corriente de ánodo I_A .

Se representa gráficamente la corriente de ánodo I_A en dependencia con la tensión de aceleración.

Hasta una tensión de aceleración de aprox. 24 V la corriente aumenta para luego caer bruscamente. Con un aumento adicional de la tensión de aceleración, la corriente ánodo vuelve a aumentar y después de otros 20 V aprox. vuelve a caer.

En el curso de la corriente de ánodo se deben observar 2 máximos bien definidos. En caso de que no sea así, se reduce la un poco la tensión de caldeo.

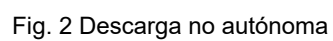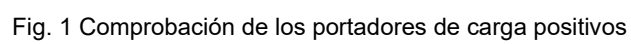

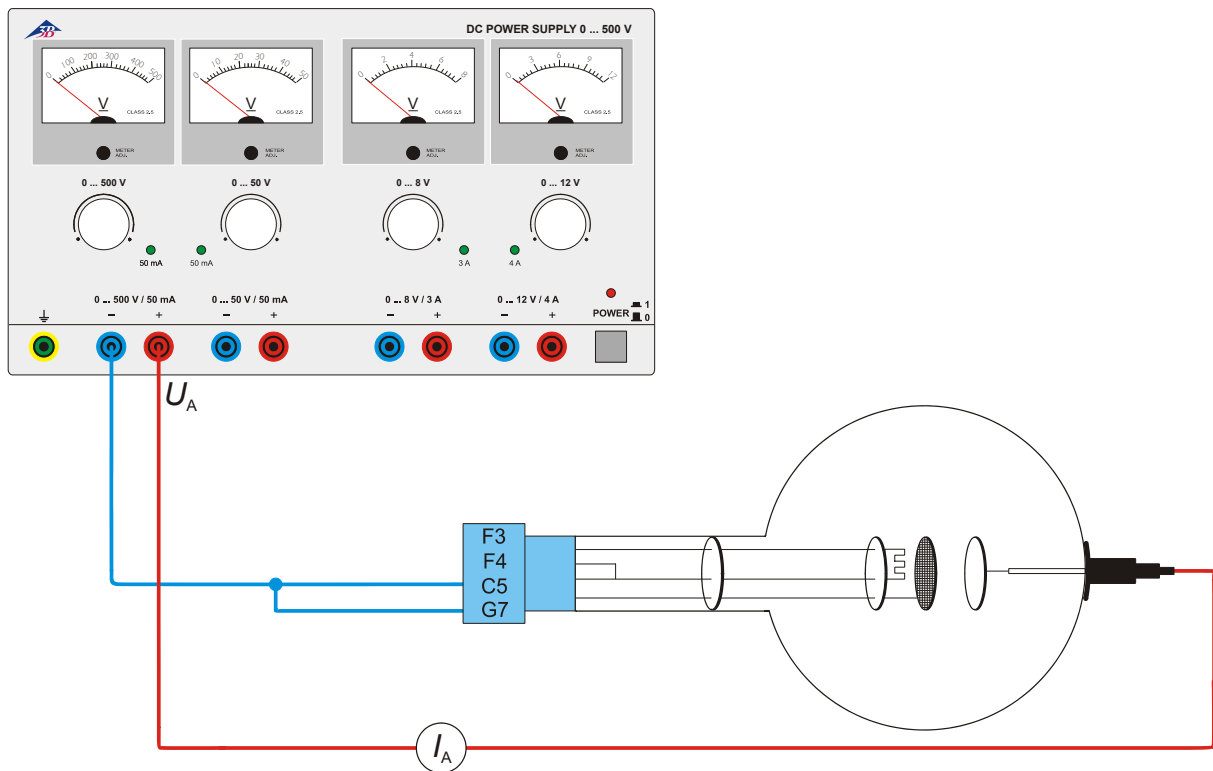


Fig.3 Descarga autónoma


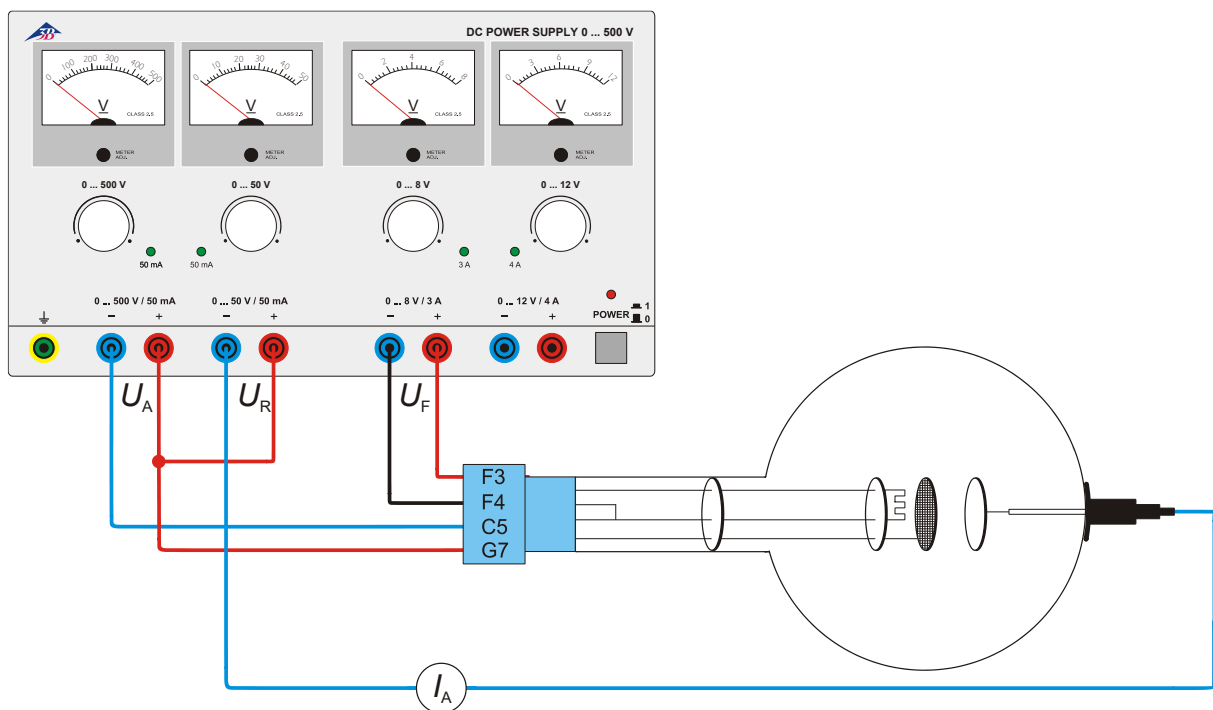


Fig. 4 Disposición de Franck-Hertz

Triode à gaz S, remplissage de Néon 1000619

Manuel d'utilisation

05/18 ALF

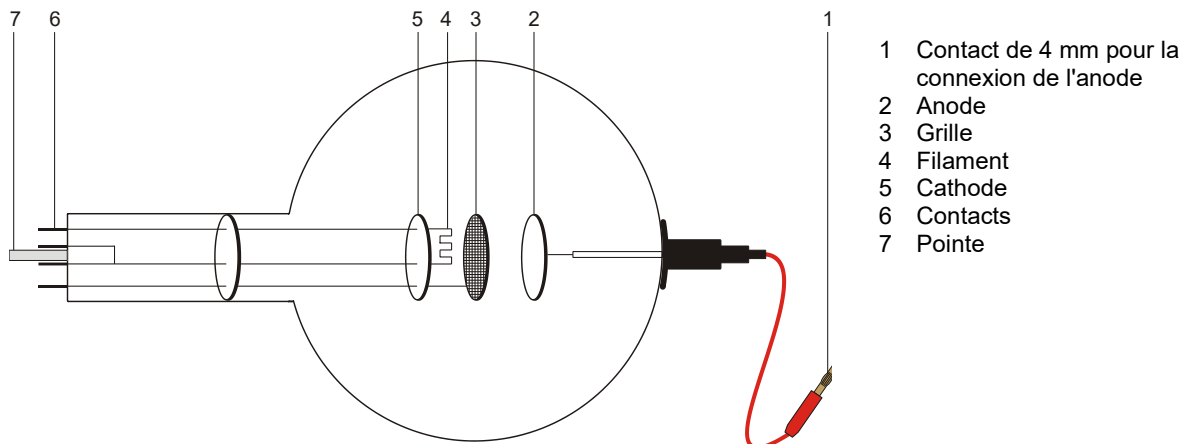

1. Consignes de sécurité

Les tubes thermoioniques sont des cônes en verre à paroi mince sous vide. Manipulez-les avec précaution : risque d'implosion !

- N'exposez pas le tube à des charges mécaniques.
- N'exposez pas les câbles de connexion à des charges de traction.
- Le tube n'a le droit d'être utilisé que dans le support pour tube S (1014525).

Des tensions et hautes tensions dangereuses peuvent apparaître à hauteur du champ de connexion pendant l'utilisation des tubes.

- Pour les connexions, utilisez uniquement des câbles d'expérimentation de sécurité.
- Ne procédez à des câblages que lorsque les dispositifs d'alimentation sont éteints.
- Ne montez et ne démontez le tube que lorsque les dispositifs d'alimentation sont éteints.

Des tensions et des courants trop élevés ainsi que des températures de chauffage de la cathode mal réglées peuvent entraîner la destruction du tube.

- Respectez les paramètres de service indiqués.

Pendant l'utilisation du tube, son col chauffe.

- Au besoin, laissez refroidir le tube avant de le démonter.

Une utilisation trop longue, associée à une violente décharge de gaz, peut provoquer l'enlèvement de matériau d'électrode, qui se dépose sur le piston en verre et l'opacifie.

Le respect de la directive CE sur la compatibilité électromagnétique est uniquement garanti avec les alimentations recommandées.

2. Description

La triode à gaz permet d'enregistrer la caractéristique $I_A - U_A$ d'un thyatron, d'observer la décharge autonome et semiautonomie ainsi que le dégagement discontinu d'énergie d'atomes de néon lors de la collision inélastique avec des électrons libres.

La triode à gaz est un petit tube rempli de néon, avec un filament chauffant (cathode) en pur tungstène, une plaque métallique ronde (anode) et, entre les deux, une grille en fil de fer dans un piston en verre transparent. La cathode, l'anode et la grille sont disposées en parallèle. Cette forme planaire correspond au symbole conventionnel de la triode. Fixée à l'une des alimentations du filament chauffant, une plaque métallique ronde garantit un champ électrique plus uniforme entre la cathode et l'anode.

3. Caractéristiques techniques

Remplissage de gaz :	néon
Tension de chauffage :	$\leq 7,5$ V CA/CC
Tension anodique :	max. 400 V CC
Courant anodique :	typ. 10 mA à $U_A = 300$ V
Tension de grille :	max. 30 V
Ampoule :	$\varnothing$ env. 130 mm
Longueur totale :	env. 260 mm

4. Commande

Pour réaliser les expériences avec la triode à gaz, on a besoin des dispositifs supplémentaires suivants :

1 Support pour tube S	1014525
1 Alimentation CC 500 V @115 V ou @230 V	1003307 1003308
2 Multimètre analogique ESCOLA 100	1013527

4.1 Emploi du tube dans le porte-tube

- Ne montez et ne démontez le tube que lorsque les dispositifs d'alimentation sont éteints.
- Glissez le tube dans la monture du porte-tube en appuyant légèrement dessus, jusqu'à ce que les contacts soient entièrement insérés dans la monture. Veillez au positionnement précis de la pointe de guidage.

4.2 Retrait du tube du porte-tube

- Pour démonter le tube, appuyez avec l'index de la main droite sur l'arrière de la pointe de guidage, jusqu'à ce que les contacts soient desserrés. Puis, retirez le tube.

5. Exemple d'expérience

5.1 Décharge, démonstration des porteurs de charge positifs

- Montez le circuit de la figure 1.
- Pour démontrer les porteurs de charge positifs (ions Ne⁺) lors de la décharge de gaz, mesurez le courant I_G pour une tension de chauffage maximale U_F , en tenant compte du signe de charge.

5.2 Décharge semiautonomie

- Montez le circuit de la figure 2.
- Enregistrez la courbe caractéristique $I_A - U_A$ ($= U_G$) pour différentes tensions de chauffage U_F (5 V ... 7,5 V).

À environ 25 V, le courant anodique I_A dans la triode à gaz augmente fortement. Cette augmentation est accompagnée d'une lueur violette. Lors du transport des porteurs, la quantité de porteurs de charge est bien plus élevée que dans la triode à vide poussé (outre les électrons thermiques, des ions Ne⁺).

5.3 Décharge autonome

- Montez le circuit de la figure 3.
- Augmentez lentement la tension anodique U_A et déterminez la tension d'allumage U_Z pour la décharge de gaz.
- Puis, réduisez de nouveau la tension anodique U_A , jusqu'à ce que la décharge autonome s'arrête. Notez la tension d'extinction U_L .

5.4 Expérience de Franck et Hertz simplifiée

Expérience permettant de démontrer le dégagement discontinu d'énergie lors de chocs non-élastiques entre les électrons et les atomes de néon. Les électrons se déplacent dans un champ opposé, situé entre une grille et une anode. Ils n'atteignent l'anode que lorsqu'ils possèdent suffisamment d'énergie cinétique, et contribuent au courant I_A entre l'anode et la masse.

- Montez le circuit de la figure 4.
- Avec une contre-tension U_R de 6 V, augmentez lentement la tension d'accélération U_B de 0 à 70 V et mesurez le courant anodique I_A .
- Anodenstrom in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung grafisch darstellen.

Jusqu'à une tension d'accélération d'environ 24 V, le courant anodique augmente, pour diminuer brusquement. Si la tension d'accélération continue à être augmentée, le courant augmente de nouveau, puis diminue après environ 20 V.

La courbe du courant anodique doit présenter clairement deux maxima. Si ce n'est pas le cas, réduisez légèrement la tension de chauffage.

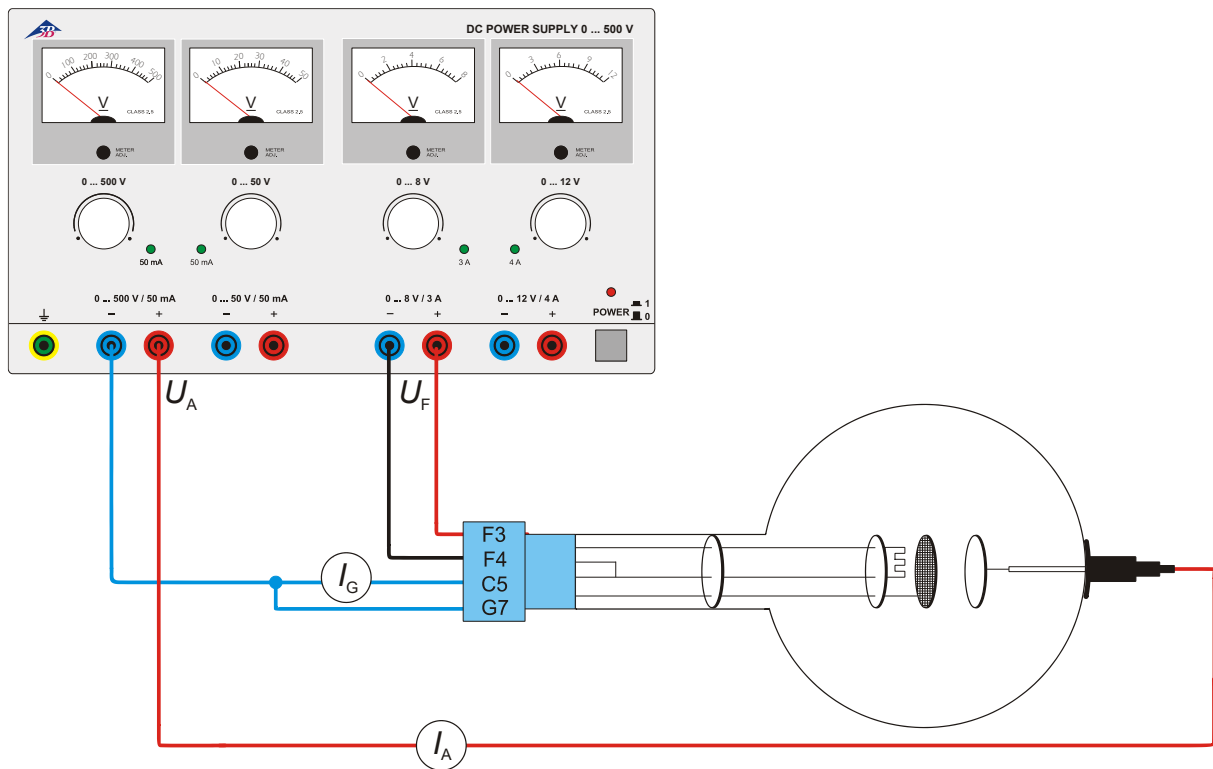


Fig. 1 Démonstration des porteurs de charge positifs

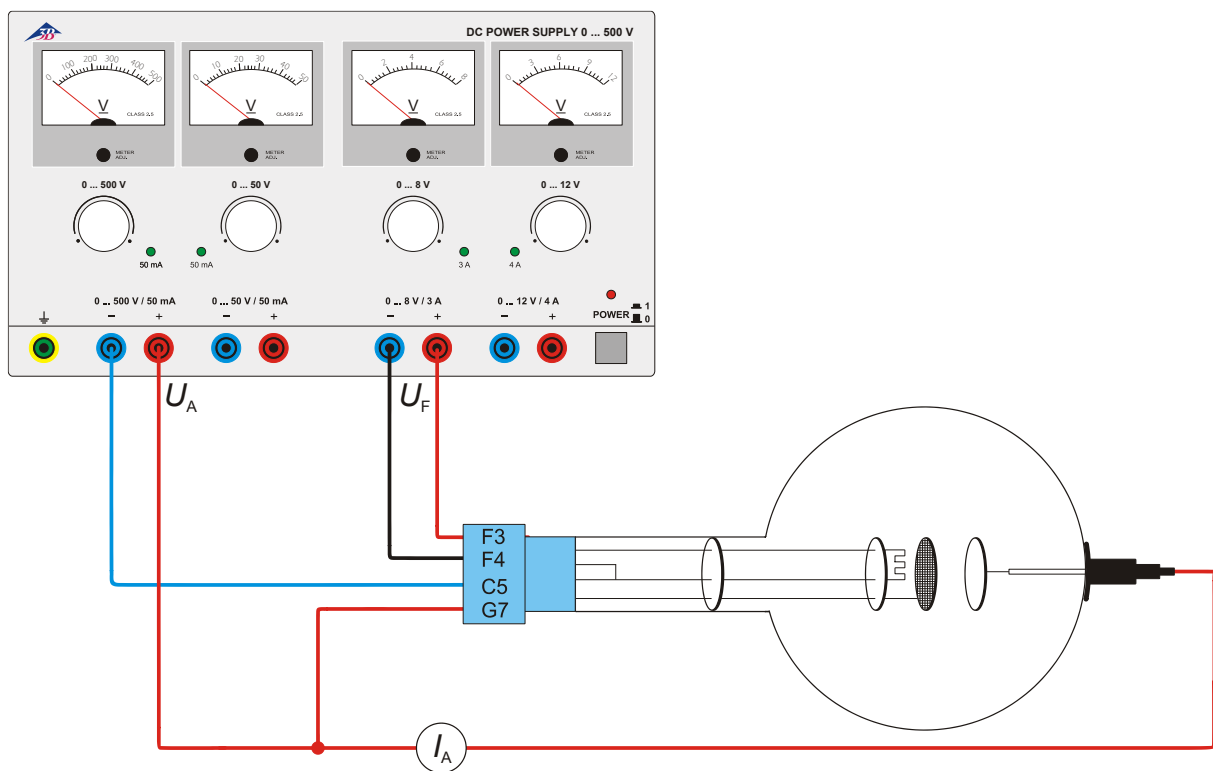


Fig. 2 Décharge semiautonomie

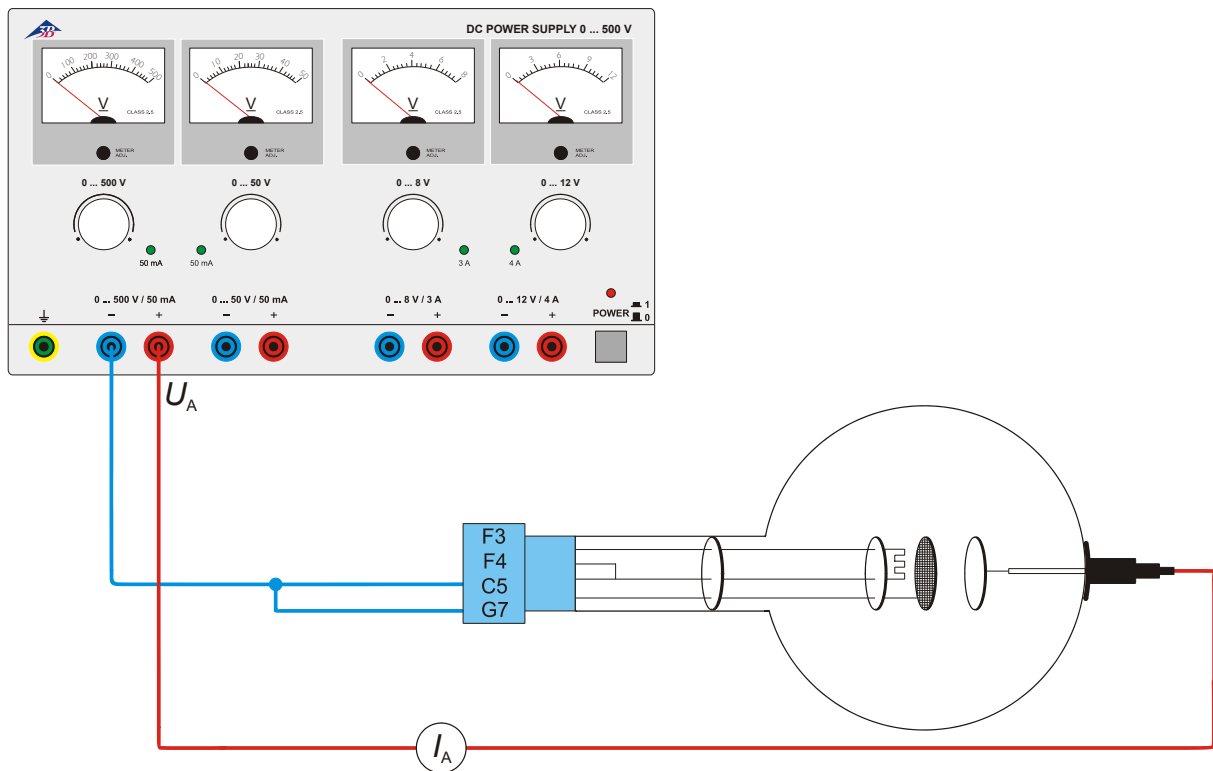


Fig.3 Décharge autonome


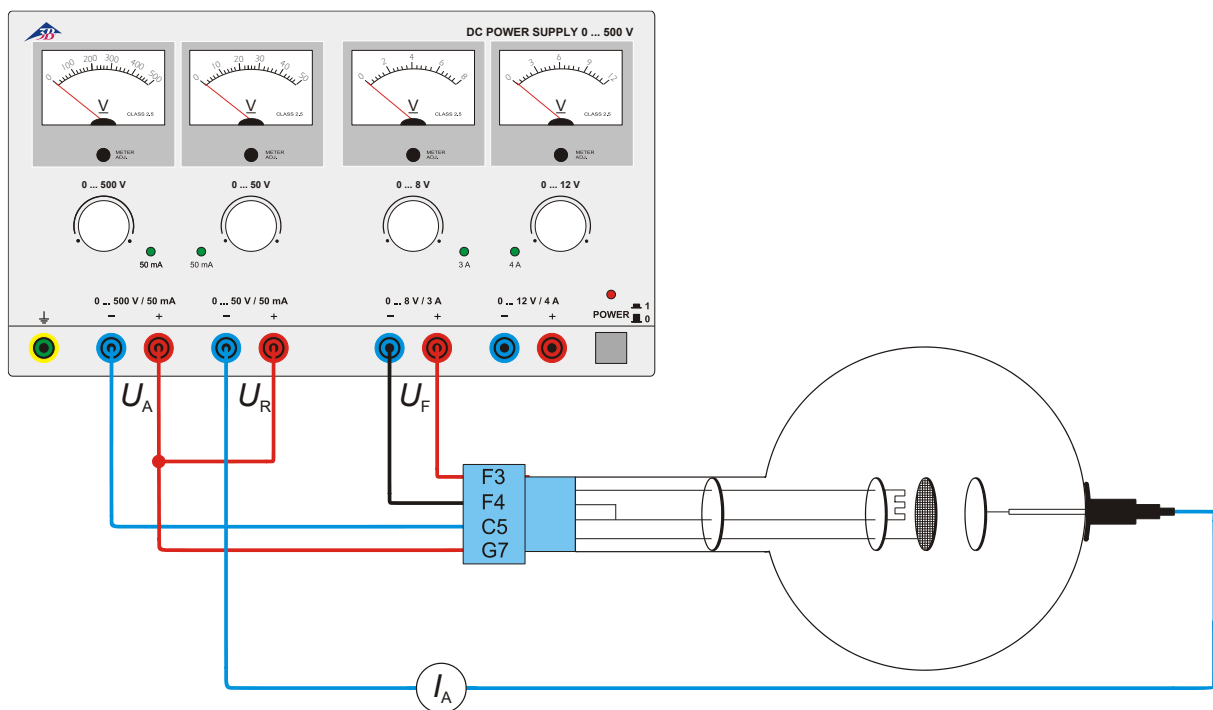


Fig. 4 Disposition selon Franck et Hertz

Triodo a gas S con pieno di Ne 1000619

Istruzioni per l'uso

05/18 ALF

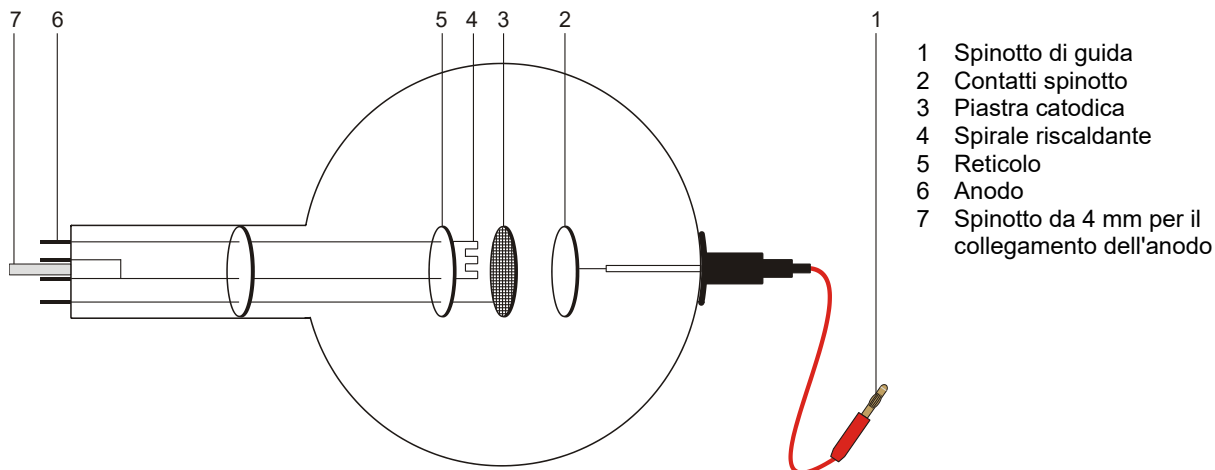

1. Norme di sicurezza

I tubi catodici incandescenti sono bulbi in vetro a pareti sottili, sotto vuoto. Maneggiare con cura: rischio di implosione!

- Non esporre i tubi a sollecitazioni meccaniche.
- Non esporre i cavi di collegamento a sollecitazioni alla trazione.
- Il tubo può essere utilizzato esclusivamente con il supporto S (1014525).

Durante il funzionamento dei tubi, possono essere presenti tensioni e alte tensioni che rendono pericoloso il contatto.

- Per i collegamenti utilizzare esclusivamente cavi di sperimentazione di sicurezza.
- Eseguire i collegamenti soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.

Tensioni e correnti eccessive e temperature catodiche non idonee possono distruggere i tubi.

- Rispettare i parametri di funzionamento indicati.

Durante il funzionamento il collo del tubo si riscalda.

- Se necessario far raffreddare i tubi prima di smontarli.

Il funzionamento per un periodo prolungato con intensa scarica di gas può causare l'erosione del

materiale dell'elettrodo, che si deposita sull'ampolla oscurandola.

Il rispetto della Direttiva CE per la compatibilità elettromagnetica è garantito solo con gli alimentatori consigliati.

2. Descrizione

Il triodo a gas consente la registrazione della caratteristica $I_A - U_A$ di un tiratron, l'osservazione delle scariche dipendenti e indipendenti, nonché l'osservazione dell'emissione di energia discontinua di atomi di neon durante l'urto anelastico contro elettroni liberi.

Il triodo a gas è un tubo riempito di neon con un filamento caldo (catodo) in tungsteno puro, una piastra metallica circolare (anodo) e un reticolo metallico intermedio posto in un'ampolla di vetro trasparente. Catodo, anodo e reticolo metallico sono disposti parallelamente tra loro. Questa forma costruttiva planare corrisponde al simbolo del triodo tradizionale. Una piastra metallica circolare fissata ad una delle guide del filamento caldo consente di ottenere un campo elettrico più uniforme tra catodo e anodo.

3. Dati tecnici

Gas:	Neon
Tensione di riscaldamento:	$\leq 7,5$ V CA/CC
Tensione anodica:	max. 400 V CC
Corrente anodica:	solitamente 10 mA a $U_A = 300$ V
Tensione reticolo:	max. 30 V
Ampolla:	ca. 130 mm $\varnothing$
Lunghezza totale:	ca. 260 mm

4. Utilizzo

Per l'esecuzione degli esperimenti con il triodo a gas sono inoltre necessari i seguenti apparecchi:

1 Portatubo S	1014525
1 Alimentatore CC 500 V @115 V oppure @230 V	1003307 1003308
2 Multimetro analogico ESCOLA 100	1013527

4.1 Inserimento del tubo nel portatubi

- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Spingere il tubo nel supporto con una leggera pressione finché i contatti dello spinotto non si trovano interamente nel supporto; rispettare una posizione univoca dello spinotto di guida.

4.2 Rimozione del tubo dal portatubi

- Per estrarre il tubo, con l'indice della mani destra premere dal di dietro sullo spinotto di guida, fino ad allentare gli spinotti di contatto. Quindi estrarre il tubo.

5. Esperimento di esempio

5.1 Scarica, dimostrazione dei portatori di carica positivi

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 1.
- Per dimostrare i portatori di carica positivi (ioni Ne^+) durante la scarica di gas a tensione di riscaldamento massima U_F , misurare la corrente I_G rispettando la polarità.

5.2 Scarica dipendente

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 2.
- Registrare la caratteristica $I_A - U_A (= U_G)$ per tensioni di riscaldamento differenti U_F (5 V ... 7,5 V).

A circa 25 V aumenta la corrente anodica I_A nel triodo a gas. Tale aumento è accompagnato da una luce viola. Nel trasporto della carica è coinvolto un numero molto maggiore di portatori di carica rispetto al triodo ad alto vuoto (oltre a elettroni termici anche ioni Ne^+).

5.3 Scarica indipendente

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 3.
- Aumentare lentamente la tensione anodica U_A e determinare la tensione di innesco U_z per la scarica di gas.
- Abbassare nuovamente la tensione anodica U_A fino ad arrestare la scarica indipendente. Registrare la tensione di innesco U_L .



5.4 Disposizione Frank-Hertz semplificata

Esperimento per la dimostrazione dell'emissione di energia discontinua durante l'urto anelastico con elettroni di neon. Gli elettroni si muovono in un campo contrario fra reticolo e anodo. Essi raggiungono l'anodo solo se possiedono sufficiente energia cinetica e contribuiscono alla corrente I_A dall'anodo alla massa.

- Realizzare il collegamento come illustrato in Fig. 4.
- Ad una forza controelettromotrice U_R di 6 V aumentare lentamente la tensione di accelerazione U_B da 0 a 70 V e misurare la corrente anodica I_A .
- Rappresentare graficamente la corrente anodica in funzione della tensione di accelerazione.

Fino ad una tensione di accelerazione di ca. 24 V la corrente anodica aumenta per poi diminuire in modo discontinuo. Ad un ulteriore aumento della tensione di accelerazione la corrente torna nuovamente ad aumentare, per poi decrescere ancora dopo ca. ulteriori 20 V.

Durante la corrente anodica devono essere chiaramente rilevabili 2 valori massimi. In caso contrario abbassare leggermente la tensione di riscaldamento.

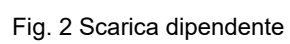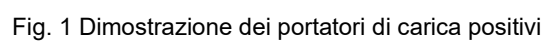

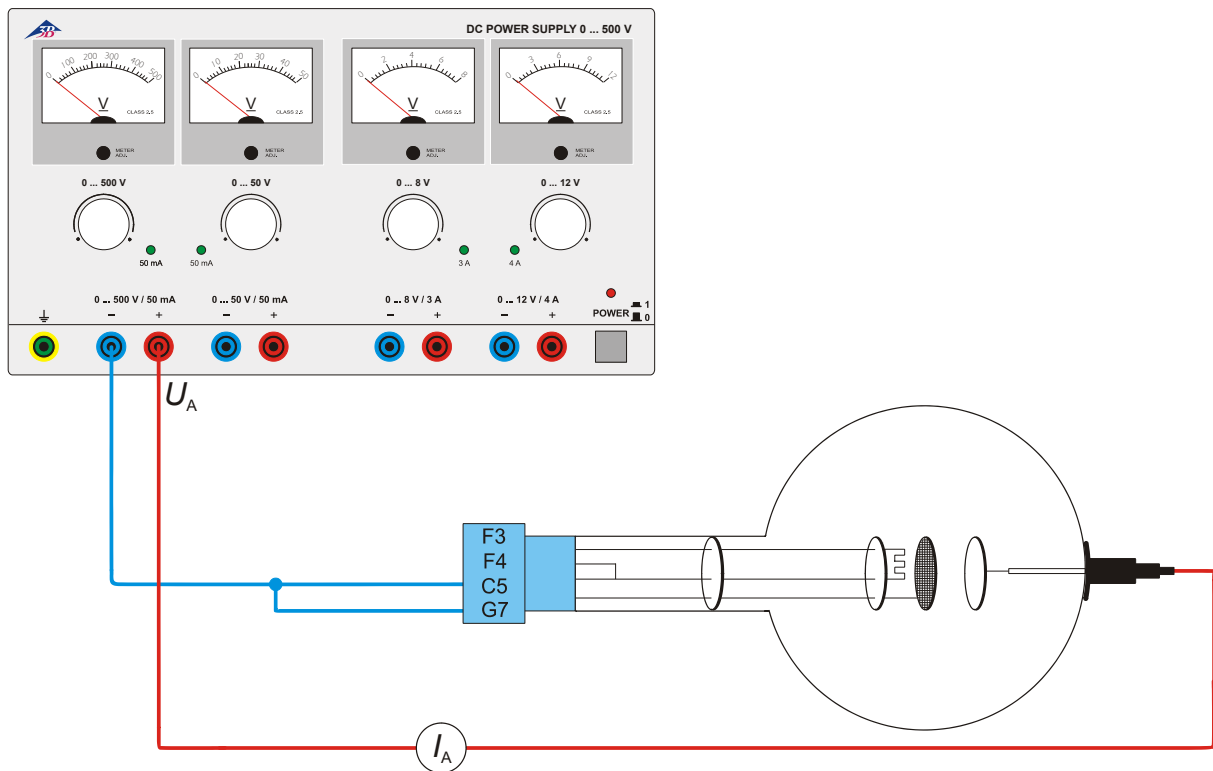


Fig.3 Scarica indipendente


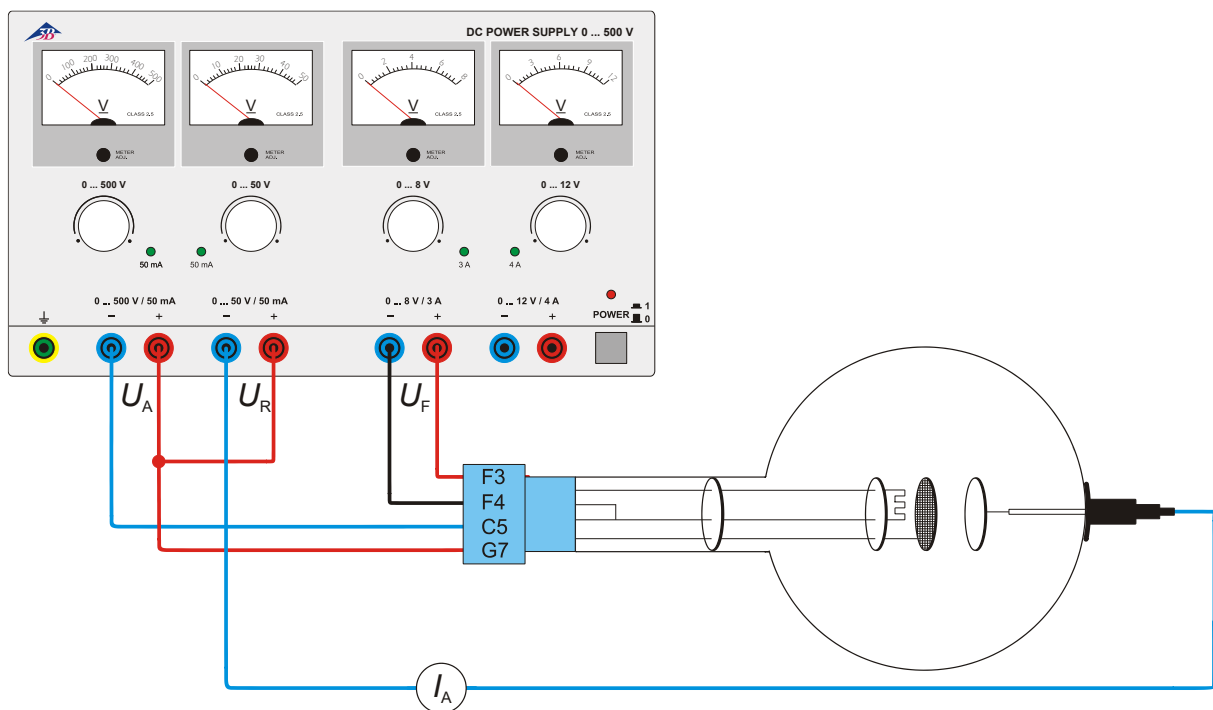


Fig. 4 Disposizione di Franck-Hertz

Triodo a gás S preenchimento com néon 1000619

Instruções de operação

05/18 ALF

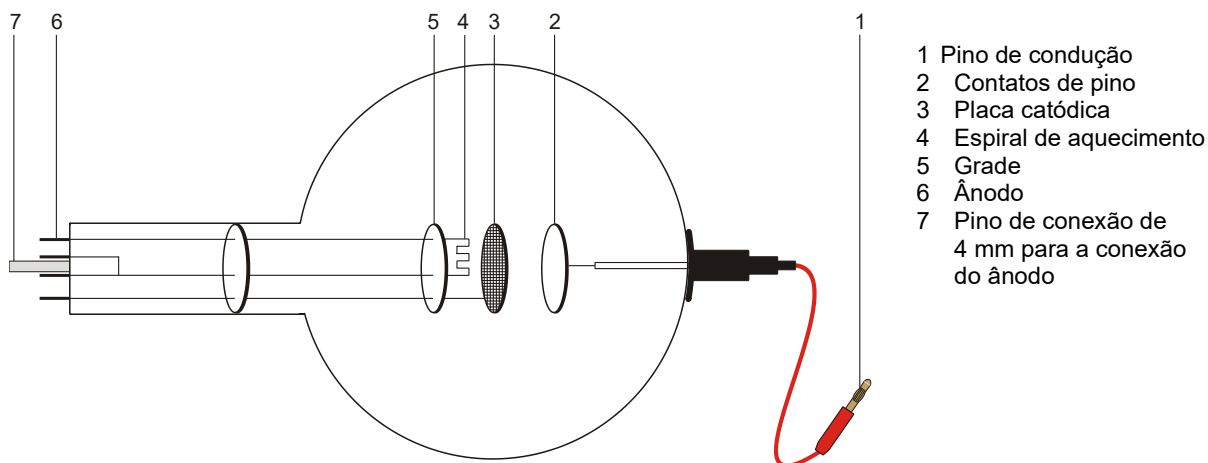

- 1 Pino de condução
- 2 Contatos de pino
- 3 Placa catódica
- 4 Espiral de aquecimento
- 5 Grade
- 6 Ânodo
- 7 Pino de conexão de 4 mm para a conexão do ânodo

1. Indicações de segurança

Tubos catódicos incandescentes são ampolas de vidro evacuadas de paredes finas, manusear com cuidado: risco de implosão!

- Não sujeitar os tubos a qualquer tipo de esforço físico.
- Não sujeitar os cabos de conexão a esforço puxando-o.
- O tubo só pode ser instalado no suporte para tubo S (1014525).

Durante a operação dos tubos podem ocorrer tensões perigosas ao contato e altas tensões no campo da conexão.

- Só utilizar cabos para ensaios de segurança para as conexões.
- Somente efetuar conexões nos circuitos com os elementos de alimentação elétrica desconectados.
- Somente montar ou desmontar os tubos com os elementos de alimentação elétrica desligados.

Tensões excessivamente altas, correntes ou temperaturas de catodo errôneas, podem levar à destruição dos tubos.

- Respeitar os parâmetros operacionais indicados.

Durante o funcionamento, o gargalo do tubo se aquece.

- Caso necessário, deixar esfriar os tubos antes de desmontá-los.

A operação por tempo mais prolongado em caso de descarga veemente de gás pode conduzir à ablação de material de eletrodos, que se precipita sobre a ampola de vidro e a escurece. O cumprimento das diretivas EC para compatibilidade eletromagnética só está garantido com a utilização dos aparelhos de alimentação elétrica recomendados.

2. Descrição

O triodo a gás possibilita a aceitação da $I_A - U_A$ linha de referência de um tiratron, observação da descarga provocada e da descarga espontânea, bem como a liberação descontinuada de energia de átomos de néon durante o choque inelástico com elétrons livres.

O triodo a gás é um tubo preenchido com néon, contendo um filamento incandescente (catodo), de puro Wolfram, uma placa de metal redonda (ânodo) e uma grade de arame inserida dentro de uma ampola de vidro transparente. Catodo, ânodo e grade de arame são organizados de modo paralelo. Esse modo plano de construção (montagem), corresponde ao símbolo original do triodo. Uma placa redonda afixada em uma das linhas de alimentação de aquecimento provê um campo elétrico uniforme entre o catodo e o ânodo.

3. Dados técnicos

Abastecimento de gás:	Néon
Tensão de aquecimento:	$\leq 7,5$ V AC/DC
Tensão anódica:	máx. 400 V
Corrente anódica:	tipo 10 mA a $U_A = 300$ V
Tensão da grade:	máx. 30 V
Ampola de vidro:	aprox. 130 mm $\varnothing$
Comprimento total:	aprox. 260 mm

4. Utilização

Para a realização de experiências com o triodo a gás são necessários adicionalmente os seguintes aparelhos:

1 Suporte dos tubos S	1014525
1 Fonte de alimentação DC 500 V @115 V ou @230 V	1003307 1003308
2 Multímetro analógico ESCOLA 100	1013527

4.1 Instalação do tubo no suporte para tubos

- Montar e desmontar o tubo somente com os aparelhos de alimentação elétrica desligados.
- Inserir o tubo na tomada com leve pressão até que os pinos de contato estejam completamente dentro da tomada, ao fazê-lo, garantir uma posição claramente definida do pino de condução.

4.2 Desmontagem do tubo do suporte para tubos

- Para a retirada do tubo, pressionar com o dedo índice da mão direita por trás sobre o pino de condução até que os pinos de contato se soltem. Logo, retirar o tubo.

5. Exemplos de experiências

5.1 Descarga, prova do transportador de carga positiva

- Produzir a comutação segundo fig. 1.
- Para a comprovação dos portadores de carga positivos (íons de Ne^+) no descarregamento de gás em tensão máxima de aquecimento U_F medir a corrente I_G sob observação do símbolo prefixado.

5.2 Descarga provocada

- Produzir a comutação segundo fig. 2.
- Registrar a linha característica $I_A - U_A (= U_G)$ para diferentes tensões de aquecimento U_F (5 V ... 7,5 V).

Com aproximadamente 25 V a corrente do ânodo I_A se eleva fortemente no triodo a gás. Essa elevação é acompanhada de uma luminescência violeta. No transporte de carga muito mais transportadores de carga participam do processo do que no triodo de alto vácuo (ao lado dos elétrons incandescentes, também os íons de Ne^+).

5.3 Descarga espontânea

- Produzir a comutação segundo fig. 3.
- Aumentar gradualmente a tensão do ânodo U_A e estabelecer o valor da tensão da ignição U_Z para a descarga de gás.
- Diminuir novamente a tensão do ânodo U_A até que a descarga espontânea pare. Registrar a tensão de cancelamento U_L .

5.4 Arranjo Frank-Hertz simplificado

Experiência para a comprovação da liberação de energia descontinuada em choques inelásticos dos elétrons com átomos de néon. Os elétrons voam para um campo oposto situado entre a grade e o ânodo. Eles só alcançam o ânodo, quando possuem suficiente energia cinética e contribuem para a corrente I_A do ânodo para a massa.

- Produzir a comutação segundo fig. 4.
- Na presença de tensão contrária U_R aumentar de 6 V a tensão de aceleração U_B gradualmente de 0 a 70 V e nisto medir a corrente de ânodo I_A .
- Representar graficamente a corrente de ânodo em dependência da tensão de aceleração.

Até a uma tensão de aceleração de aproximadamente 24 V, a corrente aumenta para, em seguida, diminuir abruptamente. Durante um novo aumento da tensão de aceleração a corrente se eleva novamente para decrescer após receber mais 20 V.

Durante o curso da corrente do ânodo 2 máximas devem ser nitidamente visíveis. Caso isso não ocorra, reduzir um pouco a tensão de aquecimento.

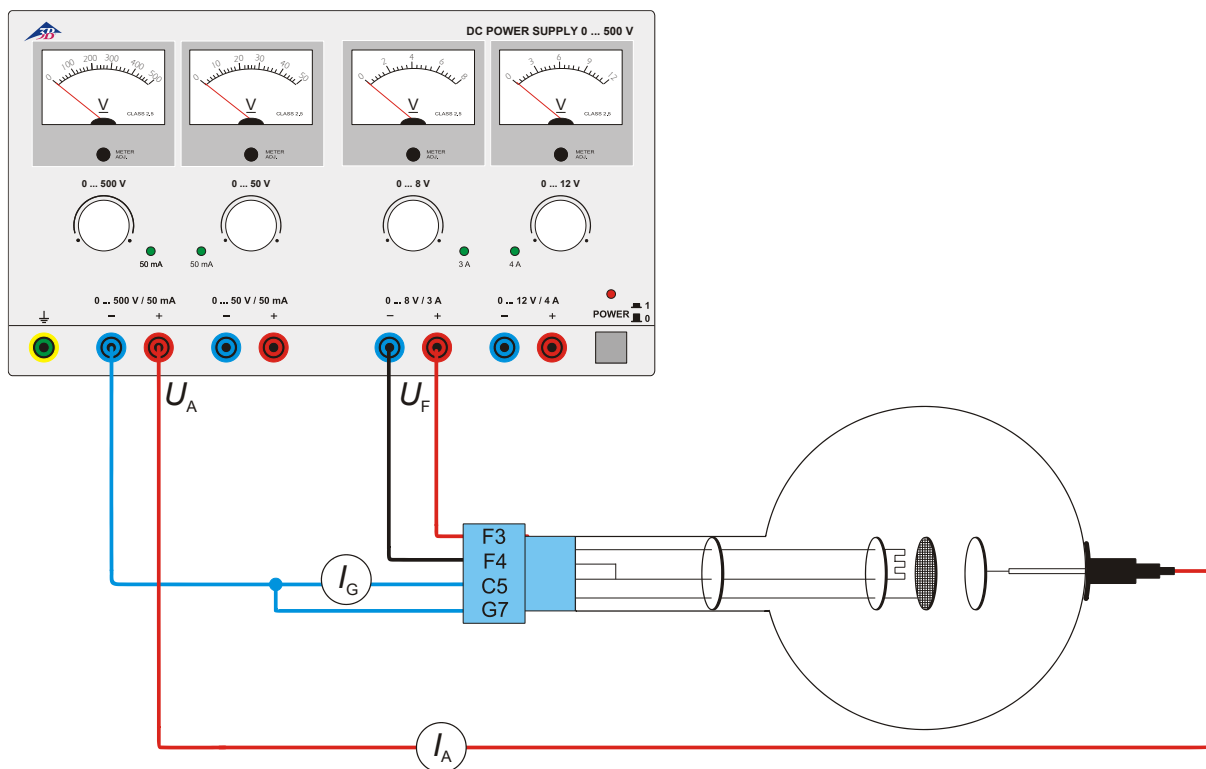


Fig. 1 Prova do transportador de carga positiva

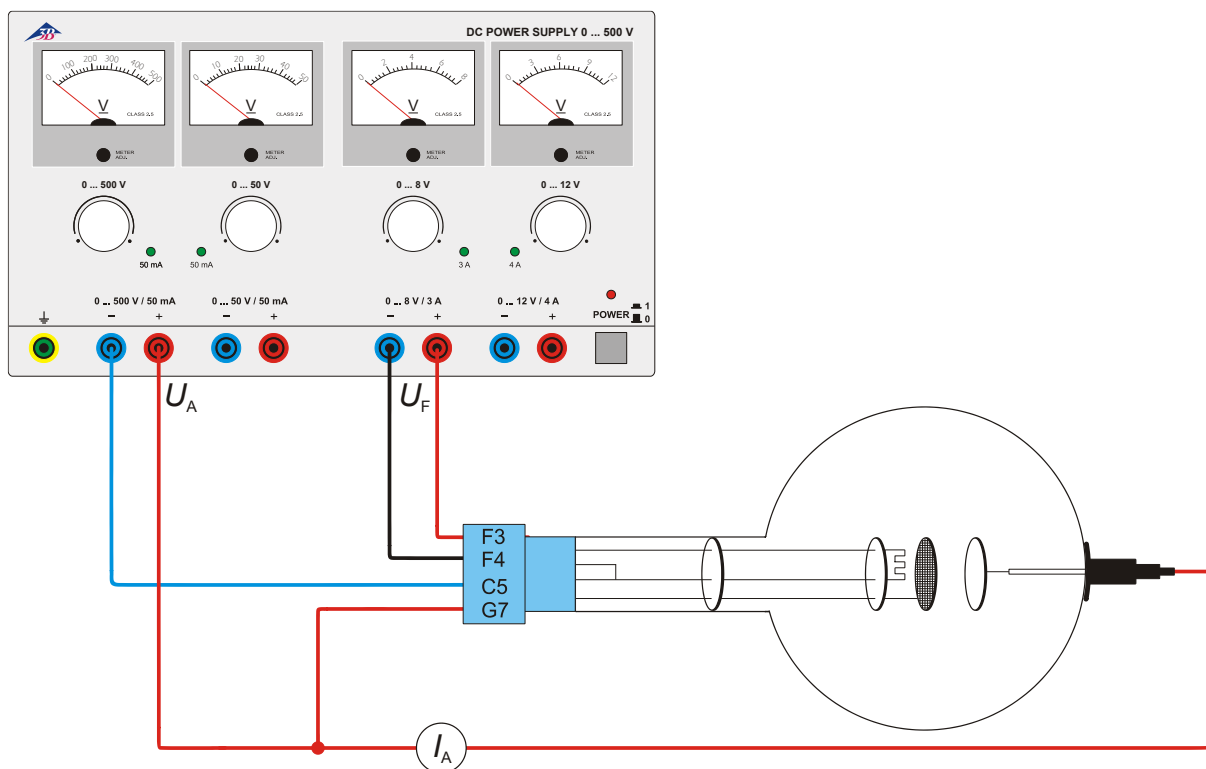


Fig. 2 Descarga provocada

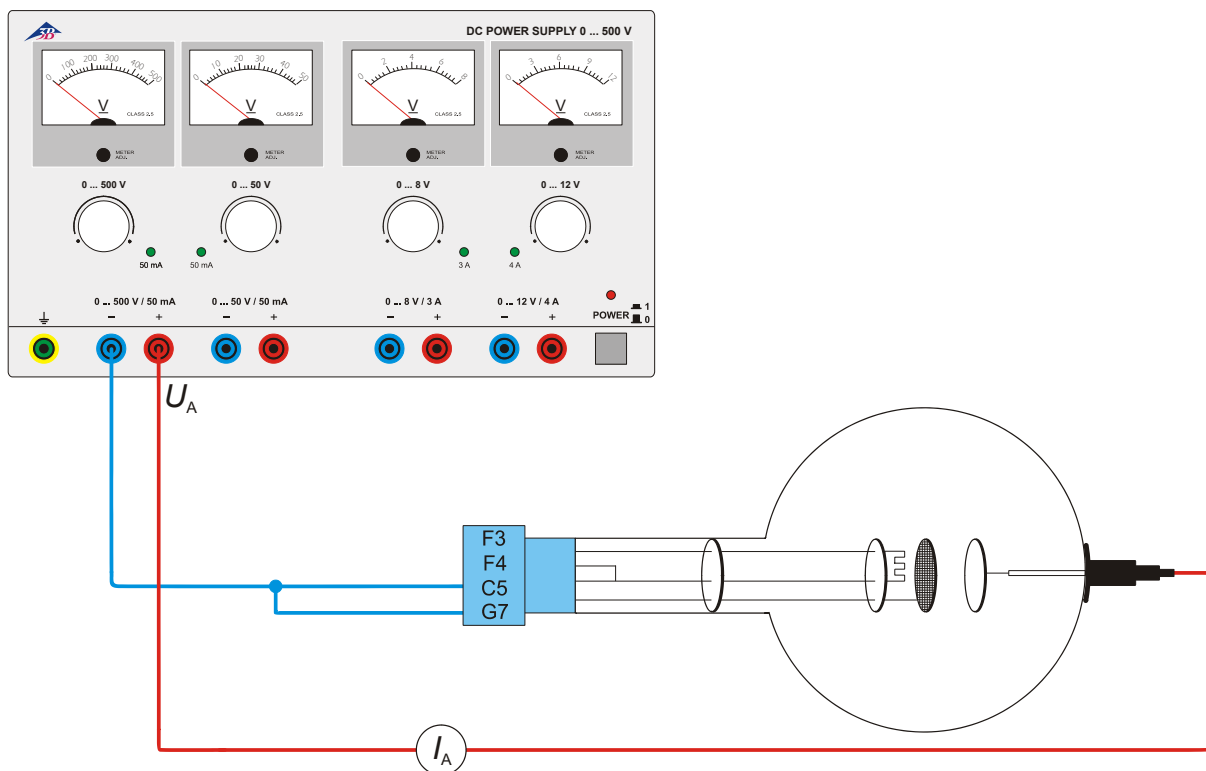


Fig.3 Descarga espontânea

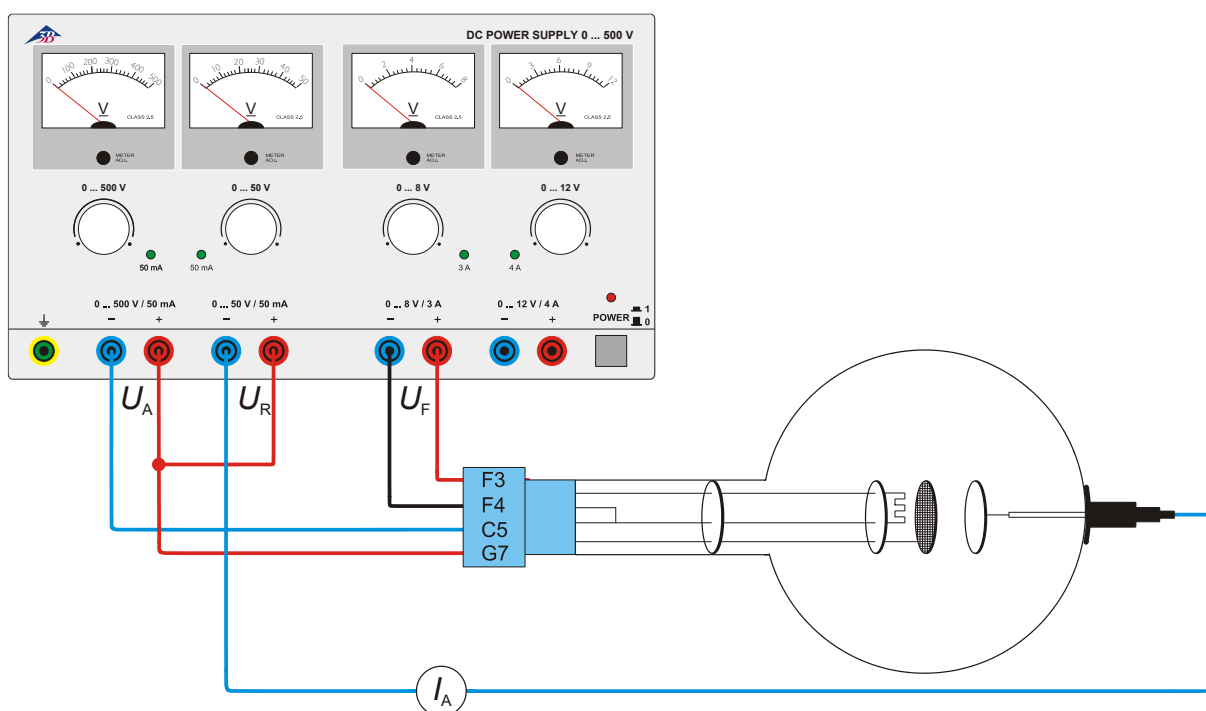


Fig. 4 Arranjo de Franck-Hertz