



## **ТРЕНАЖЕР УХОДА ЗА КИШЕЧНИКОМ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ Р16**

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1022519

> СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия.....3

Комплект поставки.....3

Функции.....4

Чистка и уход.....4

Порядок сборки

    Сборка модуля DRF.....5

    Сборка модуля DRE/DRS.....6

    Сборка модуля постановки клизмы.....7

Технические характеристики.....8

Перечень изделий для заказа.....8

Контактная информация.....8



# ТРЕНАЖЕР УХОДА ЗА КИШЕЧНИКОМ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ Р16

## > ФУНКЦИИ

Тренажер ухода за кишечником и постановки клизм Р16 обобщенно представляет ягодицы пациента в предварительно заданном левом латеральном лежачем положении, а также соответствующие структуры мягких тканей, представляющие задний проход. Верхняя ягодица сделана мягкой и подвижной для большего реализма; обучаемый должен поднять ее, чтобы получить доступ к заднему проходу.

Различные вставки для пальцевых ректальных процедур изготовлены из прочного силикона 3B SKINlike™, имитирующего ощущения человеческой кожи и ткани при проведении DRE и DRS. Задний проход остается закрытым и водонепроницаемым после удаления катетера благодаря высокому качеству материала вставки для постановки клизмы. Модульная конструкция обеспечивает быструю и простую смену модулей (< 1 мин), что позволяет отрабатывать различные процедуры под контролем инструктора и во время практических занятий.

С помощью тренажера ухода за кишечником и постановки клизм Р16 можно обучать следующим процедурам:

- Пальцевое ректальное исследование (DRE) и стимуляция (DRS)
- Пальцевая эвакуация стула (DRF)
- Постановка клизмы
- Введение суппозиториев
- Введение лекарств

Использование высококачественных гибких силиконовых материалов обеспечивает реалистичные тактильные ощущения при обучении. Герметичный резервуар для жидкости гарантирует переносному тренажеру ухода за кишечником и постановки клизм Р16 защиту от протечек и чистоту использования. Вы можете даже вводить стандартные растворы для клизмы объемом до 2 литров.



### Примечание.

Тренажер поддерживает введение катетеров **CH16 – CH40** и ректальных зондов с надувной манжетой. Пожалуйста, всегда используйте смазку перед любой вставкой катетера в тренажер, чтобы избежать его повреждения.

## > ЧИСТКА И УХОД


Тренажер следует опустошать и очищать после использования. Герметичный резервуар для жидкости гарантирует тренажеру защиту от протечек и чистоту использования. Тренажер можно разобрать и промыть под струей воды.

### Совет.

Как собрать герметичный резервуар для жидкости:



Как разобрать герметичный резервуар для жидкости:

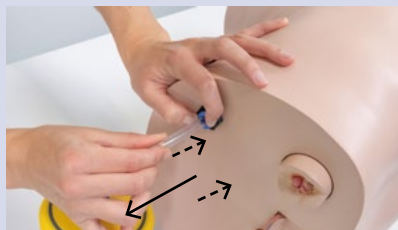

После использования вазелина и искусственного стула тщательно промойте тренажер чистой водой, чтобы не оставалось следов. Убедитесь, что все детали полностью высохли, прежде чем убирать их на хранение, и при необходимости используйте тальк, чтобы высушить силиконовые вставки.



### Примечание.

Не используйте моющие средства, содержащие растворители, так как они могут повредить поверхность. Не используйте этикетки и маркер, так как они могут оставлять постоянные пятна на поверхности.

# ТРЕНАЖЕР УХОДА ЗА КИШЕЧНИКОМ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ Р16

## ► ПОРЯДОК СБОРКИ

### Совет.

Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть на нашем веб-сайте «Видео по установке Р16», где показано, как можно легко подготовить тренажер к работе. [https://www.3bscientific.com/p\\_153\\_31843.html](https://www.3bscientific.com/p_153_31843.html)



### СБОРКА МОДУЛЯ DRF

Что потребуется:



### Установка:




1. Закрепите вставку DRF внутри ягодичной вставки



2. Заполните вставку DRF препаратом твердого стула не более чем до **2/3** объема



3. Поместите твердые фекалии в препарат твердого стула

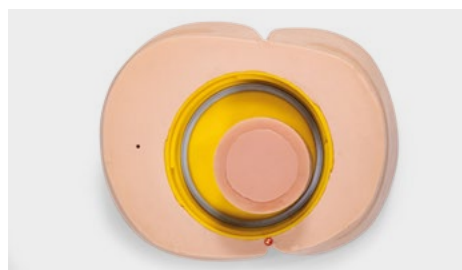

4. Закройте вставку DRF силиконовой крышкой



5. Накройте силиконовую крышку красной крышкой



6. Окончательно закрепите вставку DRF, подсоединив фиксирующую крышку к ягодичной вставке

# ТРЕНАЖЕР УХОДА ЗА КИШЕЧНИКОМ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ Р16

## СБОРКА МОДУЛЯ DRE/DRS

Что потребуется:



## Установка:

Следуйте инструкции по сборке DRF, но:

- Установите вставку DRS вместо вставки DRF
- Не используйте твердые фекалии (тип I по Бристольской шкале форм кала) во вставке DRS


# ТРЕНАЖЕР УХОДА ЗА КИШЕЧНИКОМ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ Р16

## СБОРКА МОДУЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

Что потребуется:



## Установка:

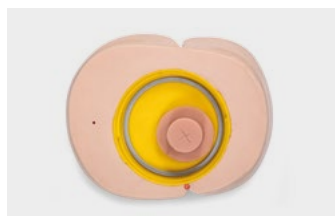


1. Закрепите вставку для постановки клизмы внутри ягодичной вставки



2. Для большего реализма обучения засыпьте 2 порции искусственного растворимого порошка во внутренний резервуар с уже установленной на него внутренней крышкой. Убедитесь, что совмещены красные точки на внутренней крышке и резервуаре.



3. Закрепите резервуар внутри ягодичной вставки. Убедитесь, что совмещены красные точки.

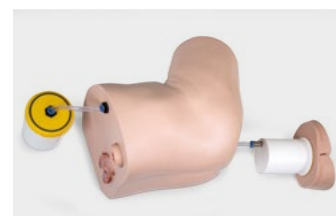

4. Соедините порт внутреннего резервуара с дополнительным внешним резервуаром, протолкнув трубку сквозь герметичный жидкостный клапан синего цвета.



### Примечание.

Благодаря внешнему резервуару тренажер ухода за кишечником и постановки клизм Р16 позволяет использовать **до 2 литров жидкости** без утечек.

### Совет.

Если вы хотите использовать более 1 литра жидкости, не забудьте подсоединить основной герметичный резервуар к дополнительному внешнему резервуару, подсоединив внутреннюю трубку и открыв зажим.

# ТРЕНАЖЕР УХОДА ЗА КИШЕЧНИКОМ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМ Р16

## > ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса: 3,8 кг

Размеры тренажера: 55 x 35 x 32 см

Рабочая температура: от 0 °C до +30 °C (от 32 °F до 86 °F)

Температура хранения: от -10 °C до +40 °C (от 14 °F до 104 °F)

## > ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗАКАЗА

Сменные и расходные материалы	Поз. №
Порошок искусственного растворимого стула (60 г)	1022521
Порошок искусственного твердого стула (1 кг)	1022522
Набор сменных вставок для пальцевых ректальных процедур (по 3 шт. каждого типа вставок)	1022523

## > КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**3B Scientific**  
A worldwide group of companies

ООО «ЗБ Сайнтифик»

196084, Россия, Санкт-Петербург,

Московский пр., 79А, лит. А, офис 400

Тел.: +7 812 3342223 • Факс: +7 812 3347150

3bscientific.com • e-mail: sales.spb@3bscientific.com