



ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

> İÇİNDEKİLER

Ürün Tanıtımı	3
Simülatör Donanımı	3
Özellikler	4
Genel Kullanım	5
Pil Güvenliği Talimatı	5
Güvenlik Talimatları	5
Kurulum	6
Solunum Yolu	6
Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR)	8
Dolaşım	9
Nörolojik	10
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	11
SSS	15
Yedek Parçalar	16
Teknik Veriler	16
İletişim Bilgileri	16

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

➤ ÖZELLİKLER

Atlas Baby özellikleri:

- Atlas Baby, dil, epiglot, ses telleri, trakea ve yemek borusu dahil olmak üzere hava yollarının anatomisine sahiptir.
- Solunum yolu yönetimi - baş geri eğme/çene kaldırma veya Esmarch manevrası.
- Solunum yolunu temizleme becerisi, aspirasyon simülasyonunu ve takılan yabancı cisimlerin çıkarılmasını içerir. Sıvı bulunmaz.
- Simülatörün solunum yolu, ekstra/supraglottik solunum yolu alternatiflerini ve oral ve nazal entübasyonu barındırabilir.
- Oral solunum yollarının (OPA) ve nazal solunum yollarının (NPA) yerleştirilmesi için gelişmiş solunum yolu.
- Sol tibia ve distal femur üzerinden intraosseöz (IO) vasküler erişim sağlanır.
- Sol dorsal bölgeden intravenöz (IV) vasküler erişim sağlanır. Ayrıca umbilikal venöz kateterizasyon gerçekleştirilir.
- Sağ vastus lateralis kası üzerinden intramüsküler (IM) erişim.
- Üç farklı göz bebeği boyutu (Normal/Daralmış/Genişlemiş).
- Elle hissedilebilen fontanel.
- Hiperventilasyon veya özofagus entübasyonu durumunda resüsitasyon sırasında mide şişmesi meydana gelebilir.
- Mide şişmesini gidermek amacıyla nazogastrik tüp yerleştirilir.
- Göbek kordonu aracılığıyla umbilikal venöz kateter yerleştirilir.



REALİTİ 360 ile birlikte kullanıldığında Atlas Baby özellikleri:

Atlas Baby, Wi-Fi bağlantısı kullanarak REALİTİ 360 ile çalışır. Eğitim sırasında anlık veya önceden programlanmış senaryolar kullanılarak, eğitim mankeni ve sanal defibrilatör ile etkileşime girer. Seçilen monitör arayüzüne bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar REALİTİ 360 ile birlikte gösterilebilir:

- AHA ve ERC Yönergelerine göre kardiyopulmoner resüsitasyonun tüm ilgili parametrelerini ve değerlerini görüntülemek için CPR gösterge paneli ekranı.
- Atlas Baby, brakiyal nabız gibi hayati bulguların gözlemlenip tanınmasına olanak tanır.
- Önceden programlanmış senaryolara dayalı otomatik simülasyon kontrolü.
- EKG'de görüntülenen kompresyon artefaktı dalga formu ve göğüs kompresyonları gerçekleştirilirken görüntülenen el pozisyonu, kompresyon derinliği ve hızı bilgileri.
- Ventilasyonla tetiklenen EtCO2 dalga formları ventilasyon hızı ve inspiratuar tidal volüm hakkında bilgi sağlar.
- Perfüzyon ritmi kullanılırken (sistolik >50mmHg) elde edilen brakiyal nabız.
- Atlas Baby, REALİTİ 360 tarafından sağlanan dinamik yaşamsal belirtileri kullanarak, kalp durması da dahil olmak üzere çok çeşitli invaziv prosedürler gerektiren farklı acil durum senaryolarını simüle edebilir.
- REALİTİ 360, tedavi seçeneklerini gerçek veya genel amaçlı monitörde defibrilasyon, kardiyoversiyon ve kalp pili uygulamasına kadar genişletir. Brakiyal nabız özelliği, uygulanan müdahalenin endikasyonunu ve başarısını belirlemeye olanak tanır.



ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SİMÜLATÖR P77

> GENEL KULLANIM

Atlas Baby'yı kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkate alın.



- Simülasyon senaryoları sırasında gerektiği şekilde eldiven takın.
- Renk bozulmasına neden olabileceği için renkli plastik eldiven kullanmaktan kaçının.



- Atlas Baby eğitim mankeninin cildini korumak için kullanmadan önce ellerinizi yıkayın ve Atlas Baby'yı temiz bir yüzeye yerleştirin.
- Kalıcı lekelenmeyi önlemek için mürekkepli kalem, keçeli kalem, aseton veya iyot kullanmaktan kaçının.
- Atlas Baby'yı gazete kağıdı veya renkli kağıt üzerine koymaktan kaçının.
- Atlas Baby'yı kullandıktan sonra gerekirse Atlas Baby'ın cildinde kalan tutkal kalıntılarını %70 etil alkol içeren mendil ile temizleyin.



- Kişisel yaralanmaları veya ürünün hasar görmesini önlemek için Atlas Baby'ın nakliye sırasında uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- Hava yolu cihazını (trakeal tüpler, i-gel vb.) hava yoluna yerleştirmeden önce her zaman silikon yağ ile yağlayın.



- Cihaz sadece kuru odalarda saklanmalı ve şarj edilmelidir.
- Çalışma sıcaklığı: -10°C ile +35°C arası
- Depolama sıcaklığı: -10°C ile +35°C arası
- Havadaki nem oranı: %15 - %80



- Şarj cihazı giriş voltaj aralığı: 100-240V AC 50/60Hz
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.
- Güç kaynağı: USB-C 5.0V DC / 3A
- Öneri: Pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazından çıkarın. Manken aşırı şarj edildiğinde pil üzerinde daha fazla baskı oluşur ve pil ömrü azalabilir.



- Ürünü kullanırken talimatları izleyin ve uyarıları aklınızda bulundurun.

> PİL GÜVENLİĞİ TALIMATI

❗ **GENEL:** Simülâtör, dahili Li-Ion batarya ile donatılmıştır.

❗ **AŞIRI ŞARJ ETMEYİN:** Aşırı şarj, bataryanın gereğinden fazla ısınmasına ve potansiyel olarak tutuşması veya patlamasıyla sonuçlanabilecek termal kaçak durumuna yol açabilir.

❗ **ASLA KISA DEVRE OLUŞTURMAYIN:** Bataryanın delinmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun; zira bu durum kısıyla sonuçlanabilir ve yanıcı elektrolitin tutuşturacak kadar ısı üretmesine sebep olabilir.

❗ **DİKKATLİ KULLANIN:** Bataryayı düşürmekten, ezmekten veya delmekten kaçının; mekanik darbeler, iç bileşenlere zarar vererek güvenlik riskleri oluşturabilir.

❗ **SICAKLIK KONTROLÜ:** Bataryayı 50°C'nin üzerindeki yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın, çünkü bu durum iç kimyasal reaksiyonları hızlandırarak termal kaçak riskini artırır.

❗ **DOĞRU BERTARAF:** Li-Ion bataryaları imha ederken yerel bertaraf düzenlemelerine uyun, böylece çevresel zarar ve potansiyel güvenlik risklerinin önüne geçilmiş olur.

> GÜVENLİK TALİMATLARI

Atlas Baby'ın optimum performansını ve dayanıklılığını sağlamak için kullanıcı bilgilerini ve uyarılarını okuyun ve bunlara uyun:

- ❗ Atlas üzerinde ağızdan ağıza veya ağızdan buruna suni solunum **UYGULAMAYIN**.
- ❗ Atlas Baby'a IV/IO/IM sistemi haricinde sıvı **VERMEYİN**.
- ❗ Elektroterapi veya aktif defibrilatör ya da AED **KULLANMAYIN**.
- ❗ Solunum yollarında keskin nesneler **KULLANMAYIN**.
- ❗ Cerrahi solunum yolu **AÇMAYIN**.
- ❗ Ponksiyon yapmayın veya torasik direnler **YERLEŞTİRMEYİN**.
- ❗ Elektrik arızası belirtisi veya olağandışı duman kokusu varsa **KULLANMAYIN**.
- ❗ Oksijen **KULLANMAYIN**.
- ❗ Hasar görmüş şarj cihazlarını **KULLANMAYIN**.
- ❗ Pili parçalarına **AYIRMAYIN**. Pili asla cihazdan çıkarmaya çalışmayın.
- ❗ Cihazı kendiniz tamir etmeye **ÇALIŞMAYIN**.
- ❗ Aktif defibrilatörler **KULLANMAYIN**.
- ❗ Aktif kalp pili **KULLANMAYIN**.
- ❗ ATLAS BABY'yı yağmur altında dış mekanda kullanın. ATLAS BABY'yı suya **DALDIRMAYIN**.
- ❗ Karın bölgesine aşırı baskı uygulamaktan **KAÇININ**; zira bu durum elektronik bileşenlere zarar verme riskini beraberinde getirir.
- ❗ ATLAS BABY'nın ambalaj malzemesi çocuk oyuncakı değildir – boğulma tehlikesi söz konusudur!
- ❗ ATLAS BABY yalnızca sertifikalı havalandırma cihazları veya havalandırma maskeleri ile kullanılmalıdır.

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SİMÜLATÖR P77

KURULUM

Atlas Baby, gövdesinin sağ tarafında Wi-Fi bağlantısının durumunu farklı renklerle göstermeye yarayan renk kodlu bir göstergeye sahiptir:

Açıklama	Durum
Sarı LED 2 saniye boyunca yanar 2 saniye boyunca söner	Şarj etme
Sarı LED açık	Atlas Bebek Çalıştırıldı
Yeşil LED Açık	Atlas Bebek Açık ve WiFi Bağlantılı
Sırayla Yeşil LED ve Sarı LED	Atlas Bebek Açık ve WiFi Bağlıyken Şarj Etme
Kırmızı LED Açık	Atlas Bebek Açık ve Bluetooth Bağlantılı
Sırayla Kırmızı LED ve Sarı LED	Atlas Bebek Açık ve Bluetooth Bağlıyken Şarj Etme
Sırayla Kırmızı LED ve Yeşil LED	Atlas Bebek Açık, WiFi ve Bluetooth Bağlantılı
Sırayla Kırmızı LED, Yeşil LED ve Sarı LED	Atlas Baby Açık, WiFi ve Bluetooth Bağlıyken Şarj Etme
Sarı LED hızlı yanıp sönüyor	Hata

Atlas Baby 48 cm boyunda, 2.5 kg ağırlığındadır ve iki farklı ten renginde mevcuttur. Atlas Baby, birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak şarj edilebilir ve eğitim seansları sırasında kablosuz olarak kullanılabilir.

Atlas Baby'nin USB-C şarj portuna sol kulak arkasından ulaşabilirsiniz. Deride USB-C şarj sembolü bulunmaktadır. USB-C şarj portunu bulabilmek için boyun derisini kaldırın.



SOLUNUM YOLU

Atlas Baby dil, epiglot, ses telleri, trakea ve özofagus ile birlikte solunum yollarının anatomisini simüle eder. Başın konumlandırılması, solunum yolunu açmak için manuel manevraların yapılması ve gerçekçi solunum yolu yönetimi için uyumlu yardımcı ekipmanların uygulanmasını pratik etmek için Atlas Baby'yi kullanın.

Solunum yolu, baş geriye yatırılarak veya Esmarch manevrası uygulanarak açılabilir. Solunum yolunu açmak için diğer yöntemler arasında simüle kuru aspirasyon, yerleştirilmiş yabancı cisimlerin çıkarılması ve Guedel tüplerinin (OPA) veya Wendl tüplerinin (NPA) yerleştirilmesi yer alır.

Atlas Baby üzerinde tek asistanlı veya çift asistanlı balon maske ventilasyonu (BVM) doğru şekilde uygulandığında toraksta gözle görülür bir genişleme olur. Havalandırma 20 mbar'ın üzerine çıktığında mide şişmesi başlayacaktır. Mide dekompresyonu, gerçek bir hasta ile aynı şekilde uygulanabilir.

Nazal veya oral entübasyon, 3 manşonlu veya 3.5 manşonsuz endotrakeal tüp (ET) kullanılarak gerçekleştirilebilir. Optimal entübasyon için, geliştirilmiş Jackson pozisyonunu ve BURP manevrasını kullanın. Entübasyon için Miller boyutu 1 laringoskopisi veya video laringoskopisi kullanın.



Önerilen tüp boyutları:

- Oraltrakeal tüp: 3.5 manşonsuz veya 3 manşonlu
- Nazotrakeal tüp: 3.5 manşonsuz veya 3 manşonlu
- iGel 1
- Laringeal maske 1
- Laringeal tüp 1



ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

Oskültasyon yaparak ve torasik bölgede bir ekspirasyon olup olmadığını kontrol ederek, balon maske ventilasyonunun doğru şekilde yapılıp yapılmadığını ve solunum yolunun uygun şekilde temizlenip temizlenmediğini belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde, yanlış sağ bronş entübasyonları sağ tarafta göğüs ekspirasyonu ve akciğer sesi olduğunda doğrulanabilir. Özofagus entübasyonunu belirlemek üzere karında bir ekspirasyon olup olmadığını kontrol etmek için oskültasyon yapın.

iGel, Laringeal Maskeler (LMA) ve Laringeal Tüpür (LT) gibi supraglottik solunum yolu alternatifleri üreticilerin talimatlarına uygun olarak kullanılabilir. Ayrıca bir mide sondası da yerleştirilebilir. İkinci nesil solunum yolu seçeneği, bir mide sondası yerleştirilmesini mümkün kılar.




Not:

Solunum yolu yardımcılarını kullanmadan önce ekipmana az miktarda silikon solunum yolu kayganlaştırıcı uygulayın.



İnspiratuar tidal volümü görmek için REALiTi 360'ın kaliteli CPR Gösterge Panelini ve genel amaçlı defibrilatör ekranını kullanın.

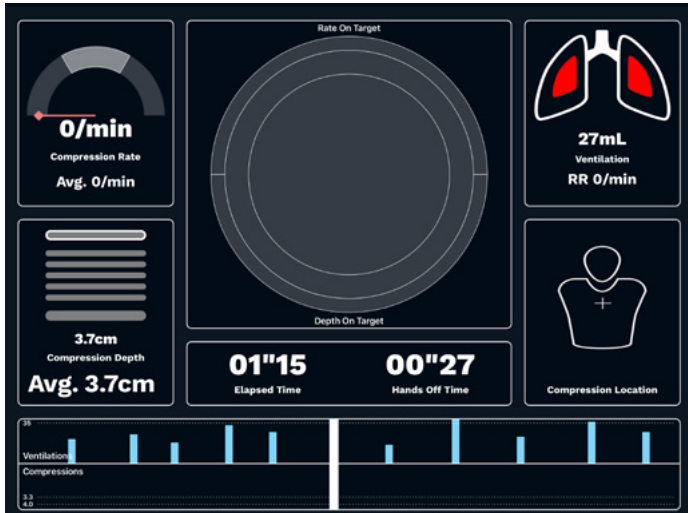

Akciğer Özellikleri

- Maksimum tidal volüm: 300 mL
- Maksimum hava yolu basıncı: 6.92 kPa

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SİMÜLATÖR P77

➤ KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (CPR)

Atlas Baby, göğüs kafesi anatomisini simüle ederek torasik kompresyonların resüsitasyon yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

Torasik kompresyonlar, CPR (kalp masajı) sırasında gerçekçi bir göğüs direnci sağlayan balon maske ventilasyonu ile aralıklı veya sürekli olarak gerçekleştirilebilir.


CPR gösterge paneli ekranı ve Genel Amaçlı Defibrilatör size el konumu hakkında geri bildirim sağlar.



REALİTİ 360 ile birlikte kullanıldığında, monitörde görüntülenen kompresyon hızı ve derinliğinin yanı sıra EKG trasesinde resüsitasyon artefaktı görüntülenir.

CPR Gösterge Paneli ekranı ve Genel Amaçlı Defibrilatörde şunlar görüntülenir:

- ✓ EKG artefaktlarına yol açan kompresyonlar
- ✓ Gerçekçi kompresyon derinliği ve direnci
- ✓ Kompresyonların derinliği, serbest bırakma ve sıklığının tespiti
- ✓ CPR Gösterge Panelinde CPR Kalitesinin gerçek zamanlı görüntülenmesi
- ✓ Sağ el pozisyonunun tespiti
- ✓ ILCOR resüsitasyon yönergeleri ile uyumludur

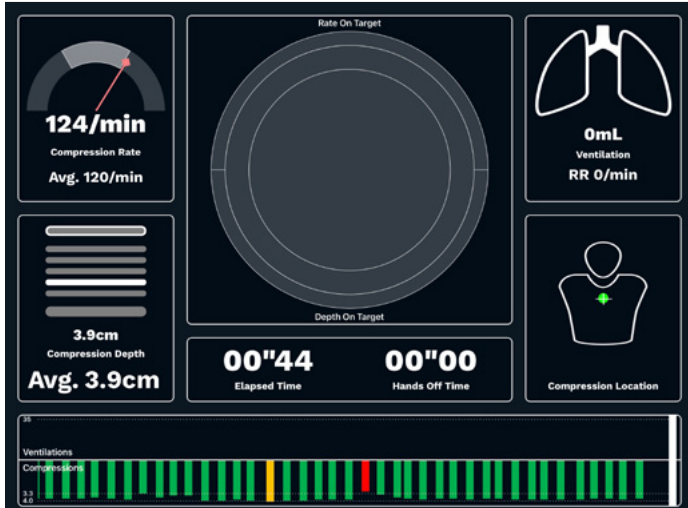

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

> DOLAŞIM

Atlas Baby, sol elde periferik hat yerleştirme için bir IV alan, distal femur ve tibia üzerinde iki IO erişim noktası, vastus lateralis kasında bir IM alan ve göbek hattı üzerinden umbilikal hat kateteri yerleştirme imkanı sunar. IV alan, IO erişim noktaları ya da IM erişim aracılığıyla ilaç uygularken, sıvıların kontrolü için Luer kilit adaptörüne bir dren torbası bağlayın.



Önerilen ponksiyon boyutları:

- IV: ≤ 20G
- IO: delme sistemi

IV kol, IO bacak ve IM yerleştirmeyi değiştirmek için, ilgili parçaları orijinal konumlarından çıkarıp drenaj sisteminden ayırın. Ardından, yenisini drenaj sistemine bağlayarak parçaları yerine yerleştirin. Eğitim seansının sonunda kurutmanızı, kanülleri çıkarmanızı ve drenaj sistemini ayırmanızı öneririz.

Günlük seanslar tamamlandığında, sistemde yer alan akışkanı/sıvıyı uzaklaştırmak için IV/IO ve IM bölgelerini hava ile yıkayın. Hava dolu bir şırıngayı IV/IO katetere bağlayın ve taşma tüpünden yalnızca hava çıkana kadar IV/IO noktalarını hava ile yıkayın.



Göbek bağına değiştirmek için, bağı çekin; kolayca yerinden çıkmalı ve yerine yeni bir bağ veya göbek paçası yerleştirilmelidir. Göbek bağına ömrünü uzatmak amacıyla lütfen simüle edilmiş bir kelepçe kullanın.



ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

> NÖROLOJİK

Atlas Baby, üç farklı göz durumu sunan çok yönlü bir pupiller düzeneğe sahiptir: normal, konstrikte ve dilate. Göz kapaklarını hafifçe açarak veya kapatarak gözleri kolayca ayarlayın.



ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Atlas Baby – Pediatrik ALS Simülatörü’nü Satın Aldığınız İçin Teşekkür Ederiz!

Atlas Baby’yi REALITI 360 ile Baglama : Basit

Senaryo 1: Mevcut Wi-Fi yönlendiricinizin adı iSimulate-5.0

1. **Güç verin:** iSimulate-5.0 yönlendiricinizi açarak işleme başlayın.
2. **Wi-Fi Bağlantısı:** REALITI Monitor iPad ve Control iPad’in iSimulate-5.0 ağına bağlı olduğundan emin olun.

WiFi Adı: iSimulate-5.0
Şifre: iSimulate2012

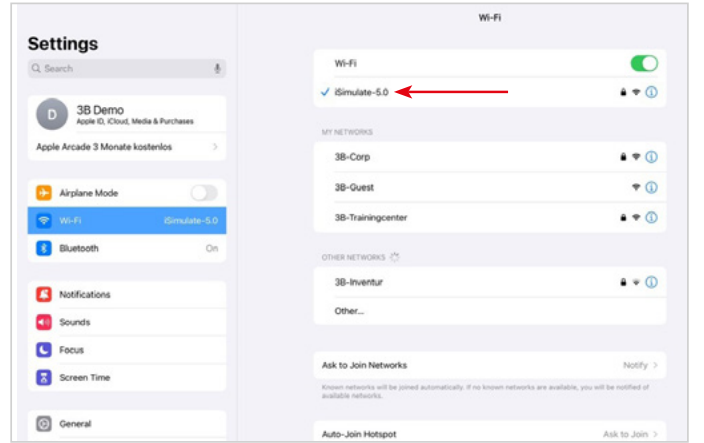


3. **Atlas Baby’i açın:** Mankenin sağ tarafındaki güç düğmesini bulun ve basın. Manken otomatik olarak iSimulate-5.0 ağına eklenir.




ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

4. REALiTi Uygulamasını başlatın: Her iki iPad üzerinde de REALiTi uygulamasını açın, Monitor iPad'de 'Staging' ve Control iPad'de 'Control' seçin.

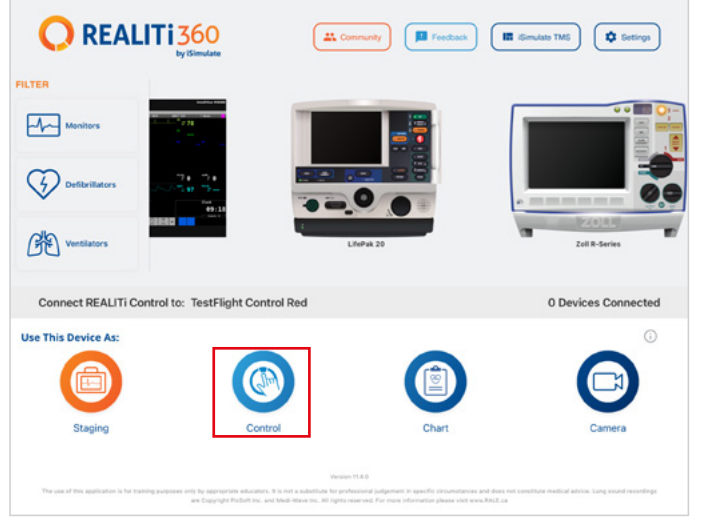


5. iPad'leri bağlayın: İki cihazı bağlamak için Control iPad'deki 'Bağlanmak için Dokun' özelliğini kullanın.


Monitor iPad listede görünmüyorsa, Staging iPad ve Monitor iPad'in REALiTi yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin: iSimulate-5.0 (her iki iPad de aynı Wi-Fi ağı üzerinde olmalıdır).

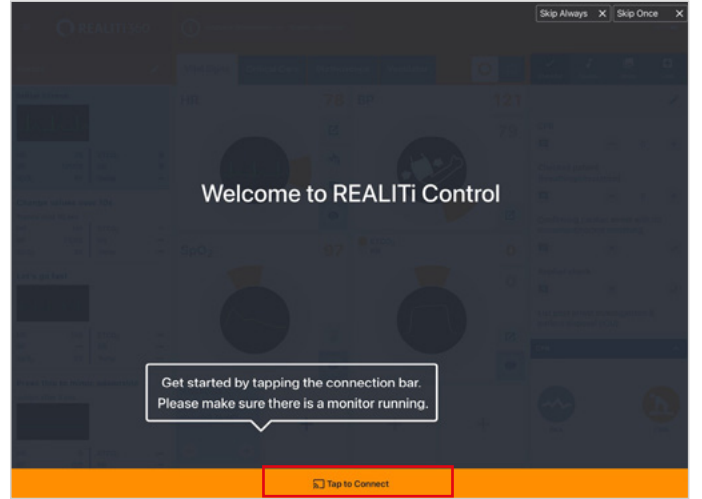

6. Bir senaryo seçin ve başlatın: Control iPad'den başlamak için bir senaryo veya monitör kurulumu seçin.

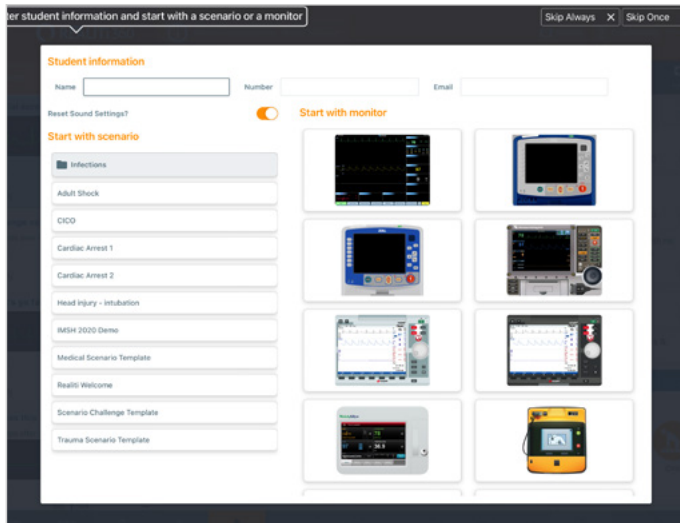



7. Bir senaryo veya monitör seçin ve 'Başlat' düğmesine dokununuz. iPad ana menüsünden defibrilatörü başlatın:

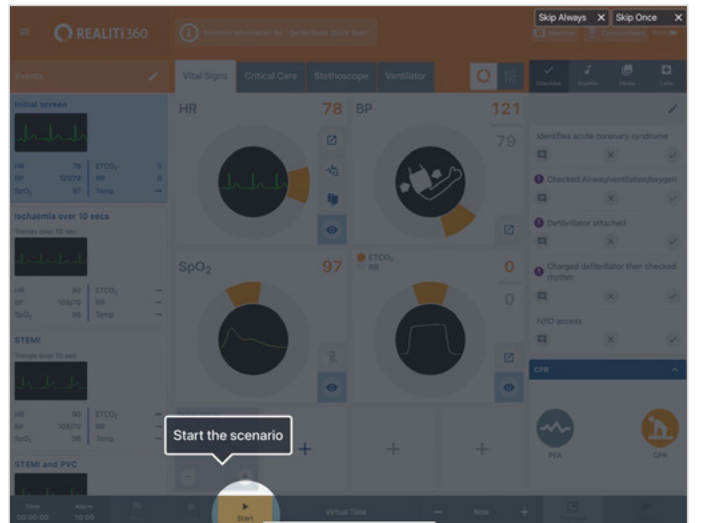

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77


8. Monitor iPad'de, 7. adımda seçilen senaryo veya monitör görünmelidir. Defibrilatörü çalıştırın.

9. Atlas Baby'ı arayın: 'Available Devices'ı göstermek için Monitor iPad'in sağ ekran kenarından içeri kaydırın.

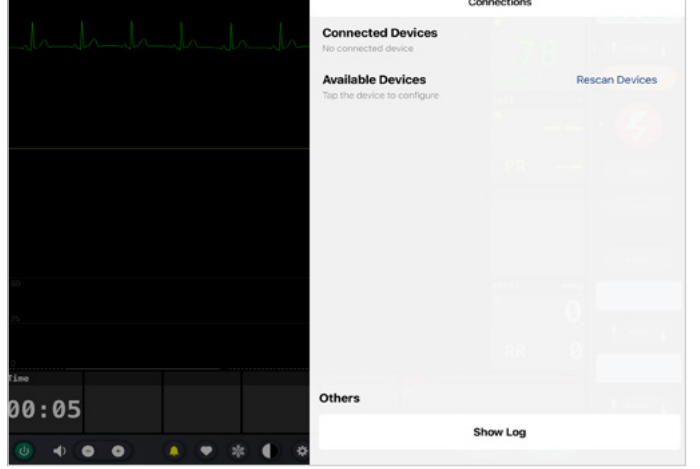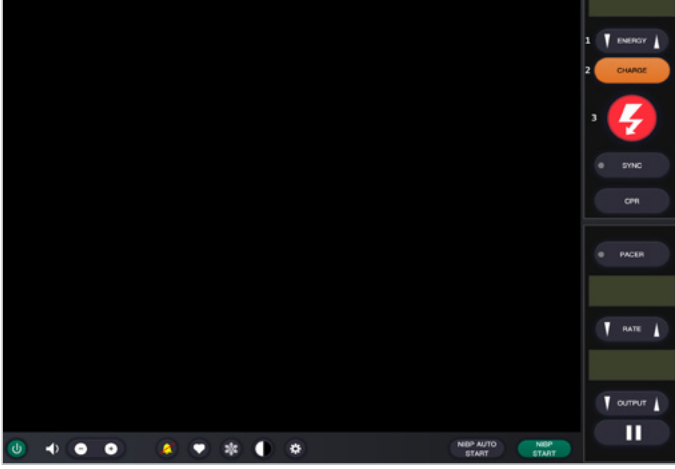

10. 'Rescan Devices' dokununuz. 'Connect Device' dokunarak mevcut cihazlardan 'Atlas Baby'ı seçin. Bağlı Atlas Baby otomatik olarak kalibre edilir. Mankenler bir karotis nabızı simüle eder.


11. Simülasyonu başlatın: Mankene kompres uygulayın. CPR kompresyonunu EKG dalga formunda ve çubuk grafikte görebilirsiniz.

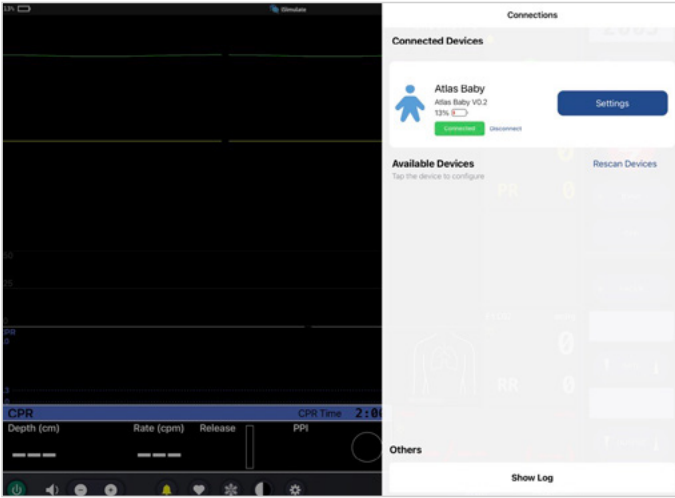

Senaryo 2: Mevcut Wi-Fi yönlendiricinizin adı iSimulate-5.0 değil


1. Bluetooth Ayarları: Monitor iPad'de Bluetooth'u açın ve Atlas Baby'a bağlanın.

2. REALiTi Uygulamasını başlatın: Monitor iPad'de REALiTi uygulamasını çalıştırın ve 'Staging' düğmesini seçin:

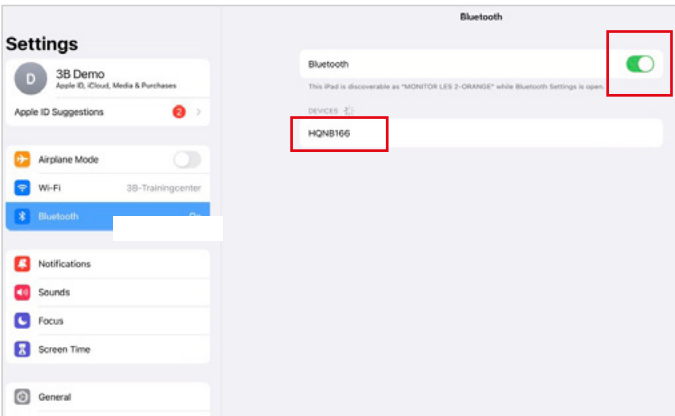


ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77


3. Atlas Baby'ı arayın: 'Available Devices' menüsünü görüntülemek için Monitor iPad'in sağ kenarından içeri kaydırın. 'Rescan Devices' öğesini seçin ve 'Connect Device' dokunarak listeden 'Atlas Baby Wi-Fi Yapılandırması'ni seçin.

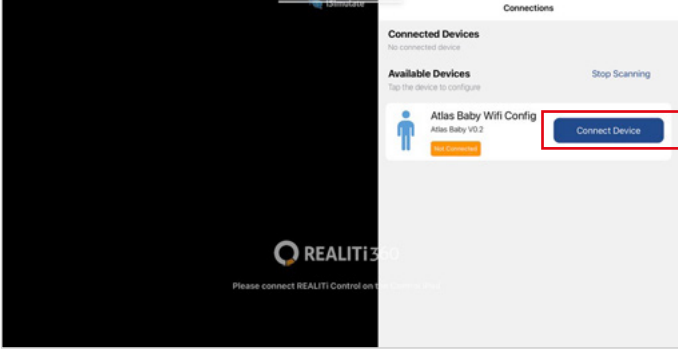


4. 'Atlas Baby Wi-Fi Yapılandırması'na başarıyla bağlandıktan sonra 'Ayarlar'a erişin.

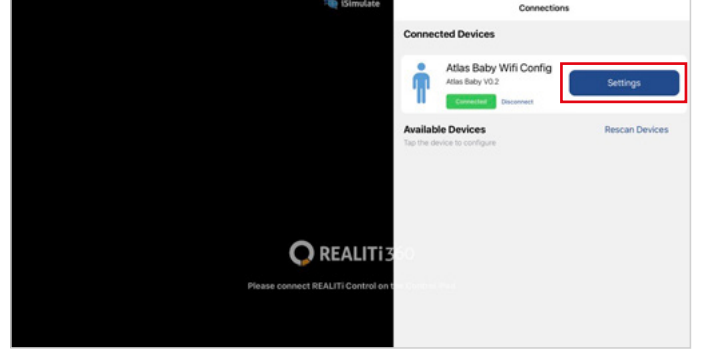


5. Wi-Fi SSID'sini yeniden adlandırın: Wi-Fi ağ adını yönlendiricinizle eşleşecek şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan Atlas Wi-Fi ayarları görüntülenir. Wi-Fi SSID'sinin (ad) ve şifrenin Wi-Fi yönlendiriciniz ile uyumlu olduğundan emin olun.

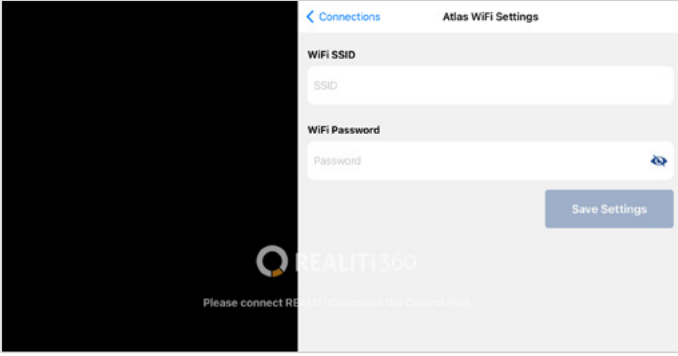

6. İstedığınız Wi-Fi SSID'sini ve şifresini girdikten sonra, değişiklikleri Wi-Fi yapılandırmasına başarıyla uygulamak için 'Ayarları Kaydet'e dokun.

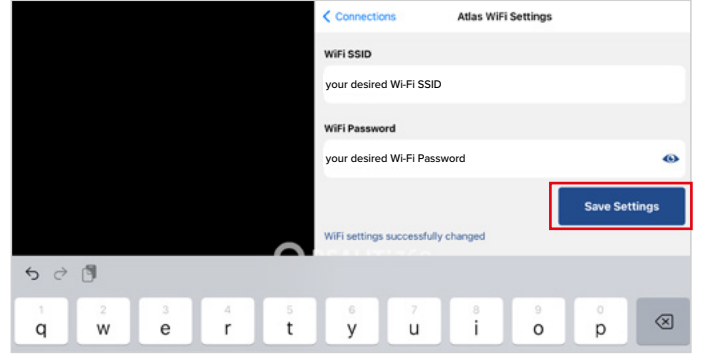

7. Ana ekran düğmesine iki kez dokunarak uygulamadan çıkın ve kapatmak için uygulamanın ön izleme kartını yukarı doğru kaydırın.
8. Atlas Baby'ı kapatın.
9. Monitor iPad'i ve Staging iPad'i yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlayın. Her iki iPad de aynı Wi-Fi ağı üzerinde olmalıdır.
10. Senaryo 1'den 3. adımdan 12. adıma kadar takip edin.

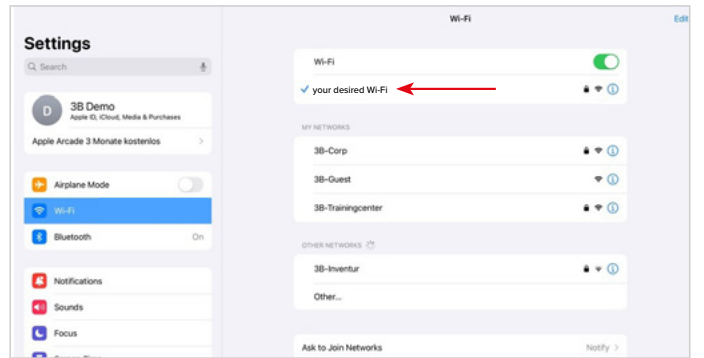

 **Atlas Baby çalışmaya hazır!**



ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

> SSS

Atlas Baby mankenim REALiTi'ye bağlanamıyor

Nedeni	Çözüm
Yanlış Wi-Fi Ağı seçildi	- Her iki iPad'de de doğru Wi-Fi'ye bağlanın NOT: Varsayılan SSID Wi-Fi ayarı "iSimulate-5.0" Varsayılan şifre "iSimulate2012"dir - Birden fazla Atlas Baby kullanıyorsanız, her simülatörün benzersiz bir SSID adına sahip olduğundan emin olun. Birden fazla Atlas Baby kullanıyorsanız, her simülatörün bağlanmak için kendi yönlendiricisine/ağına sahip olduğundan emin olun. NOT: Hızlı Başlangıç Kılavuzundaki prosedürü izleyin (Atlas Baby REALiTi 360'a nasıl bağlanır?)
REALiTi 360 Uygulaması güncellenmiyor	Her iki iPad'inizde de App Store'a gidin ve REALiTi 360 uygulamasını mevcut en son sürüme güncelleyin
Atlas Baby, Wi-Fi'den çok uzakta	Ağınızı ve REALiTi sisteminizi Atlas Baby'a yaklaştırın

REALiTi ve Atlas Baby ile olan bağlantım kesildi

Birden fazla ağ bağlantısı REALiTi ve Atlas Baby arasındaki iletimleri engelliyor olabilir.

Atlas Baby'a bağlanmak için gereken ağın haricinde her iki iPad'inizdeki diğer ağları dikkate almayın. Varsayılan ağ, "iSimulate-5.0"dır

Atlas Baby'ın Wi-Fi ayarı nasıl değiştirilir?

Adımlar Atlas Baby kullanıcı kılavuzunun 13. sayfasında mevcuttur.

Atlas Baby solunum yolları ağızdan ağıza resüsitasyon nedeniyle kontamine olmuş

Atlas Baby'da ağızdan ağıza suni solunum YAPMAYIN. Hasar varsa:

- Atlas Baby'ın dış kısmını verilen manken mendilleriyle temizleyin.
- Ağız boşluğunun içini verilen manken mendilleriyle temizleyin.
- Akciğer torbasını değiştirin.

Atlas Baby üzerinde göğüs yükselmesi görünmüyor

- Göğüs yükselmesi tek taraflı ise endotrakeal tüp (ETT) sağ ana bronşa yerleştirilebilir. ETT'nin yerleştirilmesini düzeltin.
- Akciğer torbası sızdırıyor veya akciğere giden hortum bükülmüş, kıvrılmış veya çıkmışsa, akciğer torbasının değiştirilmesi gerekir.
- Solunum yolunu kapatın.
- Hava hortumunda sızıntı olmadığından emin olun.
- Tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun.
- Gerekirse hortumları değiştirin.

Atlas Baby'de brakiyal nabız hissedilmiyor

Nedeni aşağıdakiler olabilir:

- Kan basıncı 50 mmHg Sistolik değerinin altına ayarlanmıştır.
- REALiTi 360 uygulaması ile Atlas Baby arasındaki bağlantı kesilmiştir.
- Perfüze olmayan kalp ritmi
- PEA ritmi

ATLAS BABY THE ALS PEDİYATRİK SIMÜLATÖR P77

> YEDEK PARÇALAR

Sarf malzemeleri	Parça No.
Göbek Paçası	açık ten 1025673 koyu ten 1025674
IO replasmanı	açık ten 1025677 koyu ten 1025678
IV replasmanı	açık ten 1025675 koyu ten 1025676
IM replasmanı	açık ten 1025679 koyu ten 1025680
Göbek Bağı	1025672

> TEKNİK VERİLER

Çalışma sıcaklığı:	-10°C ile +35°C arası
Depolama sıcaklığı:	-10°C ile +35°C arası
Havadaki nem oranı:	maks. %85

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific TR
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-Y Blok Daire 105
34235 Tekstilkent (B13 Blok- No: 36)
Esenler • İstanbul • Türkiye
Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801
3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com