



SIMULATEURS DE FORMATION À L'EUTHANASIE

MANUEL D'UTILISATION

1025549, 1025553, 1025556, 1025559, 1025562,
1025564 1025653, 1025655, 1025657, 1025659, 1025661


SIMULATEURS DE FORMATION À L'EUTHANASIE

➤ SYSTÈME DE BASE

Cette plateforme de simulation comprend une série de têtes et de corps de bétail dotés de dispositifs spécifiques pour la formation à l'euthanasie à l'aide d'un pistolet à bouchon captif ou d'un pistolet à bouchon non pénétrant. Les espèces, races et tailles disponibles incluent le porc de marché, la Holstein, l'Hereford, la truie, le bœuf de marché, l'agneau de marché, les porcelets (néonates de 3kg, 6kg, 9kg) et l'agneau de 4kg.

Les modèles pour grands animaux se composent d'une tête équipée d'une cavité destinée à accueillir une cartouche cérébrale. Ces modèles ont vocation à enseigner le ciblage, le positionnement adéquat du pistolet et à offrir un retour tactile réaliste. Une fois le tir effectué, la cartouche cérébrale restitue une trace tridimensionnelle de la trajectoire, fournissant ainsi des informations immédiates sur le placement, l'angle et la profondeur du bouchon, garantissant une « euthanasie adéquate ».

Les modèles de petite taille, à corps entier, sont conçus pour être utilisés exclusivement avec un bouchon non pénétrant et permettent de s'entraîner à immobiliser correctement l'animal ainsi qu'à cibler avec précision.

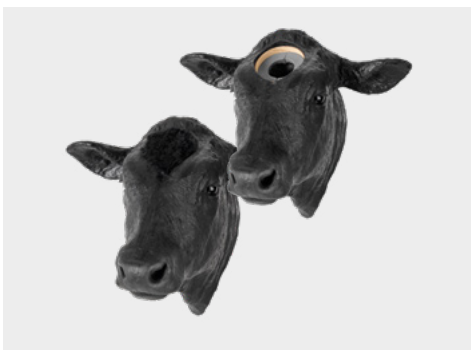

➤ MODÈLES DE TÊTES D'ANIMAUX DE GRANDE TAILLE

Une cavité cylindrique située dans la tête accueille le conteneur cérébral. La cavité est tapissée d'un tube en plastique remplaçable, destiné à protéger ce revêtement en cas de tirs manqués. Ce revêtement en plastique n'endommagera pas le bouchon captif. Tous les modèles de têtes sont fabriqués avec une peau en caoutchouc silicone, un intérieur en mousse flexible et une armature en acier.

➤ SUPPORT ROULANT RÉGLABLE

Le support roulant réglable a été conçu pour recevoir les différentes espèces animales disponibles dans le système. Il est ajustable en hauteur, en angle de tête (avant et arrière) et peut être pivoté vers la droite jusqu'à 90 degrés.

Chaque tête est dotée d'une équerre sur le panneau arrière, laquelle s'insère dans un récepteur en tube carré présent sur l'ensemble de réglage de la tête du support dédié. Le support permet une grande diversité de positionnements afin de mettre en valeur les caractéristiques animales complexes et des mouvements allant jusqu'à l'extrême d'un animal incapable de se relever. Veuillez consulter le document séparé relatif à la mise en place et à l'utilisation du support.



SIMULATEURS DE FORMATION À L'EUTHANASIE


➤ CONTENEURS CÉRÉBRAUX – CONTENEUR DE CIBLAGE ET DE CERTIFICATION

Chaque cartouche cérébrale se compose d'un cerveau en argile souple, d'un boîtier en silicone en deux parties (illustré à droite), d'un logement tube en carton et d'une plaque de crâne en plastique à laquelle est fixée une pièce imitant une chevelure ou une peau. L'ensemble se glisse dans la cavité dédiée du modèle de tête correspondant. Il peut être orienté grâce aux ergots mâles disposés au fond de la cavité, lesquels s'insèrent dans les récepteurs équivalents du boîtier en mousse du cerveau.

La cartouche est destinée à être insérée dans la cavité de la tête et à être utilisée une seule fois, à l'aide du bouchon approprié et avec la charge ou la pression d'arme sélectionnée selon l'espèce. Des dépressions, disposées sur le pourtour de la cavité de la tête, permettent de saisir le logement en carton afin d'en extraire la cartouche. Une fois l'assemblage complet retiré de la cavité, le boîtier en silicone du cerveau peut être séparé du tube en carton. Ce boîtier, ainsi détaché, peut être ouvert en le séparant de la plaque du crâne et en écartant ses deux moitiés, ou en découper l'argile du cerveau pour examiner le tir. Il est également possible de sonder le tir afin d'en vérifier la profondeur et l'emplacement.

Les boîtiers de cerveau sont fabriqués en différentes tailles et configurations afin de s'adapter au modèle de tête adéquat. Ils sont fournis avec une couverture imitant une peau de fourrure fixée à la plaque du crâne. Le matériau d'argile cérébrale est une pâte de blé non toxique à base d'eau qui doit être conservée dans des sacs hermétiques et, de préférence, réfrigérée afin de prolonger sa durée de vie. Lorsqu'elle est correctement stockée, cette argile demeure souple et la cartouche reste utilisable pendant au moins 6 mois.

Le ruban fixé à la base de la cartouche sert à l'extraire de la cavité. Lors du chargement, veillez à ce que les rubans longent bien la cartouche et soient visibles sur le dessus, afin de pouvoir être utilisés comme languettes de traction.

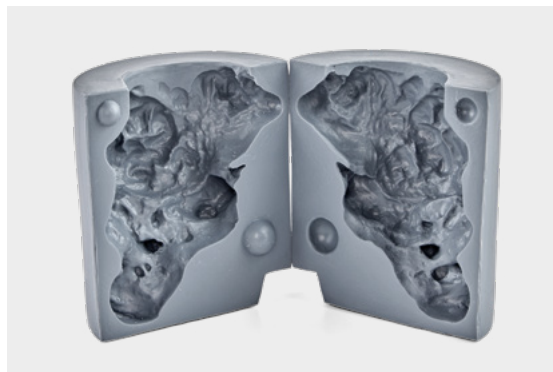

➤ MODÈLES DE PISTOLETS À BOULON CAPTIF NON PÉNÉTRANTS POUR LE CORPS ENTIER

Les petits modèles d'animaux, incluant des porcelets et un petit agneau, sont destinés à être utilisés uniquement avec un pistolet à boulon captif non pénétrant. Ces modèles ont pour but de former à une contention animale adéquate ainsi qu'au positionnement du boulon, et ils sont conçus pour reproduire la flexibilité et le poids de l'animal correspondant. Les têtes en caoutchouc de silicone solide peuvent supporter entre 50 et 100 tirs avant que des déformations extrêmes ne les rendent inutilisables.

Les têtes se retirent simplement en les tirant et en les dégrafant de la clé de verrouillage flexible qui dépasse du corps (voir image ci-dessous). Une tête de remplacement se fixe en la poussant sur la clé saillante jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Une force modérée est nécessaire pour retirer et remettre les têtes.



➤ MAINTENANCE, ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Les modèles doivent être nettoyés régulièrement à l'aide d'un savon doux et d'eau, jamais avec des solvants ni des produits chimiques agressifs. En cas de déchirure ou d'endommagement de la peau, elle peut être réparée à l'aide des kits de réparation VSI Silicore. Veuillez nous contacter si nécessaire.

SIMULATEURS DE FORMATION À L'EUTHANASIE

> COORDONNÉES



France 3B Scientific S.A.R.L.
8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3
68870 Bartenheim • France
Tel. : 03.89.70.75.20 (International : +33 3 89 70 75 20)
Fax : 03.89.70.75.21 (International : +33 3 89 70 75 21)
3bscientific.com • commande@3bscientific.com