



ТРЕНАЖЕР СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

ТРЕНАЖЕР СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

УХОД, ОБРАЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Составляющие тренажера:

- Верхняя термоформованная оболочка с штифтами для крепления шовной подкладки
- Нижняя термоформованная оболочка с присосками
- Селезёнка
- Почки
- Тонкая и толстая кишка с брыжеечной сумкой и слепой кишкой
- Мочевой пузырь
- Съёмная матка с яичниками и широкими подвесными связками
- Многослойная шовная подкладка, имитирующая стенку брюшной полости

Тренажер стерилизации сук поставляется в полностью собранном виде и включает три (3) съёмные многослойные подкладки, имитирующие стенку брюшной полости, а также три (3) съёмные матки.

ОЧИСТКА

Все компоненты — как твёрдые, так и мягкие — должны периодически очищаться с использованием мягкого моющего средства и тёплой воды. Никогда не используйте агрессивные химические вещества или чистящие средства. Все внутренние мягкие компоненты могут быть повреждены при грубом обращении. После очистки тщательно высушите все очищенные компоненты перед хранением.

ОБЩИЙ УХОД


Регулярно осматривайте устройство на предмет любых признаков повреждений. Если у каких-либо мягких компонентов обнаружатся повреждения, их можно эффективно восстановить с применением прозрачного аквариумного силикона. В противном случае, если ремонт невозможен, детали можно легко заменить, заказав их у VSI. Фиксирующие элементы, такие как штифты и винты, изготовлены из прочного нейлона, что обеспечивает их долговечность при правильном обращении. В случае обнаружения поврежденных компонентов их можно заказать по отдельности. Симулятор стерилизации собак поставляется полностью собранным для удобства. Рекомендуется внимательно изучить расположение и ориентацию всех компонентов при первоначальном осмотре, чтобы ознакомиться с конструкцией и в дальнейшем правильно заменить изношенные или поврежденные элементы по мере необходимости.

ГИСТЕРЭКТОМИЯ

Для начала отсоедините верхнюю оболочку, содержащую шовную подушку, от нижней оболочки. Это можно сделать с минимальными усилиями, поскольку оболочки соединены липучками. Затем аккуратно извлеките толстую кишку из крепёжного элемента у ректального конца. После этого осторожно переместите всю конструкцию брыжейки, включающую толстую и тонкую кишки, слепую кишку и брыжейку, из нижней оболочки. Это действие обнажает места крепления матки.

Мочевой пузырь имеет зазубренный конец, который вставляется в соответствующее отверстие нижней оболочки. Пузырь извлекать не требуется — достаточно сместить его влево или вправо, чтобы получить доступ к матке. Аккуратно отсоедините вагинальный конец матки от шпильки (которая прикреплена эластичным шнуром к нижней оболочке).

Удалите оставшиеся части широкой связки, закреплённые на трёх крепёжных винтах в основании нижней оболочки — двух каудальных и одного краниального. Осторожно поднимите каждую почку вертикально с крепёжных столбиков и снимите оставшиеся концы креплений подвесной связки (плоские почкообразные окончания с отверстиями) со шпилек.

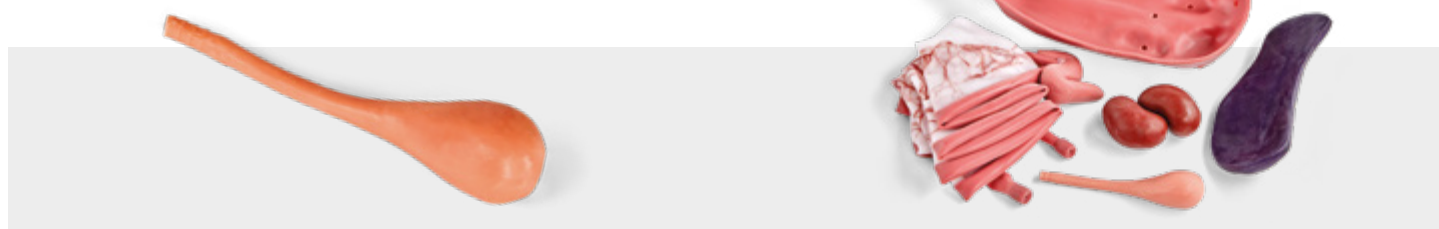

ТРЕНАЖЕР СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

➤ ЗАМЕНА МАТКИ

Это достигается наиболее просто посредством наблюдения за местом крепления матки перед её удалением.

Разложите новую матку и определите правый маточный рог, который краниально немного длиннее левого. Разместите основание правой подвешной связки на правом почечном столбе и повторите процедуру с левой стороны, удостоверившись, что обе подвесные связки ориентированы латерально. Верните обе почки на соответствующие столбы для фиксации подвесных связок. На каждом конце дорсомедиальной кромки широкой связки имеются монтажные отверстия, которые надеваются на монтажные винты (один краниальный и два каудальных), расположенные в нижней оболочке. Два краниальных монтажных отверстия надеваются на один монтажный винт, при этом подвесная связка располагается вентрально по отношению к широкой связке. Вставьте штифт с эластичным креплением в вагинальный конец матки. Эластичная нить обеспечивает необходимое удлинение для лучшей экстернализации матки во время процедуры.



Переустановите ректальный конец толстого кишечника на его монтажный штифт, убедившись, что он расположен дорсально по отношению к матке и медиально относительно широких связок.

Осторожно верните на место мезентериальную конструкцию (толстую и тонкую кишки, слепую кишку и мезентерий), сложив её гармошкой. Поместите мочевой пузырь на место. Аккуратно сдвиньте селезёнку дорсомедиально, одновременно опуская верхнюю оболочку на нижнюю оболочку.

➤ СОБАЧЬИ МНОГОУРОВНЕВЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Подушки для наложения швов состоят из четырех (4) слоев, имитирующих дерму, подкожную клетчатку, линию и поперечную фасцию. Эти подушки для наложения швов аналогичны нашим стандартным многоуровневым моделям, но дополнены сосками и пупком.

- Различия в толщине, обусловленные ручным процессом изготовления, создают разнообразные поверхности для тренировки наложения швов.
- Храните подушки в пакете, когда они не используются.
- Подушки содержат силиконовые масла, которые со временем могут вытекать и оставлять следы на пористых поверхностях. После извлечения из пакета их следует, при необходимости, промыть мылом и водой для удаления маслянистых остатков. Остатки силиконового масла можно удалить с помощью моющего средства на основе фосфатов, разведенного с водой.
- Избегайте контакта с кожей, глазами и пористыми поверхностями.

➤ СНЯТИЕ И ЗАМЕНА МНОГОУРОВНЕВОЙ ШОВНОЙ ПОДКЛАДКИ

Аккуратно снимите использованную подушечку для наложения швов с восемью (8) крепежными штифтами, размещённых по периметру брюшного отверстия в верхней оболочке. Аккуратно установите новую подушечку для наложения швов на штифты в верхней оболочке.



ТРЕНАЖЕР СТЕРИЛИЗАЦИИ СОБАК

> ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Собачья базовая пластиковая оболочка	1025631
Собачий пузырь	1025628
Собачий желудочно-кишечный тракт	1025629
Собачья почка (набор из 2)	1025630
Собачья многоуровневая шовная подушка	1025668
Собачья селезёнка	1025632
Собачья матка	1025633

> КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com