



CHIRURGIA DENTALE CANINA MODELLO BASE / CONFEZIONE


CHIRURGIA DENTALE CANINA MODELLO BASE / CONFEZIONE

➤ CURA, MANIPOLAZIONE E MANUTENZIONE


Modello Base Canino per Chirurgia Dentale (1025636, 1026124)

Componenti:

- Testa canina, disponibile in marrone e nero
- Mandibola x2
- Mascella x2
- Lingua rimovibile
- Assemblaggio della pinza regolabile

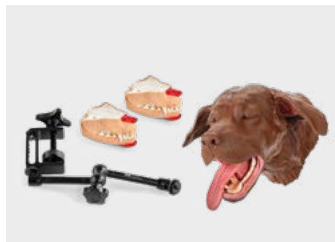

1025636

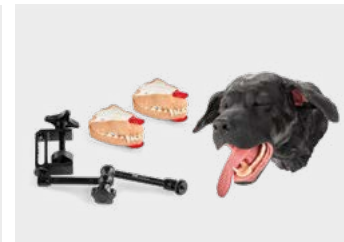

1026124

Pacchetto Canino per Chirurgia Dentale (1025648, 1026125)

Componenti:

- Testa canina, disponibile in marrone e nero
- Mandibola x3
- Mascella x3
- Lingua rimovibile
- Assemblaggio della pinza regolabile
- Set di mascelle trasparenti per canino
- Custodia per il trasporto



1025648



1026125

➤ PULIZIA

Il rivestimento morbido del modello chirurgico dentale canino può apparire leggermente oleoso, ma ciò è caratteristico dei siliconi morbidi. Tutti i componenti —sia quelli rigidi che quelli morbidi— devono essere puliti periodicamente con un detergente delicato e acqua tiepida. Non utilizzare mai sostanze chimiche aggressive o detergenti. Tutti i componenti interni in materiale morbido possono essere danneggiati da una manipolazione brusca.

➤ MANUTENZIONE GENERALE

Controllare periodicamente l'unità per verificare la presenza di componenti danneggiati. Se uno qualsiasi dei componenti morbidi dovesse risultare danneggiato, è possibile ripararlo con un adesivo in silicone di grado acquario (preferibilmente trasparente). Se la riparazione non fosse praticabile, sono disponibili pezzi di ricambio.

Il modello chirurgico dentale canino viene fornito già opportunamente assemblato. È consigliabile osservare attentamente l'orientamento e la posizione di tutti i componenti per familiarizzarne l'uso e agevolare la corretta sostituzione di quelli consumabili o danneggiati. Il componente dedicato alla testa del modello è stato progettato e realizzato per offrire un aspetto e una risposta ad alta fedeltà. Queste caratteristiche conferiscono alla pelle una natura relativamente delicata, che richiede particolare cura nella manipolazione e nella conservazione per evitare danni.

➤ INSTALLAZIONE DELLA MASCELLA

Tieni le labbra superiori del naso del modello su entrambi i lati e ruota delicatamente il naso all'indietro (caudalmente) finché non appaiono la superficie di montaggio e le guide della mascella all'interno della bocca. Utilizza il pollice e l'indice per separare delicatamente le labbra superiori e creare spazio per la mascella. Allinea le guide di montaggio presenti sulla testa con le scanalature sulla mascella, quindi inserisci con attenzione la mascella, spingendola verso il basso (caudalmente) all'interno della bocca, finché non si blocca e si adatta perfettamente. Fai attenzione a eventuali pizzicature del labbro interno durante questa procedura per evitare strappi. Infine, ruota il naso in avanti (rostralmente) e tira delicatamente il naso/la pelle in avanti per assicurarti che la linguetta di montaggio della mascella si incastri perfettamente nella propria tasca nella pelle del naso. L'applicazione di una piccola quantità di lubrificante a base di vaselina può facilitare l'installazione.

➤ RIMOZIONE DELLA MASCELLA

Ruota delicatamente il naso del modello all'indietro (caudalmente), tenendo le labbra superiori su entrambi i lati del naso, fino a quando la linguetta di montaggio della mascella si stacca dalla parte inferiore del naso. Il naso e le labbra rimarranno in una posizione invertita. Evita di spingere il naso verso il basso oltre il punto in cui la piastra di montaggio è esposta, per evitare danni al modello. Per rimuovere la mascella dalla testa, utilizza il pollice per afferrare la linguetta colorata e, con l'indice, aggancia la dietro un dente canino, tirandola verso l'alto (rostralmente) finché non risulta libera dalle due guide di montaggio. Essa dovrebbe liberarsi con una forza minima. Evita di mantenere il naso ruotato all'indietro per un periodo prolungato, poiché ciò potrebbe causare una deformazione della testa in gomma silconica.

CHIRURGIA DENTALE CANINA MODELLO BASE / CONFEZIONE

➤ INSTALLAZIONE MANDIBOLARE

Una piccola quantità di vaselina faciliterà l'installazione della mandibola. Allinea i due perni di montaggio in acciaio inossidabile ai corrispondenti fori presenti sul corpo della mandibola. Spingi, in direzione ventrale, la zona sovrastante l'osso ioide, facendo scivolare la mandibola sui due perni in direzione caudale finché non si blocca. Verifica che il supporto per la lingua sia comodamente posizionato all'interno della mandibola e che il silicone non sia intrappolato sotto di essa. Tira delicatamente in avanti la porzione distale del labbro inferiore (in direzione rostro) e solleva dorsalmente il labbro per posizionarlo sulla flangia di montaggio della mandibola. Per installare la lingua, individua i due supporti di montaggio in plastica situati nella sezione inferiore centrale della bocca e allineali con i corrispondenti fori posti alla base della lingua. Inserisci innanzitutto l'uncino posteriore e poi tira la lingua in avanti per fissarla sull'uncino anteriore..

➤ RIMOZIONE DELLA MANDIBOLA

Per prima cosa, rimuovere la lingua tirandola delicatamente verso l'alto e in avanti, in modo da staccarla dal perno anteriore in plastica, quindi ripetere l'operazione con il perno posteriore. La mandibola può essere rimossa senza estrarre la lingua, tuttavia la sostituzione del dentario inferiore risulta più semplice se eseguita in questo modo. Tirare la porzione distale del labbro inferiore in avanti e verso il basso (ventrale) per staccarla dalla flangia di montaggio della mandibola. Per rimuovere la mandibola, capovolgere la testa e afferrare il cranio mentre si sorregge il modello. Successivamente, afferrare la mandibola in direzione rostrale con pollice e indice, tirandola finché non si libera dai due perni di montaggio in acciaio inossidabile; potrebbe essere necessario un leggero movimento laterale. Tenere presente che un'eccessiva forza o coppia esercitata dal dentario inferiore sui perni in acciaio inossidabile potrebbe causare danni alla mandibola.

➤ INSTALLAZIONE DEL MORSETTO

Individuare l'inserto filettato all'estremità caudale della testa canina. Avvitare l'estremità del braccio regolabile nell'inserto filettato. L'altra estremità del braccio, il morsetto, può essere aperta e fissata a un tavolo o a un'altra superficie di lavoro sicura ruotando la manopola fino a chiuderla. Fissare il morsetto alla superficie di lavoro. Posizionare la testa spostando sia la testa sia il braccio regolabile. Una volta raggiunta la posizione desiderata, bloccare il braccio serrando la manopola centrale. In questo modo si blocca ogni movimento del braccio. Non serrarla eccessivamente, in quanto ciò potrebbe danneggiare il braccio.

Si prega di notare che il morsetto viene utilizzato per montare la testa in posizione orizzontale, e non in posizione verticale. Esso serve a mantenere ferma la Testa Dentale Canina durante le procedure odontoiatriche.

➤ FUNZIONI, STRUTTURA E PROCEDURE CHIRURGICHE

Le seguenti caratteristiche anatomiche sono riprodotte nel modello dentale canino:

- Testa dal peso accurato e dalla pelle flessibile
- Gengiva flessibile e strato mucoso alveolare
- Strato periostale
- Materiale osseo e scheletro modellato con precisione
- Denti individuali modellati accuratamente
- Legamento parodontale
- Lingua

Le seguenti procedure chirurgiche dentali possono essere dimostrate:

- Radiologia*
- Esplorazione del solco
- Blocco mentale superficiale, blocco mentale, blocco mandibolare, blocco mascellare e blocco infraorbitario
- Lembo gengivale: incisione, elevazione e sutura
- Elevazione del periostio e incisione di rilascio periostale
- Rimozione/ablazione ossea
- Lussazione, elevazione ed estrazione di qualsiasi dente
- Intubazione orolaringea

* Il set mandibolare per estrazioni non è destinato alla pratica delle tecniche radiografiche. La qualità delle immagini radiografiche varrà a seconda del dispositivo utilizzato. Per ottenere immagini radiografiche di alta qualità, è necessario utilizzare il set mandibolare DEDICATO esclusivamente alla radiografia (1025651). Il set mandibolare per radiografia (1025651) non è incluso nel modello chirurgico, ma può essere acquistato separatamente.

➤ PARTE DI RICAMBIO

Braccio morsetto canino	1025637
Lingua dentale canina	1025647
Mandibola chirurgica canina	1025645
Mascella chirurgica canina	1025646
Componente dentale laringofaringeo canino	1025641
Testa canina, nera	1025639
Testa canina, marrone	1025640

CHIRURGIA DENTALE CANINA MODELLO BASE / CONFEZIONE

> INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com