



KUTYA DENTÁLIS TECHNIKUSI ALAP MODELL / CSOMAG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1025649, 1026126, 1025652, 1026127


KUTYA DENTÁLIS TECHNIKUSI ALAP MODELL / CSOMAG

> KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS


Kutya dentális technikus (1025649, 1026126)

Összetevők:

- Kutyafej, elérhető barna és fekete színváltozatban
- Skálázó állkészlet
- Röntgensugaras állkészlet
- Eltávolítható nyelv
- 30 ml es üveg mesterséges fogkövel
- Állítható záróbilincs-szerkezet

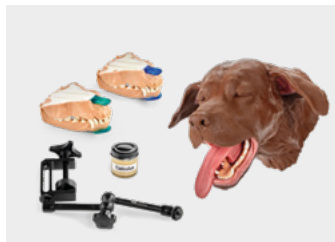

1025649

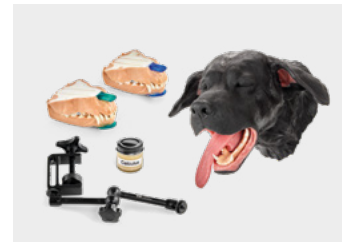


1026126

Kutya dentális technikus Csomag (1025652, 1026127)

Összetevők:

- Kutyafej, elérhető barna és fekete színváltozatban
- Skálázó állkészlet x2
- Röntgensugaras állkészlet
- Átlátszó állkészlet
- Eltávolítható nyelv
- 30 ml es üveg mesterséges fogkövel
- Állítható záróbilincs-szerkezet
- Hordtáska

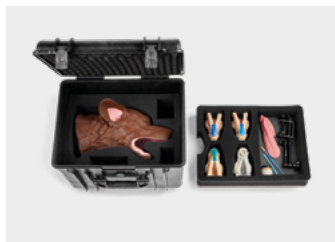

1025652



1026127

> TISZTÍTÁS

A kutya dentális technikus modell esetében a puha bőr enyhén olajos tapintású lehet, ami a puha szilikonok esetén normális jelenség. Minden alkatrészt – mind a kemény, mind a puha részeket – rendszeresen, enyhe mosószeres meleg vízzel kell tisztítani. Soha ne alkalmazzon erős vegyszereket vagy tisztítószereket, mivel a belső puha elemeket könnyen károsíthatja a durva bánásmód.

> ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

Időnként ellenőrizze az egységet a sérült alkatrészek után. Amennyiben bármelyik puha komponens megsérül, azt bármilyen akvárium minőségű, lehetőleg átlátszó szilikon ragasztóval javíthatja. Ha pedig a javítás nem lehetséges, megfelelő pótalkatrészek állnak rendelkezésére.

A kutya dentális technikus modell megfelelően összeszerelve érkezik. Javasolt megfigyelni az összes alkatrész tájolását és elhelyezkedését, hogy jobban megismerje őket, és elősegítse a fogyóeszközök vagy sérült komponensek szakszerű cseréjét. A modell fej komponensét roppant élethűre tervezeték és gyártották, valósághű visszajelzéssel. Ezek a jellemzők viszonylag érzékennyé teszik a bőrhöz hasonló felületet, ezért annak kezelése és tárolása során fokozott óvatosság szükséges a sérülések megelőzése érdekében.

> MAXILLA BEHELYEZÉSE

Fogja meg a modell orrának felső ajkait mindkét oldalon, és óvatosan hajtsa hátra az orrot (kaudálisan), amíg a száj belsejében meg nem jelennek a maxilla rögzítő felülete és sínjei. Használja a hüvelykujját és a mutatóujját az orr felső ajkainak enyhe szétválasztására, hogy elegendő helyet biztosítson a maxilla számára. Illessze össze a fej rögzítő sínjeit a maxilla lyukaihoz, majd óvatosan csúsztassa be a maxillát a helyére azáltal, hogy lefelé tolja (kaudálisan) a szájba, amíg az meg nem áll és szorosan illeszkedik. Ügyeljen arra, hogy a folyamat során a belső ajkak ne csípje össze, elkerülve ezáltal a szakadásokat. Végül fordítsa előre az orrot (rosztrálisan), és finoman húzza előre az orr/bőrt, hogy a felső állkapocs rögzítő fülek szorosan illeszkedjenek az orrbőrben kialakított zsebbe. Egy kevés vazelin alkalmazása elősegíti a telepítés sima menetét.

> MAXILLA ELTÁVOLÍTÁSA

Finoman tekerje vissza a modell orrát (kaudálisan) úgy, hogy mindkét oldalon a felső ajkak megfogva tartja, amíg a maxilla rögzítő füle el nem válik az orr alsó részétől. Az orr és az ajkak fordított helyzetben maradnak. Kerülje, hogy az orrot lefelé nyomja azon a ponton túl, ahol a rögzítőlemez láthatóvá válik, ezzel elkerülve a modell károsodását. A maxilla fejről történő eltávolításához tartsa a színes fület hüvelykujjával, és mutatóujjával kapaszkodjon be egy szemfog mögötti részbe, majd húzza felfelé (rosztrálisan), amíg teljesen le nem válik a két rögzítő sínről – ehhez csupán minimális erő szükséges. Kerülje, hogy az orr hosszabb ideig hátratekert helyzetben maradjon, mivel ez a szilikon gumi fej deformálódásához vezethet.

KUTYA DENTÁLIS TECHNIKUSI ALAP MODELL / CSOMAG

➤ MANDIBULA BEHELYEZÉSE

Egy kis mennyiségű vazelin megkönnyíti az alsó állkapocs felszerelését. Illessze össze a két rozsdamentes acél rögzítő tűt a mandibula megfelelő lyukaival. Nyomja felfelé a supra hyoid ventrális részét, miközben az alsó állkapcsot a két tű mentén kaudális irányban csúsztatja, amíg meg nem áll. Ellenőrizze, hogy a nyelv rögzítő kényelmesen elhelyezkedik a mandibula belsejében, és hogy nem ragadt-e alá szilikon. Finoman húzza előre (rosztrális irányban) és dorzálisan az alsó ajak távoli részét, hogy az illeszkedjen a mandibula rögzítő karimájára. A nyelv felszereléséhez keresse meg a száj középső alsó részében elhelyezkedő két műanyag rögzítő oszlopot, és igazítsa őket a nyelv alján lévő megfelelő lyukakhoz. Először csatolja be a hátsó kampót, majd húzza előre a nyelvet, hogy az az elülső kampó felett rögzüljön.

➤ MANDIBULA ELTÁVOLÍTÁSA

Először távolítsa el a nyelvet úgy, hogy óvatosan felfelé és előre felé húzza, ezzel kiszabadítva azt az elülső műanyag rögzítőoszlopról, majd ismételje meg ugyanezt a hátsó oszloppal. Bár az alsó állkapocs a nyelv nélkül is eltávolítható, cseréje egyszerűbb a nyelv előzetes eltávolításával. Húzza az alsó ajak távoli részét előre felé és lefelé (ventrális irányban), hogy kiszabaduljon az állkapocs rögzítő sarkantyújából. Az állkapocs eltávolításához fordítsa meg a fejet, és tartsa meg a koponyát, miközben a modellt óvatosan tartja. Ezután a hüvelykujja és a mutatóujja segítségével rosztális irányban fogva húzza az állkapcsot, amíg el nem válik a két rozsdamentes acél rögzítő tűtől. Előfordulhat, hogy némi óvatos oldalirányú mozgás is szükséges. Ügyeljen arra, hogy az állkapocs túlzott erővel vagy forgatónyomatékkal történő mozgatása károsíthatja azt.

➤ A SZORÍTÓ TELEPÍTÉSE

Keresse meg a menetes betétet a kutya fejének hátsó részén. Csavarja be az állítható kar végét a menetes betétbe. Az állítható kar másik végén található szorító kinyitható, és asztalhoz vagy más biztonságos munkafelülethez rögzíthető úgy, hogy a gomb elforgatásával lezárja. Rögzítse a szorítót a munkafelületen. Mozgassa a fejet és az állítható kart a kívánt pozíció eléréséhez. Amint a fej a megfelelő helyzetbe került, zárja le a kart a központi gomb meghúzásával, ezzel teljesen rögzítve annak mozgását. Ne húzza túl erősen, mert ez károsíthatja a kart.

➤ MESTERSÉGES FOGKŐ INFORMÁCIÓ

- Összetevők: Fogászati kő, aceton, Intro Cure 20 Clear (poliuretán bevonat).
- Kerülje a por belélegzését (porszedési és egyéb eljárások során maszk viselése javasolt), és amennyiben a por szemmel vagy bőrral érintkezik, haladéktalanul öblítse ki.
- A tartalom gyúlékony; tartsa távol a hőtől és a nyílt lángtól.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bilincs a fej vízszintes, nem pedig függőleges helyzetű rögzítésére szolgál. Arra szolgál, hogy a fejet a fogászati eljárások során mozdulatlanul tartsa.

➤ FUNKCIÓK, SZERKEZET ÉS ELJÁRÁSOK

A következő anatómiai jellemzők láthatók a kutya dentális modellen:

- Fej, pontos súlyeloszlással és rugalmas bőrral
- Rugalmas íny és alveoláris nyálkahártya réteg
- Perioszteális réteg
- Csontanyag, élethűen kialakított váz
- Egyedi, valósághű formájú fogak
- Parodontális ín
- Nyelv

A következő fogászati beavatkozások demonstrálhatók:

- Kézi és ultrahangos skálázás
- Parodontális vizsgálat és helyi érzéstelenítés alkalmazása
- Radiológiai vizsgálat*
- Intubációs oktatás

* Valósághű képalkotási gyakorlat érdekében használja radiológiai kutya állkapocs készletet.

KUTYA DENTÁLIS TECHNIKUSI ALAP MODELL / CSOMAG

> CSEREALKATRÉSZ

Canin rögzítőkar	1025637
Canin fogászati nyelv	1025647
Canin röntgen állkészlet	1025651
Canin 30 ml mesterséges fogkő	1025650
Canin fogászati laringofaringeális komponens	1025641
Canin szkálázás/polírozás - alsó állkapocs	1025642
Canin szkálázás/polírozás - felső állkapocs	1025643
Canin fej, barna	1025640
Canin fej, fekete	1025639

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific Europe Kft.

Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary

Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93

3bscientific.hu • eu3bs@3bscientific.com