



MODELLO BASE PER TECNICO DENTALE CANINO / CONFEZIONE

MANUALE D'USO

1025649, 1026126, 1025652, 1026127


MODELLO BASE PER TECNICO DENTALE CANINO / CONFEZIONE

➤ CURA, MANIPOLAZIONE E MANUTENZIONE


Modello base per tecnico dentale canino (1025649, 1026126)

Componenti:

- Testa canina, disponibile in marrone e nero
- Set per la detartrasi della mascella
- Set per la radiografia della mascella
- Lingua rimovibile
- Barattolo da 30 ml di tartaro artificiale
- Assemblaggio del morsetto regolabile

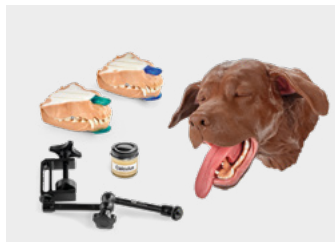

1025649

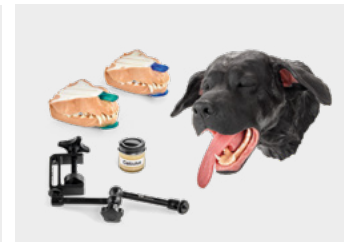


1026126

Pacchetto per cura dentale canina simulata (1025652, 1026127)

Componenti:

- Testa canina, disponibile in marrone e nero
- Set per la detartrasi della mascella x2
- Set per la radiografia della mascella
- Set per la mascella trasparente
- Lingua rimovibile
- Barattolo da 30 ml di tartaro artificiale
- Assemblaggio del morsetto regolabile
- Custodia

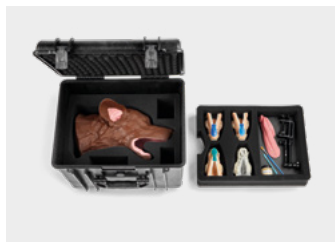

1025652



1026127

➤ PULIZIA

La pelle morbida del modello tecnico dentale canino potrebbe apparire leggermente untuosa, ma ciò è normale per i siliconi morbidi. Tutti i componenti — sia rigidi che flessibili — devono essere puliti periodicamente con un detergente delicato e acqua tiepida. Non utilizzare mai sostanze chimiche aggressive o detergenti. Tutti i componenti interni in materiale morbido possono subire danni a seguito di una manipolazione brusca.

➤ MANUTENZIONE GENERALE

Ispeziona periodicamente l'unità per individuare eventuali componenti danneggiati. Se uno dei componenti morbidi si deteriora, può essere riparato utilizzando un adesivo in silicone di qualità per acquari (preferibilmente trasparente). In caso contrario, sono disponibili le sostituzioni.

Il modello del tecnico dentale canino viene fornito completamente assemblato. Si consiglia di osservare l'orientamento e la posizione di tutti i componenti per familiarizzare con il loro funzionamento e agevolare la corretta sostituzione dei pezzi consumabili o danneggiati. Il componente testa del modello è stato progettato e realizzato per offrire un aspetto e una risposta altamente fedeli; tali caratteristiche conferiscono alla pelle una natura relativamente delicata, richiedendo particolare attenzione nella manipolazione e nella conservazione per evitare danni.

➤ INSTALLAZIONE DELLA MASCELLA

Mantieni le labbra superiori del naso del modello ferme su entrambi i lati e fai rotolare delicatamente il naso all'indietro (caudalmente) fino a far apparire la superficie di montaggio e i binari della mascella all'interno della bocca. Usa il pollice e l'indice per separare delicatamente le labbra superiori e creare spazio per la mascella. Allinea i binari di montaggio presenti sulla testa con le scanalature della mascella, quindi fai scivolare la mascella al suo posto, spingendola verso il basso nella bocca (caudalmente) finché non si blocchi e aderisca perfettamente. Presta attenzione a non pizzicare la labbra interna durante questa operazione per evitare strappi. Infine, fai rotolare il naso in avanti (rostralmente) e tira delicatamente il naso/la pelle in avanti per assicurarti che la linguetta di montaggio della mascella si adatti perfettamente alla sua tasca presente nella pelle del naso. L'applicazione di una piccola quantità di lubrificante a base di vaselina può rendere l'installazione più fluida.

➤ RIMOZIONE DELLA MASCELLA

Inclina delicatamente il naso del modello all'indietro (caudale), mantenendo le labbra superiori su entrambi i lati del naso, finché la linguetta di montaggio della mascella non si stacca dalla parte inferiore del naso. Il naso e le labbra rimarranno capovolti. Evita di spingere il naso verso il basso oltre il punto in cui la piastra di montaggio diventa visibile, al fine di prevenire danni al modello. Per rimuovere la mascella dalla testa, tieni la linguetta colorata con il pollice e, con l'indice, aggancia la dietro un dente canino, tirandola verso l'alto (rostrale) finché non si libera dalle due guide di montaggio. Dovrebbe staccarsi applicando una forza minima. Evita di mantenere il naso inclinato all'indietro per un periodo prolungato, poiché ciò potrebbe provocare la deformazione della testa in gomma di silicone.

MODELLO BASE PER TECNICO DENTALE CANINO / CONFEZIONE

➤ INSTALLAZIONE DELLA MANDIBOLA

Una piccola quantità di vaselina faciliterà l'installazione della mandibola. Allinea i due perni di fissaggio in acciaio inossidabile con i rispettivi fori presenti nella mandibola. Spingi verso l'alto, in direzione ventrale, la zona sovrastante l'osso ioide, facendo scorrere la mandibola sui due perni in direzione caudale finché non si ferma. Verifica che il supporto per la lingua sia posizionato in modo ottimale all'interno della mandibola e che il silicone non rimanga intrappolato sotto di essa. Tira delicatamente la porzione distale del labbro inferiore in avanti (in direzione rostrale) e leggermente dorsalmente, in modo da posizionarlo correttamente sulla flangia di montaggio della mandibola. Per installare la lingua, individua i due perni di fissaggio in plastica situati nella sezione centrale inferiore della bocca e allineali con i fori corrispondenti alla base della lingua. Inserisci innanzitutto il gancio posteriore, per poi tirare la lingua in avanti e fissarla al gancio anteriore.

➤ RIMOZIONE DELLA MANDIBOLA

Innanzitutto, rimuovere la lingua tirandola delicatamente verso l'alto/avanti per liberarla dal perno di montaggio in plastica anteriore, quindi ripetere l'operazione con il perno posteriore. La mandibola può essere rimossa senza asportare la lingua, ma la sostituzione della mandibola inferiore risulta semplificata se la lingua viene rimossa. Tirare la porzione distale del labbro inferiore in direzione anteriore/inferiore (ventrale) per liberarlo dalla flangia di montaggio della mandibola. Per rimuovere la mandibola, capovolgere la testa e afferrare il cranio, sostenendo al contempo il modello. Successivamente, la mandibola può essere rimossa afferrandola in direzione rostrale con pollice e indice e tirandola finché non si libera dai due perni di montaggio in acciaio inossidabile. Potrebbe essere necessario eseguire un leggero movimento laterale. Si ricorda che un'eccessiva forza o torsione della mandibola sui perni metallici potrebbe causarne il danneggiamento.

➤ INSTALLAZIONE DEL MORSETTO

Individua l'inserto filettato all'estremità caudale della testa del cane. Avvita l'estremità del braccio regolabile nell'inserto filettato. L'altra estremità del braccio, dotata di morsettimana, può essere aperta e fissata a un tavolo o a un'altra postazione di lavoro sicura ruotando la manopola fino a chiuderla.

Fissa la morsettimana alla superficie di lavoro. Posiziona la testa regolando la posizione della stessa e del braccio regolabile. Una volta raggiunta la posizione desiderata, blocca il braccio serrando la manopola centrale, impedendone ogni movimento. Non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare il braccio.

➤ INFORMAZIONI SUL CALCOLO ARTIFICIALE

- Ingredienti: Dental Stone, Acetone, Intro Cure 20 Clear (rivestimento in poliuretano).
- Evitare l'inalazione della polvere (utilizzare una maschera durante le operazioni di scalatura e altre procedure) e sciacquare immediatamente in caso di contatto con occhi o pelle.
- Il contenuto è infiammabile; conservare lontano da fonti di calore e fiamme.
- Si noti che il morsetto viene utilizzato per montare la testina in posizione orizzontale e non verticale. Serve a mantenere ferma la testina durante le procedure odontoiatriche.

➤ FUNZIONI, STRUTTURA E PROCEDURE

Le seguenti caratteristiche anatomiche sono rappresentate nel modello dentale canino:

- Testa dal peso accurato e dalla pelle flessibile
- Gengiva flessibile e strato mucoso alveolare
- Strato periostale
- Materiale osseo e scheletro modellati con precisione
- Denti individuali, accuratamente modellati
- Legamento parodontale
- Lingua

Le seguenti procedure dentali possono essere dimostrate:

- Detartrasi manuale e ad ultrasuoni
- Sondeggiamento parodontale e somministrazione di anestesia locale
- Radiologia*
- Addestramento all'intubazione

* Utilizzare il set mandibolare per raggi per una pratica realistica di imaging.

MODELLO BASE PER TECNICO DENTALE CANINO / CONFEZIONE

> PARTE DI RICAMBIO

Braccio a morsetto canino	1025637
Lingua dentale canina	1025647
Set per raggi X della mandibola canina	1025651
Tartaro artificiale canino 30 ml	1025650
Componente laringofaringeo dentale canino	1025641
Detartrasi/lucidatura canina - mandibola	1025642
Detartrasi/lucidatura canina - mascella	1025643
Testa canina, marrone	1025640
Testa canina, nera	1025639

> INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Italia 3B Scientific S.r.l.

Via Progresso, 46

40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia

Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98

3bscientific.it • vendite.italia@3bscientific.com