



MODELO BASE PARA TÉCNICO DENTAL CANINO / PACOTE

MANUAL DO USUÁRIO

1025649, 1026126, 1025652, 1026127


MODELO BASE PARA TÉCNICO DENTAL CANINO / PACOTE

> CUIDADOS, MANUSEIO E MANUTENÇÃO


Modelo Base para Técnico Odontológico Canino (1025649, 1026126)

Componentes:

- Cabeça canina, disponível nas cores marrom e preto
- Conjunto mandibular para profilaxia
- Conjunto mandibular para raio-X
- Língua removível
- Frasco de 30 ml de tártaro artificial
- Conjunto de braçadeira ajustável

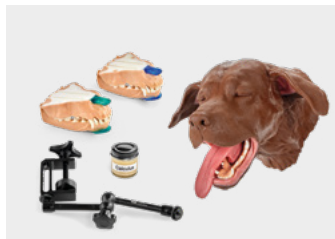

1025649

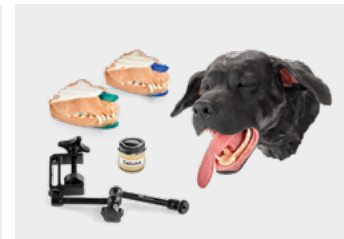


1026126

Pacote Técnico em Odontologia Canina (1025652, 1026127)

Componentes:

- Cabeça canina, disponível nas cores marrom e preto
- Conjunto mandibular para profilaxia x2
- Conjunto mandibular para raio-X
- Conjunto mandibular transparente
- Língua removível
- Frasco de 30 ml de tártaro artificial
- Conjunto de braçadeira ajustável
- Estojo de transporte

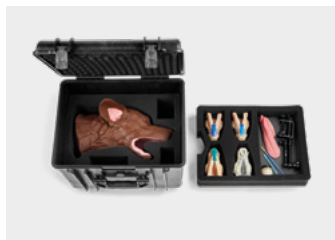

1025652



1026127

> LIMPEZA

A pele macia do modelo de técnico dental canino pode parecer um pouco oleosa, mas isso é normal para silicones macios. Todos os componentes – tanto os rígidos quanto os macios – devem ser periodicamente limpos com detergente neutro e água morna. NUNCA utilize produtos químicos agressivos ou limpadores. Todos os componentes internos macios podem ser danificados por manuseio brusco.

> MANUTENÇÃO GERAL

Periodicamente, inspecione a unidade para identificar componentes danificados. Caso algum dos componentes flexíveis apresente danos, eles poderão ser reparados com qualquer adesivo de silicone grau aquário (de preferência transparente). Se o reparo não for possível, substituições estão disponíveis.

O modelo de técnico dentário canino vem devidamente montado. É recomendável observar a orientação e a posição de todos os componentes para se familiarizar com eles e facilitar a correta substituição de peças consumíveis ou danificadas. O componente da cabeça do modelo foi projetado e fabricado com elevada fidelidade na aparência e na resposta. Essas características conferem à pele uma natureza relativamente delicada, exigindo cuidados no manuseio e no armazenamento para evitar danos.

> INSTALAÇÃO DA MAXILA

Segure os lábios superiores do nariz do modelo em ambos os lados e role suavemente o nariz para trás (caudalmente) até que se possa visualizar a superfície de montagem e os trilhos da maxila no interior da boca. Utilize o polegar e o dedo indicador para separar delicadamente os lábios superiores, criando espaço para a maxila. Alinhe os trilhos de montagem na cabeça com as ranhuras na maxila e deslize-a cuidadosamente até a posição correta, empurrando-a para baixo na boca (caudalmente) até que pare e se ajuste de forma firme. Tenha cuidado para evitar que a parte interna do lábio seja comprimida durante o processo, prevenindo possíveis rasgos. Por fim, role o nariz para a frente (rostralmente) e puxe suavemente o nariz/pele para garantir que a aba de montagem da maxila se encaixe perfeitamente em seu compartimento na pele do nariz. A aplicação de uma pequena quantidade de lubrificante à base de vaselina pode facilitar a instalação.

> REMOÇÃO DA MAXILA

Role suavemente o nariz do modelo para trás (caudalmente), segurando os lábios superiores em ambos os lados do nariz, até que a aba de montagem da maxila se libere da parte inferior do nariz. O nariz e os lábios permanecerão em posição invertida. Evite empurrar o nariz para baixo além do ponto em que a placa de montagem fique exposta, para prevenir danos ao modelo. Para remover a maxila da cabeça, use o polegar para segurar a aba colorida e, com o dedo indicador, enganche atrás de um canino, puxando-a em direção ascendente (rostral) até que se desengate dos dois trilhos de montagem. Ela deverá se soltar dos trilhos de montagem com força mínima. Evite deixar o nariz recolhido para trás por um período prolongado, pois isso pode causar deformação da cabeça de borracha de silicone.

MODELO BASE PARA TÉCNICO DENTAL CANINO / PACOTE

➤ INSTALAÇÃO DA MANDÍBULA

Uma pequena quantidade de vaselina facilitará a instalação da mandíbula. Alinhe os dois pinos de montagem em aço inoxidável com os respectivos orifícios na mandíbula. Empurre a região supra-hipoide para cima e ventralmente enquanto desliza a mandíbula sobre os dois pinos, em direção caudal, até que ela pare. Verifique se o suporte da língua está acomodado de forma confortável dentro da mandíbula e se o silicone não se encontra preso sob ela. Puxe suavemente a porção distal do lábio inferior para frente (na direção rostral) e para o dorso, de modo a encaixar o lábio inferior na aba de montagem da mandíbula. Para instalar a língua, localize os dois pinos de montagem plásticos na seção inferior central da cavidade bucal e alinhe-os com os respectivos orifícios na base da língua. Prenda primeiro o gancho traseiro e, em seguida, puxe a língua para frente, fixando-a sobre o gancho dianteiro.

➤ REMOÇÃO DA MANDÍBULA

Primeiro, retire a língua puxando-a suavemente para cima e para a frente, de modo a soltá-la do pino de montagem plástico frontal; em seguida, repita o procedimento com o pino de trás. A mandíbula pode ser removida sem retirar a língua, porém a recolocação da mandíbula inferior se torna mais simples caso a língua seja retirada. Puxe a porção distal do lábio inferior para a frente e para baixo (ventral) para soltá-lo da flange de montagem da mandíbula. Para remover a mandíbula, inverta a cabeça e segure o crânio enquanto mantém o modelo. Em seguida, a mandíbula pode ser retirada ao segurá-la numa direção rostral com o polegar e o indicador, puxando-a até que se solte dos dois pinos de montagem em aço inoxidável. Pode ser necessário um movimento suave de um lado para o outro. Atenção: o uso excessivo de força ou torque na mandíbula sobre os pinos metálicos pode danificá-la.

➤ INSTALAÇÃO DO GRAMPO

Localize o inserto roscado na extremidade caudal da cabeça canina. Rosqueie a extremidade do braço ajustável no inserto roscado. A outra extremidade do braço, a braçadeira, pode ser aberta e fixada a uma mesa ou outra superfície de trabalho segura ao girar o botão para fechá-la. Fixe a braçadeira à superfície de trabalho. Posicione a cabeça movimentando tanto a própria cabeça quanto o braço ajustável. Assim que estiver na posição desejada, bloqueie o braço apertando o botão central. Isso impede qualquer movimento do braço. Não aperte excessivamente, pois isso pode danificar o braço.

➤ INFORMAÇÕES SOBRE O CÁLCULO ARTIFICIAL

- Ingredientes: Pedra dental, acetona, Intro Cure 20 Clear (revestimento de poliuretano).
- Evite inalar a poeira (use máscara ao realizar a raspagem e outros procedimentos) e enxágue imediatamente em caso de contato com os olhos ou com a pele.
- Conteúdo inflamável; mantenha-o afastado de calor e chamas.
- Tenha em atenção que o grampo é utilizado para montar a cabeça numa posição horizontal e não vertical. Serve para manter a cabeça fixa durante os procedimentos dentários.

➤ FUNÇÕES, ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS

As seguintes características anatômicas estão representadas no modelo dental canino:

- Cabeça com peso preciso e pele flexível
- Gengiva flexível e camada de mucosa alveolar
- Camada periosteal
- Material ósseo, esqueleto modelado com precisão
- Dentes individuais, moldados com precisão
- Ligamento periodontal
- Língua

Os seguintes procedimentos odontológicos podem ser demonstrados:

- Raspagem manual e ultrassônica
- Sondagem periodontal e administração de anestesia local
- Radiologia*
- Treinamento de intubação

* Utilize o conjunto mandibular para radiografia para uma prática realista de imagens.

MODELO BASE PARA TÉCNICO DENTAL CANINO / PACOTE

> PEÇA DE REPOSIÇÃO

Braço de Grampo Canino	1025637
Língua Dentária Canina	1025647
Conjunto de Mandíbula para Raio-X Canino	1025651
Cálculo Artificial Canino 30ml	1025650
Componente Laringofaríngeo Dentário Canino	1025641
Raspagem/Polimento Canino - Mandíbula	1025642
Raspagem/Polimento Canino - Maxila	1025643
Cabeça Canina, Marrom	1025640
Cabeça Canina, Preta	1025639

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



3B Scientific

A worldwide group of companies

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com