



KÖPEK DİŞ CERRAHİSİ - TEMEL MODEL / PAKET

KULLANIM KILAVUZU

1025649, 1026126, 1025652, 1026127


KÖPEK DİŞ CERRAHİSİ - TEMEL MODEL / PAKET

> BAKIM, KULLANIM VE MUHAFAZA


Köpek Diş Cerrahisi Temel Modeli (1025649, 1026126)

Parçalar:

- Kahverengi ve siyah seçenekleriyle sunulan köpek kafası
- Ölçekleme çene seti
- Röntgen çene seti
- Çıkarılabilir dil
- 30 ml'lik yapay diş taşı kavanozu
- Ayarlanabilir kelepçe montajı

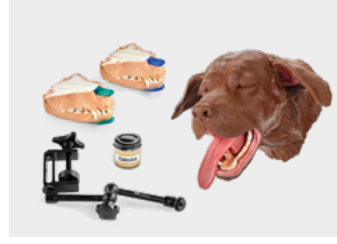

1025649

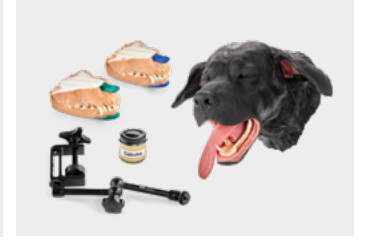

1026126

Köpek Diş Cerrahisi Paket (1025652, 1026127)

Parçalar:

- Kahverengi ve siyah seçenekleriyle sunulan köpek kafası
- 2 adet ölçekleme çene seti
- Röntgen çene seti
- Şeffaf çene seti
- Çıkarılabilir dil
- 30 ml'lik yapay diş taşı kavanozu
- Ayarlanabilir kelepçe montajı
- Taşıma çantası



1025652



1026127

> TEMİZLİK

Yumuşak silikonlardan üretilen köpek diş cerrahisi modelinin yumuşak derisi hafifçe yağlı hissedilebilir, ancak bu durum yumuşak silikonlar için normaldir. Tüm bileşenler — hem sert hem yumuşak olanlar — periyodik olarak hafif bir deterjan ve ılık suyla temizlenmelidir. Asla güçlü kimyasallar veya temizleyiciler kullanılmamalıdır. Tüm iç yumuşak bileşenler, kaba muamele sonucunda zarar görebilir.

> GENEL BAKIM

Birimdeki hasarlı bileşenleri düzenli olarak kontrol edin. Yumuşak bileşenlerden herhangi biri zarar görürse, tercihen şeffaf akvaryum sınıfı silikon yapıştırıcı kullanılarak onarılabilir. Onarılamayan parçalar için yedekler temin edilebilir.

Köpek diş cerrahisi modeli, özenle monte edilmiş olarak gelir. Tüm bileşenlerin yönelim ve konumlarını gözlemleyerek onlarla tanışmanız, tüketilebilir veya hasar gören parçaların doğru şekilde değiştirilmesini kolaylaştırır. Modelin kafa bileşeni, yüksek sadakatli görünüm ve tepki özellikleriyle tasarlanıp üretilmiştir. Bu özellikler, deriye nispeten hassas bir yapı kazandırdığından, taşıma ve saklama sırasında dikkatle özen gösterilmelidir.

> ÜST ÇENE YERLEŞTİRME

Modelin burnunun üst dudaklarını her iki tarafından tutarak, nazıkçe burnu geriye (kaudal yönde) yuvarlayın; ağzın içinde, üst çeneye ait montaj yüzeyi ve raylar görünene kadar devam edin. Başparmağınız ve işaret parmağınızla, üst çeneye yer açmak amacıyla üst dudakları hassas bir şekilde ayırın. Baş üzerindeki montaj raylarını, üst çenedeki yuvalarla hizalayın ve üst çeneyi, yerine tam oturana kadar ağız içine (kaudal yönde) aşağıya doğru iterek dikkatlice kaydırın. Bu işlem sırasında iç dudağın sıkışmasına dikkat edin; yırtılmayı önlemek için özen gösterin. Son olarak, burnu öne (rostral yönde) yuvarlayın ve üst çene montaj çıkıntısının burun derisindeki cebine tam oturduğundan emin olmak için burnu/deriyi nazıkçe öne çekin. Montajın daha pürüzsüz gerçekleşmesi için az miktarda petrol jölesi yağlayıcı uygulayabilirsiniz.

> ÜST ÇENE ÇIKARILMASI

Modelin burnunu, burun her iki tarafından üst dudakları tutarak, üst çenenin montaj sekmesinin burnun altından serbest kalmasına kadar nazıkçe geriye (kaudal) yuvarlayın. Burun ve dudaklar iç-dış pozisyonunda kalacaktır. Montaj plakasının açığa çıktığı noktayı aşıttıktan sonra burnu aşağı doğru itmekten kaçınınız, böylece model zarar görmesin. Üst çeneyi baş kısmından çıkarmak için, renkli sekmeyi tutmak üzere başparmağınızı kullanın ve işaret parmağınızla kedi dişinin arkasına kanca yaparak, iki montaj rayından ayrılanaya kadar onu yukarıya (rostral) doğru çekin. Bu işlem, montaj raylarından minimal kuvvetle ayrılmasını sağlamalıdır. Burnun uzun süre geriye yuvarlanmış halde bırakılmasından kaçınınız, aksi takdirde silikon kauçuk baş deformasyona uğrayabilir.

KÖPEK DİŞ CERRAHİSİ - TEMEL MODEL / PAKET

> ALT ÇENE KURULUMU

Küçük miktarda vazelin, alt çenenin yerleştirilmesini kolaylaştırır. İki paslanmaz çelik montaj pimini, alt çenenin karşılık gelen delikleriyle hizalayın. Alt çeneyi, durana kadar kaudal yönde iki pime kaydırırken, supra hyoid'in ventral kısmına yukarı doğru itme yapın. Dil montajının alt çene içerisinde rahatça oturduğundan ve silikonun alt çene altında sıkışmadığından emin olun. Alt dudağın distal kısmını nazikçe öne (rostral yönde) ve dorsal yönde çekerek, alt dudağı alt çene montaj flanşına yerleştirin. Dili yerleştirmek için, ağzın orta alt bölümündeki iki plastik montaj direğini bulun ve bunları dilin tabanındaki karşılık gelen deliklerle hizalayın. Önce arka kancayı takın, ardından dili öne çekerek öndeki kancanın üzerinden sabitleyin.

> ALT ÇENENİN ÇIKARILMASI

İlk olarak, dilin ön plastik montaj direğinden serbest kalması için onu nazikçe yukarı/öne doğru çekip çıkarın, ardından aynı işlemi arka direklerle tekrarlayın. Çene, dil çıkarılmadan da alınabilir; ancak alt çenenin değiştirilmesi, dilin çıkarılmasıyla daha da kolaylaşır. Alt dudak ucunu öne/aşağı (ventral) doğru çekerek çene montaj flanşından serbest bırakın. Çeneyi çıkarmak için başı ters çevirip modeli desteklerken kafatasını kavrayın. Çene, başparmağınız ve işaret parmağınızla rostral yönde tutularak, iki paslanmaz çelik montaj piminden kurtulana kadar çekilerek çıkarılabilir. Biraz nazik yanlara doğru hareket gerekebilir. Aşırı kuvvet uygulamanın veya çenenin metal pimplere uyguladığı torkun çeneye zarar verebileceğini unutmayın.

> KELEPÇE KURULUMU

Köpek kafasının kaudal ucunda yer alan dişli ek parçayı bulun. Ayarlanabilir kolun ucunu dişli ek parçaya vidalayın. Kolun diğer ucunda bulunan kelepçe, düğmeyi kapalı konuma getirerek açılır ve bir masa veya benzeri güvenli bir çalışma alanına sabitlenebilir. Kelepçeyi çalışma yüzeyine sabitleyin. Baş ve ayarlanabilir kolu hareket ettirerek başı konumlandırın. İstenen konuma ulaştıktan sonra, orta düğmeyi sıkıştırarak kolu kilitleyin. Bu, kolun tüm hareketlerini kilitler. Kolu zarar verebileceğinden aşırı sıkmayın.

> YAPAY DİŞ TAŞI BİLGİSİ

- İçindekiler: Diş Taşı, Aseton, Intro Cure 20 Şeffaf (poliüretan kaplama).
- Toz solumaktan kaçının (ölçekleme ve diğer işlemler sırasında maske kullanın) ve göz veya ciltle temas ederse derhal durulayın.
- İçeriği yanıcıdır; ısı ve alevden uzak tutun.
- Lütfen kelepçenin başlığının dikey değil yatay konumda monte etmek için kullanıldığını unutmayın. Dental prosedürler sırasında kafayı sabit tutmaya yarar.

> FONKSİYONLAR, YAPI VE PROSEDÜRLER

Köpek diş modelinde aşağıdaki anatomik özellikler temsil edilmiştir:

- Gerçek ağırlığa sahip baş ve esnek deri
- Esnek dişeti ve alveolar mukozal tabaka
- Periostal tabaka
- Doğru şekilde şekillenmiş kemik materyali ve iskelet
- Bireysel, doğru şekilde şekillenmiş dişler
- Periodontal ligament
- Dil

Aşağıdaki diş işlemleri uygulanabilir:

- Manuel ve ultrasonik tartım
- Periodontal sondaj ve lokal anestezi uygulaması
- Radyoloji*
- Entübasyon eğitimi

* Gerçekçi görüntüleme uygulaması için X-ışını çene seti kullanınız.

KÖPEK DİŞ CERRAHİSİ - TEMEL MODEL / PAKET

> YEDEK PARÇA

Köpek Kelepçe Kolu	1025637
Köpek Diş Dili	1025647
Köpek Röntgen Çene Seti	1025651
Köpek 30 ml Yapay Tartar	1025650
Köpek Diş Larenjofarenks Bileşeni	1025641
Köpek Diş Taşı Temizleme/Parlatma – Alt Çene	1025642
Köpek Diş Taşı Temizleme/Parlatma – Üst Çene	1025643
Köpek Baş, Kahverengi	1025640
Köpek Baş, Siyah	1025639

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36)

Esenler • İstanbul • Türkiye

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801

3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com