



ÖTENAZİ EĞİTİMİ SİMÜLATÖRLERİ

KULLANIM KILAVUZU

1025549, 1025553, 1025556, 1025559, 1025562,
1025564 1025653, 1025655, 1025657, 1025659, 1025661

ÖTENAZİ EĞİTİMİ SİMÜLATÖRLERİ

► TEMEL SİSTEM

Bu simülasyon platformu, kilitle tabanca pimi (captive bolt gun) ile ötenazi eğitimi için özel düzenlemelere sahip bir dizi hayvan başı ve vücudundan oluşmaktadır. Mevcut türler, ırklar ve boyutlar şunları içerir: kısa yüzlü sığır ineği, uzun yüzlü sığır ineği, besilik tosun, damızlık dişi domuz (sow), besilik domuz, domuz yavru (3 kg yenidoğan, 6 kg, 9 kg), besilik kuzu ve 2 kg'lık kuzu.

Büyük hayvan modelleri, beyin haznesi yerleştirilebilen bir baş üzerinden temsil edilmektedir. Bu baş modelleri, hedefleme ve doğru cihaz konumlandırmasını öğretmek, ayrıca gerçekçi dokunsal geri bildirim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Atış gerçekleştirdikten sonra, beyin haznesi; civata yerleşimi, aç ve derinlikle ilgili anında bilgi sunan üç boyutlu pratik bir iz oluşturarak "doğru ötenazi" kavramını nitelendirmektedir.

Küçük, tam vücut modeller sadece delici olmayan bir pim ile kullanılması amaçlanmıştır ve uygun hayvan tutma ile hedefleme eğitiminde kullanılabilirler.



► BÜYÜK HAYVAN KAFA MODELLERİ

Kafadaki silindirik boşluk, beyin haznesini barındırır. Bu boşluk, hatalı uygulamalar sonucunda astarın zarar görmesi durumunda değiştirilebilen plastik bir tüp ile astarlanmıştır. Bu plastik astar, kilitle çivi tabancasında (captive bolt) hasar oluşturmaz. Tüm kafa modelleri, silikon kauçuk deri, esnek köpük iç yapı ve çelik iskelet kullanılarak üretilmiştir.

► AYARLANABİLİR TEKERLEKLİ STAND

Ayarlanabilir tekerlekli stand, sistemde yer alan çeşitli hayvan türlerini ağırlamak üzere tasarlanmıştır. Yükseklik ve baş açısı (öne ve arkaya) ayarlanabilir; ayrıca, 90 dereceye kadar sağa döndürülebilir.

Her başın arka panelinde, özel standın baş ayarı montajındaki kare boru alıcısına oturan bir kare braket bulunmaktadır. Stand, zorlayıcı hayvan özelliklerini ve ayakta durmakta güçlük çeken hayvanlarda gözlemlenen aşırı hareketleri sergilemeye olanak tanıyan geniş bir pozisyon çeşitliliği sunar. Standın kurulumu ve kullanımıyla ilgili detaylar için lütfen ilgili belgeye başvurun.



ÖTENAZİ EĞİTİMİ SİMÜLATÖRLERİ


➤ BEYİN KONTEYNERLERİ: ODAKLANMA VE SERTİFİKASYON KONTEYNERİ

Her beyin kabı, yumuşak kil beyin, iki parçalı silikon beyin muhafazası (sağdaki resimde gösterildiği gibi), karton tüp muhafazası ve kıl/deri parçası eklenmiş plastik kafatası plakası içerir. Bu tüm kutu montajı, ilgili model başındaki özel boşluğa kaydırılarak yerleştirilir. Kafa boşluğunun alt kısmında bulunan ve köpük beyin muhafazasındaki eşleşen yuvalara uyan erkek pimler sayesinde, istenilen yönde konumlandırılabilir.

Bu kutu, ilgili tür için belirlenen uygun civata, seçilmiş silah yükü ya da silah basıncı ile tek seferlik atım yapılmak üzere kafa boşluğuna yerleştirilmek amacıyla tasarlanmıştır. Kafa boşluğunun çevresindeki çukurlar, kabın karton muhafazasını parmakla kavrayarak kafadan çıkarmaya olanak tanır. Kabın tamamı çıkarıldıktan sonra, silikon beyin muhafazası karton tüpten ayrılabilir. Çıkarılan kafa taşı, kafatası plakası ile ayrılarak ve yarılar açılarak ya da kurşunu incelemek için beyin kilinden kesilerek açılabilir. Atımın derinliği ve yerleşimi de kontrol edilebilir.

Beyin muhafazaları, uygun kafa modeline uyum sağlayacak şekilde çeşitli boyut ve yapılandırmalarda üretilmektedir. Bu muhafazalar, kafatası plakasına eklenmiş suni kürk deri kaplamasıyla hazırlanır. Beyin kili, toksik olmayan, su bazlı buğday hamurudur; raf ömrünü uzatmak amacıyla kapalı torbalarda ve tercihen soğutulmuş saklanmalıdır. Doğru şekilde muhafaza edildiğinde, beyin kili yumuşak kalır ve kab en az 6 ay boyunca kullanılabilir durumda olur.

Kabın alt kısmına eklenmiş kurdele, boşluktan çıkarılmasını sağlamak için kullanılır. Kabı yerleştirirken, kurdelelerin kab boyunca uzandığından ve üst kısımda görünür durumda olduğundan emin olun; böylece çekme dilimi olarak kullanılabilirler.

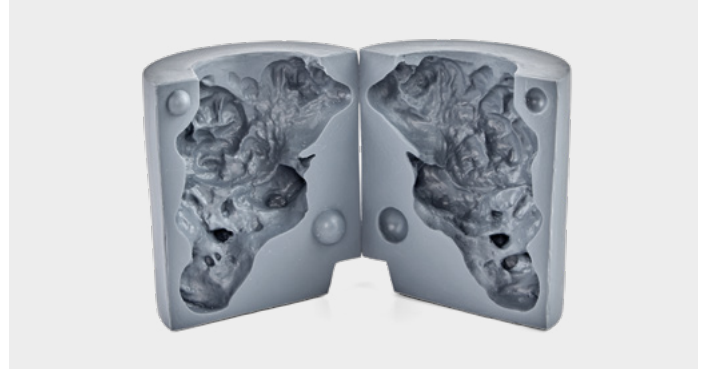

➤ TAM VÜCUDA NÜFUZ ETMEYEN TAKILI CİVATA MODELLERİ

Küçük hayvan modelleri (domuz yavruları ve küçük kuzular dahil) yalnızca geçirmeyen captive bolt cihazıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu modeller, hayvanların doğru şekilde sabitlenmesi ve civata yerleştirme eğitiminin verilmesi amacıyla geliştirilmiş olup, ilgili hayvanın esnekliği ve ağırlığını yansıtacak biçimde inşa edilmiştir. Katı silikon kauçuk başlıklar, aşırı deformasyon sonucu kullanılamaz hale gelene kadar 50 ila 100 atışa dayanabilir.

Başlıklar, gövdeden çıkıntı yapan esnek kilit anahtarına çekilerek kolaylıkla çıkarılabilir (aşağıda gösterildiği gibi). Yerine takılacak başlık, anahtar çıkıntısına itilerek kilitlenene kadar sabit tutulabilir. Başlıkların çıkarılması ve değiştirilmesi sırasında orta derecede kuvvet uygulanması gerekmektedir.



➤ BAKIM, KORUMA VE ONARIM

Modeller, düzenli olarak hafif sabunlu su ile temizlenmeli; hiçbir durumda çözücüler veya sert kimyasallar kullanılmamalıdır. Eğer deri herhangi bir şekilde yırtılır veya zarar görürse, VSI Silicore onarım kitleri ile tamir edilebilir. Böyle bir kiti kullanmanız gerekirse, lütfen bizimle iletişime geçin.

ÖTENAZİ EĞİTİMİ SİMÜLATÖRLERİ

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36)

Esenler • İstanbul • Türkiye

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801

3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com