



**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific



HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

1025919, 1025888

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> İÇİNDEKİLER

Parçalar ve Bileşenler	3
Deri 101	4
Uygun Cilt Bakımı	4
Cilt Güvenliği	4
Reel Creations™ Travmatik Yara Efekt Renkleri	4
Özel Efektler (SFX) Kan Kiti	5
Kısmi Ampute El İçin Eldiven	6
Kısmi Ampute Ayak Çorabı	7
Protez Yaraların Uygulanması	8
Yara Tasarımı	8
Alternatif Yaralar	8
Cihazın Renklendirilmesi	8
HRMK Yara Protezi Uygulama Süreci	9
Ekstraorbital Avulsiyon Uygulaması	11
Dışarı Çıkmış Bağırsak Uygulaması	13
Skin FX	15
Skin FX'nin İyileşmesinin Engellenmesi	15
Skin FX için Karıştırma & Kütleme Talimatları	15
Depolama/Raf Ömrü	15
Skin FX Uygulaması	16
Skin FX ile Alternatif Yara Oluşturma	17
HRMK Aparatın Çıkarılması, Temizlenmesi ve Bakımı	18
Aparatın Çıkarılması	18
Ek A	21
APHIX Uygulama ve Ürün Bilgileri	21
Notlar	22
İletişim Bilgileri	24

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Yeni HRMK'niz şunlarla birlikte gelir:

- Kurşun Çıkış Yarası - 7.62
- Aphix Yapışma Artırıcı
- Çıkarıcı – 8 oz şişe
- Çift Uçlu Spatula
- İnce Uçlu Sharpie (kit 3 normal ve 2 ince uçlu Sharpie içerir)
- 8oz Kan x2
- Karın Organlarının Dışarı Çıkması
- Göz Avulsiyonu x2
- Geniş Yırtık x2
- Fibula Açık Kırığı
- Kaburga Açık Kırığı
- Büyük 3. Derece Yanık
- Küçük Kabarcıklı Yanık
- Büyük Kabarcıklı Yanık
- Maksillofasiyal Yaralanma x2
- Ulna Açık Kırığı
- Humerus Açık Kırığı
- Küçük Emici Göğüs Duvarı Yarası
- Büyük Emici Göğüs Duvarı Yarası
- Kurşun Giriş Yarası - 7.62
- Kurşun Giriş Yarası - 5.56
- Kurşun Çıkış Yarası - 5.56
- Kabarcık Kümesi
- Sağ Ayağın Kısmi Amputasyon Kılıfı
- Sol Elin Kısmi Amputasyon Kılıfı
- HRMK Taşıma Çantası
- Alkol Bazlı Boya Seti
- Fırça Seti
- Renk Seti Tozu 2 oz
- Sabitleyici Sprey - 4 oz
- Yara Yapıştırıcısı - 4 oz
- Şarapnel Kiti
- 99% Alkol - 8 oz
- Blast Tozu 2 oz
- Yaralanma Referans Kartları
- Skin FX A/B Kombine Seti
- Kullanım Kılavuzu
- Paslanmaz Çelik Palet
- Pamuklu Çubuk Paketleri x2
- Temiz Mendiller - 10 adet
- Toz Uygulayıcı x2
- Kama Süngeri x8
- Makas
- 1 Cımbız
- 25 Tek Kullanımlık Spatula
- Sharpie'ler x3
- Expo Kalemli x2
- Versatil Kalem x2
- Sprey Şişeleri - 1 oz x2

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> DERİ 101

Bir kişinin derisi üç katmandan oluşur:

- **EPİDERMİS** – Cildin dış tabakası olup, çevreye karşı dayanıklı, yenilenebilir ve su geçirmez bir bariyer oluşturur.
- **DERMİS** – Cildin ikinci tabakası olup çeşitli bağ dokularından oluşur. Dermiste kılcıl damarlar ve birçok sinir ucu bulunur.
- **SUBKUTAN TABAKA** – Cildin en içteki (en derin) tabakası. Subkutan tabaka, daha büyük kan damarları ve sinirlerin bulunduğu yağ ve bağ dokusunu içerir.

Uygun Cilt Bakımı

Bir kişinin cildiyle ilgilenirken, doğru cilt bakımı ve cilt güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Hyper-Realistic® Moulage Kit (HRMK) içinde sağlanan tüm ürünler ciltte kullanım için güvenlidir. Bununla birlikte, doğru cilt bakımını sağlamak Makyaj Sanatçısının sorumluluğudur. Bazı kişiler diğerlerine göre daha hassas cilde sahip olabilir; bu nedenle cilde nasıl bakım yapılacağını ve hangi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir.

- İletişim çok önemlidir – Üzerinde çalıştığınız kişiye herhangi bir cilt hassasiyeti veya alerjisi olup olmadığını sorun. Çalıştığınız kişinin cilt tipini her zaman öğrenmeye çalışın.
- Cilt doğal olarak kuruyorsa, alkol bazlı temizleyicileri kullanmaktan kaçının.
- Cilt doğal olarak yağlıysa, daha düşük pH seviyesine sahip bir temizleyici kullanın.
- Hassas ciltler için, parfüm ve katkı maddeleri içermeyen basit bir temizleyici kullanın.

Tüm cilt tipleri, kirin epidermisin altına ulaşmasını engellemek için gözeneklere nüfuz edecek şekilde derinlemesine temizlenmelidir. Temizleme, su tek başına gözeneklere nüfuz etmeyeceğinden yağ bazlı bir temizleyici ile yapılmalıdır.

Cilt Güvenliği

Özel efekt makyajında kullanılan bazı malzemeler cildi tahriş edebilir veya zarar verebilir. Makyajı ve makyaj temizleyicilerini denemek için el üstü iyi bir yerdir. Makyajı veya aparatları çıkarırken dikkatli olun:

- Aparatı deriden çekerek çıkarmayın.
- Cildi sertçe ovalamaktan kaçının.
- Çıkarma işlemi için yeterince zaman ayırın.

Her zaman kişinin cildine kendi cildinize gösterdiğiniz kadar nazik ve özenli davranın.



ÖNEMLİ!

Makyaj tekniklerini başkasına uygulamadan önce kendinizde denemeniz önerilir.

Bu sayede sürecin nasıl hissettirdiğini birinci elden deneyimleyerek, başkalarına uygulama yaparken daha fazla özen ve anlayış gösterirsiniz.

Reel Creations™ Travmatik Yara Eftleri İçin Renkler

Reel Creations™ Travmatik Yara Eftleri Boya Paleti, kısıtlı bir alanda açık şişelerin oluşturduğu rahatsızlığa gerek kalmadan çok sayıda renge ihtiyaç duyan makyaj sanatçısı için boya kutusu şeklinde tasarlandı. Reel Creations™ Travmatik Yara Eftleri renkleri uzun süre kalıcı, suya dayanıklı, sürekli rötuş gerektirmez ve 99% İzopropil alkol ile kolayca aktive edilir.



ÖNEMLİ!

Eczanelerin ilk yardım reyonlarında sıkça bulunan 70% İzopropil alkol (ovma alkolü) %30 su içeriği nedeniyle önerilmez. Reel Creations™ Travmatik Yara Eftleri Boya Paleti'nde bulunan kozmetik reçineler suyu iterek 70% İzopropil alkol kullanıldığında renklerin çözülmesine izin vermez.

Reel Creations™ Travmatik Yara Eftleri Boya Paleti'ni uygulamadan önce cildin tamamen temiz olduğundan emin olun.

- En iyi yöntem: Sabun ve su ile yıkayın, ardından alkolle silin.
- Kabul edilebilir yöntem: Tek başına alkol kullanılabilir, ancak sabun ve su kadar etkili bir şekilde cildi temizlemez.
- Yağlardan kaçının: Yağlar (ör. vücut yağları, nemlendiriciler ve güneş kremleri) boya paleti renkleriyle etkileşime girerek, renklerin çözülmesine neden olur ve dayanıklılıklarını önemli ölçüde azaltır.



HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

Boya paleti renkleri, bir alkol sprey şişesi kullanılarak 99% İzopropil alkol ile aktive edilir. Aktive edildikten sonra, rengi doğrudan fırça veya süngerle alıp cilde, proteze veya metal karıştırma paletine uygulayın. HRMK metal karıştırma paletiniz, alkol bazlı boyalarla çalışırken farklı renkler oluşturmak için kullanılabilir. Ürün hızlı kurur; bu yüzden eşit bir uygulama için uygulayıcınızı nemli tutmak en önemli noktadır. Renk kurumadan aynı bölgeye tekrar tekrar uygulamaya çalışmayın. Bu, rengin ortada ince görünmesine ve çalıştığınız bölgenin çevresinde bir halka oluşmasına neden olur.

Aplikatörünüzü yeni bölgelere kaydırarak rengi yayın; sonra geri dönüp kuruyan bölgelere tekrar uygulayarak bunları daha yoğun hâle getirin. Daha hızlı kuruması için (soğuk ortamlarda) bir saç kurutma makinesi kullanın.

UYARI!
99% izopropil alkol yanıcıdır; Daima iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 99% izopropil alkol cilt kuruluğuna neden olabilir. Kuruluk olursa, kullanmayı bırakın ve topikal bir nemlendirici uygulayın. Bu genellikle kısa bir süre içinde tekrarlanan uygulamalar ve temizlemeler sonrasında meydana gelir.

Özel Efektler (SFX) Kan Kiti

Arteriyel Kan

Karışım Talimatları:

- 8 oz. kan konsantresini 1/4 cup distile su ile karıştırın.

SFX Kan

Karışım Talimatları:

- Sadece konsantre.

BPS Kan

Karışım Talimatları:

- 1:4 Karışım Oranı.
- 8 oz. kan konsantresini 1 galon distile su ile karıştırın.



NOT:
Bu üründe kullanılan bileşenler en yüksek kalite standartlarına uygundur. Ancak çoğu kozmetik üründe olduğu gibi bazı kişilerde hassasiyet görülebilir. Bu durumda kullanımı derhal durdurun.

ÖNEMLİ!
Yutmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Gözle temastan kaçınınız. Gözle temas halinde derhal su ile durulayınız.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

Kısmi Ampute El İçin Eldiven



Kısmi amputasyonlu eldiveni takmadan önce hastanın/oyuncunun eline renk sabitleyici pudra uygulayın.



Eldivenin iç manşetini pudralayın.



Eldiveni, manşonu içe dönük olacak şekilde hastanın/oyuncunun eline kaydırın. El eldivenin içinde güvenli bir şekilde yerleştiğinde, manşonu önkolun üzerine doğru aşağı çekin.



Makyaj efektini tamamlamak için SFX kanını patlama sonucu hasar görmüş elin çevresine bolca uygulayın.



Kullanımdan sonra leke oluşmasını önlemek için eldiveni soğuk suyla durulayın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

Kısmi Ampute Ayak Çorabı



Kısmi amputasyonu olan ayak için çorap giydirmeden önce hastanın/oyuncunun ayağına renk sabitleyici pudra uygulayın.



Kılıfın içini pudralayın.



Kılıfı ters çevrilmiş halde hastanın/oyuncunun ayağına kaydırın. Ayak içeride güvenli şekilde sabitlendiğinde, kılıfı bacağı üzerinden yukarı çekin.



İstenen etkiyi elde etmek için yara görünümüne Blast tozu uygulayın.



SFX kanını hasar görmüş alanın etrafına bolca uygulayın.



Kullanımdan sonra lekelenmeyi önlemek için manşonu soğuk suyla durulayın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> PROTEZ YARALARIN UYGULANMASI

Uygulama sürecine başlamadan önce bir planınızın olması önemlidir. Her bir senaryo, elde etmeyi amaçladığınız yara desenlerini belirleyecektir. Eğitim katılımcılarına sunmak istediğiniz deneyimi net olarak bildiğinizde başlamaya hazırsınız. Yaraları seçerken, primer ve yapıştırıcıyı yara üzerine uygulamadan önce seçtiğiniz yaraların kişinin vücudundaki istenen bölgeye uygun şekilde oturduğundan emin olun. Protezi vücudun doğal kıvrım veya bükümlerinin üzerine yerleştirmekten kaçının. Bu, protezde buruşmaya neden olabilir ve efektin gerçekçiliğini azaltabilir.

Sektörde çeşitli makyaj protezi yapıştırıcıları bulunmaktadır. Prosaide, HRMK ile birlikte kullanılan yapıştırıcıdır. Prosaide, profesyonel tıbbi protez ve özel efekt makyajı sektörlerinde endüstri standardıdır. Prosaide hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiştir ve tahriş edici değildir. Tüm Prosaide ürünleri su bazlıdır ve tamamen güvenlidir. Kurduğunda Prosaide yapıştırıcı tüm deri yüzeylerinde tamamen su geçirmez bağlantılar sağlar. Cilt üzerinde güvenlidir ve herhangi bir ortamda her türlü eğitim senaryosundan geçmek için gereken dayanıklılığı sağlar. Yapışma uygulama için yeterli değilse, Prosaide uygulanmadan önce proteze Aphix primeri uygulanabilir. Uygulama ve ürün detayları için Ek A'ya bakınız.

Yara Tasarımı

Bir yara tasarlarken, eğitim senaryosunun gerçekçiliğini ve doğruluğunu sağlamak için kendinize önemli soruları sorarak başlayın:

- Yaralanma Nedeni: Yara nasıl meydana geldi? (ör. patlama yaralanması, bina çökmesi, ateşli silah yarası).
- Ateşli silah yarasıyla ilgili ayrıntılar (varsa):
- Kurşunun kalibresi nedir?
- Hangi giriş ve çıkış desenini oluşturuyorsunuz?
- Atış hangi yönden yapıldı?
- Ciddiyet: Yara ölümcül mü yoksa hayatta kalınabilir mi?
- Yaranın Yaşı: Yara ne kadar eski?



ÖNEMLİ!

Yaranın ne zaman oluştuğu, uygulamada kullanılacak renkleri büyük ölçüde etkiler.

Alternatif Yaralar

HRMK, çeşitli yara desenleri oluşturmak üzere tasarlanmıştır. HRMK'nizdeki makyaj protezleri kırık kemikler, 1., 2., 3. derece yanıklar, göz travması, bağırsakların dışarı çıkması ve kol deformitesini kapsar. HRMK'ye dahil olan Skin FX, Makyaj Sanatçısı'nın silikon protezlerin dışında alternatif yaralar oluşturmaya olanak tanır. Skin FX ve boya paletiyle Makyaj Sanatçısı, en iyi eğitimi sağlamak için gerekli olan istenen herhangi bir travma veya efekti şekillendirebilecek araçlara sahiptir.

Aparatın Renklendirilmesi

HRMK'de kullanılan aparatların boyaları önceden yapılmış olarak gelir. Bu, Makyaj Sanatçısının yarayı cilde karıştırmaya ve bir kişiden diğerine hızla geçmeye odaklanmasını sağlar. Çoğu durumda, etkiyi yaratmak için yara basitçe uygulanıp az miktarda kanla vurgulanabilir. Yaraya bağlı olarak boya paleti görünümü daha da iyileştirebilir. Renk paleti, yaranın çevresinde tahriş olmuş cilt etkisi oluşturmak için ince glaze (lâsür) katmanları halinde kullanılabilir ya da rengi hızlıca değiştirmek için pigment, 1 onsluk sprey şişelerinden birine karıştırılabilir.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

HRMK Yara Protezi Uygulama Süreci



İlk olarak boya paleti, yara yapıştırıcısı, pamuklu çubuklar, kan, fırçalar, makyaj süngerleri, makas ve istenen protezi hazırlayın.



Aparatı çıkarın ve bir pamuklu çubuk kullanarak alt yüzüne az miktarda yara yapıştırıcısı uygulayın. Şu anda aparatın kenarına yakın bölgelere hiçbir yapıştırıcı uygulamayın.



Aparatı kişiye yerleştirin ve yerine bastırın.



Makas kullanarak, dış bandı aparattan kesip çıkarın ve pürüzsüz bir kenar bırakın.



Aparatın bir kenarını kaldırın ve pamuklu çubukla aparatın alt kenarına yara yapıştırıcısı uygulayın.



Bir pamuklu çubukla, aparatın bireyin cildine tamamen sabitlendiğinden emin olmak için yara yapıştırıcısını gerektiğinde yeniden uygulayın.



ÖNEMLİ!

Eğitim için gerekirse cam parçacıklarını veya sahte metal şarapnel parçalarını yara yapıştırıcısı veya Skin FX A/B karışımı kullanarak proteze yapıştırın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)



Boya paletindeki renkleri aktive etmek için 99% izopropil alkol kullanın. Alkol bazlı boyayı yıkama (wash) yöntemiyle uygulamak, rengin kademeli olarak oluşturulmasına ve aparatın görünümünün iyileştirilmesine olanak tanır. Daha geniş alanları kaplamak için, alkolle doldurulmuş 1 onsluk bir sprey şişesine az miktarda alkol pigmenti ekleyin.



Paletten alınan rengi kişinin cildine veya proteze doğrudan uygulamak için fırçalar veya sünger aplikatörler kullanın.



Efektı tamamlamak için SFX kanı uygulayın.



Hazır yara aparatı.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

Ekstraorbital Avulsiyon Uygulaması



Yara yapıştırıcısı, bir makas, pamuklu çubuklar, renk setinden pudra, bir renk paleti, fırçalar ve 1 inç x 1 inç ölçülerinde katlanmış kare bir kâğıt havlu parçasına ihtiyacınız olacaktır.



Aparatı çıkarın ve bir pamuklu çubukla alt yüzüne az miktarda doku yapıştırıcısı uygulayın. Bu aşamada yapıştırıcısı aparatın kenarına yakın uygulamayın.



Katlanmış kâğıt havluyu "yaralı" gözün üzerine yerleştirin, aparatı kişiye konumlandırın ve yerine oturana kadar bastırın.



Makas kullanarak, dış bandı aparattan kesin ve pürüzsüz bir kenar bırakın.



Aparatın bir kenarını kaldırın ve pamuklu çubukla aparatın alt kenarına yara yapıştırıcısı uygulayın.



Aparatın dış kenarına renk sabitleyici tozu hafifçe serpin. Aşırı pudralamaktan kaçının.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)



Renk paletindeki renkleri aktive etmek için 99% izopropil alkol kullanın. Alkol bazlı boyayı seyreltilmiş (wash) yöntemiyle uygulayın; bu, aparatın görünümünü geliştirmek için rengi kademeli olarak oluşturmanızı sağlar. Daha geniş alanları kaplamak için dolu 1 oz. alkol sprej şişesine az miktarda alkol pigmenti ekleyin.



Paletten alınan rengi kişinin cildine veya proteze doğrudan uygulamak için fırçalar veya sünger aplikatörler kullanın.



Efektı tamamlamak için blast tozu ve SFX blood uygulayın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

Dışarı Çıkmış Bağırsak için Uygulama



Aparatın arka yüzünü yara yapıştırıcısıyla kaplayın. Çok fazla yapıştırıcı uygulamamaya dikkat edin. Fazla yapıştırıcı, aparatın uygulanmasının kuruma süresini uzatır. Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde uygulanmalı ve şeffaf, hafif yapışkan hale gelene kadar kurumaya bırakılmalıdır.



Bebek ıslak mendili kullanarak, dışarı çıkmış bağırsağın takılacağı uygulama alanını temizleyin.



Yapıştırıcı hafifçe yapışkan hale geldiğinde, dışarı çıkarılmış bağırsak parçasını gövde üzerine yerleştirin.



Bir makasla yara aparatının dış bandını kesin; böylece yara aparatında pürüzsüz bir kenar oluşur.



Cihazın dış kenarını pudralayın.



Boya paletini kullanarak, protezi hastanın/aktörün cildiyle bütünleştirecek ve yara efektine uyum sağlayacak şekilde renklendirmeye başlayın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)



İstediğiniz uyumu ve gerçekçiliği elde edene kadar renkleri katmanlar halinde uygulamaya devam edin.



Alkol bazlı boyayı daha geniş alanlara daha verimli bir şekilde yaymak için bir makyaj süngerini kullanın.



Etkiyi tamamlamak için kıyafet, SFX kanı ve Blast tozu ekleyin.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> SKIN FX

Skin FX A/B, cilde uygun, fırça ile uygulanabilen, hızlı kürlenene, saydam, platin kürlü (RTV) silikon olup makyaj efektleri, tiyatro ve eğlence amaçlı uygulamalar için aparatlar üretmek üzere tasarlanmıştır. Skin FX, 1 e 1 karışım oranına ve hızlı bir kür süresine sahiptir; bu, son dakikada bir yara oluşturmayı kolaylaştırır. Kürlenmiş parçalar doğal olarak cilde yapışır, ancak en iyi tutunma için yara yapıştırıcısı önerilir.

Skin FX, A ve B olmak üzere iki bileşenden oluşur. Skin A ile Skin B karıştırıldığında, istenilen herhangi bir şekle modelleme yapılabilen ve sertleştikten sonra formunu koruyan, cilt benzeri bir doku oluşur. Skin FX doğrudan cilde uygulanabilir veya daha sonra uygulanmak üzere efekt oluşturmak için metal palet üzerinde şekillendirilebilir.

Skin FX'i doğrudan cilde uygularken bir yapıştırıcı gerekli değildir. Skin FX cilde yapışacak ve silikon aparat ile aynı dayanıklılığı sağlayacaktır. Metal paletiniz üzerinde daha sonra kullanılmak üzere bir yara oluşturuyorsanız, uygulama sırasında silikon aparatlarda kullanılan aynı adımları izleyerek yara yapıştırıcısı kullanmanız gerekecektir. Efektı tamamlamak için boya paletinizle boyamada da aynı yöntemi kullanın.

Skin FX'nin İyileşmesinin Engellenmesi

Bazı malzemeler, küreleştiricinin etkisini baskılar veya nötralize eder. Bu tür bir baskılama, çoğaltılacak yüzeyin sınırlı bir bölgesine az miktarda malzeme sürülerek kolayca tespit edilebilir. Kürlenme süresi sonunda malzeme lastiksi bir yapıda kalıyor ya da tamamen kürlenmemişse, temas eden yüzey inhibitör (baskılayıcı) olarak etki ediyor demektir.



Skin FX için Karıştırma & Kütleme Talimatları

Bu ürün, ağırlıkça 1 birim küreleştiriciye 1 birim baz olacak şekilde karıştırılmak üzere tasarlanmıştır; ancak oranların görsel olarak tahmin edilmesi çoğu durumda yeterlidir. İlgili bileşenlerin istenen miktarlarını ölçün ve iyice karıştırın. En iyi sonuçlar için homojenliği sağlamak amacıyla temiz bir kapta ikinci bir karıştırma yapın. Çalışma süresi yaklaşık 5 dakika olduğundan, 2 dakika içinde uygulanabilecekten daha fazla malzeme hazırlamayın. Karıştırdıktan hemen sonra malzemeyi istenen yüzeye fırça veya spatula ile uygulayın. Sıcaklıklar kuruma süresini etkiler. Kuruma süresini hızlandırmak için saç kurutma makinesinden gelen ısı kullanılabilir. Kür gereksinimleri belirli uygulamaya bağlıdır ve kullanıcı tarafından belirlenmelidir. Gerekli olduğunda tüylerin bulunduğu alanların etrafında ayırıcı madde olarak göz yakmayan bebek şampuanı kullanın (cilt için güvenlidir). Bu platin bazlı bir sistemdir ve bazı malzemeler kontaminasyona neden olarak yüzeyin sakız gibi veya yapışkan olmasına yol açabilir.

Kıvam, karışık	Kremamsı macun
Karışım oranı: Ağırlıkça	1 parça A; 1 parça B
Jelleşme süresi	3 dakika
Sertleşme süresi	Vücutta 5 dakika*
Renk, karışık	Ten rengi
Sertlik, A derecesi	15
Viskozite, cps	132,000 A / 100,000 B
Raf ömrü	6 ay


* Listelenen değerler tipiktir ve spesifikasyonlarda kullanılmak üzere amaçlanmamıştır.

Depolama/Raf Ömrü

A / B bileşenleri orijinal, açılmamış kaplarında 60–90°F (15–32°C) arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Mühürlü tutulup önerilen koşullar altında saklandığında, malzemelerin yaklaşık raf ömrü 6 ay olarak belirtilmiştir.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

Skin FX Uygulaması

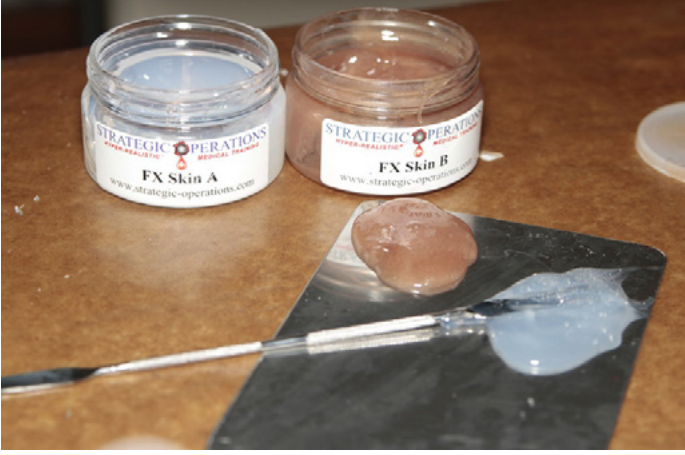

Skin FX A/B, çift uçlu spatula, ve metal karıştırma paleti ile başlayın.



Metal karıştırma paletinde, çift uçlu spatula kullanarak Skin FX A ve B'yi eşit oranlarda karıştırın.



Skin FX'i cilde ince bir tabaka halinde uygulayın.



Skin FX sertleşmeye başladığında, çift taraflı spatula ile malzemenin ortasına bir kesik yapın.



Skin FX tamamen kuruduktan sonra, boya paletindeki koyu renkleri uygulamaya başlayın.



Skin FX yarasını istenen travma düzeyine boyayın. Doğru renk referansı için yara kartını kılavuz olarak kullanın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)



Gerçekçi yanık veya patlama efektleri oluşturmak için Skin FX yarasının kenarlarına Blast tozu serpin.



Efektı tamamlamak için yaraya SFX kanı uygulayın.



Hazır yara efekti.

Skin FX ile Alternatif Yara Oluşturmaları

Kesikler ve Yırtıklar

- Skin FX A/B'yi eşit oranlarda karıştırın ve cilde ince bir tabaka halinde yayın.
- Dış kenarı yedirerek pürüzsüz bir çizgi oluşturun.
- Skin FX sertleşmeye başladığında, tek kullanımlık spatula ile malzemenin ortasına bir kesik yapın.
- İstenen yara efektini oluşturmak için ürünü şekillendirmeye ve biçimlendirmeye başlayın.
- Skin FX tamamen kuruduktan sonra renklendirmeye başlayın. Malzemeyi çevreleyen cilde uyumlu renge boyayın.
- Kesik hattının ortasını kırmızı veya siyah ile renklendirin.
- Kesik üzerine kan uygulayarak efekti tamamlayın.

Yırtılmış Doku

- Önce yırtılacak bölgeye Skin FX'i uygulayın.
- Skin FX'i çevredeki doğal ciltle uyumlu olacak şekilde eşit olarak dağıtın.
- Boya paletini kullanarak Skin FX'i daha gerçekçi bir görünüm elde edecek şekilde renklendirin.
- Tek kullanımlık spatula ile Skin FX'i yırtın, kaldırın ve parçalayarak açık bir yara bölgesi oluşturun.
- Yara bölgesini morarma tonlarıyla boyayın (mor, kırmızı, siyah).
- İstenen etkiyi oluşturmak için yara boşluğuna SFX kanı uygulayın.

Boğaz Kesisi

- Skin FX'i karıştırın ve metal palet veya herhangi bir düz, pürüzsüz yüzeye yayın.
- Skin FX'i yaklaşık 3 inç uzunluğunda ve 1 inç genişliğinde bir yara şeklinde modelleyin; bu sırada bir spatula ile ortasından aşağı doğru çekerek boğaz kesisi travmasını açın.
- Boya paletini boğaz kesisi efektinin görünümünü güçlendirmek için kullanın.
- Skin FX boğaz kesiği protezini, silikon yara protezinde kullandığınız aynı tekniklerle uygulayın.
- Etkiyi bitirmek için SFX kanı fırçayla uygulayın.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

➤ HRMK APARATININ ÇIKARILMASI, TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

Aparatın Çıkarılması

Makyaj temizleyiciler, spirit gum, Prosaide yapıştırıcı ve benzeri yapışkan kalıntılarını ciltten ve protezden hızlı ve tamamen çıkarır. Silikon protezi çıkarmak için bir pamuk çubuğun ucunu makyaj temizleyiciyle ıslatın.



Aparatın çevresindeki alanı bir makyaj sünger ve 99% izopropil alkol ile temizleyin.



Yara yapıştırıcı sökücü kullanarak, yara aparatı ile hastanın/oyuncunun cildi arasındaki yapışkanı çözmeye başlayın.



Protez parçasının bir kenarını kaldırın ve makyaj temizleyiciyle ıslatılmış bir pamuk çubuğunu protez ile hastanın/oyuncunun cildi arasına dikkatlice yerleştirin.



Pamuklu çubuğu aparatın kenarı boyunca gezdirirken yavaşça hareket edin.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)



İhtiyaç duydukça makyaj temizleyicisini yeniden uygulamaya devam edin.



Aparatı dikkatlice kaldırın. Aparatı ciltten çok sert veya hızlı bir şekilde çekip koparmayın.



Makyaj temizleyici ve bebek mendillerini birlikte kullanarak hastanın/aktörün cildindeki tüm protez yapıştırıcı kalıntıları temizleyin.



Depolama için aparatı temizlemek amacıyla, aparatı yüzü aşağı bakacak şekilde düz bir yüzeye koyun.



Bir pamuklu çubuk kullanarak, aparatın arka yüzünü yapıştırıcı kalıntıları temizlemek için makyaj temizleyiciyle kaplayın. Gerekirse temizleyiciyi yeniden uygulayın.



Herhangi bir fazla sökücü ve kalıntıyı 99% İzopropil alkol ile durulayın.


HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)



Yeni bir makyaj süngeriyile aparatın arka yüzünü kurulayın.



Aparatı yara tarafı üstte kalacak şekilde bir kağıt havlu üzerine yerleştirin ve 10–15 dakika havayla kurumaya bırakın.

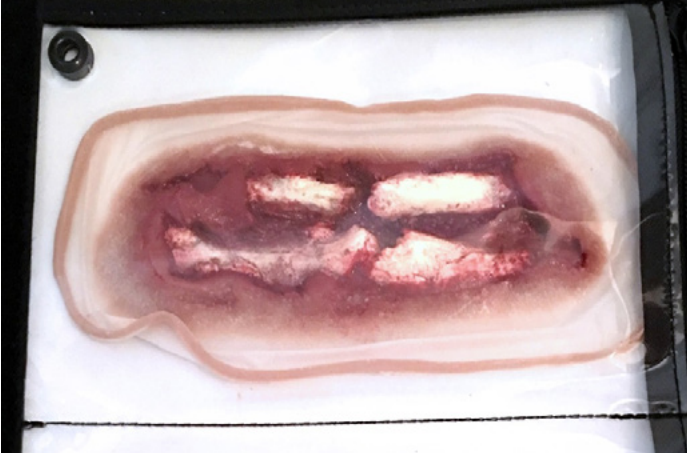

Kuruduktan sonra aparat saklama kılıfına geri yerleştirilmeye hazırdır.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> EK A

APHIX Uygulama ve Ürün Bilgileri


APHIX silikon yapışkan aracı sayesinde çoğu cerrahi bant, bandaj, yara örtüsü vb. geçici olarak silikon kauçuk yüzeylere, eğitim mankenleri ve cihazlar dahil, tutturulabilir.

Bu VOC içermeyen formül, kolayca fırçayla uygulanabilen ve hızlı kuruyan düşük viskoziteli bir sıvıdır. Tek uygulama birden çok kullanım için yeterlidir.

APHIX silikon yapışkan aracı, bu kittede bulunan %99 alkol ile çıkarılabilir.



Yaranın arka kısmını 99% Alkol ile iyice temizleyin.

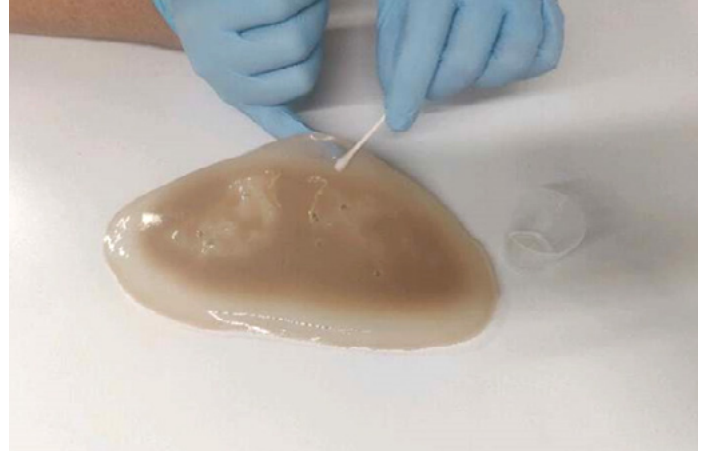

APHIX şişesini kullanmadan önce iyice çalkalayın. Küçük bir miktar APHIX'i bir CC kaba dökün ve pamuklu çubuk ile aparatın arka yüzüne uygulayın. On dakika kurumasını bekleyin. Ardından üzerine bir kat Prosaide uygulanabilir.

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> NOTLAR

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> NOTLAR

HİPER-GERÇEKÇİ MULAJ KİTİ (HRMK)

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstil Kent (B13 Blok- No: 36)

Esenler • İstanbul • Türkiye

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801

3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com