



HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1025919, 1025888

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

> TARTALOM

Alkatrészek és Komponensek	3
Bőr 101	4
Megfelelő Bőrápolás	4
Bőrvédelem	4
Reel Creations™ Traumás Sebek Effektszínek	4
Speciális Effektek (SFX) Művér Készlet	5
Részlegesen Amputált Kéz Kesztyű	6
Részlegesen Amputált Lábra Való Zokni	7
Protézis Sebek Felhelyezése	8
Sebkialakítás	8
Alternatív Sebek	8
A protézis betét színezése	8
HRMK Sebprotézis Felhelyezési Folyamata	9
Alkalmazás orbitán kívüli kitépéshez	11
Alkalmazás eviscerált bél esetén	13
Bőr FX	15
Bőrrhatások Gyógyulásának Gátlása	15
Mix & Cure Utasítások a Skin FX-hez	15
Tárolás/Minőségmegőrzési Idő	15
A Skin FX alkalmazása	16
Alternatív sebkeltés a Skin FX-szel	17
HRMK Készülék Eltávolítása, Ápolása és Karbantartása	18
Készülék eltávolítása	18
Melléklet A	21
APHIX Alkalmazás és Termékinformáció	21
Megjegyzések	22
Kapcsolatfelvételi Információk	24

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

➤ ALKATRÉSZEK ÉS KOMPONENSEK

Az Ön új HRMK készüléke a következőket tartalmazza:

- Kilépő lövési seb - 7.62
- Aphix tapadásfokozó
- Eltávolító – 237 ml-es palack
- Kétfélgű spatula
- Vékony hegyű Sharpie (a készlet tartalmaz 3 normál és 2 vékony hegyű Sharpie-t)
- 237 ml-es vér x2
- Hasüregi evisceráció
- Szem avulzió x2
- Nagy laceráció x2
- Szárkapocscsont nyílt törés
- Borda nyílt törés
- Nagy 3-as fokú égés
- Kis hólyagos égés
- Nagy hólyagos égés
- Maxillofaciális sérülés x2
- Singcsont nyílt törés
- Felkarcsont nyílt törés
- Kis szívó mellkasi seb
- Nagy szívó mellkasi seb
- Belépő lövési seb - 7.62
- Belépő lövési seb - 5.56
- Kilépő lövési seb - 5.56
- Hólyagcsoport
- Részleges jobb lábfej amputációs hüvely
- Részleges bal kéz amputációs hüvely
- HRMK tok
- Alkohol alapú festékkészlet
- Ecsetkészlet
- Színes por 59 ml-es
- Fixáló spray - 118 ml-es
- Sebragasztó - 118 ml-es
- Repeszdarab készlet
- 99% Alkohol - 237 ml-es
- Robbanási por 59 ml-es
- Sérülési referencia kártyák
- Skin FX A/B kombinált készlet
- Használati útmutató
- Rozsdamentes acél paletta
- Vattapálcika csomag x2
- Tisztító törlőkendők - 10 darab
- Porapplikátor x2
- Ék alakú szivacs x8
- Olló
- 1 csipesz
- 25 eldobható spatulák
- Sharpie-k x3
- Expo filcek x2
- Automata ceruzák x2
- Spray palackok - 30 ml-es x2

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

> BŐR 101

Az ember bőre három rétegből áll:

- **A HÁM** – A bőr külső rétege, amely erős, folyamatosan megújuló, vízálló védőgátat képez a környezet hatásaival szemben.
- **AZ IRHA** – A bőr második rétege, amely különféle kötőszövetekből áll. Az irhában kapillárisok és sok idegvégződés található.
- **A BŐRALJA** – A bőr legbelsőbb (legmélyebb) rétege. A bőralja zsírt és kötőszövetet tartalmaz, amelyben a nagyobb erek és idegek helyezkednek el.

Megfelelő Bőrápolás

Amikor valaki bőrrel foglalkozunk, fontos ismerni a bőr megfelelő ápolását és biztonságát. A Hyper-Realistic® Moulage Kit (HRMK) készletében található minden termék bőrön való használatra biztonságos. Azonban a megfelelő bőrápolás biztosítása a sminkes felelőssége. Egyesek bőre érzékenyebb lehet másoknál; ezért fontos tisztában lenni azzal, hogyan kell ápolni a bőrt, és mely jelekre kell figyelni.

- A kommunikáció kulcsfontosságú – Kérdezze meg a kezelt személyt, hogy van-e bőrérzékenysége vagy allergiája. Mindig törekedjen arra, hogy ismerje a kezelt bőrtípust.
- Ha a bőr természeténél fogva száraz, kerülje az alkohol alapú lemosók használatát.
- Ha a bőr természeténél fogva zsíros, használjon alacsonyabb pH-értékű lemosót.
- Érzékeny bőr esetén használjon illat- és adalékmentes, egyszerű lemosót.

Minden bőrtípus alapos tisztítást igényel, amely a pórusokon keresztül hatolva megakadályozza, hogy a szennyeződések az epidermisz alá jussanak. A tisztítást olajalapú tisztítószerrel kell végezni, mivel önmagában a víz nem hatol be a pórusokba.

Bőrvédelem

A különleges effektusokhoz használt sminkanyagok egyes összetevői irritálhatják vagy károsíthatják a bőrt. A smink és az eltávolítók kipróbálására jó hely a kézhat. Amikor sminket vagy felragasztott kellékeket távolítasz el, járj el óvatosan:

- Ne húzd le a felragasztott kelléket a bőrről.
- Kerüld a bőr agresszív dörzsölését.
- Számj elegendő időt az eltávolításra.

Mindig bánj az érintett személy bőrrel olyan gyengéden és ugyanolyan gondosan, mint a saját bőröddel tennéd.



FONTOS!

Ajánlott a sminktechnikákat először saját magadon gyakorolni, mielőtt másokon alkalmaznád.

Ez lehetővé teszi, hogy első kézből tapasztalatot szerezz arról, milyen érzés maga a folyamat, és így nagyobb gondossággal és megértéssel dolgozhatsz másokon.

Reel Creations™ Traumás Sebhatások Színei

A Reel Creations™ Traumatic Wound Effects Paint Palette festékdoboz formájában készült a sminkes számára, akinek sok színre van szüksége anélkül, hogy zárt térben nyitott üvegek kényelmetlenségét kellene elviselnie. A Reel Creations™ Traumatic Wound Effect színei tartósak, vízállóak, nem igényelnek gyakori korrekciót, és könnyen aktiválhatók 99% izopropil-alkohol segítségével.



FONTOS!

70% izopropil-alkohol (dörzsölő alkohol), amely gyakran megtalálható a drogériák elsősegély-részlegein, nem ajánlott 30% víztartalma miatt. A Reel Creations™ Traumatic Wound Effect Paint Palette-ban található kozmetikai gyanták taszítják a vizet, és 70% izopropil-alkohol használata esetén nem engedik, hogy a színek feloldódjanak.

A Reel Creations™ Traumatic Wound Effects Paint Palette felvitele előtt győződjön meg róla, hogy a bőr teljesen tiszta.

- Legjobb módszer: Mossa le szappannal és vízzel, majd törölje át alkoholos törülközővel.
- Megfelelő módszer: Magában az alkohol is használható, de nem tisztítja a bőrt olyan hatékonyan, mint a szappan és a víz.
- Kerülje az olajokat: Az olaj (pl. testolajok, hidratálók és napvédők) zavarhatja a festékpalletta színeit, ami feloldódást okoz és jelentősen csökkenti azok tartósságát.



HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

A festékpaletta színei alkoholos permetező flakon és 99% izopropil-alkohol használatával aktiválhatók. Aktiválás után használjon ecsetet vagy szivacsot: vegye fel közvetlenül a színt és vigye fel a bőrre, a protézisre vagy a fém keverőpalettára. Az Ön HRMK fém keverőpalettája használható különböző színek létrehozására, amikor alkoholos festékekkel dolgozik. A termék gyorsan szárad, ezért az egyenletes felvitel titka az, hogy az applikátort nedvesen tartsa. Ne próbálja ugyanarra a területre többször egymás után felvinni a színt, mielőtt az előző rétegnek esélye lenne megszáradni. Ez a szín közepének elvékonyodását eredményezi, és gyűrűt képez a megdolgozott terület körül.

Dolgozza el a színt az applikátor új területekre történő mozgatásával, majd térjen vissza, és vigye fel újra a száraz részekre, hogy sűrűbbé váljanak. Használjon hajszárítót (hideg környezetben) a gyorsabb száradáshoz.



FIGYELMEZTETÉS!

A 99%-os izopropil-alkohol gyúlékony; Mindig használja jól szellőző helyen. A 99%-os izopropil-alkohol a bőr kiszáradását okozhatja. Ha kiszáradás jelentkezik, hagyja abba a használatot, és kenjen fel helyi hidratálót. Ez általában többszöri alkalmazás és rövid időn belüli eltávolítás esetén fordul elő.

Speciális Effektek (SFX) Művér Készlet

Artériás Vér

Keverési utasítások:

- Keverje össze a 237 ml-es vérkoncentrátumot 1/4 cup desztillált vízzel.

SFX Vér

Keverési utasítások:

- Csak koncentrátum.

BPS Vér

Keverési utasítások:

- 1:4 keverési arány.
- Keverje össze a 237 ml-es vérkoncentrátumot 3.8 liter desztillált vízzel.



MEGJEGYZÉS:

A termékben használt összetevők megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. Azonban, mint a legtöbb kozmetikai terméknel, egyes egyéneknek érzékenységi reakciók előfordulhatnak. Ha ez előfordul, azonnal hagyja abba a használatot.



FONTOS!

Ne nyelje le. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a szembe jutást. Szembekerülés esetén azonnal öblítse ki vízzel.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)


Részlegesen Amputált Kéz Kesztyű



Vigyen fel színes port a páciens/szereplő kezére, mielőtt felhúzná a részlegesen amputált kézre való kesztyűt.



Porral szórja be a kesztyű belső részét.

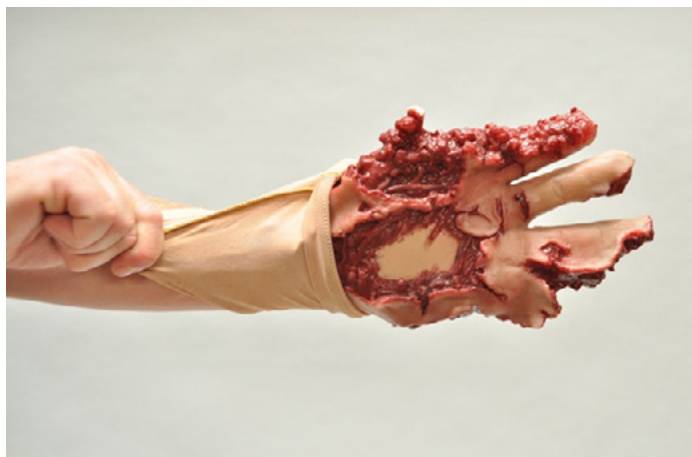

Csúsztassa a kesztyűt a beteg/szereplő kezére úgy, hogy a mandzsettája kifordítva legyen. Amikor a kéz biztonságosan a kesztyűben van, húzza le a mandzsettát az alkarra.



A sminkhatás befejezéséhez vigyen bőségesen SFX-vért a robbanás miatt sérült kéz köré.



Használat után öblítse ki a kesztyűt hideg vízben a foltosodás megelőzése érdekében.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

Részlegesen Amputált Lábra Való Zokni



Vigyen fel színező port a páciens/szereplő lábára, mielőtt felhúzná a részlegesen amputált lábat szimuláló zoknit.



Porral szórja be a zokni belsejét.



Csúsztassa a zokint a beteg/szereplő lábára úgy, hogy a hüvely kifordítva legyen. Amikor a láb biztonságosan benne van, húzza fel a zoknit a lábszárra.



Porozza be a seb mintázatát blast-porral a kívánt hatás eléréséhez.



Vigyen fel bőségesen SFX vért a sérült terület köré.



Használat után öblítse ki a védőhüvelyt hideg vízzel, hogy megelőzze az elszíneződést.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

> PROTÉZIS SEBEK FELHELYEZÉSE

Mielőtt megkezdzi az alkalmazási folyamatot, fontos, hogy legyen terve. Minden egyes konkrét forgatókönyv meghatározza, milyen sérülésmintákat szeretne elérni. Amint világosan megérti, milyen élményt kíván nyújtani a képzés résztvevőinek, készen áll a kezdésre. A sérülések kiválasztásakor győződjön meg róla, hogy a kívánt testtájon megfelelően illeszkednek, mielőtt primerrel és ragasztóval alkalmazná őket. Kerülje az applikáció elhelyezését a test természetes redőin vagy hajlataiban; ez gyűrődést okozhat a betéten, és csökkentheti a hatás valóságosságát.

Az iparágban többféle sminkapplikációs ragasztó található. A Prosaide az a ragasztó, amelyet a HRMK-hez használnak. A Prosaide az iparági sztenderd a professzionális orvosi protézis- és speciális effektusok sminkiparában. A Prosaide kifejezetten érzékeny bőrre lett kifejlesztve, és nem irritáló. Minden Prosaide-termék vízbázisú és teljesen biztonságos. Száradás után a Prosaide ragasztó minden bőrfelületen teljesen vízálló kötést biztosít. Bőrön biztonságosan használható, miközben megadja azt a tartósságot, amely szükséges ahhoz, hogy bármilyen képzési helyzetben, bármilyen környezetben is helytálljon. Abban az esetben, ha a tapadás nem elegendő az alkalmazáshoz, Aphix primert lehet alkalmazni a protézisre a Prosaide felvitele előtt. Az alkalmazásra és a termék részleteire vonatkozó információkért lásd az "A" mellékletet.

Sebkialakítás

A seb megtervezésekor először tegyen fel magának néhány kulcsfontosságú kérdést, hogy a képzési helyzet realisztikus és pontos legyen:

- Sérülés oka: Hogyan keletkezett a seb? (pl. robbanási sérülés, épületomlás, lött seb).
- Lött sérüléssel kapcsolatos részletek (ha alkalmazható):
- Milyen kaliberű a lött seb?
- Milyen belépési és kilépési mintát hoz létre?
- Milyen irányból adták le a lövést?
- Súlyosság: A seb halálos vagy túlélhető?
- A seb kora: Mennyi idős a seb?



FONTOS!

A seb keletkezésének ideje nagymértékben befolyásolja az ábrázolásban használt színeket.

Alternatív Sebek

A HRMK úgy lett megtervezve, hogy különféle sebsémákat hozzon létre. A HRMK-ben található applikációk a törött csontok, első, második és harmad fokozatú égési sérülések, szemsérülések, a belek előesése és a kar deformitásainak megjelenítésére szolgálnak. A HRMK része a Skin FX is, amely lehetővé teszi a maszkmester számára, hogy a szilikon applikációkon kívül alternatív sebeket hozzon létre. A Skin FX és a festéspaletta segítségével a maszkmester rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel bármely kívánt sérülést vagy hatást megformálhat az optimális képzés eléréséhez.

A készülék színezése

A HRMK-ben használt applikációk előre festve érkeznek. Ez lehetővé teszi a maszkmester számára, hogy a sebet a bőrre olvasztva dolgozza el, és gyorsan továbblépjön egyik személyről a másikra. A legtöbb esetben a sebet egyszerűen fel lehet helyezni, és minimális vérrel kiemelni a kívánt hatás eléréséhez. A sebtípustól függően a festékpalletta csak tovább javíthat a megjelenésen. A festékpallettát híg rétegekben is lehet alkalmazni, így a seb körül irritációt lehet szimulálni, vagy a pigmentet az egyik 30 ml-es spray palackba keverve gyors színváltozást lehet elérni.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

HRMK Sebprotézis Felhelyezési Folyamata



Kezdje a festékpalettával, sebragasztóval, vattapálcákkal, vérrrel, ecsetekkel, sminkszivacsokkal, ollóval és a kívánt protézissel.



Távolítsa el a készüléket, majd egy vattapálca segítségével vigyen fel kis mennyiségű sebragasztót az alsó felületére. Jelenleg ne vigyen fel ragasztót a betét széléhez közel.



Helyezze a betétet a páciensre, és nyomja a helyére.



Ollóval vágja le a külső szalagot a betétről úgy, hogy illesztésmentes él maradjon.



Emelje fel a betét egyik szélét, és vattapálcával vigye fel sebragasztót annak alsó szélére.



Vattapálcával szükség szerint vigye fel újra a sebragasztót, hogy a betét teljesen rögzüljön az illető bőrén.



FONTOS!

Vigyen fel üvegszilánkokat vagy műfém szilánkokat a protézisre sebragasztóval vagy Skin FX A/B keverékkel, ha szükséges a gyakorlati képzéshez.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)



A festékpaletta színeinek aktiválásához használjon 99% izopropil-alkoholt. Az alkoholos festék mosótechnikával történő alkalmazása lehetővé teszi, hogy fokozatosan felépítse a színt, és ezzel javítsa a készülék megjelenését. Adjon hozzá egy kevés alkoholos pigmentet egy alkohollal feltöltött 30 ml-es permetező flakonba, hogy nagyobb területeket fedjen le.



Használjon ecseteket vagy szivacs applikátorokat, és vigye fel a palettáról származó színt közvetlenül az egyén bőrére vagy a protézisre.



A hatás befejezéséhez vigyen fel SFX vért.



Kész sebkötyszer.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

Alkalmazás orbitán kívüli kitépéshez



Szüksége lesz sebzáró ragasztóra, ollóra, vattapálcikákra, színezőporra, festékpalettára, ecsetekre, és egy hajtogatott 2,5 x 2,5 cm-es négyzet alakú papírtörletre.



Távolítsa el a betétet, és vattapálcával vigyen fel egy kis mennyiségű szöveti ragasztót a betét alsó felületére. Jelenleg ne vigyen fel semmilyen ragasztót a betét széléhez közel.



Helyezze a félbehajtott papírtörlet a "sérült" szemre, helyezze a betétet a páciensre, és nyomja a helyére.



Ollóval vágja le a betét külső pántját úgy, hogy sima, varrat nélküli él maradjon.



Emelje fel a betét egyik szélét, és vattapálcával vigyen fel sebragasztót annak alsó szélére.



Finoman porozza be a betét külső peremét színrögzítő porral. Ne porozza túl.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)



Használjon 99% izopropil-alkoholt a festékpaletta színeinek aktiválásához. Az alkoholos festéket mosási technikával vigye fel, így fokozatosan építheti fel a színt a készülék kiemeléséhez. Adjon kis mennyiségű alkoholos pigmentet egy megtöltött 30 ml-es alkoholos permetező palackba, hogy nagyobb felületeket fedjen le.



Használjon ecseteket vagy szivacs applikátorokat, és vigye fel a palettáról származó színt közvetlenül az egyén bőrére vagy a protézisre.



A hatás befejezéséhez vigye fel a robbanás hatását keltő port és a művért.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

Eviscerált Bél Ellátása




Kenje be a betét hátoldalát sebragasztóval. Ügyeljen rá, hogy ne vigyen fel túl sok ragasztót. Túl sok ragasztó meghosszabbítja a betét felhelyezésének száradási idejét. A ragasztót vékony rétegben kell felvinni, majd hagyni kell, hogy átlátszóvá és ragacsossá száradjon.



Baba törlőkendővel tisztítsa meg azt a felületet, ahová az eviscerált bél lesz rögzítve.



Amint a ragasztó enyhén ragadós lesz, helyezze az eviscerált belet a testre.

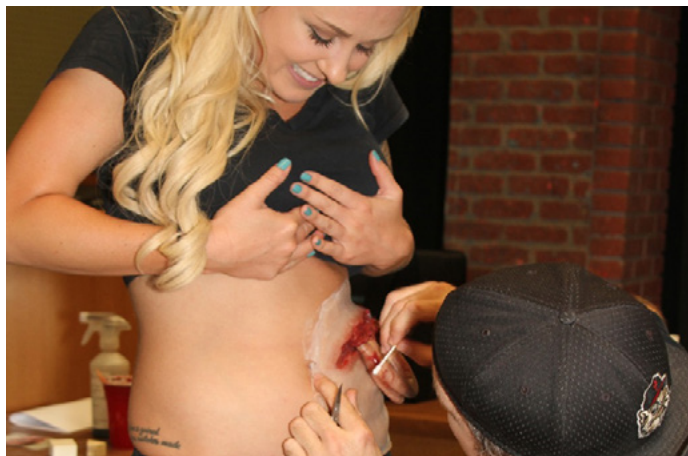

Ollóval vágja le a betétről a külső szalagot úgy, hogy a sebfedő betét pereme sima maradjon.



Vigyen fel port a betét külső peremére.



A festékpalettát használva kezdje el megfesteni a protézist úgy, hogy a sebhátás beleolvadjon és illeszkedjen a páciens/szereplő bőréhez.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)



Rétegezd tovább a színeket, amíg el nem éred a kívánt színegyezést és realisztikus hatást.



Használjon sminkszivacsot az alkoholos festék nagyobb felületeken való hatékonyabb elosztatásához.



Adj hozzá ruházatot, SFX vért és robbanóport a hatás befejezéséhez.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

➤ BŐR FX

Skin FX A/B bőrbarát, ecsettel felvihető, gyorsan kötő, áttetsző platina katalizátoros, szobahőmérsékleten vulkanizálódó (RTV) szilikon, amelyet sminkeffektekhez, színházi és különlegességi alkalmazásokhoz készült kellékek előállítására terveztek. A Skin FX 1 to 1 keverési arányú, és gyors kötési ideje miatt könnyen készíthető vele utolsó pillanatban szükséges seb. A megkötött darabok természetüknél fogva tapadnak a bőrhöz, de a legjobb tapadás érdekében sebragasztó használata javasolt.

Skin FX két összetevőből áll, A és B. Amikor a Skin A-t és a Skin B-t összekeverik, olyan bőrszerű textúrát hoznak létre, amely bármilyen formára alakítható, és a megkötés után megtartja azt az alakot. A Skin FX közvetlenül a bőrre vihető, vagy fém palettára felkenve megformázható, és olyan effekt készíthető belőle, amely később felhelyezhető.

Ha a Skin FX-et közvetlenül a bőrre viszik fel, ragasztó nem szükséges. A Skin FX tapad a bőrhöz, és ugyanazt a tartósságot biztosítja, mint a szilikon kellék. Ha olyan sebet készít a fém palettán, amelyet később kíván használni, a felviteli folyamat során sebragasztót kell használnia, ugyanazokat a lépéseket követve, mint a szilikon kellékek esetében. A hatás befejezéséhez a festésnél is ugyanazt a módszert alkalmazza a festékpalettajával.

Bőrhatások Gyógyulásának Gátlása

Bizonyos anyagok gátolhatják vagy semlegesíthetik a megkötő szert. A gátlás könnyen megállapítható: ecseteléssel vigyünk fel egy kis mennyiségű anyagot a reprodukálendő felület egy kis, körülhatárolt területére. Ha az anyag a megkötési idő után ragacsos vagy nem köt meg, akkor az érintkező felület gátlóként viselkedik.



Mix & Cure Utasítások a Skin FX-hez

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy 1 rész tömegű keresztlinkert és 1 rész tömegű alapot kell keverni, de az arányok szemrevételezése általában elegendő. Mérje ki a kívánt mennyiségeket az egyes komponensekből, és keverje alaposan össze. A legjobb eredmény érdekében végezzen egy második keverést egy tiszta edényben az egységesség biztosítása érdekében. Ne készítsen elő több anyagot, mint amennyit 2 percen belül fel lehet vinni, mivel a feldolgozási idő körülbelül 5 perc. Keverés után azonnal vigye fel az anyagot ecsettel vagy spaklival a kívánt felületre. A hőmérséklet befolyásolja a száradási időt. A hajszárító hője felhasználható a száradási idő felgyorsítására. A kikeményedés követelményei az adott alkalmazástól függenek, és a felhasználónak kell meghatározni azokat. Szükség esetén használjon könnymentes babasampon leválasztószerként (bőrbarát) a szőrös területek körül. Ez egy platina-alapú rendszer, és bizonyos anyagok szennyeződést okozhatnak, ami nyúlós vagy ragacsos felületet eredményez.

Konzisztencia, kevert	Krémes paszta
Keverési arány: súly szerint	1 rész A; 1 rész B
Zselésedési idő	3 perc
Keményedési idő	5 perc* a testen
Szín, kevert	Hús
Keménység, A fokozat	15
Viszkozitás, cps	132,000 A / 100,000 B
Tartósság	6 hónap

* A megadott értékek tipikusak, és nem alkalmasak műszaki specifikációkban való felhasználásra.

Tárolás/Minőségmegőrzési Idő

Az A / B komponenseket az eredeti, felbontatlan csomagolásukban kell tárolni 60–90°F (15–32°C) közötti hőmérsékleten. Ha lezárva és az ajánlott tárolási feltételeknek megfelelően tárolják őket, az anyagok hozzátétőleges eltarthatósága 6 hónap.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

A Skin FX alkalmazása



Kezdje a Skin FX A/B-vel, a kétvégű spatulával és a fém keverőtálcával.



A fém keverőpaletán keverje össze a Skin FX A-t és a Skin FX B-t egyenlő arányban a kétvégű spatulával.



Vigye fel a Skin FX-et vékony rétegben a bőrre.



Amint a Skin FX elkezdi megszilárdulni, vágjon bele az anyag közepébe a kétvégű spatulával.



Miután a Skin FX teljesen megszáradt, kezdje el a festékpalalettán található sötét színek felvitelét.



Színezd a Skin FX sebet a kívánt sérülés mértékének megfelelően. Használd a sebkártyát útmutatóként a megfelelő színek kiválasztásához.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)



Szórd a robbanó port a Skin FX seb szélei köré, hogy élethű égési vagy robbanásos hatásokat hozz létre.



Vigye fel az SFX-vért a sebre a hatás befejezéséhez.



Kész sebhátás.

Alternatív Sebszimulációk Skin FX-szel

Vágások és Szakadások

- Keverje össze egyenlő arányban a Skin FX A/B-t, és vigye fel vékony rétegben a bőrre.
- Dolgozza el a külső szélét a folyamatos vonal érdekében.
- Amint a Skin FX elkezd megszilárdulni, vágjon az anyag közepébe eldobható spatulával.
- Kezdje el az anyag formázását és alakítását a kívánt sebszerű hatás eléréséhez.
- Miután a Skin FX teljesen megszáradt, kezdje el a színezést. Színezz be az anyagot a környező bőr színére.
- Színezz a vágás vonalának közepét vörösre vagy feketére.
- Vigyen fel vért a vágásra a hatás befejezéséhez.

Tépett Lágyszövet

- Kezdje azzal, hogy a Skin FX-et a tépni kívánt területre helyezi.
- Vigye fel egyenletesen a Skin FX-et, hogy beleolvadjon a környező természetes bőrbe.
- A festékpaletta segítségével színezz a Skin FX-et, hogy élethűbb hatást érjen el.
- Egy eldobható spatula segítségével tépje, emelje és szakítsa fel a Skin FX-et, hogy nyílt sebet alakítson ki.
- Fesse be a seb területét zúzódás színeivel (lila, piros, fekete).
- Az SFX vért vigye fel a seb üregébe a kívánt hatás eléréséhez.

Vágás a torkon

- Keverje össze a Skin FX-et, és kenje szét egy fém palettán vagy bármilyen sima, lapos felületen.
- Alakítsa a Skin FX-et körülbelül 7,5 cm hosszú és 2,5 cm széles méretű sebbé; húzzon spatulát végig a közepén, ezzel megnyitva a torokvágás-jellegű sérülést.
- Használja a festékpalettát a torokvágás hatásának fokozására.
- A Skin FX torokvágás-applikációt ugyanúgy helyezze fel, mint egy szilikon sebakplikációt.
- Ecsettel vigye fel az SFX vért a hatás befejezéséhez.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

➤ HRMK PROTÉZIS BETÉTEK ELTÁVOLÍTÁSA, ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Készülék eltávolítása

Sminklemosók gyorsan és alaposan eltávolítják a spirit gumot, a Prosaide ragasztót és az ehhez hasonló ragasztómaradványokat a bőrről és az applikációról. A szilikon applikáció eltávolításához áztassa be a fültisztító pálcá végét sminklemosóval.



Tisztítsa meg a betét környékét sminkszivaccsal és 99% izopropil-alkohollal.



A sebre való ragasztóeltávolítóval kezdje el fellazítani a sebszimulációs betét és a beteg/szereplő bőre közötti ragasztótömlést.



Emelje fel a protézis egyik szélét, és óvatosan helyezzen be egy sminklemosóval átitatott vattapálcikát a protézis és a páciens/szereplő bőre közé.



Lassan haladjon, a vattapálcikát a készülék pereme körül mozgatva.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)



Ha szükséges, ismételten használja a sminklemosót.



Óvatosan emelje le a betétet. Ne húzza vagy tépje le a betétet a bőrről túl erősen vagy túl gyorsan.



Használjon sminklemosót és babatörölkendőt együtt, hogy eltávolítsa a páciens/szereplő bőréről az összes készülékhez használt ragasztó maradványt.



A betét tárolás előtti tisztításához helyezze a betétet előlő felével lefelé egy sík felületre.



Vattapálcikával kenje be a betét hátoldalát sminklemosóval, hogy eltávolítsa a ragasztómaradványokat. Szükség szerint ismételje meg a lemosó felvitelét.



Öblítse le a felesleges lemosószereket és a maradványokat 99% izopropil-alkohollal.


HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)



Új sminkszivaccsal, törölje szárazra a betét hátoldalát.



Helyezze a betétet egy papírtörlőre a sebfelőli oldalával felfelé, és hagyja 10–15 percig levegőn száradni.

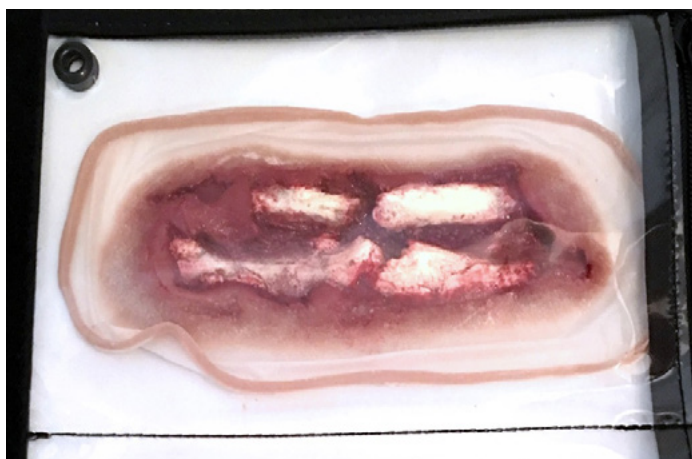

Amint megszáradt, a betét visszahelyezhető a tárolóhüvelybe.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

> MELLÉKLET "A"

APHIX Alkalmazás és Termékinformáció

Az APHIX Silicone Adhesion Promoter (szilikon tapadásjavító) ideiglenes rögzítést biztosít szilikon gumi felületeken a legtöbb sebészeti ragasztószalag, kötszer és sebfedő számára, beleértve a gyakorló bábukat és eszközöket.

Ez a VOC-mentes formula alacsony viszkozitású folyadék, amely könnyen ecsetelhető és gyorsan szárad. Egyetlen felhordás többszöri használatra is elegendő.

Az APHIX Silicone Adhesion Promoter eltávolítható a készlethez mellékelt 99%-os alkohol segítségével.



Tisztítsa alaposan a seb hátsó részét 99% alkohollal.



Használat előtt alaposan rázza fel az APHIX palackot. Öntsön egy kevés APHIX-et egy CC Cupba, és vattapálcával vigye fel a betét hátoldalára. Hagyja száradni tíz percre. Egy réteg Prosaidé ezután alkalmazható.

➤ MEGJEGYZÉSEK

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

> MEGJEGYZÉSEK

Dotted lines for notes.

HIPER-REALISZTIKUS MOULAGE KÉSZLET (HRMK)

> KAPCSOLATFELVÉTELI INFORMÁCIÓK



3B Scientific Europe Kft.
Kozma u. 9/B • H-1108 Budapest • Hungary
Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93
3bscientific.com • eu3bs@3bscientific.com