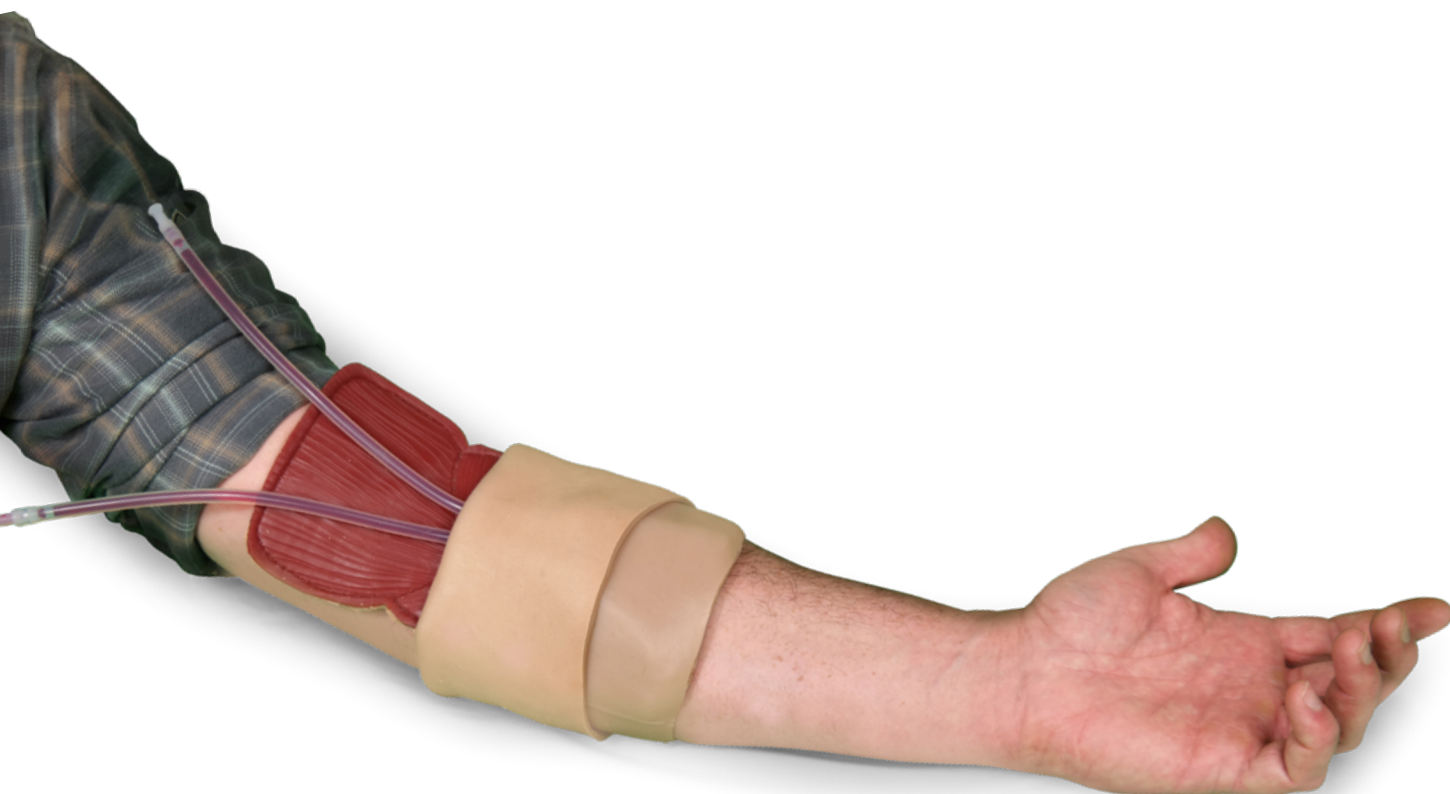




SUTURE INTRAVEINEUSE

SUTURE INTRAVEINEUSE

> 1. OBJET DU MANUEL

Le STOPS Medical IV/ Suture Sleeve® est un système de formation médicale conçu pour simuler l'anatomie superficielle des extrémités humaines aux fins de la cannulation IV et de la réalisation de gestes de soins de plaies mineures (sutures, agrafage, administration d'anesthésiques locaux).

Ce manuel est destiné à permettre aux utilisateurs d'effectuer un inventaire préopératoire ainsi qu'un contrôle technique limité préopératoire en vue de l'utilisation du STOPS Medical IV/Suture Sleeve. Sont également inclus les procédures après utilisation et de maintenance. Le respect des procédures décrites dans le présent document garantira des années de performances continues et optimales.

Composants:

- 1) 1- Garde de protection en cuir durci, résistant aux perforations, avec une couche superficielle de muscle simulé
- 2) 1- Manchon de peau simulée en silicone réparable par l'utilisateur
- 3) 10- Veines simulées réparables par l'utilisateur et rechargeables
- 4) 20- Embouts en plastique pour veines

Inspection Technique Limitée Pré et Post-Opérationnelle (LTI):

Protective Guard

- S'assurer que la protection ne présente ni accrocs ni déchirures
- S'assurer que le muscle simulé est solidement fixé à la couche de cuir durci

Veins

- Inspecter les veines pour vérifier l'absence de déchirures, d'accrocs et de perforations
- S'assurer que les veines sont complètement remplies de sang. (Diluer le concentré de sang avec de l'eau en utilisant un rapport 6:1)
- S'assurer que les deux extrémités des veines sont sécurisées à l'aide des embouts fournis

Silicone Skin Sleeve

- Inspecter le manchon pour vérifier l'absence d'accrocs, de déchirures et de lacerations
- S'assurer que toutes les réparations précédentes sont acceptables et ont eu le temps requis pour prendre

Pour mettre le système en service:

- Effectuer un inventaire complet et un contrôle LTI et de service avant utilisation
- Placer la protection par-dessus le creux du coude du figurant
- Positionner la ou les veines sur la protection à l'endroit souhaité
- Faire glisser la manche en peau de silicone par-dessus la protection et les veines
- Vérifier que l'ensemble du dispositif est suffisamment ajusté autour du bras du figurant et que la circulation n'est pas compromise



REMARQUE: Si nécessaire, appliquez un lubrifiant hydrosoluble sur l'écran de protection et la peau en silicone pour faciliter la mise en place.

Pour la pose d'un cathéter IV:

- Exposer l'extrémité proximale des veines simulées au-dessus du manchon cutané en silicone
- Avant l'insertion du cathéter, retirer le capuchon proximal de la veine afin d'assurer le « flash-back » dans le cathéter IV
- Insérer le cathéter IV en respectant le protocole médical approprié

Pour la réparation de plaies lors de procédures mineures :



ATTENTION ! Assurez-vous que le manchon de peau en silicone ne se trouve pas sur un figurant pendant la création de la plaie.

- À l'aide d'un scalpel ou d'un couteau bien aiguisé, créez une laceration dans la peau en silicone à l'endroit souhaité et de la taille souhaitée
- Posez le manchon en silicone sur l'acteur en suivant la checklist de service
- Veillez à ce que la plaie créée se trouve au-dessus de la protection
- Refermez la plaie à l'aide de sutures ou d'agrafes en suivant le protocole médical approprié

SUTURE INTRAVEINEUSE

Réparation post-opératoire:

Réparation De Lacération Sur Manchon De Peau En Silicone:



ATTENTION ! Assurez-vous que le manchon de peau en silicone ne se trouve pas sur un patient simulé pendant la réparation de la plaie

- Nettoyez complètement le site de réparation avec de l'alcool en veillant à ce qu'il n'y ait aucune saleté ni aucun débris autour du site de réparation
- En utilisant le matériau de réparation STOPS Medical, appliquez une petite quantité sur le site de réparation à l'aide d'un abaisse-langue ou d'un dispositif similaire
- Refermez progressivement les berges de la plaie en lissant la surface afin de réduire au minimum la formation de cicatrices
- Une fois le site de réparation fermé, laissez la réparation reposer pendant 2-4 heures jusqu'à ce que la réparation soit complètement sèche. Un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux peut être utilisé pour accélérer le processus de réparation

Service Et Maintenance Après Utilisation:

- Retirer le manchon de suture IV du figurant
- Inspecter la protection pour vérifier l'absence d'accrocs, de déchirures ou de lacérations
- Inspecter la peau en silicone pour vérifier l'absence d'accrocs, de déchirures ou de lacérations. Nettoyer toutes les parties de l'IV/ Suture Sleeve® avec de l'eau et du savon, laisser sécher
- Entreposer dans un endroit sec en vue de la prochaine séance de formation
- Effectuer la LTI post-opérationnelle

> COORDONNÉES



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com