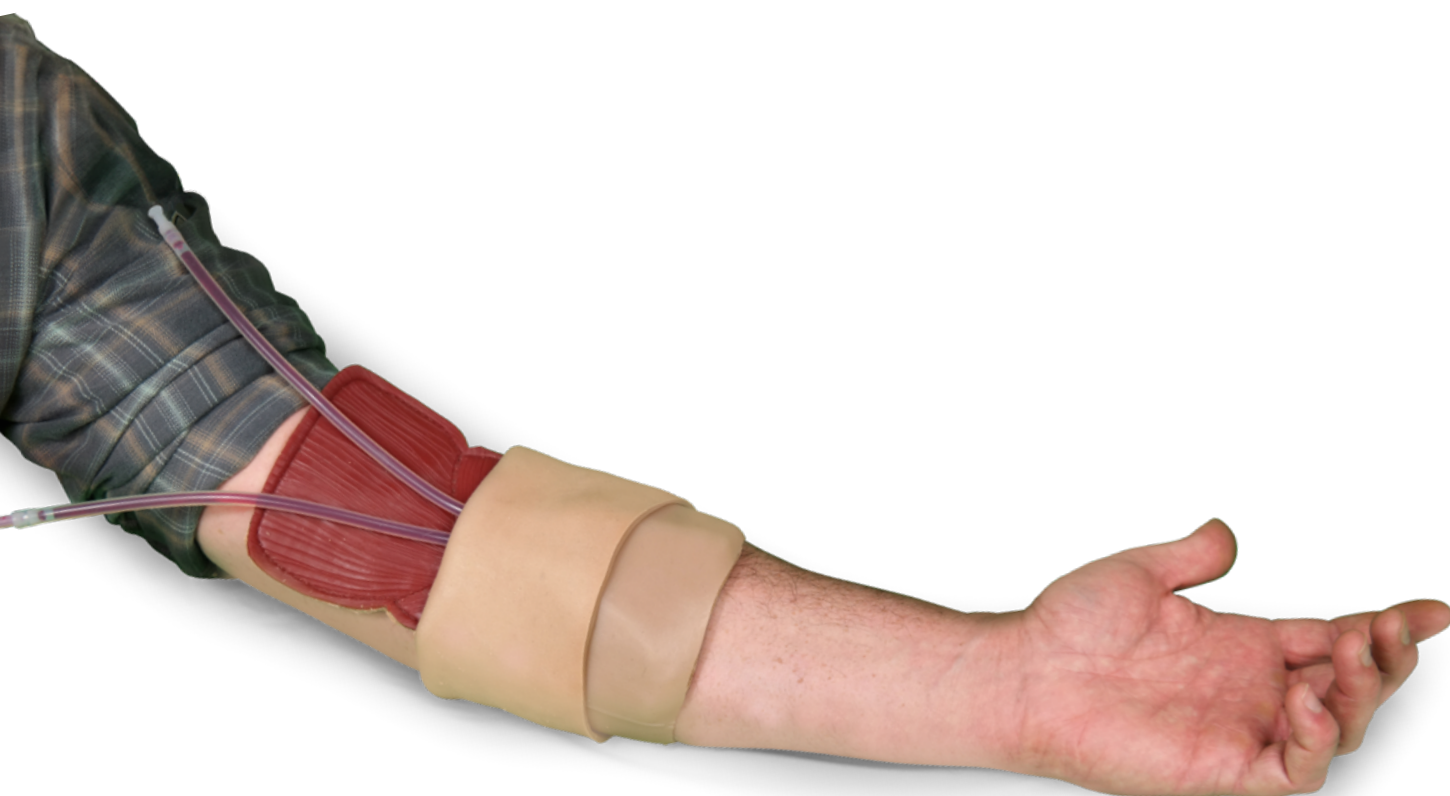




SUTURA IV

MANUAL DO USUÁRIO

1025945, 1025943

SUTURA IV

> 1. FINALIDADE DO MANUAL

O STOPS Medical IV/ Suture Sleeve® é desenvolvido para simular a anatomia superficial das extremidades humanas. É indicado para canulação intravenosa (IV) e para procedimentos de cuidado de feridas de menor complexidade (suturas, grampeamento, administração de anestésico local).

Este manual foi desenvolvido para permitir que os usuários realizem um inventário pré-operacional, bem como uma inspeção técnica limitada antes de utilizar o STOPS Medical IV/Suture Sleeve. Também inclui procedimentos pós-serviço e de manutenção. A observância dos procedimentos aqui descritos assegura anos de desempenho contínuo e otimizado do produto.

Componentes:

- 1) 1 - Protetor com couro endurecido resistente a perfurações e camada superficial de músculo simulado
- 2) 1 - Manga de pele simulada em silicone reparável pelo usuário
- 3) 10 - Veias simuladas reparáveis e recarregáveis pelo usuário
- 4) 20 - Tampas plásticas de extremidade para veias

Inspeção Técnica Limitada Pré e Pós-Operacional (LTI):

Protetor

- Ausência de rasgos ou cortes no protetor
- Músculo simulado firmemente fixado à camada de couro rígido

Veias

- Inspeção de rasgos, cortes e perfurações nas veias
- Veias totalmente preenchidas com sangue. (Diluir Blood Concentrate em água utilizando proporção 6:1)
- Ambas as extremidades das veias fixadas com as tampas fornecidas

Manga de pele de silicone

- Inspeção da manga quanto a rasgos, cortes e lacerações
- Todos os reparos anteriores em condições aceitáveis e com o tempo de cura necessário já transcorrido

Para colocar o sistema em operação:

- Inventário completo e verificação pré-operacional de LTI e de funcionamento
- Colocação do protetor sobre a região antecubital do participante
- Posicionamento da(s) veia(s) sobre o escudo protetor na localização desejada
- Deslizamento da manga de pele de silicone sobre o escudo protetor e as veias
- Inspeção de todo o sistema para garantir ajuste adequado ao redor do braço do participante e que a circulação não esteja sendo comprometida



NOTA: Se necessário, aplique um lubrificante à base de água no escudo protetor e na siliconeskin para facilitar a aplicação

Para canulação IV:

- Exponha a extremidade proximal das veias simuladas acima da manga de pele de silicone
- Antes da inserção do cateter, remova a tampa proximal da veia para garantir o “flash-back” no cateter IV
- Insira o cateter IV seguindo o protocolo médico adequado

Para reparo de feridas em procedimentos de pequeno porte:



CUIDADO! Certifique-se de que a manga de pele de silicone não esteja em um participante simulado durante a criação do ferimento.

- Criação de laceração na pele de silicone com bisturi ou faca afiada, no local e no tamanho desejados
- Aplicação da manga de pele de silicone no participante simulado, conforme o checklist de serviço
- Garantia de que o ferimento criado fique posicionado sobre o protetor de segurança
- Fechamento do ferimento com suturas ou grampos, seguindo o protocolo médico adequado

SUTURA IV

Reparo Pós-Operatório:



CUIDADO! Certifique-se de que a manga de pele de silicone não esteja em um participante simulado durante o reparo da ferida

- Limpe completamente o local do reparo com álcool, garantindo que não haja sujeira ou detritos ao redor do local do reparo
- Utilizando o material de reparo STOPS Medical, aplique uma pequena quantidade no local do reparo com um abaixador de língua ou dispositivo semelhante
- Feche gradualmente as bordas da ferida, alisando a superfície para garantir uma quantidade mínima de cicatrização
- Após o fechamento do local do reparo, deixe o reparo repousar por 2-4 horas até secar completamente. Um soprador térmico ou secador de cabelo pode ser utilizado para acelerar o processo de reparo

Serviço e Manutenção Pós-Operação:

- Remova a manga de sutura IV do participante da simulação
- Inspeção o protetor em busca de rasgos, rupturas ou lacerações
- Inspeção a pele de silicone quanto a rasgos, rupturas ou lacerações. Limpe todas as partes do IV/ Suture Sleeve® com sabão e água e deixe secar
- Armazene em local seco em preparação para a próxima sessão de treinamento prático
- Realize a LTI pós-operacional

> INFORMAÇÕES DE CONTATO



Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda.
Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
Fone: +55 (47) 3464-1818
3bscientific.com • vendas@3bscientific.com