




**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific

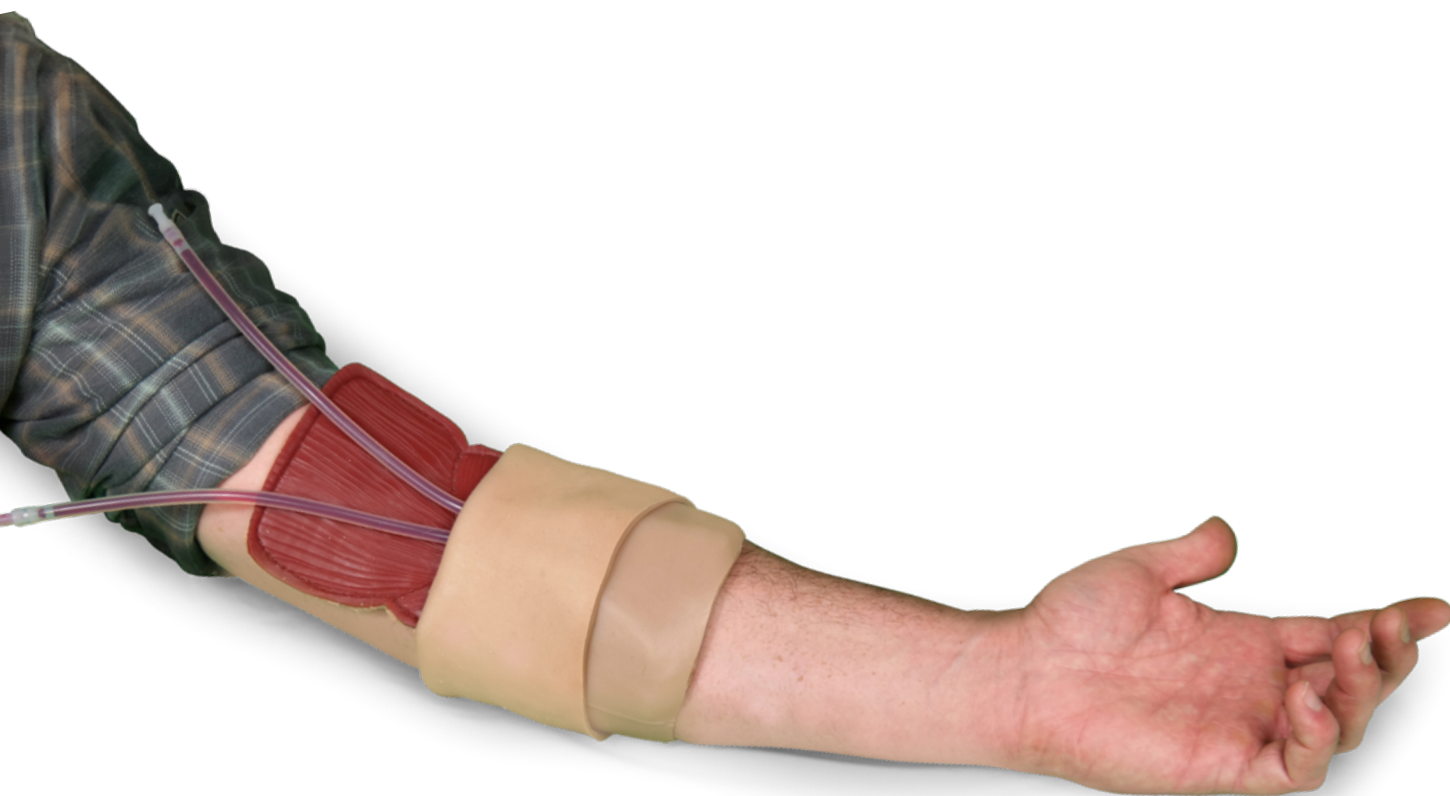

IV/ SUTURE SLEEVE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1025945, 1025943

IV/ SUTURE SLEEVE

> 1. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Система STOPS Medical IV/ Suture Sleeve® представляет собой медицинский учебный тренажёр, предназначенный для отработки внутривенной канюляции и выполнения несложных процедур по обработке ран (наложение швов, скоб, введение местного анестетика).

Настоящее руководство предназначено для того, чтобы пользователи могли провести проверку комплектности перед началом эксплуатации, а также ограниченный технический осмотр перед использованием STOPS Medical IV/Suture Sleeve. Также в нём описаны процедуры послепользовательского обслуживания и технического ухода. Соблюдение изложенных здесь процедур обеспечит многолетнюю надёжную и оптимальную работу изделия.

Компоненты:

- 1) 1- Защитный кожух из упрочнённой проколоустойчивой кожи с поверхностным слоем имитированной мышечной ткани
- 2) 1- Ремонтируемый пользователем силиконовый рукав-имитатор кожи
- 3) 10- Ремонтируемые пользователем и перезаполняемые имитированные вены
- 4) 20- Пластиковые заглушки для вен

Пред- и постэксплуатационный ограниченный технический осмотр:

Защитный кожух

- Убедитесь, что на защитном кожухе нет разрывов или надрывов
- Убедитесь, что имитированная мышечная ткань прочно закреплена на слое жесткой кожи

Вены

- Проверьте вены на наличие разрывов, надрывов и проколов
- Убедитесь, что вены полностью заполнены кровью. (Разведите концентрат крови водой в соотношении 6:1)
- Убедитесь, что оба конца вен зафиксированы прилагаемыми заглушками

Силиконовая рукав-кожа

- Осмотрите рукав на наличие разрывов, надрывов и рассечений
- Убедитесь, что все ранее выполненные ремонты приемлемы и имели достаточное время для отверждения

Для ввода системы в эксплуатацию:

- Выполните полный пересчет инвентаря и предэксплуатационную проверку LTI и сервисного состояния
- Разместите защитный экран над областью локтевой ямки участника тренинга
- Установите вену(ы) на защитном экране в нужном положении
- Наденьте силиконовый рукав-имитатор кожи поверх защитного экрана и вен
- Проверьте всю систему на достаточное плотное прилегание вокруг руки участника тренинга и убедитесь, что кровообращение не нарушено



ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости нанесите смазку на водной основе на защитный экран и силиконовую кожу для облегчения установки

Для выполнения внутривенной канюляции:

- Обнажите проксимальный конец имитированных вен над силиконовым кожным чехлом
- Перед введением катетера снимите проксимальную заглушку вены, чтобы обеспечить визуализацию “flash-back” (появление крови) во внутривенном катетере
- Введите внутривенный катетер, соблюдая соответствующий медицинский протокол

Для выполнения несложной процедуры обработки раны:



ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что силиконовый кожный чехол не надет на статиста во время создания раны

- Используя скальпель или острый нож, создайте рваную рану на силиконовой коже в нужном месте и до нужного размера
- Наденьте силиконовый чехол на актера, следуя контрольному перечню обслуживания
- Убедитесь, что созданная рана располагается поверх защитной накладки
- Закройте рану, используя швы или скобки, в соответствии с надлежащим медицинским протоколом

IV/ SUTURE SLEEVE

Восстановление после использования:

Устранение рваной раны на силиконовом кожном рукаве:



ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что силиконовый кожный чехол не надет на участника тренировки, изображающего пострадавшего, при выполнении манипуляций по восстановлению целостности раны

- Тщательно очистите место ремонта спиртом, убедившись, что вокруг него нет грязи или посторонних частиц
- Используя ремонтный материал STOPS Medical, нанесите небольшое количество на место ремонта с помощью шпателя для языка или подобного инструмента
- Постепенно сближайте края раны, выравнивая поверхность, чтобы свести образование рубцов к минимуму
- После закрытия места ремонта оставьте его на 2-4 часа до полного высыхания. Для ускорения процесса ремонта можно использовать термофен или фен для сушки волос

Сервисное обслуживание и технический уход после эксплуатации:

- Снимите шовный рукав для внутривенного доступа с участника тренинга
- Проверьте защитный кожух на наличие разрывов, надрывов или порезов
- Осмотрите силиконовую кожу на наличие разрывов, надрывов или порезов. Очистите все части IV/ Suture Sleeve® с использованием мыла и воды и дайте им высохнуть
- Храните в сухом месте до следующего этапа обучения
- Выполните послепользовательский технический осмотр (LTI)

> КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com