




**STOPS
MEDICAL**
A 3B SCIENTIFIC COMPANY

3B
3B Scientific

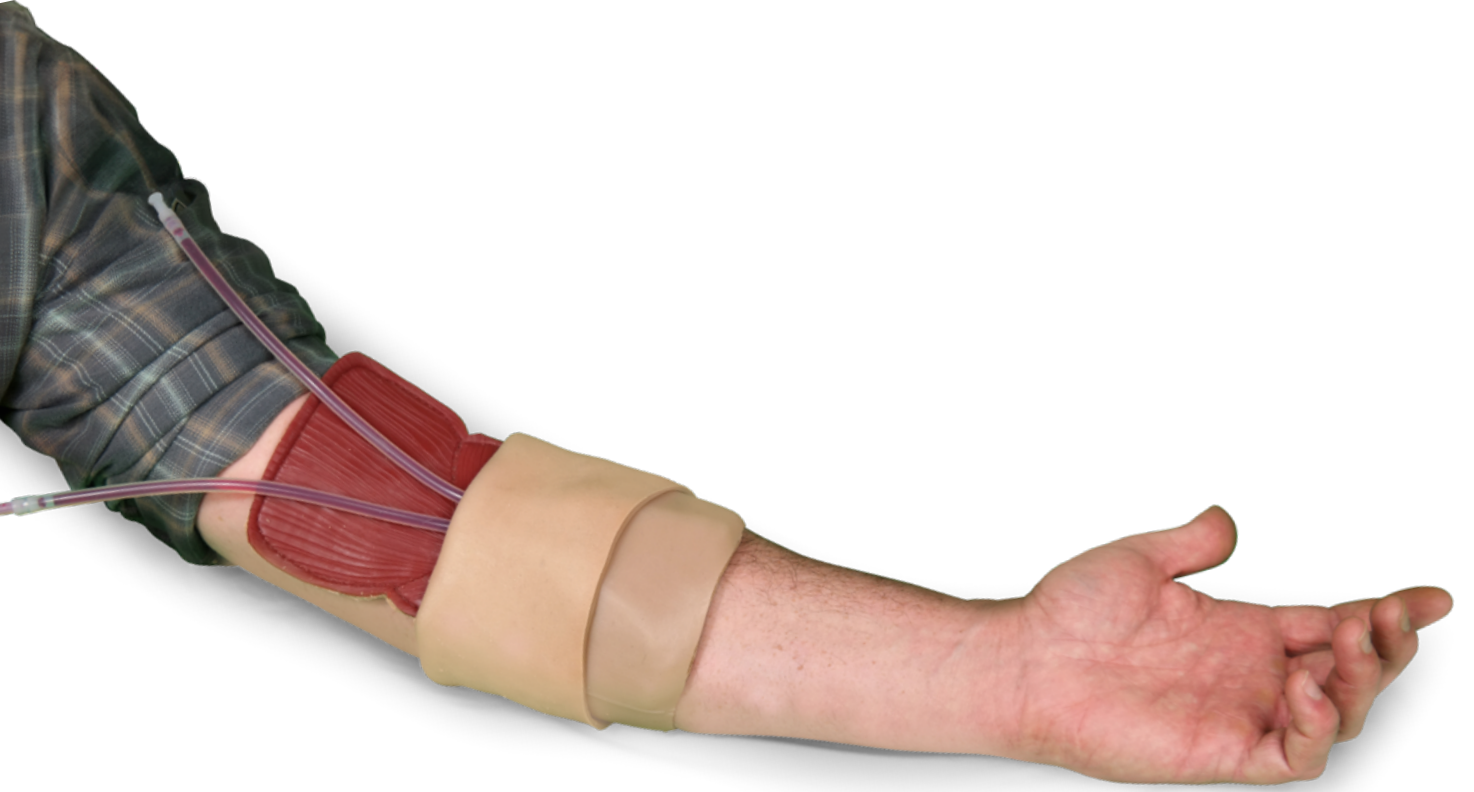

IV SÜTÜR

KULLANIM KILAVUZU

1025945, 1025943

IV SÜTÜR

> 1. KILAVUZUN AMACI

STOPS Medical IV/ Suture Sleeve®, IV kanülasyonu ve küçük yara bakımı prosedürleri (sütür atma, zımbalama, lokal anestezi uygulaması) amacıyla insan ekstremitelerinin yüzeyel anatomisini simüle etmek üzere tasarlanmış bir tıbbi eğitim sistemidir.

Bu kılavuz, kullanıcıların Strategic Operations IV/Suture Sleeve ürününü kullanmadan önce bir operasyon öncesi envanter kontrolü ve sınırlı teknik inceleme yapabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, kullanım sonrası servis ve bakım prosedürleri de bu kılavuzda yer almaktadır. Burada belirtilen prosedürlere uyulması, ürünün uzun yıllar boyunca sürekli ve en iyi performansla çalışmasını sağlayacaktır.

Bileşenler:

- 1) 1 adet – Sertleştirilmiş, delinmeye dayanıklı deri ve yüzeysel simüle kas tabakası içeren koruyucu kılıf
- 2) 1 adet – Kullanıcı tarafından onarılabilir silikon simüle deri kılıfı
- 3) 10 adet – Kullanıcı tarafından onarılabilir ve yeniden doldurulabilir simüle damarlar
- 4) 20 adet – Damarlar için plastik uç kapakları

Kullanım Öncesi ve Sonrası Sınırlı Teknik Kontrol (LTI):

Koruyucu Kılıf

- Koruyucunun hiçbir yerinde yırtık veya sökülme olmadığından emin olun
- Simüle edilmiş kasın sertleştirilmiş deri tabakasına sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun

Damarlar

- Damarları yırtık, sökülme ve delik açısından kontrol edin
- Damarların tamamen kanla dolu olduğundan emin olun. (Kan Konsantresini su ile 6:1 Oranını kullanarak seyreltin)
- Damarların her iki ucunun da sağlanan uç kapaklarıyla sabitlendiğinden emin olun

Silikon Deri Kılıf

- Kılıfı yırtık, sökülme ve kesikler açısından kontrol edin
- Önceki tüm onarımların uygun durumda olduğundan ve gerekli kürleşme süresini tamamladığından emin olun

Sistemi kullanıma almak için:

- Envanter kontrolünü, operasyon öncesi sınırlı teknik incelemeyi (LTI) ve servis kontrolünü tamamlayın
- Koruyucu kılıfı, rol oyuncusunun antekübital bölgesi (dirsek içi) üzerine yerleştirin
- Simüle damar/damarları koruyucu kılıf üzerine istenilen konuma yerleştirin
- Silikon deri kılıfını, koruyucu kılıf ve damarların üzerine geçirerek yerleştirin
- Sistemin tamamını, rol oyuncusunun koluna yeterince sıkı ve uygun şekilde oturduğundan ve kan dolaşımını engellemediğinden emin olmak için kontrol edin



NOT: Gerekirse, uygulamayı kolaylaştırmak için koruyucu kılıfın ve silikon derinin üzerine su bazlı bir kayganlaştırıcı uygulayın.

IV kanülasyon için kullanım:

- Silikon deri kılıfının üst kısmından, simüle damarların proksimal (vücuda daha yakın) ucunu açığa çıkarın
- Kateteri yerleştirmeden önce, IV kateter içinde geri kan akışının ("flash-back") görülebilmesi için damarın proksimal uç kapağını çıkarın
- Uygun tıbbi protokolleri izleyerek IV kateteri yerleştirin

Küçük cerrahi girişimlere bağlı yara onarımı için:



DİKKAT! Yara oluşturma işlemi sırasında silikon deri kılıfın rol oyuncusunun üzerinde olmadığından emin olun

- Neşter veya keskin bir bıçak kullanarak, silikon deri üzerinde istenilen yerde ve istenilen boyutta bir laserasyon (kesik) oluşturun
- Servis kontrol listesini izleyerek silikon kılıfı rol oyuncusuna uygulayın
- Oluşturulan yaranın koruyucu kılıfın üzerinde yer aldığından emin olun
- Uygun tıbbi protokolleri takip ederek yarayı dikiş veya zımba ile kapatın

IV SÜTÜR

Ameliyat Sonrası Onarım:

Silikon Cilt Kılıfı Laserasyon Onarımı:



DİKKAT! Yara onarımı sırasında silikon cilt kılıfının rol alan kişinin üzerinde olmadığından emin olun

- Onarım bölgesini, etrafında hiçbir kir veya artık kalmayacak şekilde alkolle tamamen temizleyin
- STOPS Medical onarım materyalini kullanarak, bir dil basacağı veya benzeri bir araçla onarım bölgesine az miktarda uygulayın
- Yara kenarlarını yavaş yavaş birbirine yaklaştırarak yüzeyi düzleştirin ve oluşacak skar dokusunu en aza indirin
- Onarım tamamlandıktan sonra bölgeyi tamamen kuruyana kadar 2–4 saat bekletin. Onarım sürecini hızlandırmak için ısı tabancası veya saç kurutma makinesi kullanılabilir

Operasyon Sonrası Servis ve Bakım:

- IV suture kılıfını rol oyuncusundan çıkarın
- Koruyucu kılıfı yırtık, sökülme veya kesik açısından inceleyin
- Silikon deriyi yırtık, sökülme veya kesik açısından inceleyin. IV/ Suture Sleeve®'in tüm parçalarını sabun ve suyla temizleyin, kurumasını bekleyin
- Bir sonraki eğitim aşamasına hazırlık olarak kuru bir yerde saklayın
- Operasyon sonrası sınırlı teknik incelemeyi (LTI) gerçekleştirin

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com