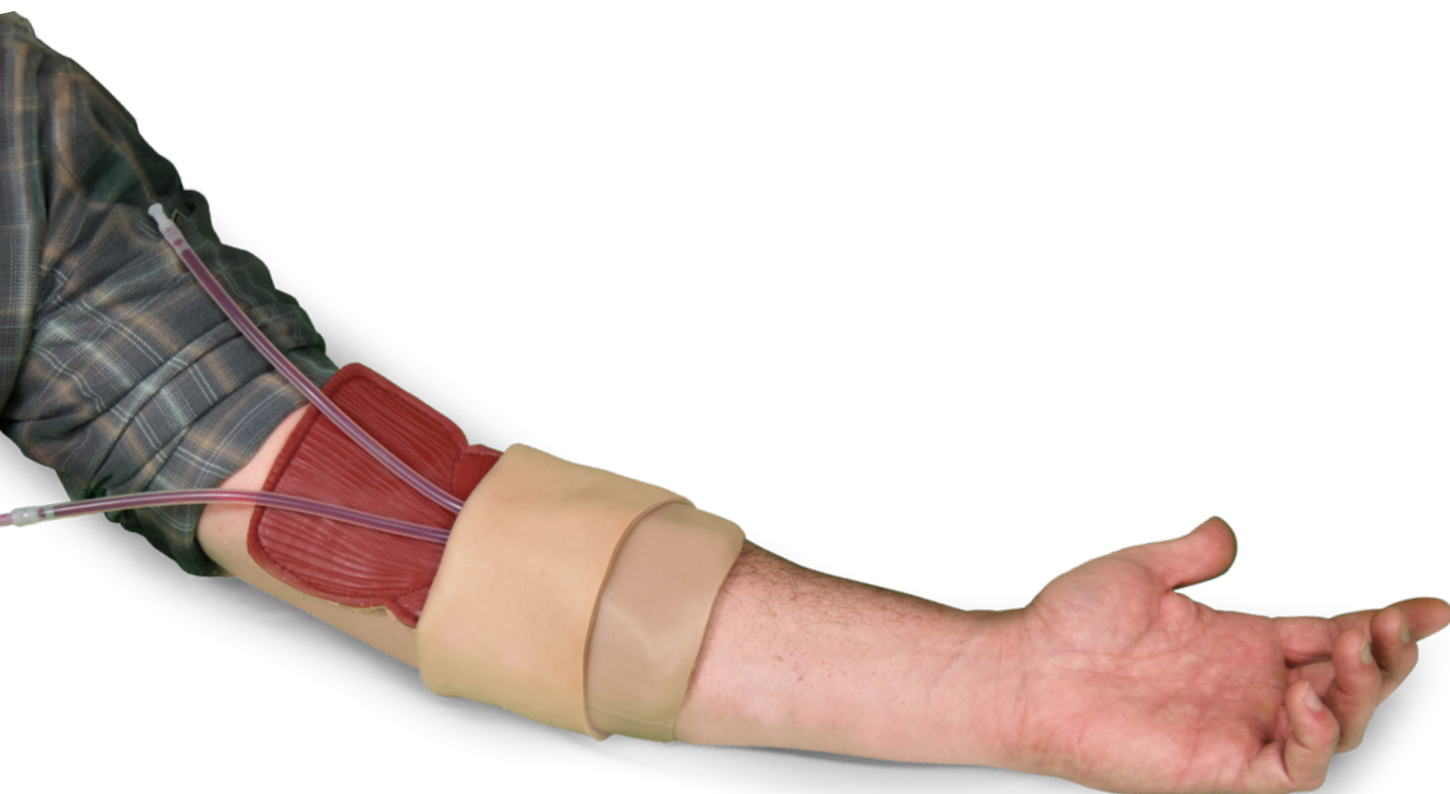




IV VARRAT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1025945, 1025943

IV VARRAT

> 1. A KÉZIKÖNYV CÉLJA

A STOPS Medical IV/ Suture Sleeve® egy orvosi oktatási rendszer, amelyet az emberi végtagok felszínes anatómiájának szimulálására terveztek intravénás kanülálás és kisebb sebellátási beavatkozások (varrás, sebkapcsolás, helyi érzéstelenítés beadása) céljából.

Ez a kézikönyv azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók a STOPS Medical IV/Suture Sleeve üzembe helyezése előtt előzetes tartalom ellenőrzést, valamint korlátozott műszaki vizsgálatot végezhesenek. Továbbá tartalmazza a használat utáni ellenőrzési és karbantartási eljárásokat is. A jelen kézikönyvben foglalt eljárások betartása éveken át tartó, folyamatos és optimális működést biztosít.

Összetevők:

- 1) 1 - Védőburkolat keményített, szúrásálló bőrből, szimulált izomból álló felszíni réteggel
- 2) 1 - Felhasználó által javítható, szilikonból készült szimulált bőrhüvely
- 3) 10 - Felhasználó által javítható és újratölthető szimulált vénák
- 4) 20 - Műanyag végzárók a vénákhoz

Használat előtti és utáni korlátozott műszaki ellenőrzés (LTI):

Védőburkolat

- Győződjön meg arról, hogy a védőburkolaton nincsenek szakadások vagy repedések
- Győződjön meg arról, hogy a szimulált izomszövet biztonságosan rögzítve legyen a keményített bőrréteghez

Vénák

- Vizsgálja meg a vénákat szakadások, repedések és átszúrások szempontjából
- Győződjön meg róla, hogy a vénák teljesen fel vannak töltve vérrrel. (A Vérkoncentrátumot vízzel hígítsa 6:1 arányban)
- Győződjön meg arról, hogy a vénák mindkét végét rögzítették a mellékelt végzáró kupakkal

Szilikon bőrköpeny

- Vizsgálja meg a köpenyt szakadások, repedések és vágott sérülések szempontjából
- Győződjön meg arról, hogy minden korábbi javítás megfelelő, és volt elegendő ideje a megkötésre

A rendszer üzembe helyezéséhez:

- Végezze el a teljes készlet- és üzembe helyezés előtti LTI- és szervizellenőrzést
- Helyezze a védőfedelelet a szimulált beteg könyökhajlati területére
- Helyezze el a vénát/vénákat a védőpajzson a kívánt helyre
- Húzza rá a szilikon bőrhüvelyt a védőpajzsra és a vénákra
- Ellenőrizze a teljes rendszert, hogy megfelelően feszesen illeszkedik-e a szimulált beteg karjára, és nem akadályozza-e a keringést



MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, vigyen fel vízbázisú síkosítót a védőpajzsra és a szilikonbőrre a felhelyezés megkönnyítésére

Intravénás kanüláláshoz használja:

- Tegye szabaddá a szimulált vénák proximális végét a szilikon bőrmandzsetta felett
- A katéter behelyezése előtt távolítsa el a véna proximális végén lévő kupakot, hogy biztosítsa a „flash-back” jelenséget az intravénás katéterben
- Helyezze be az intravénás katétert a megfelelő orvosi protokollnak megfelelően

Kiseb beavatkozások során végzett sebllátáshoz:



VIGYÁZAT! Győződjön meg róla, hogy a szilikon bőrhüvely nincs a gyakorlatban részt vevő személyen a seb létrehozása során

- Egy szikével vagy éles késsel ejtsen sebet a szilikon bőrön a kívánt helyen és a kívánt méretben
- Helyezze fel a szilikon hüvelyt a szereplőre a szerviz-ellenőrző lista szerint
- Győződjön meg arról, hogy a létrehozott seb a védőburkolat fölött helyezkedik el
- Zárja a sebet varratokkal vagy kapcsokkal a megfelelő orvosi protokoll szerint

IV VARRAT

Műtét utáni helyreállítás:

Szilikon bőrmandzsetta lacerációs seb ellátásához:



FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy a szilikon bőrhüvely nincs a gyakorló személyen a sebellátás során

- Tisztítsa meg teljesen a javítási területet alkohollal, ügyelve arra, hogy ne legyen szennyeződés vagy idegen anyag a javítási terület körül
- A STOPS Medical javító anyagból vigyen fel kis mennyiséget a javítási területre kis spatulával vagy hasonló eszközzel
- Fokozatosan zárja össze a seb széleit, simítsa el a felszínt a hegesedés minimalizálása érdekében
- Miután a javítási területet lezárta, hagyja a javítást állni 2-4 órán át, amíg teljesen meg nem szárad. A javítási folyamat felgyorsításához hőlégfúvó vagy hajszárító is használható

Használat utáni szerviz és karbantartás:

- Távolítsa el az IV varrat-hüvelyt a szereplőről
- Ellenőrizze a védőburkolatot repedések, szakadások vagy metszett sérülések szempontjából
- Ellenőrizze a szilikon bőrt repedések, szakadások vagy metszett sérülések szempontjából. Tisztítsa meg az IV/ Suture Sleeve® minden részét szappannal és vízzel, majd hagyja megszáradni
- Tárolja száraz helyen a következő képzési alkalomra való felkészüléshez
- Végezze el a használat utáni ellenőrzést

> KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com