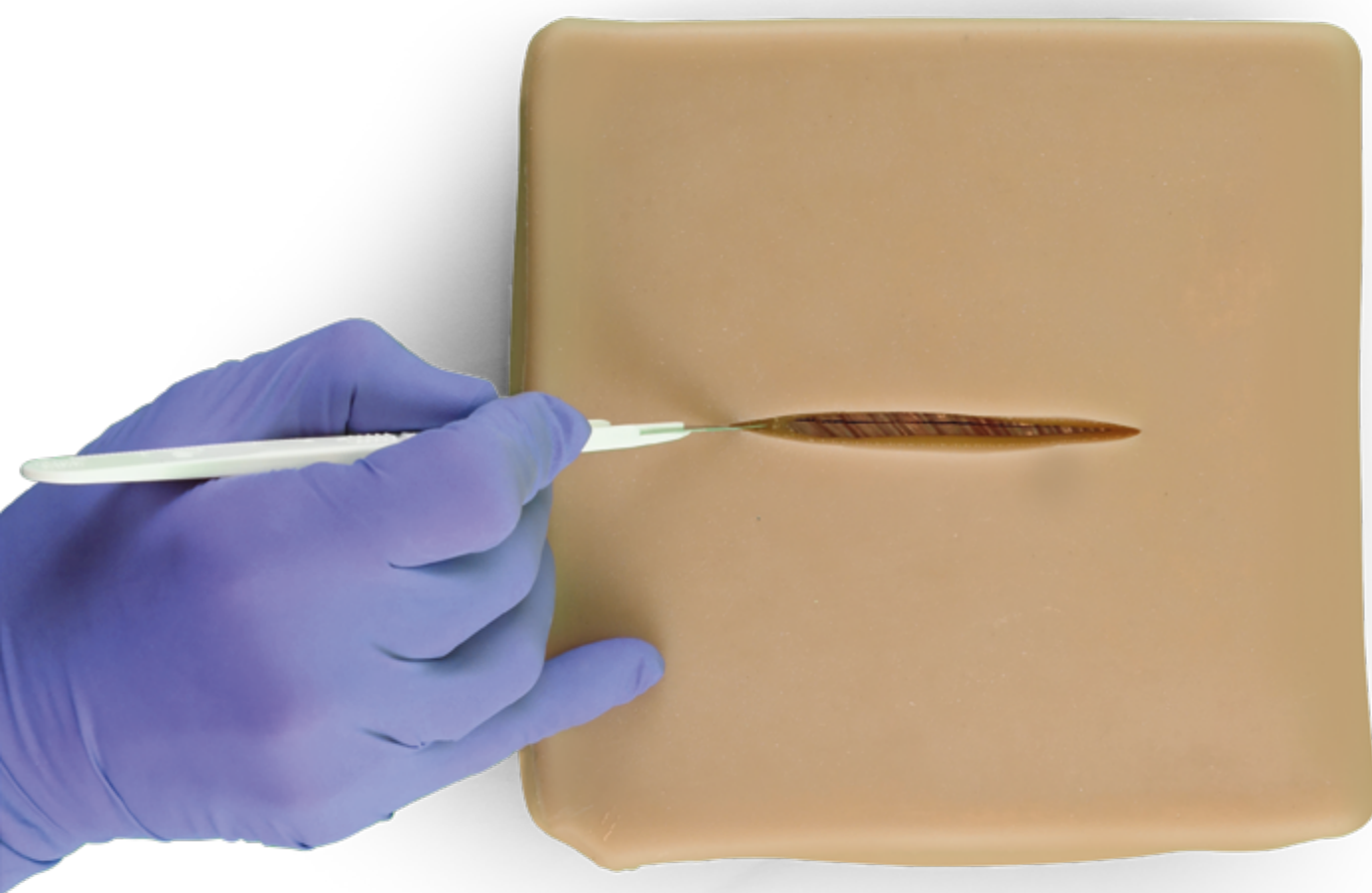




BLOQUE DE SUTURA

BLOQUE DE SUTURA

➤ 1. OBJETIVO DEL MANUAL

El STOPS Medical Suture Block® es un dispositivo de entrenamiento médico diseñado para la aplicación práctica directa con las manos, a fin de desarrollar destreza en la administración de anestesia local, en la sutura y en la colocación de grapas en laceraciones y lesiones de tejidos profundos.

Este manual está destinado a permitir que los usuarios realicen procedimientos de servicio y mantenimiento previos y posteriores. El cumplimiento de los procedimientos aquí contenidos garantizará años de funcionamiento continuo y óptimo.

Componentes:

- 1) 1- Bloque muscular simulado
- 2) 1- Funda de piel de silicona reparable por el usuario

Inspección Técnica Limitada Pre y Postoperatorial (LTI):

Bloque Muscular

- Asegúrese de que el bloque muscular no tenga roturas ni desgarros
- Asegúrese de que el músculo simulado esté firmemente sujeto a la capa de plástico ABS

Manga de Piel de Silicona

- Inspeccione la manga en busca de roturas, desgarros o laceraciones
- Asegúrese de que todas las reparaciones previas sean aceptables y hayan tenido el tiempo requerido para curarse

Para poner el sistema en funcionamiento:

- Realice el inventario completo y la comprobación previa al uso de LTI y de servicio
- Deslice la funda de piel de silicona sobre el bloque de músculo simulado
- Inspeccione todo el sistema para comprobar que quede suficientemente ajustado

Para la creación de laceraciones y la reparación de heridas de procedimientos menores:

- Con un bisturí o un cuchillo afilado, cree una laceración en la piel de silicona en la ubicación deseada y con las dimensiones deseadas
- Cierre la herida utilizando suturas o grapas, siguiendo el protocolo médico adecuado

Servicio y Mantenimiento Posoperatorios:

- Inspeccione el bloque muscular en busca de roturas, desgarros o laceraciones
- Inspeccione la piel de silicona en busca de roturas, desgarros o laceraciones
- Limpie todas las partes del Suture block® con jabón y agua y deje que se sequen
- Guárdelo en un lugar seco en preparación para la próxima sesión de entrenamiento

Reparación postoperatoria:

Reparación de laceración en manga cutánea de silicona:

- Limpie completamente la zona a reparar con alcohol, asegurándose de que no haya suciedad ni restos alrededor de la zona de reparación
- Utilizando el material de reparación STOPS Medical, aplique una pequeña cantidad en la zona a reparar con un bajalenguas o dispositivo similar
- Cierre gradualmente los bordes de la herida, alisando la superficie para asegurar que la cicatriz sea mínima
- Una vez que la zona de reparación haya sido cerrada, deje el material en reposo durante 2-4 horas hasta que esté completamente seco. Se puede utilizar una pistola de aire caliente o un secador de pelo para acelerar el proceso de reparación

INFORMACIÓN DE CONTACTO



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com