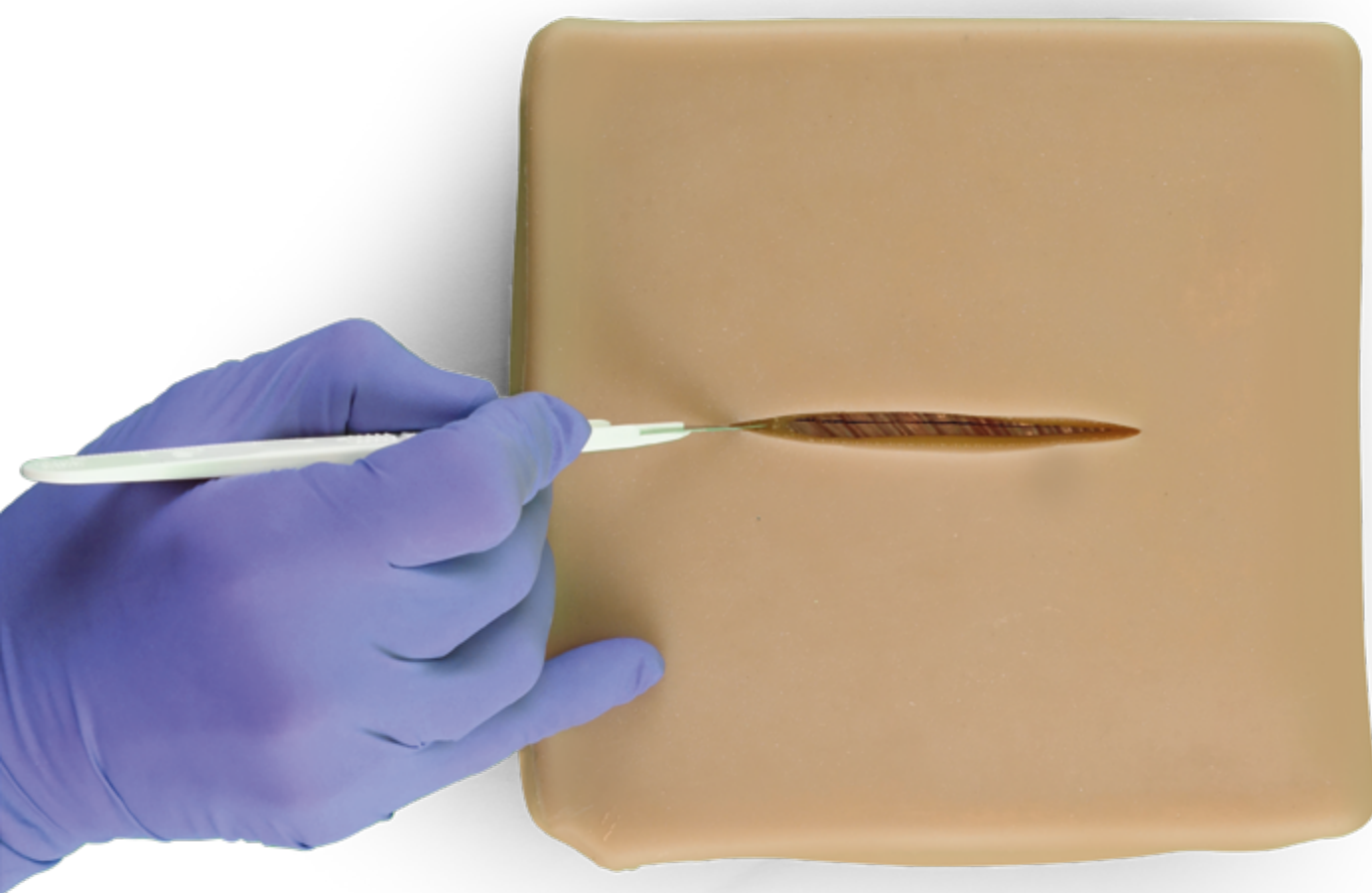




BLOC DE SUTURE

BLOC DE SUTURE

> 1. OBJET DU MANUEL

Le STOPS Medical Suture Block® est un dispositif de formation médicale conçu pour des travaux pratiques permettant de développer la maîtrise de l'administration d'un anesthésique local, de la réalisation de sutures et de la pose d'agrafes sur des lacérations et des lésions des tissus profonds.

Ce manuel est destiné à permettre aux utilisateurs d'effectuer les procédures de service et de maintenance préalables et ultérieures. Le respect des procédures qu'il contient garantira des années de performances continues et optimales.

Composants:

- 1) 1- Bloc musculaire simulé
- 2) 1- Manchon cutané en silicone réparable par l'utilisateur

Inspection Technique Limitée Pré et Post-Opérationnelle (LTI):

Bloc musculaire

- S'assurer que le bloc musculaire ne présente ni déchirures ni fissures
- S'assurer que le muscle simulé est solidement fixé à la couche en plastique ABS

Manchon cutané en silicone

- Inspecter le manchon pour déceler toute déchirure, fissure ou lacération
- S'assurer que toutes les réparations précédentes sont acceptables et ont eu le temps nécessaire pour prendre

Pour mettre le système en service:

- Effectuer un inventaire complet et une vérification préopérationnelle du LTI et de maintenance
- Faire glisser la gaine de peau en silicone sur le bloc musculaire simulé
- Inspecter l'ensemble du système pour vérifier qu'il est suffisamment ajusté

Pour créer des lacérations et réaliser la réparation de plaies pour des gestes mineurs :

- À l'aide d'un scalpel ou d'un couteau bien aiguisé, créer une lacération dans la peau en silicone à l'endroit souhaité et selon les dimensions souhaitées
- Fermer la plaie à l'aide de sutures ou d'agrafes en suivant le protocole médical approprié

Service Et Maintenance Après Utilisation:

- Inspecter le bloc musculaire à la recherche de fissures, déchirures ou lacérations
- Inspecter la peau en silicone à la recherche de fissures, déchirures ou lacérations
- Nettoyer toutes les parties du Suture block® à l'eau et au savon, puis laisser sécher
- Conserver dans un endroit sec en prévision de la prochaine séance d'apprentissage

Réparation post-opératoire:

Réparation de lacération du manchon cutané en silicone :

- Nettoyez complètement la zone à réparer avec de l'alcool en veillant à ce qu'il n'y ait aucune saleté ni aucun débris autour de la zone de réparation
- En utilisant le matériau de réparation STOPS Medical, appliquez une petite quantité sur la zone de réparation à l'aide d'un abaisse-langue ou d'un dispositif similaire
- Rapprochez progressivement les bords de la plaie en lissant la surface afin de minimiser l'apparence de la cicatrice
- Une fois la zone de réparation refermée, laissez reposer pendant 2-4 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux peut être utilisé pour accélérer le processus de réparation

> COORDONNÉES



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com