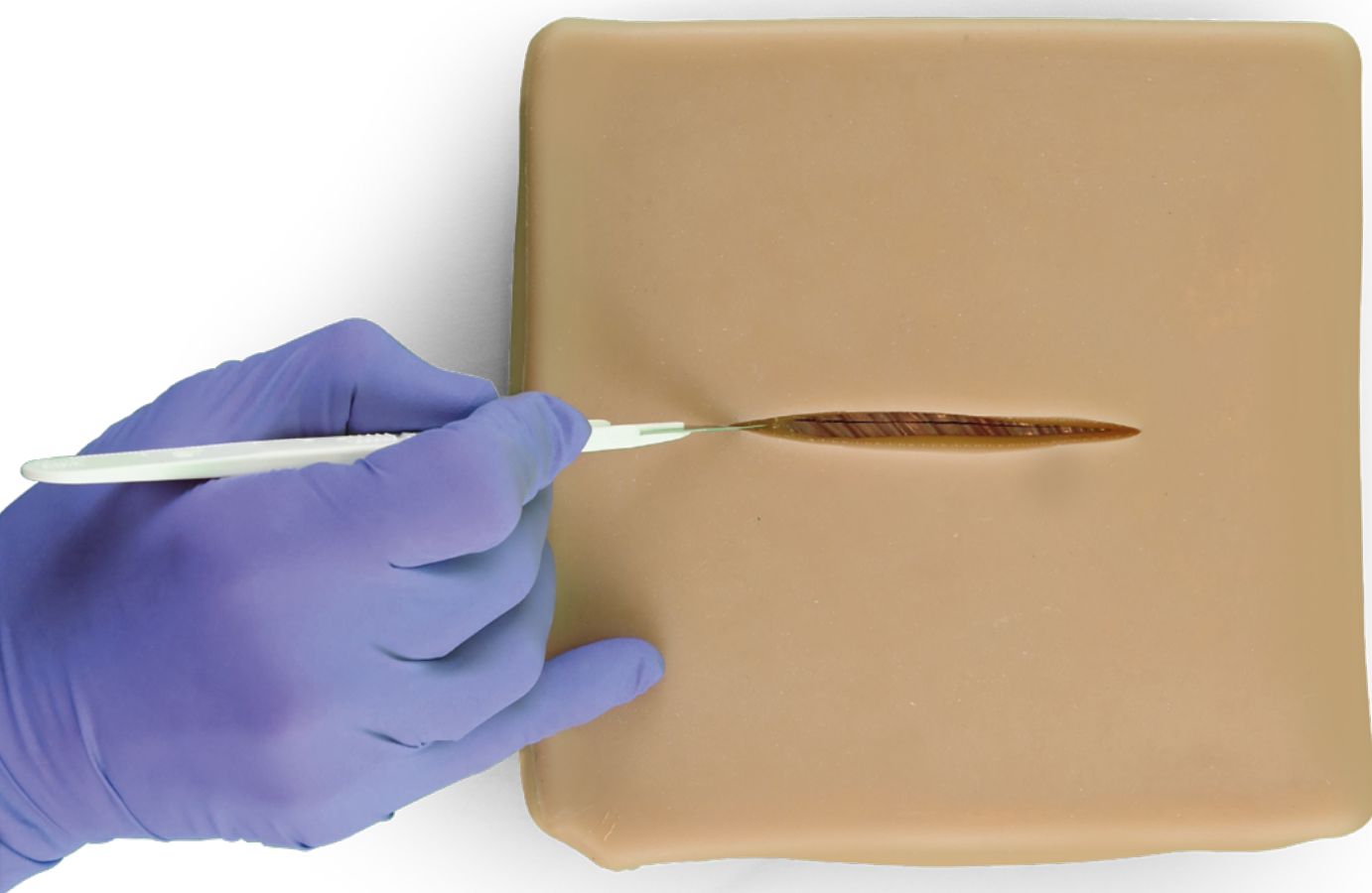




БЛОК ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1025975, 1025976

БЛОК ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

➤ 1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

STOPS Medical Suture Block® — это медицинский тренажер предназначенное для отработки практических навыков по введению местного анестетика, наложению швов и скоб при обработке разрывов кожи и повреждений глубоких тканей.

Это руководство предназначено для того, чтобы пользователи могли выполнять процедуры технического обслуживания изделия до и после его эксплуатации. Соблюдение изложенных здесь процедур обеспечит многолетнюю бесперебойную и оптимальную работу изделия.

Компоненты:

- 1) 1- Имитированный мышечный блок
- 2) 1- Силиконовый кожный рукав с возможностью ремонта пользователем

Пред- и постэксплуатационный ограниченный технический осмотр:

Мышечный блок

- Убедитесь, что в мышечном блоке нет разрывов или надрывов
- Убедитесь, что имитированная мышца надежно закреплена на слое пластика ABS

Силиконовый кожный чехол

- Осмотрите чехол на наличие разрывов, надрывов, рассечений
- Убедитесь, что все предыдущие ремонты выполнены надлежащим образом и имели необходимое время для затвердевания

Для ввода системы в эксплуатацию:

- Проведите полную инвентаризацию и предэксплуатационную проверку и сервисного обслуживания
- Наденьте силиконовый кожный чехол на симулированный мышечный блок
- Проверьте всю систему на достаточную плотность прилегания

Для создания рваных ран и отработки их восстановления при несложных процедурах:

- С помощью скальпеля или острого ножа создайте разрыв в силиконовой коже в нужном месте и требуемых размеров
- Закройте рану, используя швы или скобки, в соответствии с надлежащим медицинским протоколом

Сервисное обслуживание и технический уход после эксплуатации:

- Осмотрите мышечный блок на наличие разрывов, надрывов или порезов
- Осмотрите силиконовую кожу на наличие разрывов, надрывов или порезов
- Очистите все части Шовного блока мылом и водой, затем дайте им высохнуть
- Храните в сухом месте до следующего этапа обучения

Восстановление после использования:

Восстановление разрыва силикона:

- Тщательно очистите область восстановления спиртом, убедившись, что вокруг места ремонта нет грязи или посторонних частиц
- Используя ремонтный материал STOPS Medical, нанесите небольшое количество на место повреждения с помощью деревянного шпателя или аналогичного инструмента
- Постепенно сближьте края раны, выравнивая поверхность, чтобы свести к минимуму образование рубца
- После закрытия места повреждения дайте ремонту постоять в течение 2-4 часов до полного высыхания. Для ускорения процесса можно использовать строительный фен или фен для сушки волос

➤ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com