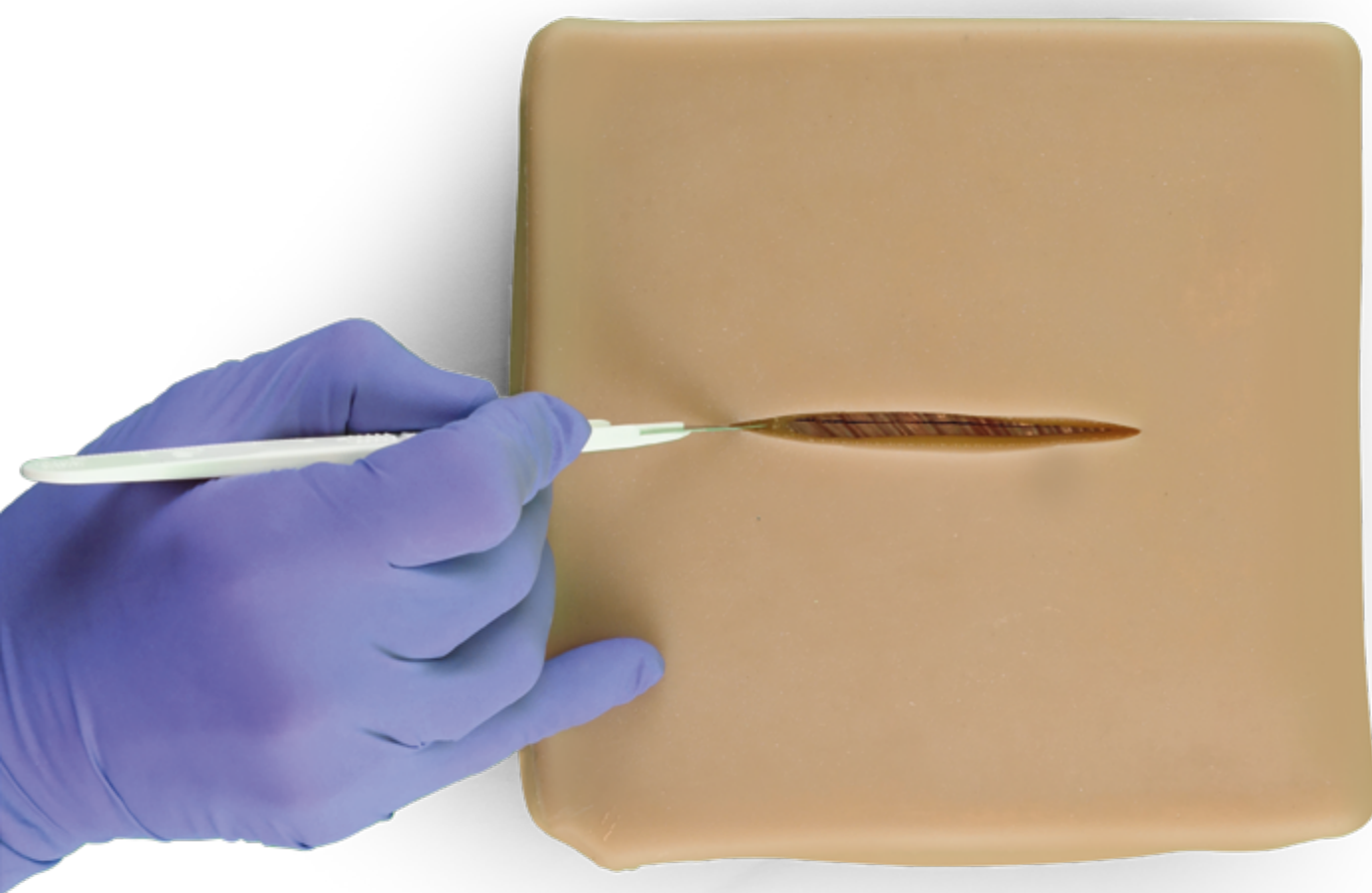




## BLOCCO PER SUTURA

# BLOCCO PER SUTURA

## > 1. SCOPO DEL MANUALE

Il STOPS Medical Suture Block® è un dispositivo per la formazione medica progettato per l'applicazione pratica diretta, al fine di sviluppare competenza nella somministrazione di anestetico locale, nella sutura e nell'applicazione di punti metallici per lacerazioni e lesioni dei tessuti profondi.

Il presente manuale è pensato per consentire agli utenti di eseguire le procedure di controllo e manutenzione prima e dopo l'utilizzo. L'osservanza delle procedure qui descritte garantirà anni di funzionamento continuo e ottimale.

### Componenti:

- 1) 1- Blocco muscolare simulato
- 2) 1- Manicotto cutaneo in silicone riparabile dall'utente

### Ispezione Tecnica Limitata Pre e Post-Operativa (LTI):

#### Blocco muscolare

- Verificare che il blocco muscolare non presenti strappi o lacerazioni
- Verificare che il muscolo simulato sia saldamente fissato allo strato di plastica ABS

#### Guaina in silicone per la pelle

- Ispezionare la guaina per individuare strappi, lacerazioni o tagli
- Verificare che tutte le riparazioni precedenti siano accettabili e abbiano avuto il tempo necessario per indurirsi

### Per mettere in servizio il sistema:

- Inventario completo e controllo pre-operativo LTI e di manutenzione
- Far scorrere la guaina cutanea in silicone sopra il blocco muscolare simulato
- Ispezionare l'intero sistema per verificare un'adeguata aderenza

### Per la creazione di lacerazioni e la riparazione di ferite in piccole procedure:

- Utilizzando un bisturi o un coltello affilato, creare una lacerazione nella pelle in silicone nel punto desiderato e con le dimensioni desiderate
- Chiudere la ferita utilizzando suture o punti metallici seguendo il corretto protocollo medico

### Assistenza e manutenzione dopo l'uso:

- Ispezionare il blocco muscolare per strappi, tagli o lacerazioni
- Ispezionare la pelle in silicone per strappi, tagli o lacerazioni
- Pulire tutte le parti del Suture block® con sapone e acqua, lasciare asciugare
- Riporre in un luogo asciutto in preparazione della successiva sessione di formazione

### Riparazione post-operatoria:

#### Riparazione della lacerazione della guaina cutanea in silicone:

- Pulire accuratamente l'area da riparare con alcool, assicurandosi che non vi siano sporco o detriti intorno all'area di riparazione
- Utilizzando il materiale di riparazione STOPS Medical, applicare una piccola quantità sull'area da riparare con un abbassalingua o un dispositivo simile
- Chiudere gradualmente i margini della ferita avvicinandoli e levigando la superficie per ridurre al minimo la cicatrizzazione
- Una volta che l'area di riparazione è stata chiusa, lasciare riposare per 2-4 ore fino a completa asciugatura. È possibile utilizzare una pistola termica o un asciugacapelli per velocizzare il processo di riparazione

## > INFORMAZIONI DI CONTATTO



**3B Scientific**  
A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany

Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100

3bscientific.com • info@3bscientific.com