

装配说明

气道管理训练模型 P73 (1026007,1026076)

1. 撕下覆盖吸盘基座的透明塑料薄膜。



2. 轻柔地牵拉模型颈部皮肤以暴露吸盘基座杠杆。



3. 将气道管理训练模型置于清洁平坦的台面上。用力按压吸盘底座并向下拉动杠杆以启动吸引功能，同时将头部牢固锁定。



4. 小心地牵开颈部皮肤，以显露颈部内部的红色圆形连接器。



5. 将主支气管导管插入连接器，并顺时针旋转以确保牢固锁定。




6. 将两个绿色充气囊分别连接至左右主支气管以模拟肺部，
第三个充气囊连接至胃部端口以模拟胃部。



* 扫描Smarter Simulation标签上的条形码以注册您的气道管理训练模型，并访问数字文档、备件与耗材信息、产品视频等更多内容。

* 请妥善保存标签以供售后维修使用。

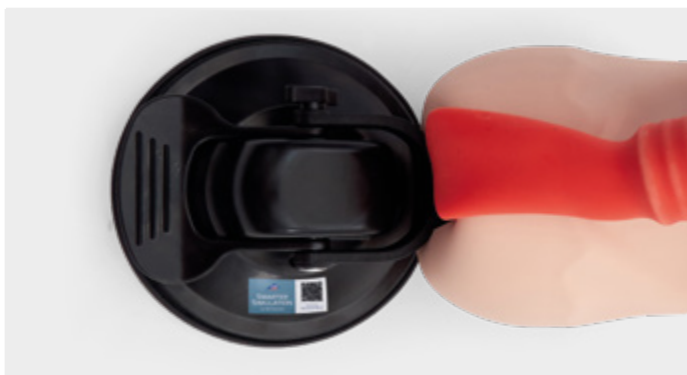

4级段支气管（1026077）

第四级分段支气管是可选附加组件，可单独购买，旨在增强气道管理训练器的功能性。

使用方法：将主支气管从红色圆形连接器上分离，并将其替换为第四级节段支气管。



如果您有任何疑问或需要支持，请扫描此处



Suzhou 3B Scientific Co., Ltd. • 苏州新区火炬路45号 • 科技工业园 • 215009
Tel:+86 512 68081123 • Fax:+86 512 68258957 • E-Mail:sales@3bscientific.cn