



БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКА ДЛЯ СОБАК / КОМПЛЕКТ


БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКА ДЛЯ СОБАК / КОМПЛЕКТ

УХОД, ОБРАЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Базовая модель зубного техника для собак (1025649, 1026126)

Компоненты:

- Голова собаки, представлена в коричневом и чёрном цветах
- Набор для профессиональной чистки челюсти
- Набор для рентгенографии челюсти
- Съёмный язык
- Банка 30 мл с искусственным зубным камнем
- Регулируемый зажимной механизм

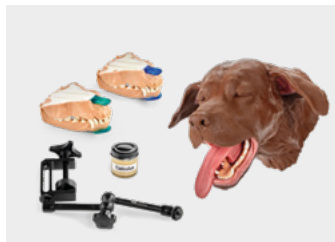

1025649

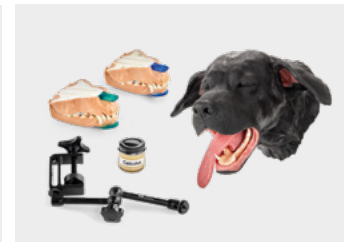


1026126

Комплект зубного техника для собак (1025652, 1026127)

Компоненты:

- Голова собаки, представлена в коричневом и чёрном цветах
- Набор для профессиональной чистки челюсти x2
- Набор для рентгенографии челюсти
- Набор с прозрачной челюстью
- Съёмный язык
- Банка 30 мл с искусственным зубным камнем
- Регулируемый зажимной механизм
- Сумка для переноски

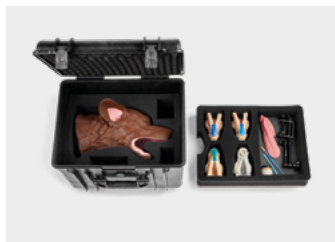

1025652



1026127

ОЧИСТКА

Мягкая кожа модели зубного техника для собак может показаться немного жирноватой, но это характерно для мягких силиконов. Все компоненты — как жесткие, так и мягкие — необходимо регулярно очищать с использованием мягкого моющего средства и теплой воды. Никогда не используйте агрессивные химические вещества или чистящие средства. Все внутренние мягкие элементы могут быть повреждены при неаккуратном обращении.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически осматривайте устройство на предмет поврежденных компонентов. Если какие-либо мягкие элементы окажутся повреждены, их можно восстановить с помощью силиконового клея аквариумного класса (предпочтительно прозрачного). В случае невозможности ремонта доступны замены.

Модель зубного техника для собак поставляется в полностью собранном виде. Рекомендуется ознакомиться с направлением и расположением всех компонентов, чтобы лучше ориентироваться в их устройстве и облегчить правильную замену расходных или поврежденных деталей. Головной компонент модели выполнен с высокой достоверностью внешнего вида и отклика, что придает коже деликатный характер и требует осторожного обращения и хранения для предотвращения повреждений.

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Задержите с обеих сторон верхние губы носа модели и аккуратно откатите нос назад (каудально), пока не увидите монтажную поверхность и направляющие верхней челюсти внутри полости рта. Используйте большой и указательный пальцы, чтобы осторожно раздвинуть верхние губы, освободив место для верхней челюсти. Совместите монтажные направляющие на носовой головке с пазами на верхней челюсти и аккуратно вставьте верхнюю челюсть, опуская её в полость рта (каудально) до тех пор, пока она не остановится и не встанет на своё место. Следите за тем, чтобы в процессе установки не защемить внутреннюю губу, чтобы избежать разрыва. Наконец, поверните нос вперед (рострально) и аккуратно потяните нос/кожу вперед, чтобы убедиться, что монтажная вкладка верхней челюсти плотно вошла в карман на носовой коже. Нанесение небольшого количества смазки на основе вазелина может обеспечить более плавную установку.

УДАЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Аккуратно откиньте нос модели назад (каудально), зафиксировав верхние губы по обеим сторонам носа до тех пор, пока крепёжная вкладка верхней челюсти не освободится от нижней поверхности носа. Нос и губы окажутся перевернутыми. Избегайте опускания носа ниже уровня, на котором видна крепёжная пластина, чтобы не повредить модель. Чтобы снять верхнюю челюсть с головы, зажмите большим пальцем цветную вкладку и, используя указательный палец, зацепитесь за область позади клыкового зуба, затем потяните её вверх (рострально) до полного отделения от двух направляющих. Крепёж должен отделиться от направляющих при минимальном усилии. Не оставляйте нос откинутым назад на длительное время, так как это может привести к деформации силиконовой резиновой головы.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКА ДЛЯ СОБАК / КОМПЛЕКТ

УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Небольшое количество вазелина облегчит установку нижней челюсти. Совместите два крепежных штифта из нержавеющей стали с соответствующими отверстиями в нижней челюсти. Надавите на надподъязычную область с брюшной стороны, одновременно сдвигая нижнюю челюсть по двум штифтам в каудальном направлении до её остановки. Убедитесь, что крепление языка расположено правильно внутри нижней челюсти и силикон не застрял под ней. Осторожно потяните дистальную часть нижней губы вперёд (в направлении носа) и к дорсальной поверхности, чтобы установить нижнюю губу на фланце крепления нижней челюсти. Для установки языка найдите два пластиковых крепежных стержня в центральной нижней части ротовой полости и совместите их с соответствующими отверстиями в основании языка. Сначала зафиксируйте задний крючок, а затем потяните язык вперёд, чтобы закрепить его на переднем крючке.

УДАЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Сначала извлеките язык, аккуратно потянув его вверх/вперед, чтобы отделить его от переднего пластикового крепежного стержня, затем повторите операцию с задним стержнем. Нижнюю челюсть можно снять, не извлекая язык, однако возвращение нижней челюсти на место упрощается, если сначала удалить язык. Потяните дистальную часть нижней губы вперёд/вниз (вентрально), чтобы отделить её от фланца крепления нижней челюсти. Чтобы извлечь челюсть, переверните голову и, поддерживая модель, зафиксируйте область черепа. Затем, обхватив челюсть большим и указательным пальцами в направлении передней части, потяните её до полного отделения от двух крепежных шпилек из нержавеющей стали. Возможно, потребуется лёгкое движение из стороны в сторону. Учтите, что чрезмерное применение силы или крутящего момента к металлическим шпилькам может повредить челюсть.

УСТАНОВКА ЗАЖИМА

Найдите резьбовую вставку на каудальном конце головы собаки. Ввинтите конец регулируемого рычага в резьбовую вставку. Другой конец рычага, оснащённый зажимом, можно открыть и закрепить на столе или другой надёжной рабочей поверхности, повернув рукоятку до положения закрытия. Закрепите зажим на рабочей поверхности. Расположите голову, перемещая её вместе с регулируемым рычагом. Когда голова окажется в нужном положении, зафиксируйте рычаг, затянув центральную рукоятку. Это заблокирует перемещение рычага. Не перетягивайте, так как это может повредить рычаг.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКУССТВЕННОМ КОНКРЕМЕНТЕ

- Состав: стоматологический камень, ацетон, Intro Cure 20 Clear (полиуретановое покрытие).
- Избегайте вдыхания пыли (при скейлинге и проведении других процедур обязательно используйте маску) и немедленно промывайте в случае контакта с глазами или кожей.
- Содержимое легко воспламеняется; храните его вдали от источников тепла и огня.
- Обратите внимание, что зажим используется для установки головы в горизонтальном, а не вертикальном положении. Он служит для поддержания головы в неподвижном состоянии во время стоматологических процедур.

ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И ПРОЦЕДУРЫ

В данной зубной модели собаки представлены следующие анатомические особенности:

- Голова с правильным соотношением веса и гибкой кожей
- Эластичные десны и альвеолярный слизистый слой
- Надкостница
- Костный материал, воссоздающий скелет с высокой точностью
- Отдельные, точно сформированные зубы
- Периодонтальная связка
- Язык

Можно продемонстрировать следующие стоматологические процедуры:

- Ручное и ультразвуковое удаление зубного камня
- Зондирование пародонта и введение местной анестезии
- Рентгенологическое обследование*
- Обучение интубации

* Используйте набор рентген-челюсти для реалистичной практики визуализации.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКА ДЛЯ СОБАК / КОМПЛЕКТ

> ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ

Собачья зажимная рука	1025637
Собачий стоматологический язычок	1025647
Собачий рентгеновский набор для челюсти	1025651
Собачий 30ml искусственного зубного камня	1025650
Собачий стоматологический компонент ларингофаринкса	1025641
Собачья чистка и полировка — нижняя челюсть	1025642
Собачья чистка и полировка — верхняя челюсть	1025643
Собачья голова, коричневая	1025640
Собачья голова, черная	1025639

> КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com