

SimOccluder Guía del usuario

1. Alimentación del dispositivos

Encendido:

- Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido ubicado en la parte posterior.
- Doble parpadeo azul (cada 3 segundos): el dispositivo está encendido y buscando Bluetooth.
- Rápido doble parpadeo azul (una vez): el Bluetooth acaba de conectarse – breve destello de confirmación.

Apagado:

- Mantenga presionado el botón de encendido durante hasta 3 segundos para apagar el dispositivo.
- Parpadeo rojo rápido: indica que se está manteniendo presionado el botón de encendido.
- Rojo fijo: el dispositivo se está apagando – guarda el estado y reinicia el motor antes de apagarse.



2. Bluetooth-Verbindungsstatus2. Estado de la conexión Bluetooth

- Doble parpadeo azul (cada 3 segundos): Buscando una conexión Bluetooth.
- Parpadeo azul único (cada 5 segundos): Conectado y funcionando con normalidad.

3. Dispositivo en Uso / Actividad Motora

- Parpadeo púrpura (cada 2 segundos): El motor está en movimiento o ejecutando la calibración de inicio.

4. Estado de la batería y de la carga

- Luz azul con efecto de respiración (desvanecimiento suave): Carga normal – déjelo conectado hasta que la carga se complete.
- Parpadeo triple en rojo (cada 3.5 segundos): Batería baja – cárguelo pronto.
- Luz roja con efecto de respiración (desvanecimiento suave): Error de carga – desenchufe y vuelva a conectar el cargador.
- Parpadeo doble rápido en rojo: Batería crítica – el dispositivo está a punto de apagarse. Cárguelo inmediatamente.

5. Condiciones de error

- Parpadeo en rojo (cada 0.5 segundos): error del sistema – el dispositivo requiere atención.
-

6. Tiempo de apagado automático

El dispositivo se apagará automáticamente si no hay actividad:

- Después de 15 minutos si no está conectado a Bluetooth.
 - Después de 60 minutos si está conectado pero no se usa.
-



Resumen de Colores LED

- **Azul** = Funcionamiento normal
 - **Morado** = Actividad del motor
 - **Rojo** = Advertencia de batería, error del sistema o apagado
-

Conectar SimOccluder a REALiTi 360

1. Encienda el sistema REALiTi 360 y luego conecte el monitor y la tableta de control.
2. Abra el panel de conexión
En la tableta Monitor, deslice de derecha a izquierda para abrir el panel de conexión.
3. Conecte SimOccluder
Seleccione SimOccluder de la lista y conéctelo al sistema REALiTi.
4. Ajuste la configuración de oclusión
En el Controlador, puede ajustar:
 - Valor de oclusión
 - Tiempo de tendencia

Toque 'Send' para aplicar la configuración.

Configuración de SimOccluder


1. Cambiar el nombre del dispositivo
Puede cambiar el nombre del dispositivo como desee (hasta 16 caracteres).
2. Actualización de firmware
 - Aparecerá una notificación emergente si se requiere una actualización de firmware.
 - También puede comprobar la versión actual del firmware y el estado de la actualización en la configuración.

Para Usuarios que No Utilizan REALITi 360

Conectar SimOccluder con la aplicación independiente SimOccluder

- 1. Descargue la aplicación SimOccluder**
Instale la aplicación SimOccluder en su dispositivo desde Google Play Store o Apple App Store – su descarga es gratuita.
- 2. Inicie la aplicación y encienda el dispositivo**
Abra la aplicación SimOccluder y encienda su dispositivo.
- 3. Escanear y conectar**
Utilice la aplicación para buscar dispositivos disponibles, luego seleccione su dispositivo y conéctelo.
- 4. Ajustar la configuración de oclusión**
Una vez conectado, puede ajustar los siguientes parámetros mediante el controlador:
 - Valor de oclusión
 - Tiempo de tendencia

Tape 'Play' para aplicar los ajustes.

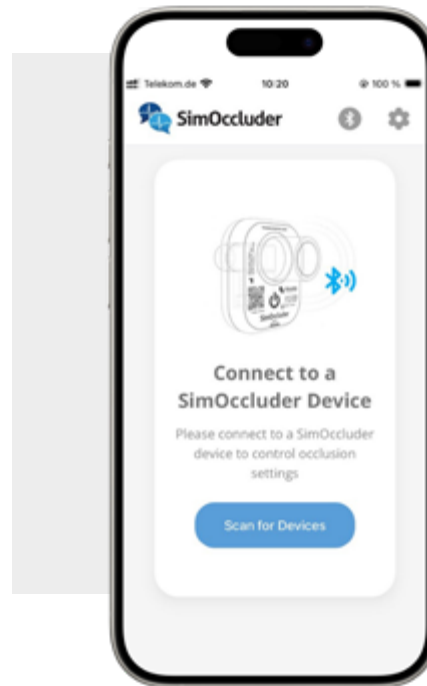

Descargue la aplicación SimOccluder gratis desde Google Play Store o Apple App Store

Configuración de la Aplicación SimOccluder

- 1. General**
 - Estado de la versión de la aplicación
 - Selección de idioma
- 2. Configuración del dispositivo**
 - Estado de conexión del dispositivo
 - Cambiar el nombre del dispositivo usando el botón 'Edit'
 - Desconectar dispositivo
 - Buscar otro dispositivo
- 3. Firmware del dispositivo**
 - Versión actual del firmware
 - Aviso de actualización de firmware (aparece si se requiere una actualización)
- 4. Depuración**
Ver información general del sistema:
 - Versión de la aplicación
 - Estado de la conexión
 - Información de la batería
 - Datos de oclusión
 - Información del dispositivo



Nota

Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su dispositivo para la aplicación SimOccluder. Si SimOccluder está conectado actualmente a otro dispositivo, desconéctelo primero antes de intentar conectarlo a un dispositivo diferente.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA,
POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com