

Guide d'utilisation de SimOccluder

1. Mise sous tension de l'appareil

Mise sous tension:

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière.
- Double clignotement bleu (toutes les 3 secondes): L'appareil est allumé et recherche une connexion Bluetooth.
- Double clignotement bleu rapide (une fois): Le Bluetooth vient de se connecter – bref clignotement de confirmation.

Mise hors tension:

- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- Clignotement rouge rapide: Indique que le bouton d'alimentation est maintenu enfoncé.
- Rouge fixe: L'appareil est en cours d'arrêt – enregistrement de l'état et réinitialisation du moteur avant l'extinction.



2. Statut de la connexion Bluetooth

- Double clignotement bleu (toutes les 3 secondes) : recherche d'une connexion Bluetooth.
- Clignotement bleu unique (toutes les 5 secondes) : connecté et fonctionnement normal.

3. Dispositif en Cours d'Utilisation / Activité Motrice

- Clignotement violet (toutes les 2 secondes) : le moteur se déplace ou exécute l'étalonnage de démarrage.

4. État de la batterie & de la charge

- Lumière bleue pulsée (fondu progressif) : Charge normale – laissez-le connecté jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé.
- Triple clignotement rouge (toutes les 3.5 secondes) : Batterie faible – rechargez bientôt.
- Lumière rouge pulsée (fondu progressif) : Erreur de charge – débranchez puis rebranchez le chargeur.
- Double clignotement rouge rapide : Batterie critique – l'appareil est sur le point de s'éteindre. Rechargez immédiatement.

5. Conditions d'erreur

- Clignotement rouge (toutes les 0.5 secondes) : Erreur système – l'appareil nécessite une attention.
-

6. Minuterie d'arrêt automatique

L'appareil s'éteindra automatiquement en l'absence d'activité :

- Après 15 minutes s'il n'est pas connecté au Bluetooth.
 - Après 60 minutes s'il est connecté mais non utilisé.
-



Résumé des couleurs des LED

- **Bleu** = Fonctionnement normal
 - **Violet** = Activité motrice
 - **Rouge** = Alerte batterie, erreur système ou arrêt
-

Connexion de SimOccluder à REALTi 360

1. Allumez le système REALTi 360, puis connectez le moniteur et la tablette de contrôle.
 2. Ouvrez le panneau de connexion
Sur la tablette Moniteur, faites glisser le doigt de droite à gauche pour ouvrir le panneau de connexion.
 3. Connectez SimOccluder
Sélectionnez SimOccluder dans la liste et connectez-le au système REALTi.
 4. Réglez les paramètres d'occlusion
Dans le Contrôleur, vous pouvez régler :
 - Valeur d'occlusion
 - Durée de la tendance

Touchez « Envoyer » pour appliquer les paramètres.
-

Paramètres de SimOccluder


1. Modifier le nom de l'appareil
Vous pouvez renommer l'appareil comme vous le souhaitez (jusqu'à 16 caractères).
2. Mise à jour du micrologiciel
 - Une notification contextuelle apparaîtra si une mise à jour du micrologiciel est requise.
 - Vous pouvez également vérifier la version actuelle du micrologiciel et le statut de la mise à jour dans les paramètres.

Pour les non-utilisateurs de REALTi 360

Connexion de SimOccluder à l'application autonome SimOccluder

1. **Téléchargez l'application SimOccluder**
Installez l'application SimOccluder sur votre appareil depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store – son téléchargement est gratuit.
2. **Lancez l'application et allumez l'appareil**
Ouvrez l'application SimOccluder et allumez votre appareil.
3. **Recherchez et connectez-vous**
Utilisez l'application pour rechercher les appareils disponibles, puis sélectionnez votre appareil et connectez-vous à celui-ci.
4. **Réglez les paramètres d'occlusion**
Une fois la connexion établie, vous pouvez régler les paramètres suivants via le contrôleur :
 - Valeur d'occlusion
 - Durée de la tendance

Touchez 'Play' pour appliquer les paramètres.

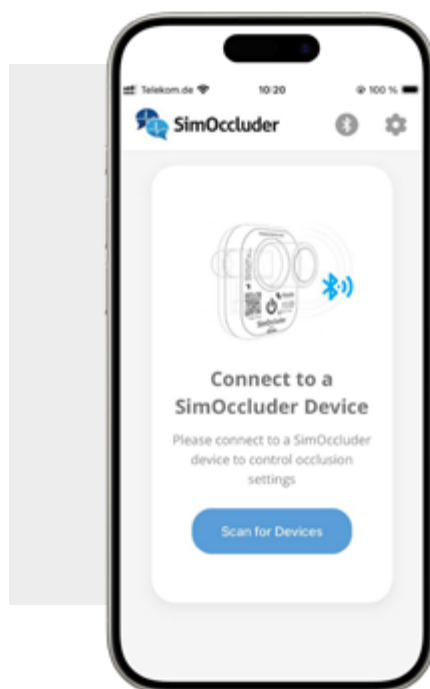

Téléchargez l'application SimOccluder gratuitement depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store

Paramètres de l'application SimOccluder

1. **Général**
 - Statut de la version de l'application
 - Sélection de la langue
2. **Paramètres de l'appareil**
 - Statut de connexion de l'appareil
 - Modifier le nom de l'appareil à l'aide du bouton « Modifier »
 - Déconnecter l'appareil
 - Rechercher un autre appareil
3. **Micrologiciel de l'appareil**
 - Version actuelle du micrologiciel
 - Invite de mise à jour du micrologiciel (s'affiche si une mise à jour est requise)
4. **Débogage**
View general system information:
 - Version de l'application
 - Statut de connexion
 - Informations sur la batterie
 - Données d'occlusion
 - Informations sur l'appareil



Remarque

Veuillez vous assurer que le Bluetooth est activé sur votre appareil pour l'application SimOccluder. Si SimOccluder est actuellement connecté à un autre appareil, déconnectez-le d'abord avant d'essayer de le connecter à un autre appareil.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,
VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com