

SimOccluder Felhasználói Útmutató

1. A készülék tápellátása

Bekapcsolás:

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a hátoldalon található bekapcsoló gombot.
- Kék dupla felvillanás (minden 3 másodpercben): a készülék be van kapcsolva, és Bluetooth-kapcsolatot keres.
- Gyors kék dupla felvillanás (egyszer): a Bluetooth kapcsolat most jött létre – rövid visszajelző villanás.

Kikapcsolás:

- A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot legfeljebb 3 másodpercig.
- Gyors piros villogás: jelzi, hogy a bekapcsoló gombot folyamatosan nyomva tartják.
- Folyamatos piros fény: a készülék kikapcsolás alatt van – állapotmentés és a motor visszaállítása történik a kikapcsolás előtt.



2. Bluetooth Kapcsolat Állapota

- Kék dupla felvillanás (minden 3 másodpercben): Bluetooth-kapcsolat keresése.
- Kék egyszeri felvillanás (minden 5 másodpercben): csatlakoztatva és normál üzemben működik.

3. Eszköz Használat Közben / Motoros Aktivitás

- Lila villogás (2 másodpercenként): a motor mozog, vagy az indítási kalibráció fut.

4. Akkumulátor és töltés állapota

- Kék pulzáló fény (egyenletes elhalványulás): Normál töltés – hagyja csatlakoztatva, amíg teljesen fel nem töltődik.
- Piros hármas villanás (minden 3,5 másodpercben): Alacsony töltöttség – hamarosan töltse fel.
- Piros pulzáló fény (egyenletes elhalványulás): Töltési hiba – húzza ki, majd csatlakoztassa újra a töltőt.
- Gyors piros dupla villanás: Kritikus töltöttség – az eszköz hamarosan kikapcsol. Töltse fel azonnal.

5. Hibaállapotok

- Piros villogás (0.5 másodpercenként): Rendszerhiba – a készülék figyelmet igényel.

6. Automatikus kikapcsolás időzítése

Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha nincs aktivitás:

- 15 perc után, ha nincs Bluetooth-kapcsolat.
- 60 perc után, ha csatlakoztatva van, de nincs használatban.



LED színek összefoglalása

- **Kék** = Normál működés
- **Lila** = Motoros aktivitás
- **Piros** = Akkumulátor-figyelmeztetés, rendszerhiba vagy leállás

A SimOccluder csatlakoztatása a REALITi 360 rendszerhez

1. Kapcsolja be a REALITi 360 rendszert, majd csatlakoztassa a monitort és a vezérlő táblagépet.
2. Nyissa meg a Csatlakozási panelt
A Monitor táblagépen húzza az ujját jobbról balra a csatlakozási panel megnyitásához.
3. Csatlakoztassa a SimOccluder eszközt
Válassza ki a SimOccluder eszközt a listából, és csatlakoztassa a REALITi rendszerhez.
4. Állítsa be az okklúziós beállításokat
A Vezérlőben a következőket állíthatja be:
 - Okklúziós érték
 - Trend időtartam

Érintse meg a 'Send' gombot a beállítások alkalmazásához.

SimOccluder Beállítások


1. Készüléknév módosítása
A készülék nevét tetszés szerint átnevezheti (a név hossza legfeljebb 16 karakter lehet).
2. Firmware frissítés
 - Felugró értesítés jelenik meg, ha firmware-frissítésre van szükség.
 - A beállítások menüben ellenőrizheti az aktuális firmware-verziót és a frissítés állapotát is.

Nem REALITi 360 felhasználók számára

A SimOccluder csatlakoztatása a SimOccluder Standalone App alkalmazáshoz

- 1. Töltse le a SimOccluder alkalmazást**
Telepítse a SimOccluder alkalmazást az eszközére a Google Play Store-ból vagy az Apple App Store-ból – a letöltés ingyenes.
- 2. Indítsa el az alkalmazást, és kapcsolja be az eszközt**
Nyissa meg a SimOccluder alkalmazást, és kapcsolja be az eszközt.
- 3. Keresés és csatlakozás**
Használja az alkalmazást az elérhető eszközök kereséséhez, majd válassza ki, és csatlakozzon a saját eszközéhez.
- 4. Az okklúziós beállítások módosítása**
Csatlakoztatás után a következő beállításokat módosíthatja a vezérlőn keresztül:
 - Okklúzióérték
 - Trendidő

Érintse meg a 'Play' gombot a beállítások alkalmazásához.

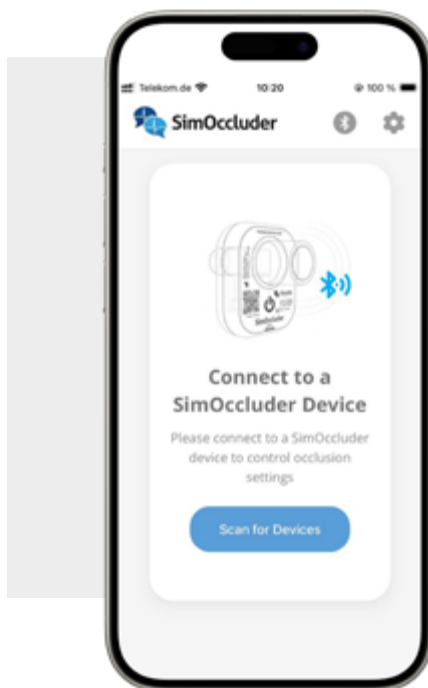

Töltse le ingyen a SimOccluder alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból

SimOccluder alkalmazásbeállítások

- 1. Általános**
 - Alkalmazásverzió állapota
 - Nyelvválasztás
- 2. Készülékbeállítások**
 - Készülék csatlakozási állapota
 - Készüléknév módosítása az 'Edit' gombbal
 - Készülék leválasztása
 - Másik készülék keresése
- 3. Készülék firmware-je**
 - Jelenlegi firmware-verzió
 - Firmware-frissítési figyelmeztetés (akkor jelenik meg, ha frissítés szükséges)
- 4. Hibakeresés**
View általános rendszerinformációk megtekintése:
 - Alkalmazásverzió
 - Kapcsolat állapota
 - Akkumulátor-információk
 - Elzáródási adatok
 - Készülék információk



Megjegyzés

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az eszközén be van kapcsolva a Bluetooth a SimOccluder alkalmazáshoz. Ha a SimOccluder jelenleg egy másik eszközhöz csatlakozik, először válassza le arról, mielőtt megpróbálna egy másik eszközhöz csatlakozni.

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, ITT SZKENNELJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com