

Guida per l'utente SimOccluder

1. Alimentazione del dispositivo

Accensione:

- Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione situato sul retro.
- Doppio lampeggio blu (ogni 3 secondi): il dispositivo è acceso e sta cercando il Bluetooth.
- Doppio lampeggio blu rapido (una volta): il Bluetooth si è appena connesso – breve lampeggio di conferma.

Spegnimento:

- Continuare a tenere premuto il pulsante di accensione per un massimo di 3 secondi per spegnere.
- Lampeggio rosso rapido: indica che il pulsante di accensione è tenuto premuto.
- Rosso fisso: il dispositivo si sta spegnendo – salvataggio dello stato e reset del motore prima dello spegnimento.



2. Stato della Connessione Bluetooth

- Doppio lampeggio blu (ogni 3 secondi): Ricerca di una connessione Bluetooth.
- Lampeggio singolo blu (ogni 5 secondi): Connesso e funzionante normalmente.

3. Dispositivo in uso / Attività motoria

- Lampeggio viola (ogni 2 secondi): Il motore si sta muovendo o eseguendo la calibrazione di avvio.

4. Stato della batteria e della ricarica

- Effetto respiro blu (dissolvenza graduale): Ricarica normale – lasciare collegato fino a completa carica.
- Triplo lampeggio rosso (ogni 3.5 secondi): Batteria scarica – ricaricare a breve.
- Effetto respiro rosso (dissolvenza graduale): Errore di ricarica – scollegare e ricollegare il caricatore.
- Doppio lampeggio rosso rapido: Batteria in stato critico – il dispositivo sta per spegnersi. Ricaricare immediatamente.

5. Condizioni di errore

- Lampeggio rosso (ogni 0.5 secondi): Errore di sistema – il dispositivo richiede attenzione.
-

6. Tempi di spegnimento automatico

Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non c'è attività:

- Dopo 15 minuti se non è connesso al Bluetooth.
 - Dopo 60 minuti se è connesso ma non in uso.
-



Riepilogo dei colori LED

- **Blu** = Funzionamento normale
 - **Viola** = Attività del motore
 - **Rosso** = Avviso batteria, errore di sistema o spegnimento
-

Collegare SimOccluder a REALiTi 360

1. **Accendi il sistema REALiTi 360, quindi collega il monitor e il tablet Controller.**
2. **Apri il pannello di connessione**
Sul tablet Monitor, scorri da destra verso sinistra per aprire il pannello di connessione.
3. **Collega SimOccluder**
Seleziona SimOccluder dall'elenco e connettilo al sistema REALiTi.
4. **Regola le impostazioni di occlusione**
Nel Controller è possibile regolare:
 - Valore di occlusione
 - Intervallo di trend

Tocca 'Send' per applicare le impostazioni.

Impostazioni SimOccluder


1. **Modifica nome dispositivo**
Puoi rinominare il dispositivo come desideri (fino a 16 caratteri).
2. **Aggiornamento firmware**
 - Verrà visualizzata una notifica pop-up se è necessario un aggiornamento del firmware.
 - Puoi anche controllare nelle impostazioni la versione attuale del firmware e lo stato dell'aggiornamento.

Per utenti che non utilizzano REALITi 360

Collegare SimOccluder all'app SimOccluder Standalone

1. **Scarica l'app SimOccluder**
Installa l'applicazione SimOccluder sul tuo dispositivo dal Google Play Store o dall'Apple App Store – il download è gratuito.
2. **Avvia l'app e accendi il dispositivo**
Apri l'app SimOccluder e accendi il tuo dispositivo.
3. **Scansiona e connetti**
Usa l'app per eseguire la scansione dei dispositivi disponibili, quindi seleziona il tuo dispositivo e connettiti.
4. **Regola le impostazioni di occlusione**
Una volta connesso, puoi regolare le seguenti impostazioni tramite il controller:
 - Valore di occlusione
 - Tempo di trend

Tocca 'Play' per applicare le impostazioni.

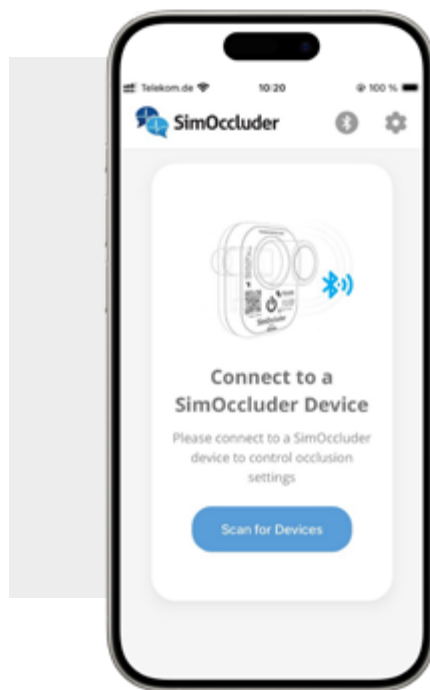

Scarica gratuitamente l'app SimOccluder dal Google Play Store o dall'Apple App Store

Impostazioni dell'app SimOccluder

1. **Generale**
 - Stato della versione dell'applicazione
 - Selezione della lingua
2. **Impostazioni del dispositivo**
 - Stato di connessione del dispositivo
 - Modifica del nome del dispositivo utilizzando il pulsante 'Modifica'
 - Disconnessione del dispositivo
 - Ricerca di un altro dispositivo
3. **Firmware del dispositivo**
 - Versione firmware attuale
 - Notifica di aggiornamento del firmware (appare se è necessario un aggiornamento)
4. **Debug**
Visualizza le informazioni generali di sistema:
 - Versione dell'app
 - Stato della connessione
 - Informazioni sulla batteria
 - Dati di occlusione
 - Informazioni sul dispositivo



Nota

Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo per l'app SimOccluder. Se SimOccluder è attualmente connesso a un altro dispositivo, disconnetterlo prima di tentare di collegarlo a un dispositivo diverso.



SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com