

SimOccluder Руководство пользователя

1. Питание устройства

Включение:

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания, расположенную на задней стороне.
- Двойное синее мигание (каждые 3 секунды): устройство включено и ищет соединение Bluetooth.
- Быстрое двойное синее мигание (один раз): Bluetooth только что подключился – короткая подтверждающая вспышка.

Выключение:

- Продолжайте удерживать кнопку питания в течение до 3 секунд, чтобы выключить устройство.
- Частое красное мигание: указывает на то, что кнопка питания удерживается.
- Постоянный красный свет: устройство выключается – сохраняет текущее состояние и выполняет сброс мотора перед отключением.



2. Состояние подключения Bluetooth

- Двойное синее мигание (каждые 3 секунды): Поиск подключения по Bluetooth.
- Одиночное синее мигание (каждые 5 секунд): Подключено и работает нормально.

3. Устройство в работе / Двигательная активность

- Фиолетовое мигание (каждые 2 секунды): мотор находится в движении или выполняет начальную калибровку.

4. Состояние аккумулятора и зарядки

- Синее «дыхание» (плавное затухание): Нормальная зарядка – оставьте подключённым до полного заряда.
- Тройное красное мигание (каждые 3.5 секунды): Низкий уровень заряда батареи – скоро поставьте на зарядку.
- Красное «дыхание» (плавное затухание): Ошибка зарядки – отключите и снова подключите зарядное устройство.
- Быстрое двойное красное мигание: Критически низкий заряд батареи – устройство скоро выключится. Немедленно поставьте на зарядку.

5. Условия возникновения ошибок

- Красное мигание (каждые 0.5 секунды): системная ошибка – устройству требуется внимание.
-

6. Время автоматического отключения

Устройство автоматически выключится при отсутствии активности:

- Через 15 минут, если оно не подключено к Bluetooth.
 - Через 60 минут, если оно подключено, но не используется.
-



Сводка Цветов Светодиода

- **Синий** = Нормальный режим работы
 - **Фиолетовый** = Активность мотора
 - **Красный** = Предупреждение о разрядке батареи, ошибка системы или выключение
-

Подключение SimOccluder к REALiTi 360

1. Включите систему REALiTi 360, затем подключите монитор и планшет контроллера.
2. Откройте Панель подключения
На планшете Монитор смахните справа налево, чтобы открыть панель подключения.
3. Подключите SimOccluder
Выберите SimOccluder из списка и подключите его к системе REALiTi.
4. Настройте параметры окклюзии
В Контроллере вы можете отрегулировать:
 - Значение окклюзии
 - Время тренда

Нажмите 'Send', чтобы применить настройки.

Настройки SimOccluder


1. Изменить имя устройства
Вы можете переименовать устройство по своему усмотрению (до 16 символов).
2. Обновление прошивки
 - Появится всплывающее уведомление, если потребуется обновление прошивки.
 - Вы также можете проверить текущую версию прошивки и статус обновления в настройках.

Для пользователей, не использующих REALiTi 360

Подключение SimOccluder к автономному приложению SimOccluder

- 1. Скачайте приложение SimOccluder**
Установите приложение SimOccluder на ваше устройство из Google Play Store или Apple App Store – его можно скачать бесплатно.
- 2. Запустите приложение и включите устройство**
Откройте приложение SimOccluder и включите ваше устройство.
- 3. Выполните сканирование и подключение**
Используйте приложение, чтобы просканировать доступные устройства, затем выберите и подключите ваше устройство.
- 4. Настройте параметры окклюзии**
После подключения вы можете отрегулировать следующие параметры с помощью контроллера:
 - Значение окклюзии
 - Интервал тренда

Нажмите 'Play', чтобы применить настройки.

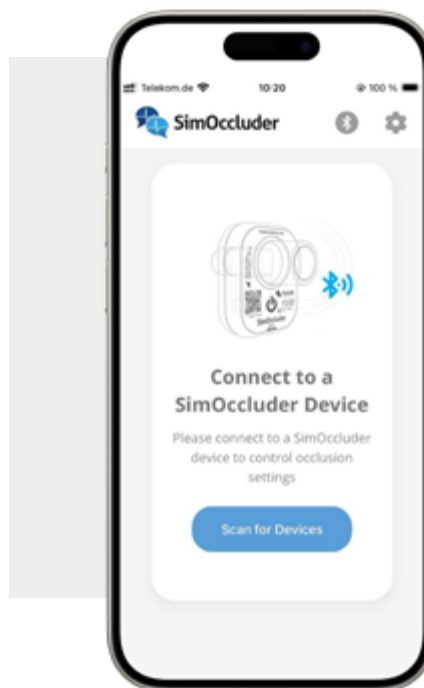

Скачайте приложение SimOccluder бесплатно из Google Play Store или Apple App Store

Настройки приложения SimOccluder

- 1. Общие**
 - Состояние версии приложения
 - Выбор языка
- 2. Настройки устройства**
 - Состояние подключения устройства
 - Изменить имя устройства с помощью кнопки «Изменить»
 - Отключить устройство
 - Поиск другого устройства
- 3. Прошивка устройства**
 - Текущая версия прошивки
 - Запрос на обновление прошивки (появляется, если требуется обновление)
- 4. Отладка**

Просмотр общей системной информации:

 - Версия приложения
 - Состояние подключения
 - Информация об аккумуляторе
 - Данные об окклюзии
 - Информация об устройстве



Примечание

Убедитесь, что на вашем устройстве включен Bluetooth для приложения SimOccluder. Если SimOccluder в данный момент подключен к другому устройству, сначала отключите его, прежде чем пытаться подключиться к другому устройству.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА,
ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com