



ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

INSTRUCCIONES DE USO

1022519

> CONTENIDO

Descripción del producto	3
Contenido del paquete	3
Funciones	4
Limpieza y cuidado	4
Montaje	
Montaje para EDH	5
Montaje para TR/SRD	6
Montaje para enema	7
Especificaciones técnicas	8
Lista de pedido	8
Información de contacto	8

ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

> DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 sirve para practicar procedimientos que tratan disfunciones del colon, incluidos tacto rectal (TR), estimulación rectal digital (SRD), eliminación digital de las heces (EDH) y administración de enemas. Se trata de un entrenador económico que ayudará a su equipo a adquirir mayor destreza y confianza en sus técnicas, junto con un dominio más amplio de los procedimientos y directrices clínicas. El entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 de 3B Scientific® facilita una presentación realista y rentable de los principales escenarios fisiológicos.



Nota:

El interés formativo del entrenador radica en su capacidad para realizar un entrenamiento realista, porque su diseño simula las estructuras con la máxima fidelidad posible. Algunas estructuras se pueden mostrar esquemáticamente.

> CONTENIDO DEL PAQUETE



1. Entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 con pieza de nalgas instalada
2. Depósito de enema interno con tapón interior (2bis)
3. Caja de fijación interna para EDH/SRD
4. 1 Pieza de enema
5. 1 Pieza de SRD
6. 1 Pieza de EDH
7. 2 modelos anatómicos 3D de hemorroides con imanes
8. 4 heces sólidas (tipo I de la escala de heces de Bristol)
9. Heces sólidas artificiales en polvo (150 g)

10. Heces solubles artificiales en polvo para ENEMA (60 g)
11. Espátula dosificadora y vaso para preparación de heces
12. Botella de sangre concentrada (250 ml), artificial
13. Inyector de pipeta de sangre
14. Polvos de talco (100 g)
15. Vaselina
16. Caja de almacenamiento de plástico para consumibles
17. Bolsa de transporte flexible (no mostrada en la imagen)

ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

> FUNCIONES

El entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 reproduce genéricamente las nalgas de un paciente recostado sobre el lado izquierdo y las estructuras de tejido blando pertinentes para simular el ano. La parte superior del glúteo es blanda y flexible para que resulte más real; el alumno debe levantar esa parte para acceder al ano.

Las diferentes piezas para tacto rectal están fabricadas con silicona resistente 3B SKINlike™ para simular la piel humana y la sensación háptica del tejido durante los procedimientos de TR y SRD. El ano permanece cerrado y estanco tras la extracción del catéter gracias a la gran calidad del material de la pieza de enema. El diseño modular facilita el cambio rápido de configuración (menos de 1 minuto) para poder entrenar diversas técnicas bajo la supervisión del instructor y durante las prácticas de los estudiantes.

Con el entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 se pueden practicar los siguientes procedimientos de cuidado intestinal:

- Tacto rectal (TR) y estimulación rectal digital (SRD)
- Eliminación digital de las heces (EDH)
- Administración de enemas
- Administración de supositorios
- Administración de medicamentos

La alta calidad del material de silicona flexible utilizado permite practicar la exploración táctil con gran realismo. El sistema seguro del depósito de recepción de líquido impide las fugas y garantiza un uso limpio del entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 portátil. Incluso es posible administrar hasta 2 litros de soluciones de enemas convencionales.



Nota:

El entrenador permite introducir catéteres de **CH16 a CH40** y sondas rectales con balón. Asegúrese de insertar siempre catéteres lubricados para no dañar el modelo.

> LIMPIEZA Y CUIDADO


El simulador se debe vaciar y limpiar después de usarlo. El sistema seguro del depósito de recepción de líquido impide las fugas y facilita la limpieza del entrenador, que se puede desmontar y enjuagar con agua corriente.

Consejo:

Cómo montar el depósito de líquido seguro:



Cómo desmontar el depósito de líquido seguro:

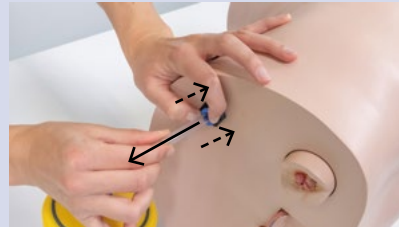

Tras utilizar vaselina y preparaciones de heces, enjuague bien con agua limpia hasta que no se observen residuos. Asegúrese de que todas las piezas están completamente secas antes de retirarlas y, si es preciso, use polvos de talco para secar las piezas de silicona.



Nota:

No utilice detergentes que contengan disolventes, porque pueden dañar la superficie. Evite el etiquetado y marcado de la superficie, porque pueden producir decoloración permanente.

ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

> MONTAJE



Consejo:

Para comprobar lo fácil que resulta configurar el simulador, utilice este enlace al vídeo „Installation Video P16“ de nuestro sitio web. https://www.3bscientific.com/p_153_31843.html

MONTAJE PARA EDH

Piezas necesarias:



Instalación:




1. Fije la pieza de EDH en la pieza de nalgas.



2. Rellene como máximo **2/3** de la pieza de EDH con preparación de heces sólidas.



3. Introduzca las heces sólidas en la preparación de heces sólidas.

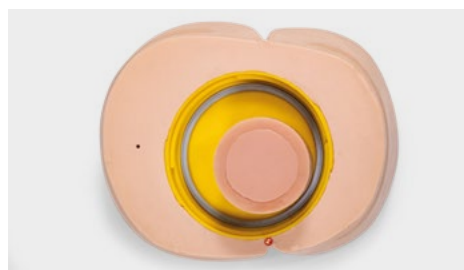

4. Cierre la pieza de EDH con el tapón de silicona.



5. Coloque la tapa roja encima del tapón de silicona.



6. Por último, conecte la caja de fijación a la pieza de nalgas para afianzar la pieza de EDH.

ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

MONTAJE PARA TR/SRD

Piezas necesarias:



Instalación:

Siga los pasos de montaje para EDH, salvo por dos diferencias:

- Instale la pieza de SRD en lugar de la pieza de EDH.
- No utilice heces sólidas (tipo I de la escala de heces de Bristol) en la pieza de SRD.


ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

MONTAJE PARA ENEMA

Piezas necesarias:



Instalación:

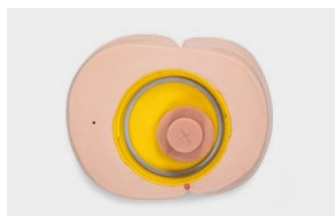


1. Fije la pieza de enema en la pieza de nalgas.



2. Para mayor realismo, introduzca 2 medidas de polvo artificial soluble en el depósito interno del enema, donde previamente habrá introducido el tapón interior. Asegúrese de que los puntos rojos del tapón interior y del depósito queden alineados.



3. Fije el depósito en la pieza de nalgas. Asegúrese de que los puntos rojos queden alineados.

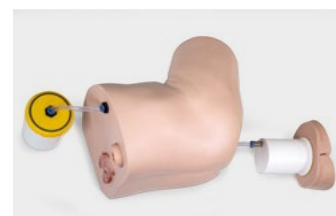

4. Conecte el puerto del depósito interno al depósito externo complementario empujando el tubo del depósito interno del enema a través de la válvula de flujo de seguridad azul.



Nota:

El depósito externo permite usar **hasta 2 litros de líquido** en el entrenador de cuidado intestinal y administración de enemas P16 sin riesgo de fugas.

Consejo:

Si desea practicar con más de 1 litro de líquido, no olvide conectar el depósito seguro principal al depósito externo secundario acoplando el tubo interior y abriendo la pinza.

ENTRENADOR DE CUIDADO INTESTINAL Y ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS P16

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 3,8 kg

Dimensiones del entrenador: 55 × 35 × 32 cm

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +30 °C (32 °F a 86 °F)

Temperatura de almacenamiento: De -10°C a +40°C (14°F a 104°F)

> LISTA DE PEDIDO

Repuestos y consumibles	Artículo n.º
Heces solubles artificiales en polvo (60 g)	1022521
Heces sólidas artificiales en polvo (1 kg)	1022522
Juego de piezas de repuesto para tacto rectal (3 piezas de cada tipo para tacto rectal)	1022523

> INFORMACIÓN DE CONTACTO



3B Scientific
A worldwide group of companies

España **3B Scientific, S.L.**

C/ Ronda Narciso Monturiol 3

Edif. ABM, Torre A, Despacho 8

46980 Paterna (Valencia) • España

Tel.: 96 131 84 38 • Fax: 96 136 64 07

3bscientific.es • e3bs@3bscientific.com