


REALTi SimScope – Anleitung zum Einrichten


WLAN-Einrichtung

1. Öffnen Sie die REALTi-App auf Ihrem iPad und wählen Sie den Modus „Control“.
2. Klicken Sie auf den Reiter „Stethoscope“ und tippen Sie auf „Settings“ (das Zahnradsymbol), (Abb. 1).

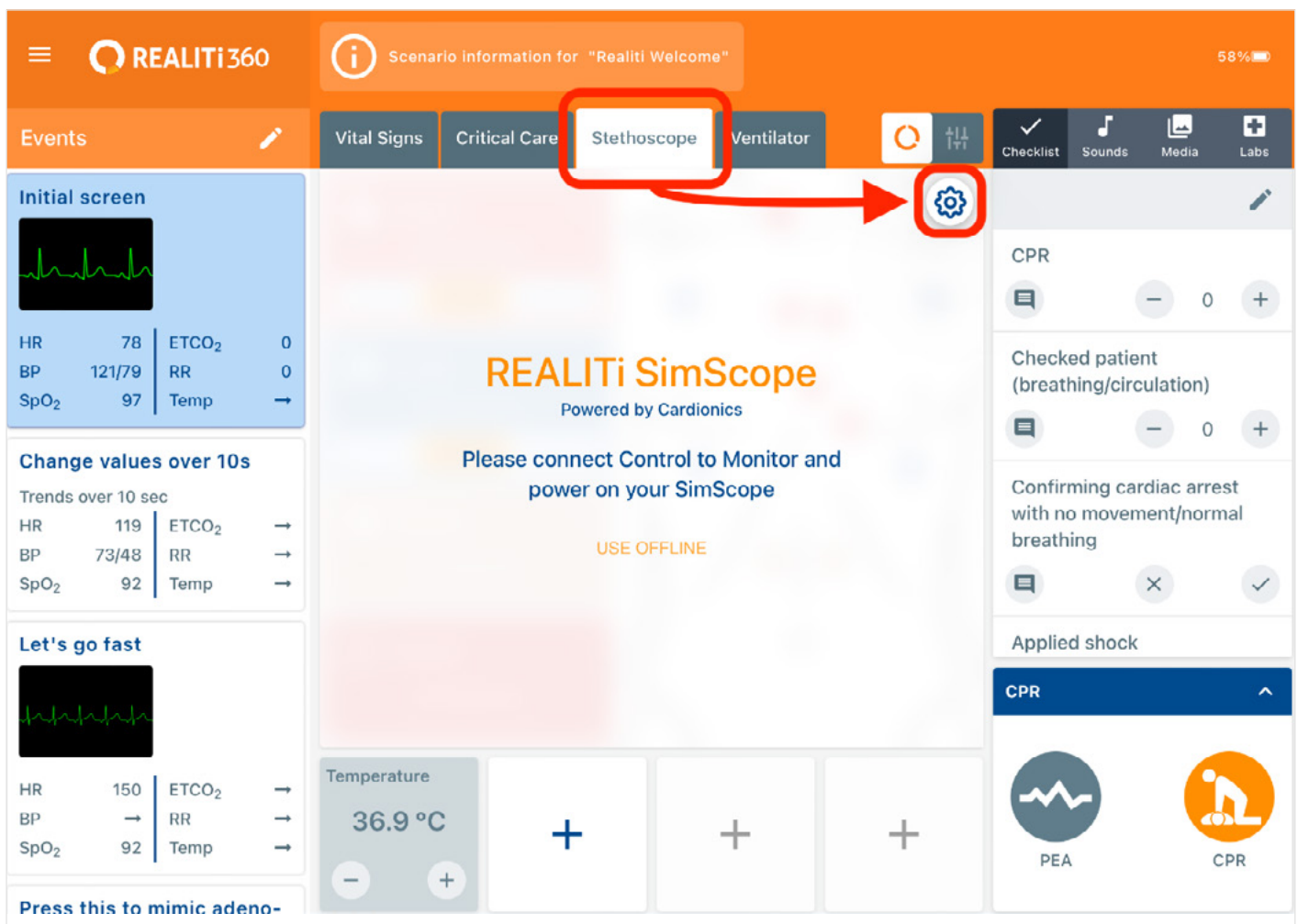

(Abb. 1)

3. Der Bildschirm „Stethoscope Settings“ wird angezeigt (Abb. 2).

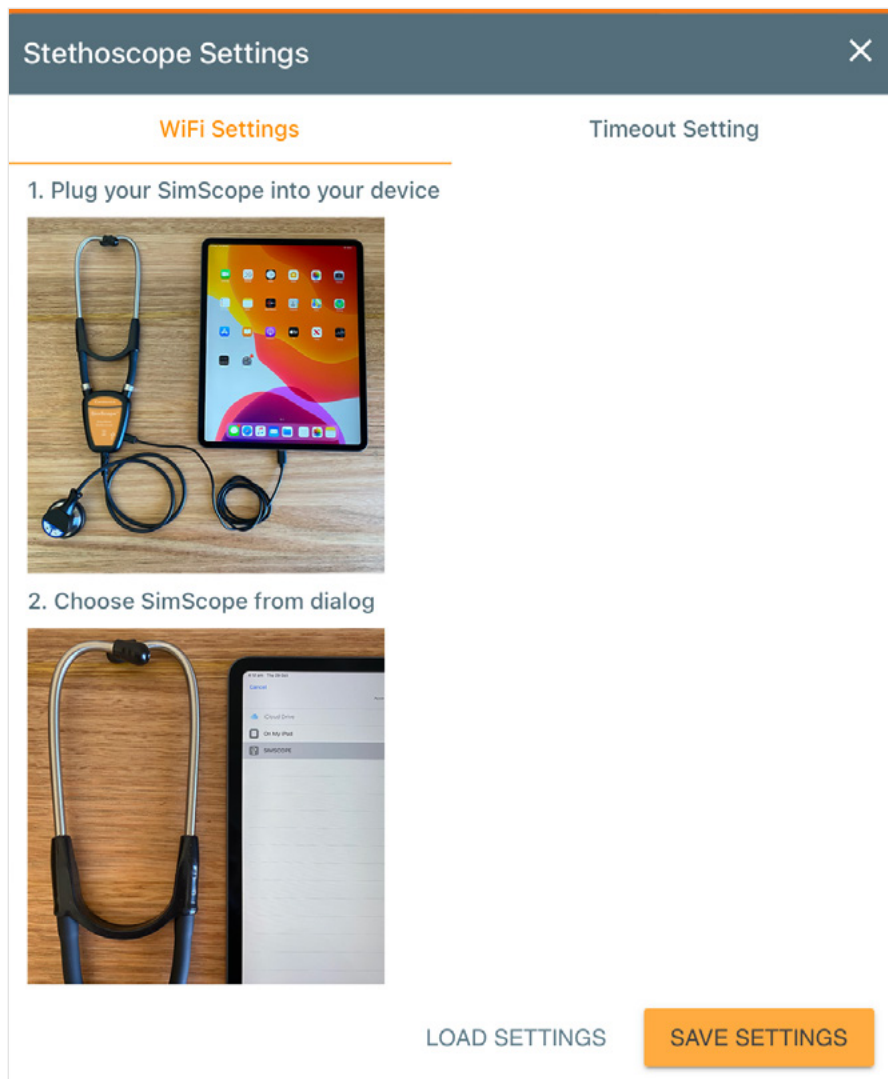

(Abb. 2)

REALiTi SimScope an das iPad anschließen und WLAN konfigurieren

1. Schließen Sie das REALiTi SimScope mit dem Kabel aus dem Zubehör an das iPad an.
2. Wenn das REALiTi SimScope angeschlossen ist, tippen Sie auf „Load Settings“ (Abb. 2).
3. Warten Sie, bis „SIMSCOPE“ in der Dateiliste aufgeführt wird. Dies kann ein wenig dauern. Wählen Sie dann „SIMSCOPE“ aus und tippen Sie auf „Done“ (Abb. 3). Warten Sie auf den nächsten Bildschirm.



(Abb. 3)

4. Sie sehen dann Optionen zum Eingeben des Namens („Name“) und Passworts („Password“) für Ihr WLAN. Geben Sie diese ein und tippen Sie auf „SAVE SETTINGS“ (Abb. 4).

5. Tippen Sie auf das „X“ in der oberen rechten Ecke, um das Fenster „Stethoscope Settings“ zu schließen (Abb. 4).


Hinweis: Die Daten für „Wi-Fi Name“ und „Password“ müssen dieselben sein, über die das iPad verbunden ist.

The screenshot shows the 'Stethoscope Settings' window. At the top, there's a dark blue header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button 'X'. Below the header, there are two tabs: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two sub-tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' sub-tab is active, showing two input fields: 'WiFi Name' with the text 'iSimulate-Green' and 'Password' with the text 'XXXXXXXXXXXX'. Both input fields are circled in red. A red arrow originates from the 'SAVE SETTINGS' button at the bottom right and points towards the 'X' close button in the top right corner.

(Abb. 4)


Verbindung testen

1. Vergewissern Sie sich, dass der gewählte WLAN-Router eingeschaltet ist und funktioniert.
2. Ziehen Sie das REALITi SimScope vom Kabel ab.
3. Setzen Sie den Ohrbügel des Stethoskops in die Ohren.
4. Drücken Sie nun die Plustaste (+) am Trichterteil des Stethoskops.
5. Es sollte Folgendes zu hören sein:
 - 'System Activation'
 - 'Mode 1'
 - (Eine Folge von) 'Pieptönen'
 - 'Wi-Fi Connected'
6. Anderenfalls schließen Sie das REALITi SimScope wieder am iPad an und versuchen Sie es noch einmal.
7. Stellen Sie nun die Verbindung für beide REALITi iPads her (Abb. 5).

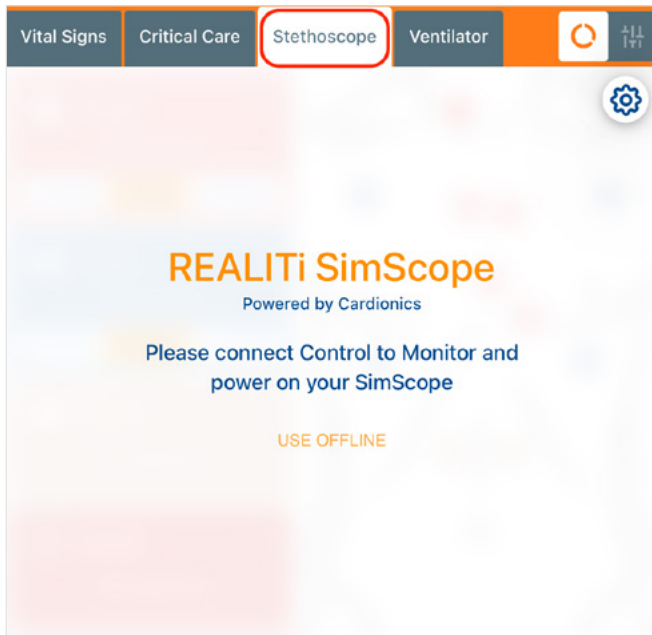


(Abb. 5)

8. Tippen Sie, wie hier gezeigt, auf die Schaltfläche „Connect“ (Abb. 6).

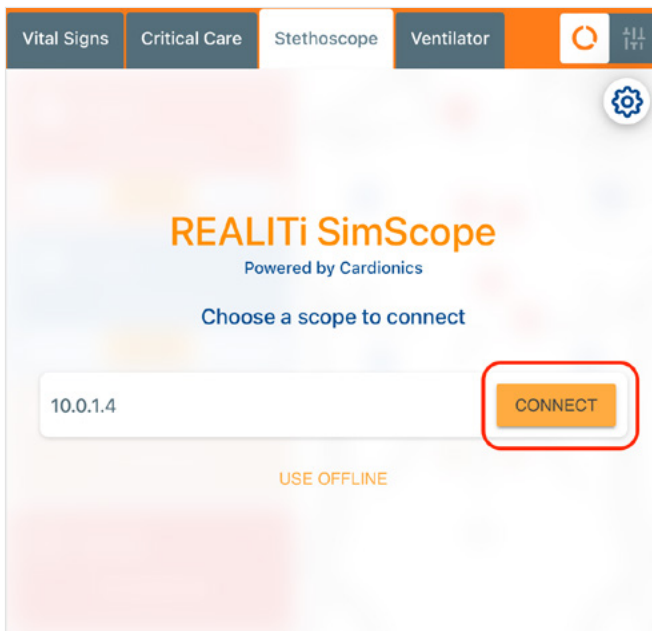


(Abb. 6)

Bei der ersten Verbindung des REALiTi SimScopes lädt es die Geräuschbibliothek herunter (Abb. 7).

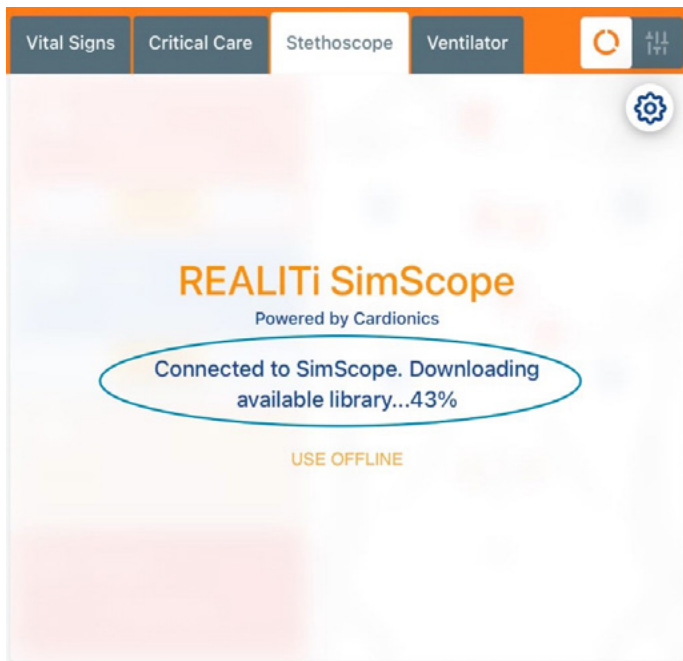

(Abb. 7)

9. Sobald die Bibliothek heruntergeladen wurde, wird die Systemsteuerung für das REALiTi SimScope angezeigt (Abb. 8).

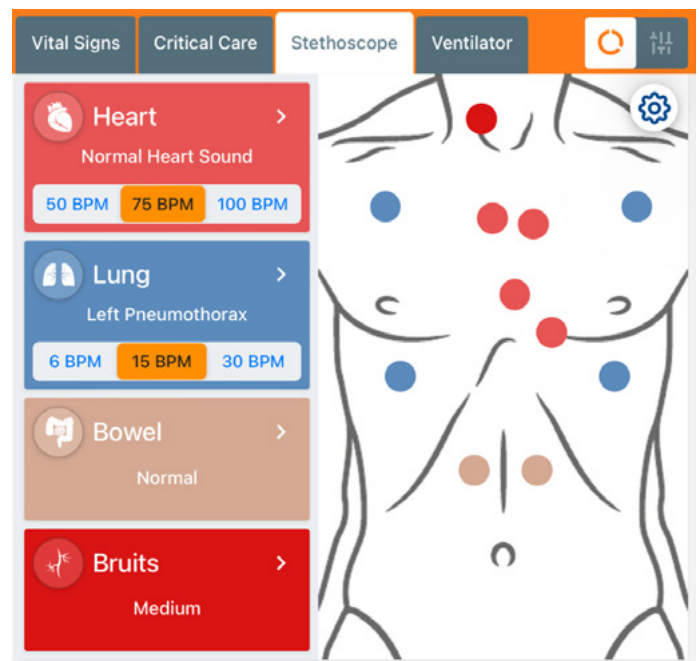

(Abb. 8)

Das REALiTi SimScope ist jetzt einsatzbereit!

Hinweis: Dies ist ein einmaliger Vorgang. Sie müssen diese Schritte nicht vor jedem Gebrauch wiederholen.

➤ TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Alle obigen Schritte wurden befolgt, aber es ist keine Verbindung mit dem REALiTi SimScope zustande gekommen.

1. Vergewissern Sie sich, dass sich das Control und das Monitor iPad im selben WLAN-Netzwerk befinden und damit verbunden sind. Vergewissern Sie sich auch, dass der Name und das Passwort für das WLAN sowohl auf den beiden iPads als auch in den Einstellungen des REALiTi SimScopes identisch sind.

Tipp: Es empfiehlt sich die Verwendung des Routers aus dem REALiTi 360-Set.

2. Wiederholen Sie die Einrichtung des REALiTi SimScopes von Anfang an.

3. Das Stethoskop schaltet sich durch Drücken auf die Taste „+“ nicht ein oder schaltet sich schnell wieder aus. Legen Sie eine neue Batterie ein.

Tipp: Verwenden Sie ausschließlich AAA-Lithium-Batterien. Für optimale Leistungsfähigkeit empfehlen wir Batterien vom Typ „Energizer Ultimate Lithium AAA“.

Falls das Problem weiterhin nicht zu lösen ist, wenden Sie sich bitte an uns.



3B Scientific GmbH • Heidelberger Straße 26 • 01189 Dresden • Deutschland • 3bscientific.com

Telefon: +49 (0)351-40390-0 • Fax: +49 (0)351-40390-543 • E-Mail: vertrieb@3bscientific.com