


REALiTi SimScope – Guía de configuración


Configuración de Wi-Fi

1. Abra la app REALiTi en el iPad y seleccione el modo de control.
2. Haga clic en la pestaña “Stethoscope” y toque “Settings” (icono de engranaje, fig. 1).

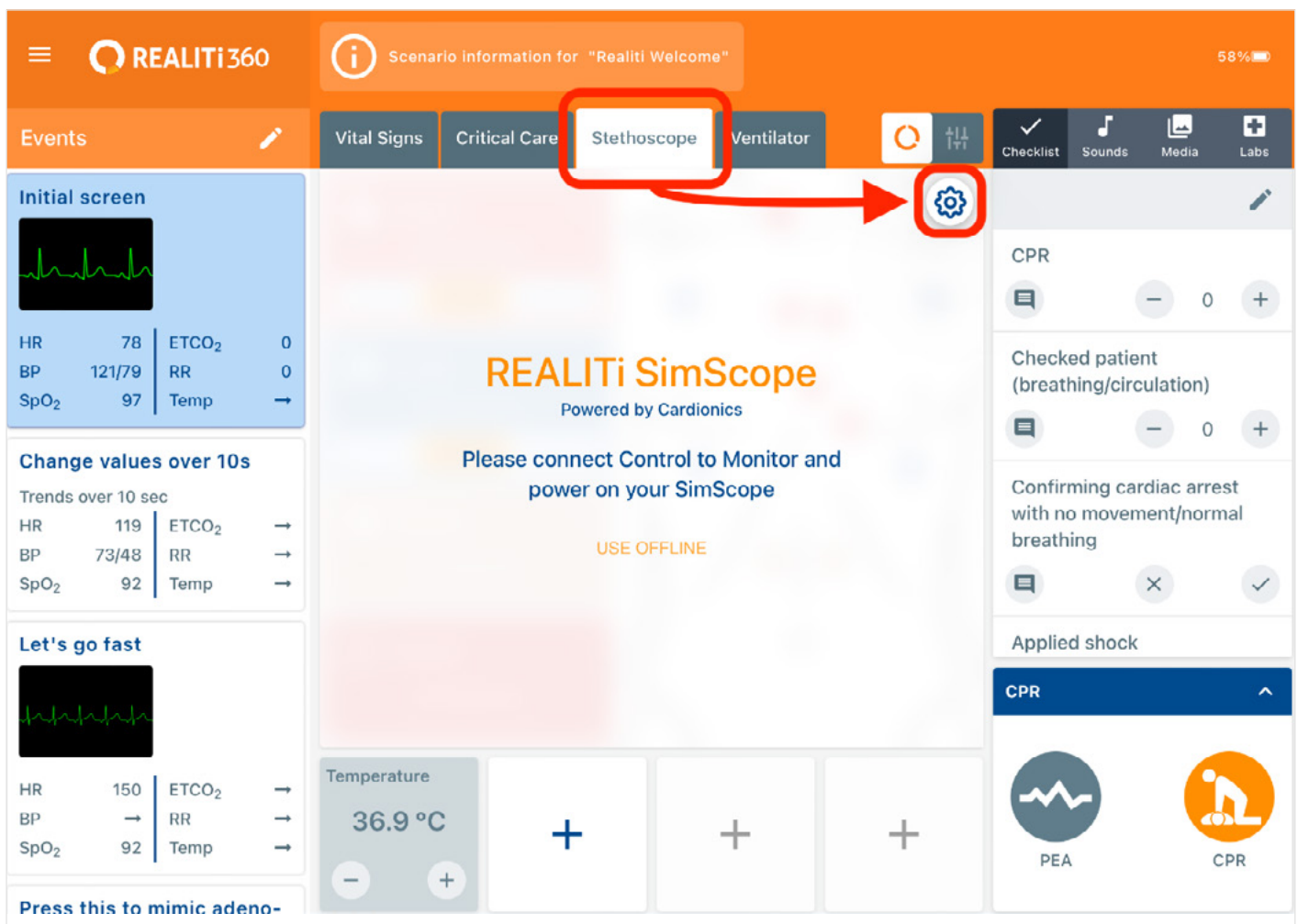

(Fig. 1)

3. Aparecerá la pantalla Stethoscope Settings (fig. 2).

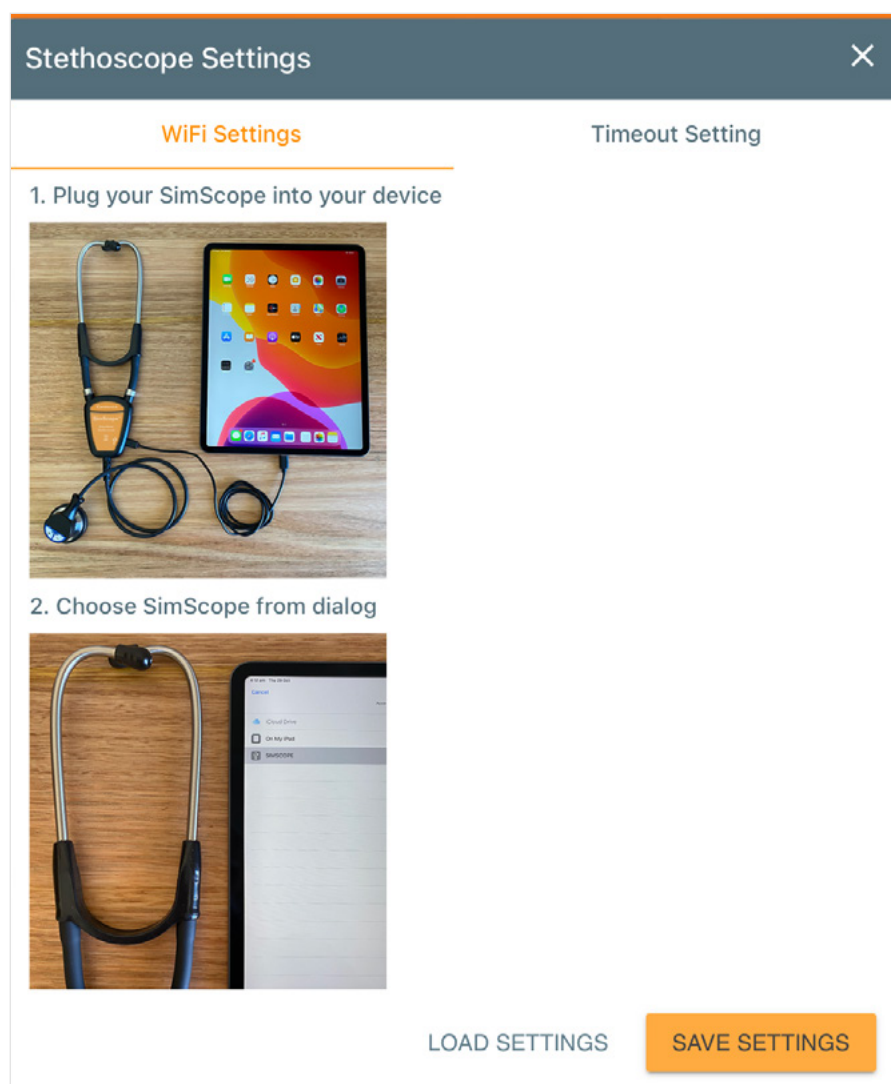

(Fig. 2)

Conexión de REALITi SimScope al iPad y configuración de Wi-Fi

1. Conecte REALITi SimScope al iPad mediante el cable suministrado.
2. Cuando haya enchufado REALITi SimScope, toque "Load Settings" (fig. 2).
3. Espere hasta que "SIMSCOPE" aparezca en la lista, quizá tarde un poco. A continuación, seleccione "SIMSCOPE" y toque "Done" (fig. 3). Espere a que aparezca la siguiente pantalla.



(Fig. 3)

4. Verá las opciones Name y Password para que añada el nombre y la contraseña de su Wi-Fi. Después de introducir ambos, toque “SAVE SETTINGS” (fig. 4).

5. Pulse la “X” del ángulo superior derecho para cerrar la ventana Stethoscope Settings (fig. 4).

Nota: El nombre y la contraseña de Wi-F deben ser los mismos con los que se conecta el iPad.

The screenshot shows the 'Stethoscope Settings' window. At the top, there's a dark header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button 'X'. Below the header, there are two main tabs: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two sub-tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' sub-tab is active, showing two input fields: 'WiFi Name' with the text 'iSimulate-Green' and 'Password' with the text 'XXXXXXXXXXXX'. Both input fields are circled in red. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'LOAD SETTINGS' (grey) and 'SAVE SETTINGS' (orange). A red arrow originates from the 'SAVE SETTINGS' button and points towards the 'X' close button in the top right corner.

(Fig. 4)


Comprobación de la conexión

1. Cerciórese de que el enrutador Wi-Fi está encendido y en funcionamiento.
2. Desenchufe REALiTi SimScope del cable.
3. Póngase los receptores del estetoscopio en los oídos.
4. Pulse el botón del signo más (+) que hay en la campana del estetoscopio.
7. A continuación, conecte los iPads de REALiTi como de costumbre (fig. 5).

5. Debería oír lo siguiente:


- 'System Activation'
- 'Mode 1'
- (Una serie de pitidos)
- 'Wi-Fi Connected'

6. En caso contrario, vuelva a conectar REALiTi SimScope al iPad y pruebe de nuevo.

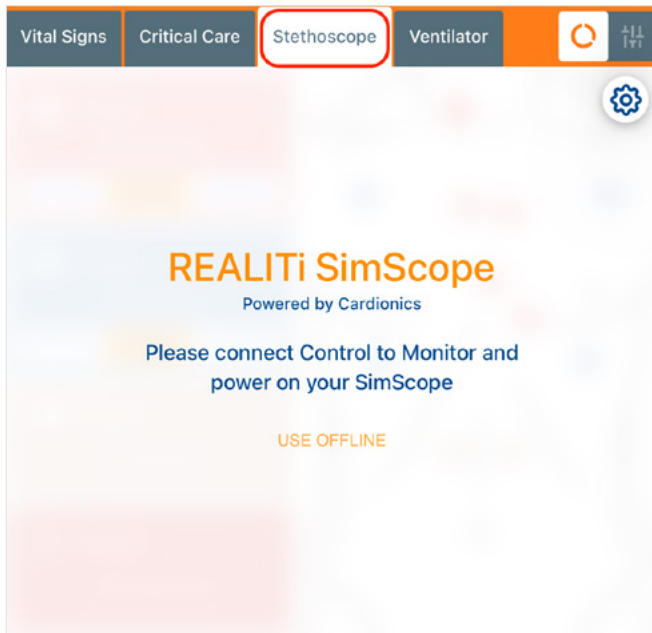


(Fig. 5)

8. Pulse el botón "Connect" de la pantalla mostrada a continuación (fig. 6).

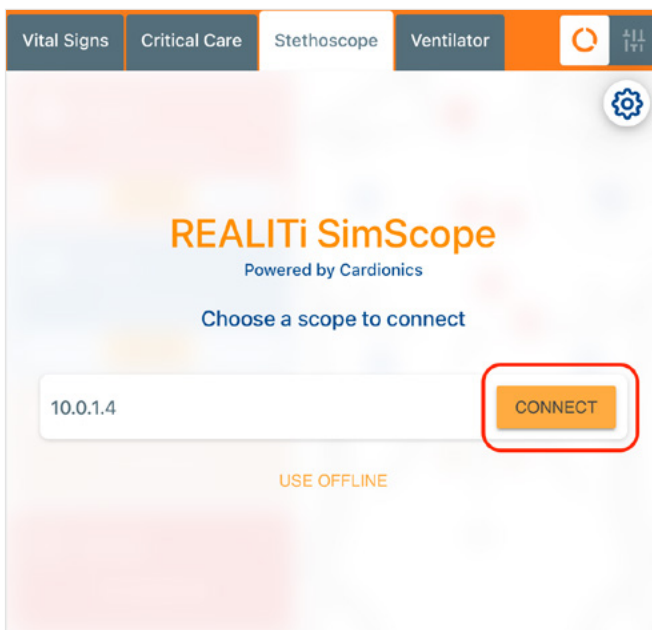


(Fig. 6)

La primera vez que se conecta REALiTi SimScope, descarga la biblioteca de sonidos (fig. 7).

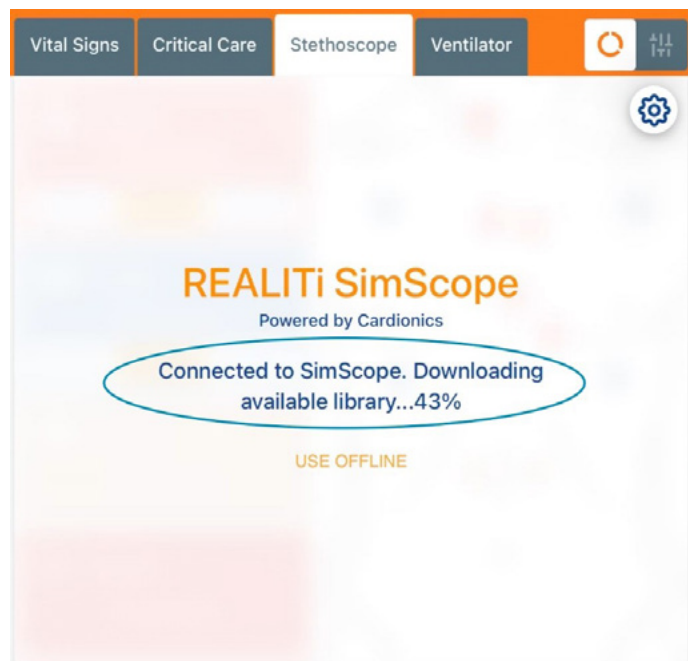

(Fig. 7)

9. Una vez descargada la biblioteca de sonidos, aparecerá el panel de control principal de REALiTi SimScope (fig. 8).

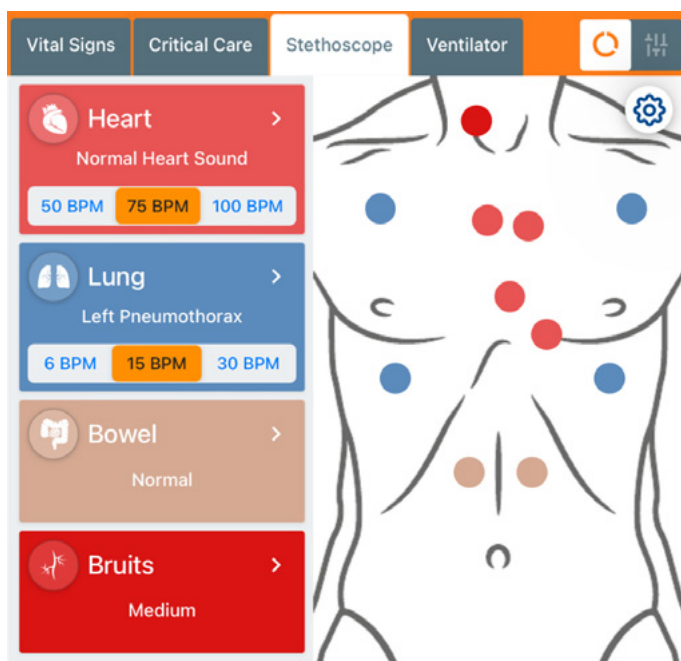

(Fig. 8)

REALiTi SimScope ya está listo para usarse.

Nota: Este procedimiento solo se realiza una vez, no hay que repetir estos pasos antes de cada uso.

➤ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ha seguido todos los pasos anteriores, pero REALiTi SimScope no se ha conectado.

1. Cerciórese de que tanto el iPad de control como el iPad del monitor están conectados y en la misma red Wi-Fi. Asegúrese también de que el nombre y la contraseña de Wi-Fi son iguales para ambos iPads y en los ajustes de REALiTi SimScope.
Consejo: Se recomienda utilizar el enrutador incluido en el kit de REALiTi 360.
2. Vuelva a configurar REALiTi SimScope desde el principio.

3. El estetoscopio no se enciende al pulsar el botón + o se apaga pronto. Cambie la pila por una nueva.
Consejo: Use solo pilas de litio AAA. Recomendamos las pilas “Energizer Ultimate Lithium AAA” para un funcionamiento óptimo.

Si sigue sin solucionarse el problema, póngase en contacto con nosotros.

