

REALTi SimScope – Guide de configuration

Configuration Wi-Fi

1. Ouvrez l'application REALTi sur votre iPad et choisissez le mode Control
2. Sélectionnez l'onglet « Stethoscope » puis l'icône « Paramètres » (icône d'engrenage) (Fig. 1).

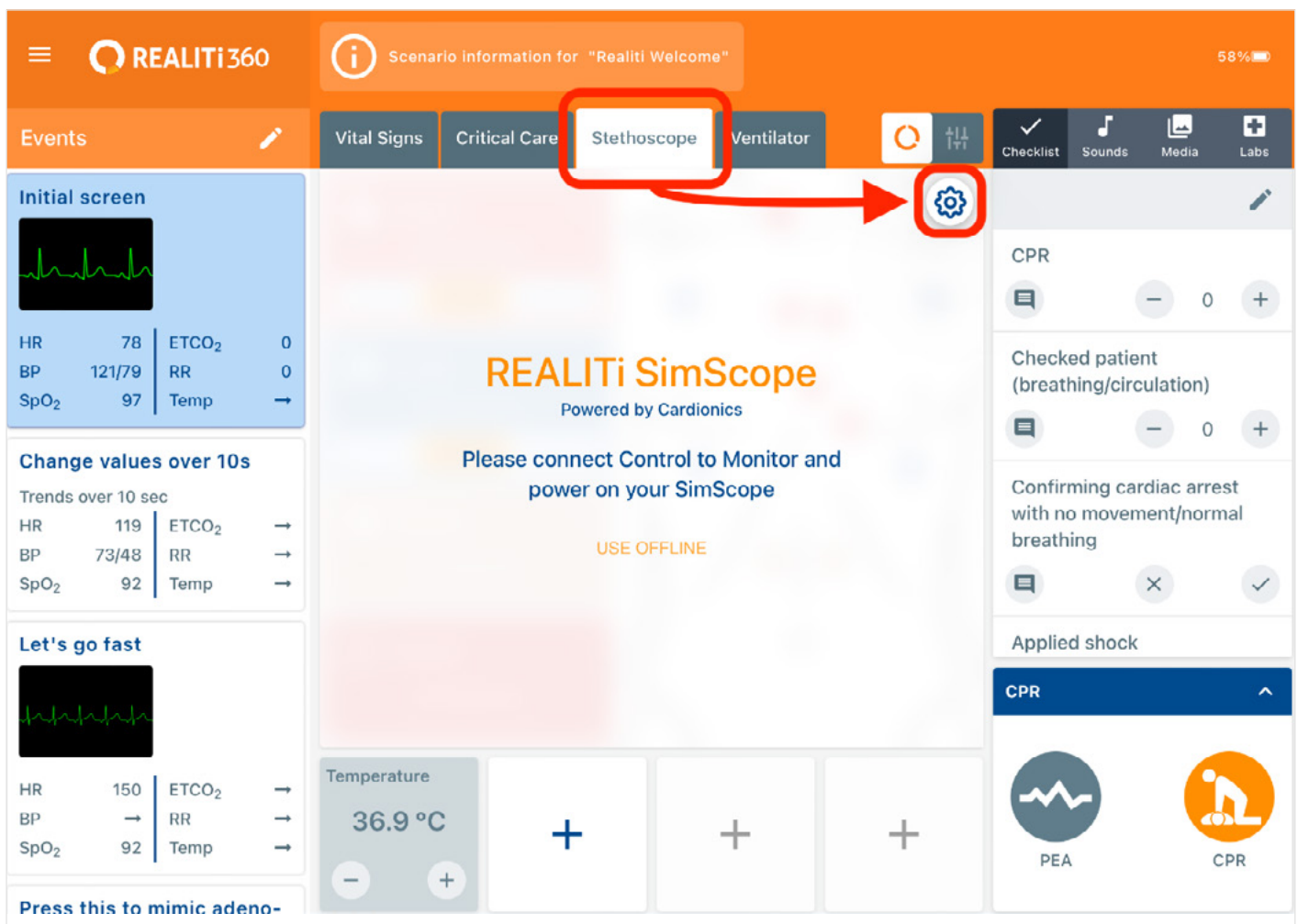


Fig. 1

3. Vous verrez apparaître l'écran Stethoscope Settings (Paramètres du stéthoscope) (Fig. 2)

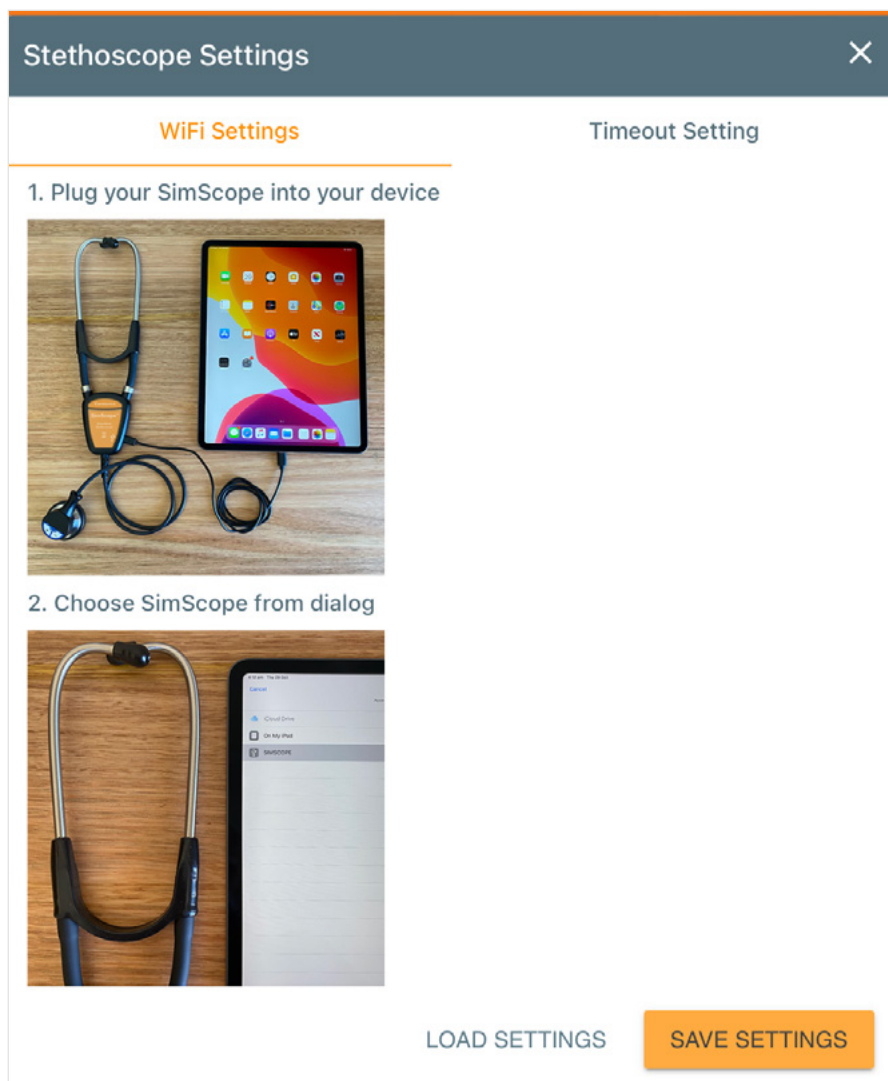


Fig. 2

Connecter REALiTi SimScope à votre iPad et configurer le Wi-Fi

1. Branchez le REALiTi SimScope à l'iPad à l'aide du câble fourni
2. Une fois le REALiTi SimScope branché, appuyez sur « Load Settings » (Charger paramètres) (Fig. 2)
3. Attendez que « SIMSCOPE » apparaisse dans la liste de fichiers. Cela peut prendre un certain temps. Puis sélectionnez « SIMSCOPE » et appuyez sur « Done » (Terminé) (Fig. 3). Attendez que l'écran suivant apparaisse.



Fig. 3

4. Vous verrez alors des options pour ajouter le Name (Nom) et le Password (Mot de passe) à votre Wi-Fi. Une fois que vous les avez saisis, appuyez sur « SAVE SETTINGS » (Enregistrer paramètres) (Fig. 4).

Remarque : Wi-Fi Name (Nom Wi-Fi) et Password (Mot de passe) doivent être les mêmes que ceux de l'iPad auquel il est connecté.

5. Fermez la boîte de dialogue Stethoscope Settings en appuyant sur le « X » dans le coin supérieur droit (Fig. 4).

Fig. 4

Tester la connexion

1. Assurez-vous que le routeur Wi-Fi que vous avez choisi est sous tension et fonctionne
2. Débranchez le REALiTi SimScope du câble
3. Placez les écouteurs du stéthoscope dans vos oreilles
4. Appuyez maintenant sur le bouton plus (+) situé sur la partie cloche du stéthoscope.
7. Connectez maintenant les deux iPads REALiTi comme d'habitude (Fig. 5)

5. Vous devriez entendre ceci :
 - « System Activation » (Activation du système)
 - « Mode 1 »
 - Une série de bips
 - « Wi-Fi Connected » (Wi-Fi connecté)
6. Si cela ne se produit pas, rebranchez le REALiTi SimScope dans l'iPad et réessayez.

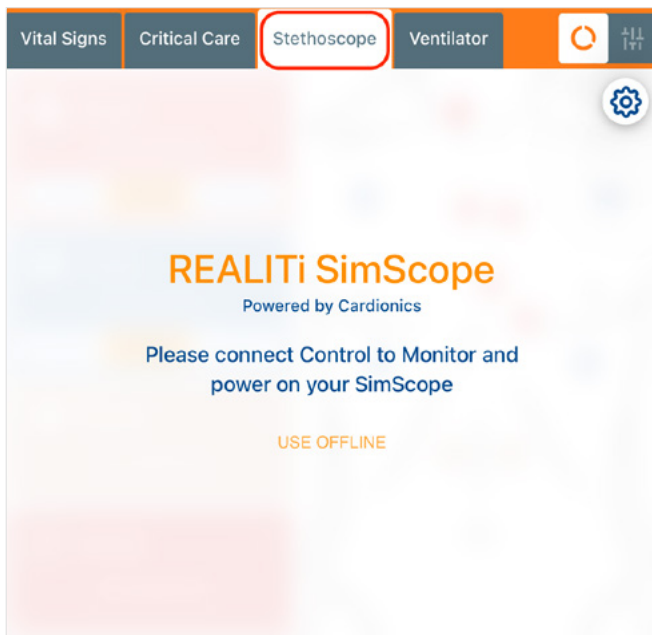


Fig. 5

8. Appuyez sur le bouton « Connect » sur l'écran représenté ci-dessous (Fig. 6)

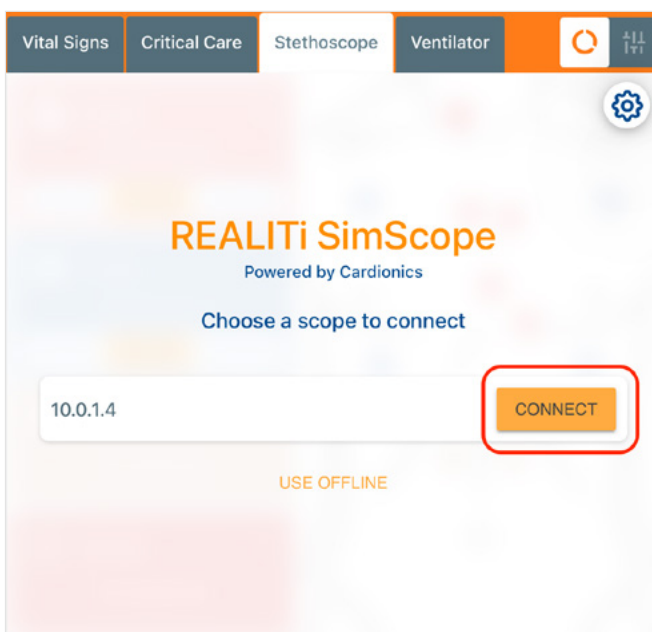


Fig. 6

Lorsque le REALiTi SimScope se connectera pour la 1ère fois, il téléchargera la bibliothèque de sons (Fig. 7).

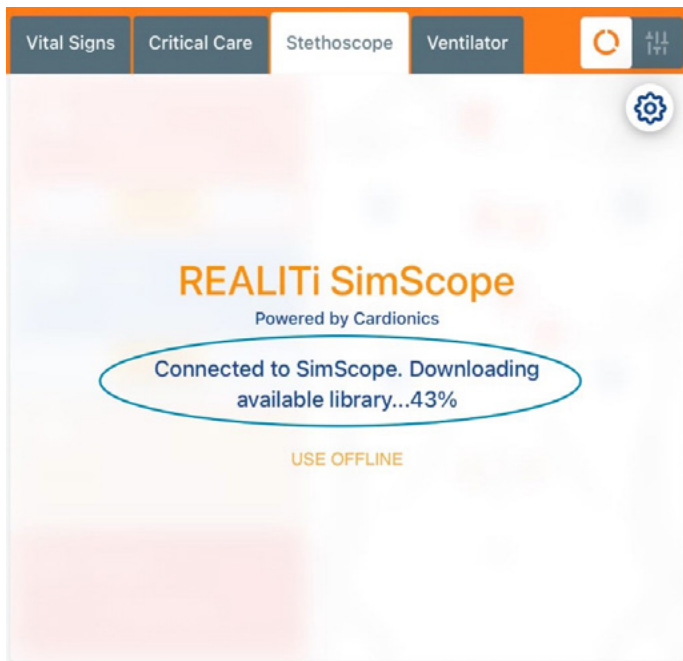


Fig. 7

9. Une fois la batterie chargée, vous verrez le panneau de commande REALiTi SimScope principal (Fig. 8).

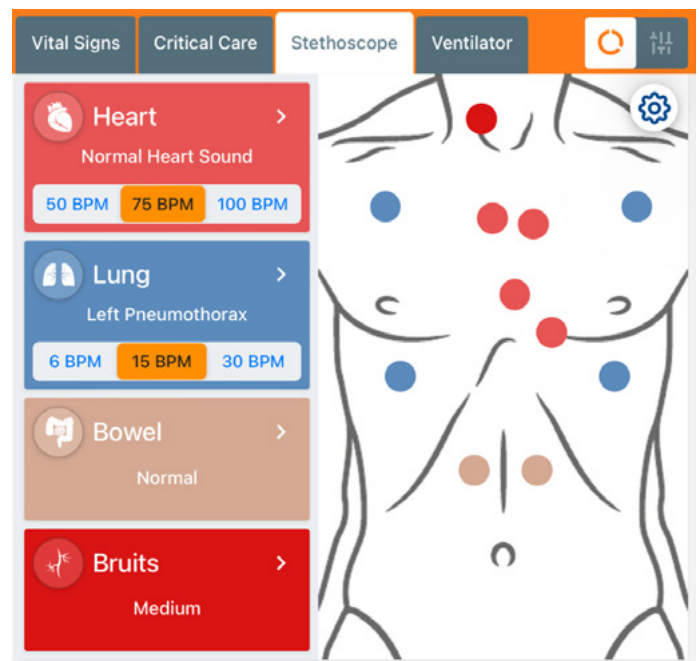


Fig. 8

Le REALiTi SimScope est désormais prêt à l'emploi !

Remarque : Ceci est une procédure unique : vous n'aurez pas besoin de répéter ces étapes avant chaque utilisation.

➤ CONSEILS DE DÉPANNAGE

Vous avez exécuté toutes les étapes ci-dessus mais le REALiTi SimScope ne s'est pas connecté.

1. Assurez-vous que les deux iPads Control et Monitor sont sur le même réseau Wi-Fi et sont connectés. Assurez-vous aussi que le Wi-Fi Name (Nom Wi-Fi) et Password (Mot de passe) dans les réglages de vos iPads et du REALiTi SimScope sont identiques.

Conseil : Il est recommandé d'utiliser le routeur livré avec votre kit REALiTi 360.

2. Reconfigurez le REALiTi SimScope depuis le début.

3. Le stéthoscope ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton + ou s'éteint peu après. Remplacez la batterie par une neuve.

Conseil : Utilisez uniquement une batterie au lithium AAA. Nous recommandons la batterie « Energizer Ultimate Lithium AAA » pour un fonctionnement optimal.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter.



France 3B Scientific S.A.R.L. • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 268870 Bartenheim • France • 3bscientific.com

Tél: +33 3 89 70 75 20 • Fax : +33 3 89 70 75 21 • E-Mail: commande@3bscientific.com