


REALiTi SimScope – Beállítási útmutató


A Wi-Fi beállítása

1. Nyissa meg a REALiTi alkalmazást az iPaden, és válassza a Control (Vezérlés) módot
2. Kattintson a „Stethoscope” (Sztetoszkóp) fülre, és koppintson a „Settings” (Beállítások) (Fogaskerék ikon) opcióra (1. ábra).

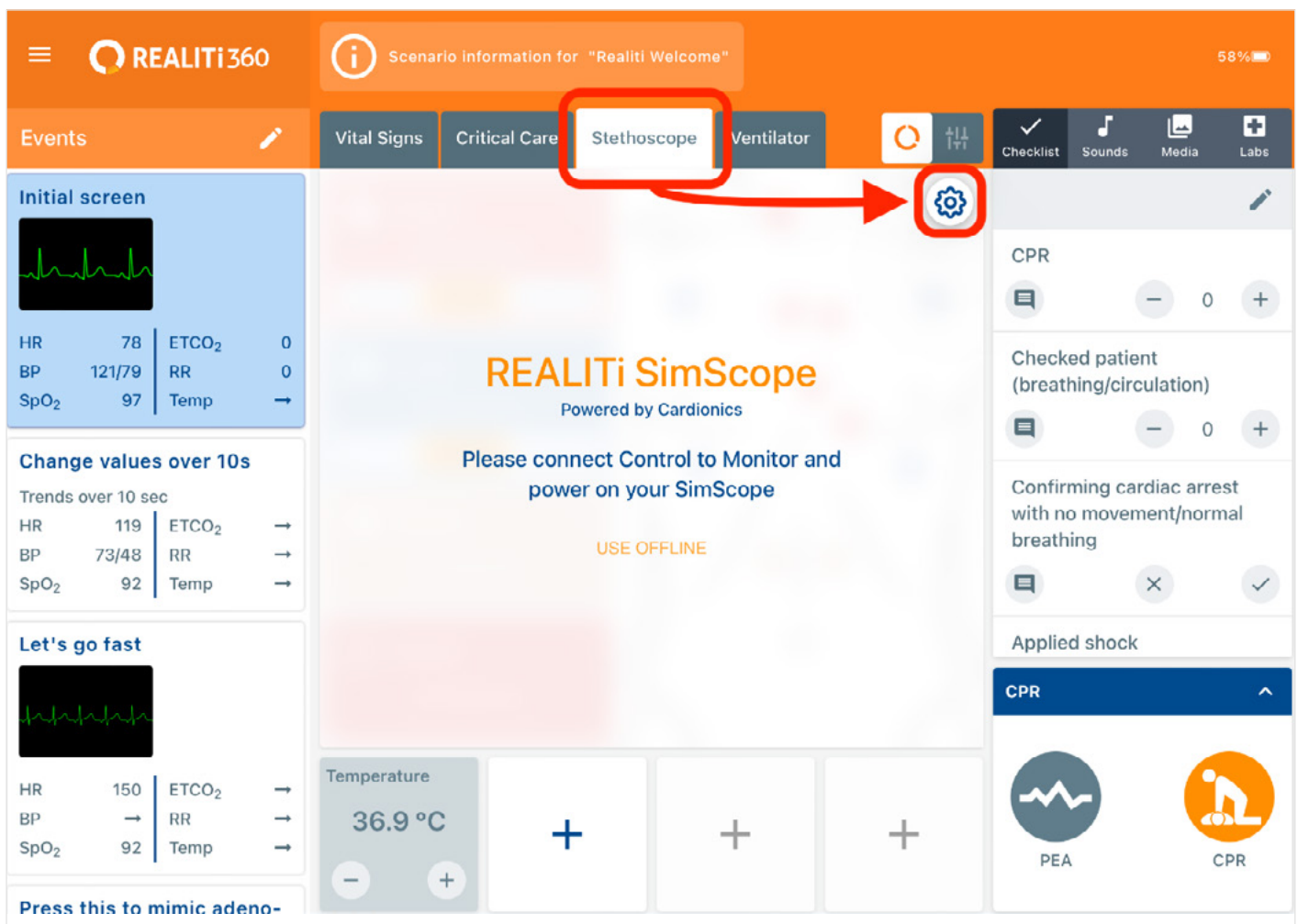

(1. ábra)


3. Megjelenik a sztetoszkóp beállításainak képernyője (2. ábra)

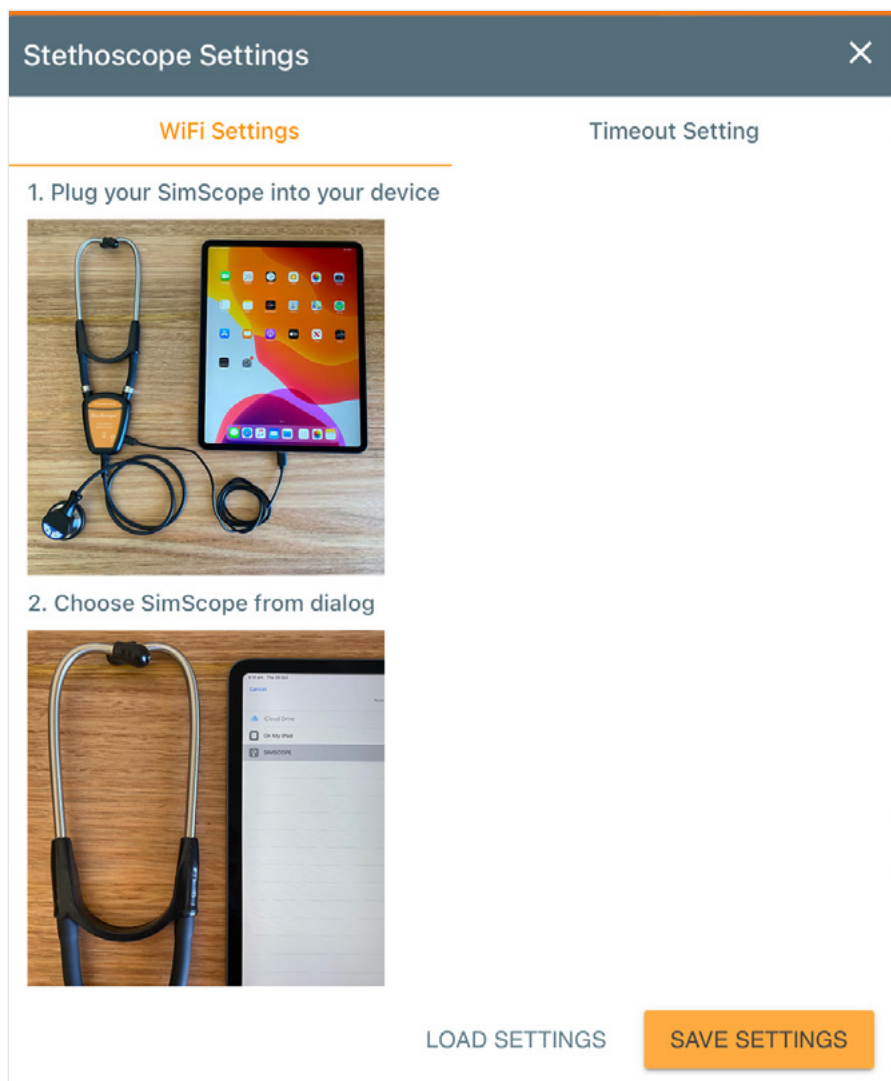

(2. ábra)

A REALTi SimScope csatlakoztatása az iPadhez és a Wi-Fi beállítása

1. Csatlakoztassa a REALTi SimScope-ot az iPadhez a mellékelt kábel segítségével
2. Miután a REALTi SimScope csatlakoztatva van, koppintson a „Load Settings” (Beállítások betöltése) gombra (2. ábra)
3. Várjon, amíg a „SIMSCOPE” megjelenik a fájllistán, ez eltarthat egy ideig. Ezután válassza ki a „SIMSCOPE” lehetőséget, és koppintson a „Done” (Kész) gombra (3. ábra). Várja meg a következő képernyő megjelenését.

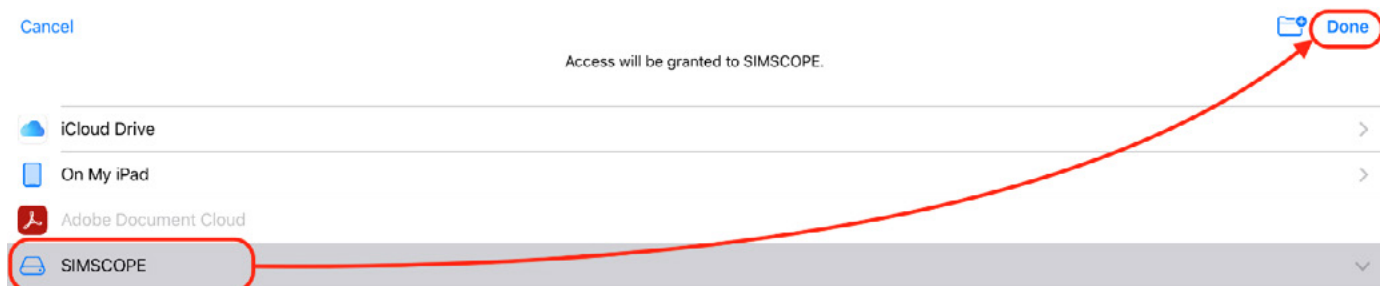

(3. ábra)

4. Ezután lehetőség nyílik a Wi-Fi névnek és jelszavának megadására. Miután ezeket megadta, kattintson a „SAVE SETTINGS” (Beállítások mentése) gombra (4. ábra).

5. Zárja be a Sztetoszkóp beállításainak paneljét a jobb felső sarokban lévő „X” gomb megnyomásával (4. ábra).

Megjegyzés: A Wi-Fi névnek és jelszónak meg kell egyeznie azzal, amelyhez az iPad csatlakozik.


The screenshot shows the 'Stethoscope Settings' app interface. At the top, there's a dark blue header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button (X). Below the header, there are two tabs: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two sub-tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. It contains two input fields: 'WiFi Name' with the text 'iSimulate-Green' and 'Password' with the text 'XXXXXXXXXXXX'. Both input fields are circled in red. A red arrow originates from the right side of the 'Password' field and points down to the 'SAVE SETTINGS' button at the bottom right. At the bottom left, there is a 'LOAD SETTINGS' button.

(4. ábra)

MEGJEGYZÉS: A sikeres Wi-Fi kapcsolat létrehozásához mind a routernek, mind a REALITI SimScope készüléknek be kell lennie kapcsolva és aktívnek kell lennie.


A kapcsolat tesztelése

1. Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott Wi-Fi router be van kapcsolva és működik
2. Válassza le a REALiTi SimScope-ot a kábelről
3. Helyezze a sztetoszkóp fülhallgatóját a fülébe
4. Most nyomja meg a sztetoszkóp harangrészén található plusz (+) gombot.
7. Most csatlakoztassa mindkét REALiTi iPadet a szokásos módon (5. ábra)

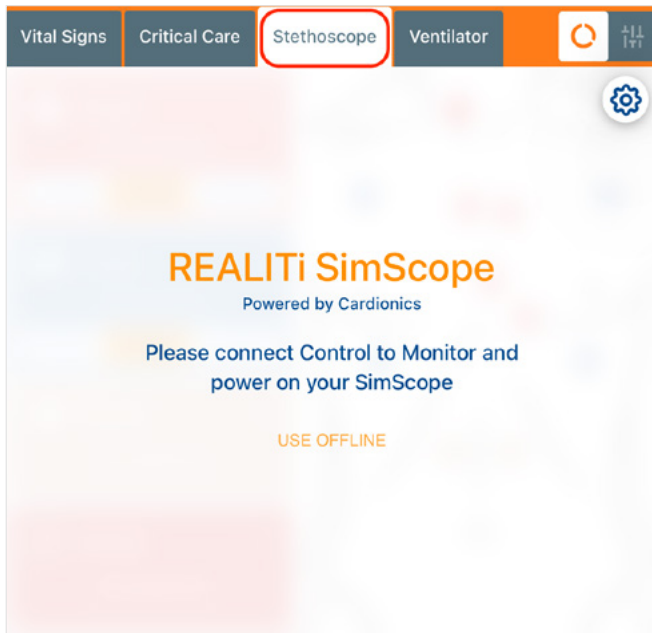

(5. ábra)


8. Nyomja meg a „Connect” (Csatlakozás) gombot a képernyőn az alábbiakban látható módon (6. ábra)

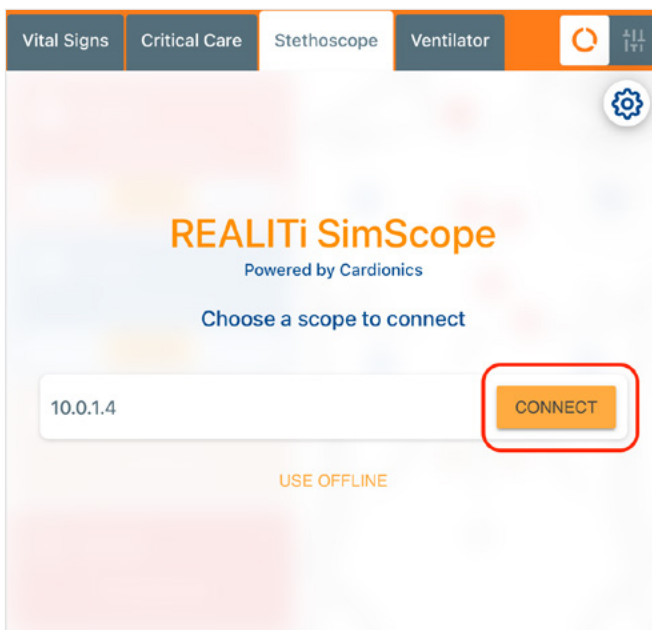

(6. ábra)


5. A következőket kell hallania:
 - „System Activation” (Rendszer aktiválása)
 - „Mode 1” (1. üzemmód)
 - (Egy sor) „sípszó”
 - „Wi-Fi Connected” (Wi-Fi csatlakoztatva)
6. Ha ez nem történik meg, csatlakoztassa vissza a REALiTi SimScope-ot az iPadhez, és próbálja meg újra.

Amikor a REALiTi SimScope először csatlakozik, letölti a hangkönyvtárát (7. ábra).

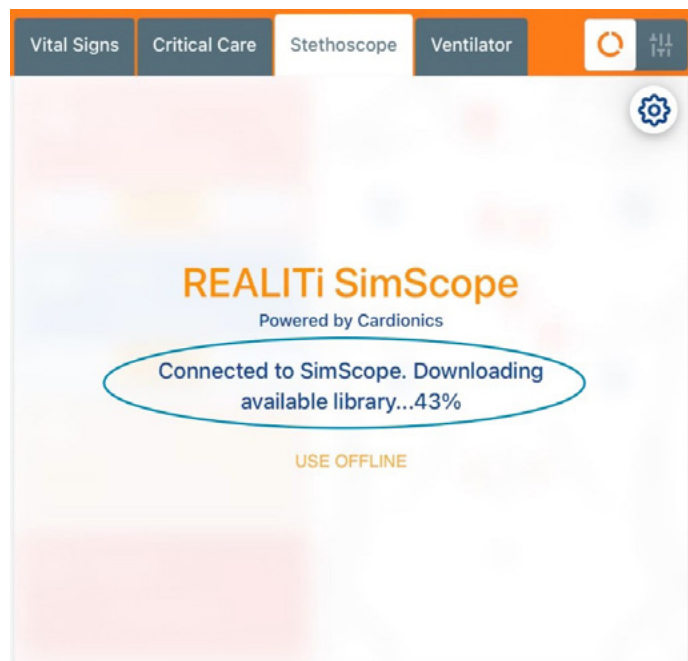

(7. ábra)

9. A könyvtár letöltése után megjelenik a REALiTi SimScope fő vezérlőpanelje (8. ábra).

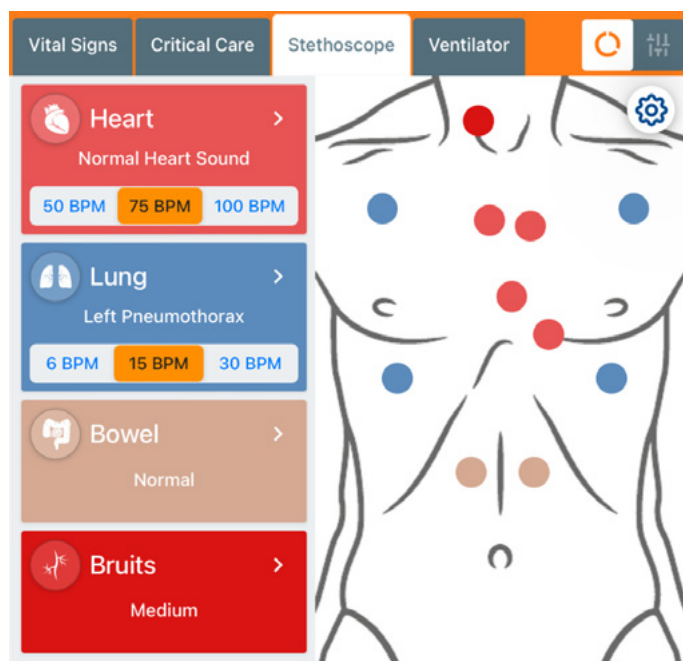

(8. ábra)

A REALiTi SimScope most már használatra kész!

Megjegyzés: Ez egy egyszeri eljárás; nem szükséges, hogy megismételje ezeket a lépéseket minden egyes használat előtt.

➤ HIBAKERESÉSI TIPPEK

Követtem az összes fenti lépést, de a REALiTi SimScope nem csatlakozott.

1. Győződjön meg arról, hogy mind a vezérlő, mind pedig a monitor iPad ugyanabban a Wi-Fi hálózatban található, és csatlakoztatva van. Győződjön meg arról is, hogy a Wi-Fi név és a jelszó mindkét iPaden és a REALiTi SimScope beállításaiiban megegyezik.

Tipp: Javasoljuk, hogy a REALiTi 360 készülékhez mellékelt routert használja.

2. Állítsa be újra a REALiTi SimScope-ot az elejétől kezdve.

3. A sztetoszkóp nem kapcsol be a + gomb megnyomásakor, vagy hamarosan kikapcsol. Cserélje ki az elemet egy újjal.

Tipp: Kizárólag AAA lítium elemet használjon. Az optimális működéshez az „Energizer Ultimate Lithium AAA” elemet ajánljuk.

Ha még mindig nem tudja megoldani a problémát, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

