


# REALTi SimScope – 설정 가이드


## Wi-Fi 설정

1. iPad에서 REALTi 앱을 열고 제어 모드를 선택합니다.
2. “Stethoscope Tab”을 클릭하고 “설정”(톱니바퀴 아이콘)을 누릅니다(그림 1).

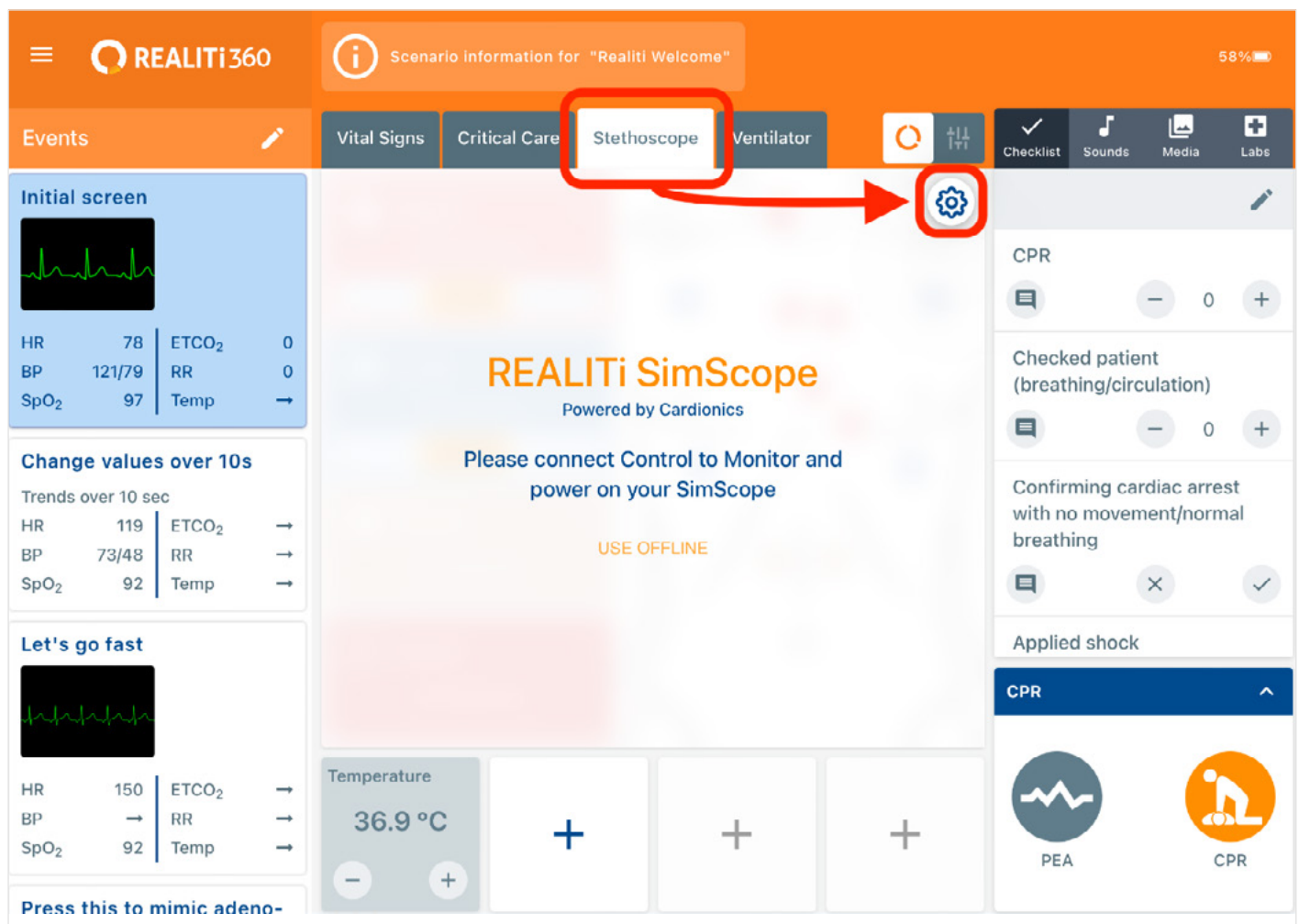

(Fig. 1)

3. 청진기 설정 화면이 나타납니다(그림 2).

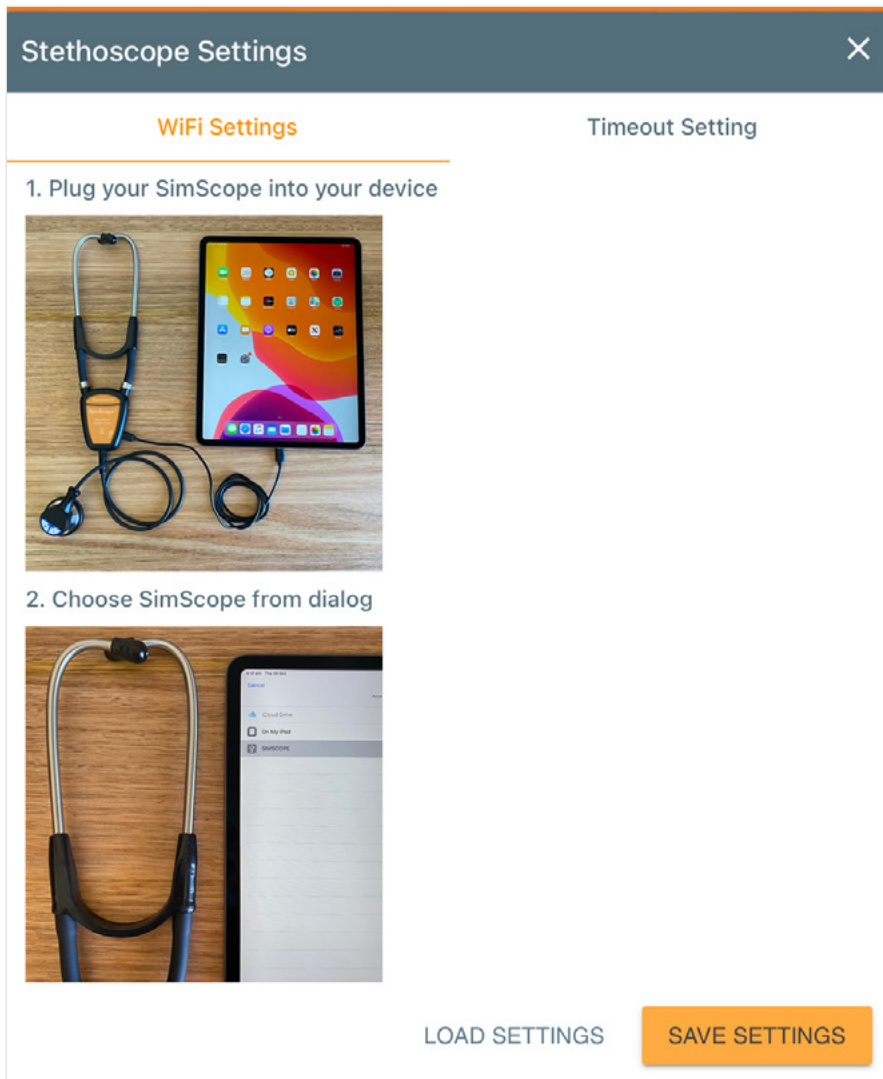

(Fig. 2)

### REALiTi SimScope를 iPad에 연결하고 Wi-Fi 설정하기

1. 제공된 케이블을 사용하여 REALiTi SimScope를 iPad에 연결합니다.
2. REALiTi SimScope가 연결되면 “Load Settings”을 누릅니다(그림 2).
3. 파일 목록에 “SIMSCOPE”가 나타날 때까지 기다리십시오. 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 그런 다음 “SIMSCOPE”를 선택하고 “Done”을 누릅니다(그림 3). 다음 화면이 나타날 때까지 기다리십시오.



(Fig. 3)

4. 그러면 이름과 암호를 추가하는 옵션이 표시됩니다.  
와이파이를 연결하기 위해 WiFi 이름과 암호를 입력한 후  
“SAVE SETTINGS”를 탭합니다. (그림 4).

5. 오른쪽 상단 모서리에 있는 “X”를 눌러 청진기 설정 화면을  
닫습니다(그림 4).

**참고:** Wi-Fi 이름과 암호는 iPad에 연결된 것과 동일해야  
합니다.


The screenshot shows the 'Stethoscope Settings' app interface. At the top, there's a dark blue header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button 'X'. Below the header, there are two tabs: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two sub-tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. It contains two input fields: 'WiFi Name' with the text 'iSimulate-Green' and 'Password' with the text 'XXXXXXXXXXXX'. Both input fields are circled in red. A red arrow points from the 'SAVE SETTINGS' button at the bottom right to the 'SAVE SETTINGS' button. At the bottom, there are two buttons: 'LOAD SETTINGS' (grey) and 'SAVE SETTINGS' (orange).

(Fig. 4)

**참고:** 성공적으로 Wi-Fi 연결을 설정하려면 라우터와 REALiTi SimScope가 모두 켜져 있고 활성화되어 있어야 합니다.


## 연결 테스트

1. 선택한 Wi-Fi 라우터가 켜져 있고 작동하는지 확인하세요.
2. 케이블에서 REALTi SimScope를 분리합니다.
3. 청진기의 이어피스를 귀에 꽂습니다.
4. 이제 청진기 벨 부분에 있는 더하기(+) 버튼을 누릅니다.
5. 다음의 소리를 확인합니다.
  - ‘시스템 활성화’
  - ‘모드 1’
  - (일련의) ‘빠-소리’
  - ‘Wi-Fi 연결됨’
6. 그렇지 않으면 REALTi SimScope를 iPad에 다시 연결하여 다시 시도하십시오.
7. 이제 두개의 REALTi iPad를 연결합니다(그림 5).

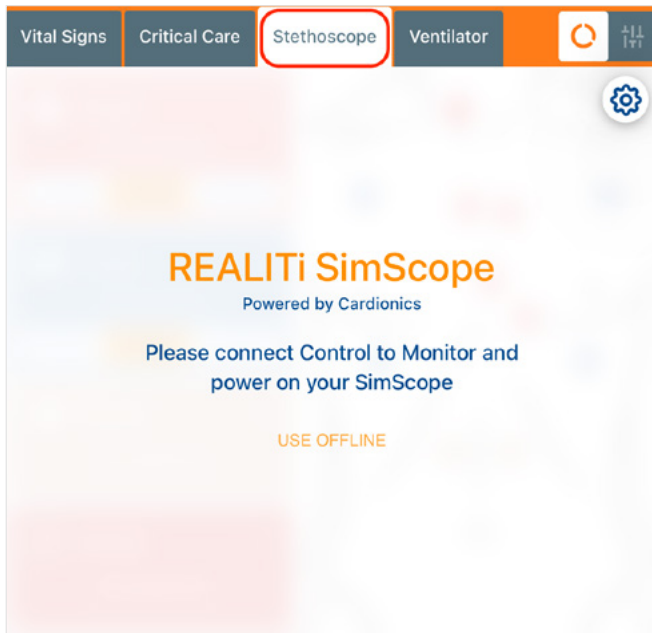


(Fig. 5)

8. 아래와 같이 화면에서 “CONNECT” 버튼을 누릅니다. (그림 6)

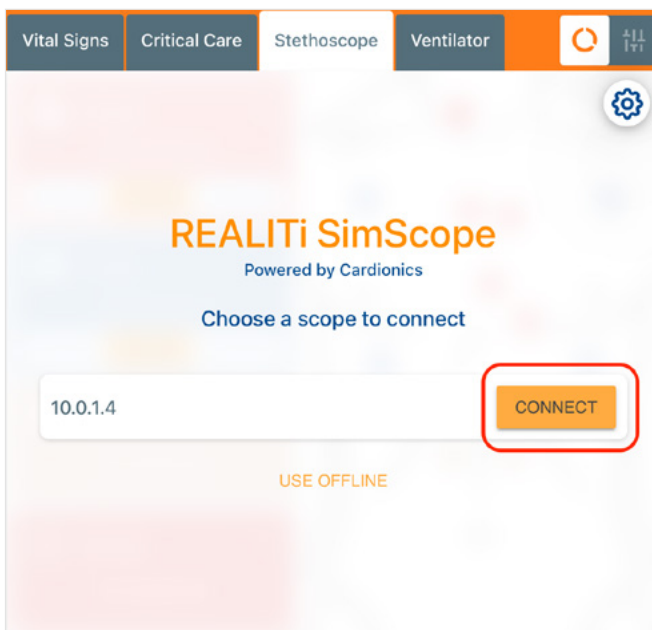


(Fig. 6)

REALiTi SimScope가 처음 연결되면 사운드 라이브러리를 다운로드합니다(그림 7).

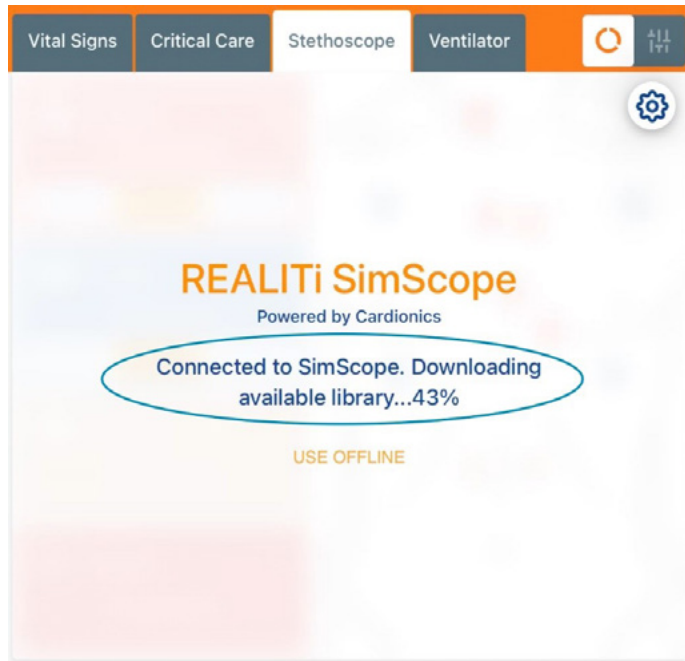

(Fig. 7)

9. 라이브러리가 다운로드되면 기본 REALiTi SimScope 제어판이 표시됩니다(그림 8).

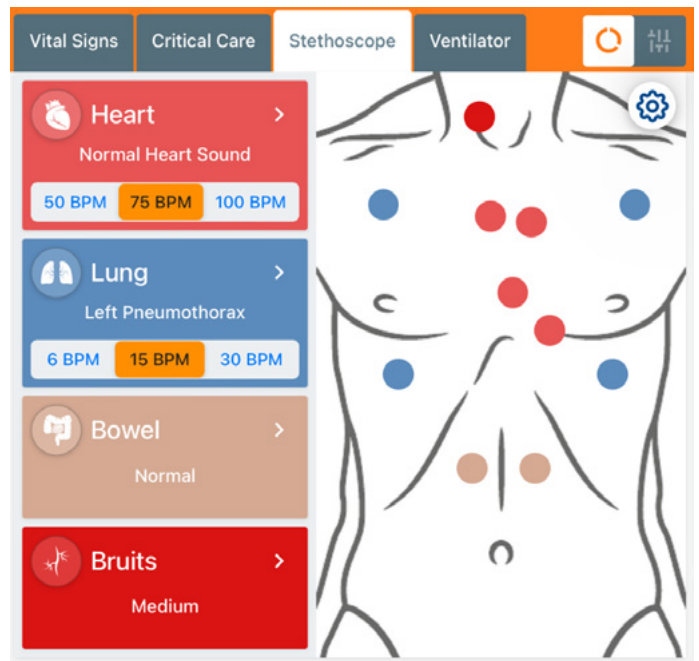

(Fig. 8)

REALiTi SimScope는 이제 사용할 준비가 되었습니다!

**참고:** 이 절차는 한 번만 수행됩니다. 매번 사용하기 전에 이 단계를 반복할 필요는 없습니다.

## > 문제 해결 팁

위의 모든 단계를 수행했지만 REALiTi SimScope가 연결되지 않는 경우.

1. 제어 및 모니터 iPad가 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 있고 연결되어 있는지 확인하십시오. 또한 iPad와 REALiTi SimScope 설정의 Wi-Fi 이름과 암호가 동일한지 확인하십시오.  
**팁:** REALiTi 360 키트와 함께 제공된 라우터를 사용하는 것이 좋습니다.

2. REALiTi SimScope를 처음부터 다시 설정하십시오.

3. + 버튼을 눌러도 청진기가 켜지지 않거나 곧 꺼지는 경우, 배터리를 새 것으로 교체하십시오.

**팁:** AAA 리튬 배터리만 사용하십시오. 최적의 기능을 위해 “Energizer Ultimate Lithium AAA” 배터리를 권장합니다.

여전히 문제를 해결할 수 없는 경우 당사에 문의하십시오.

