


REALTi SimScope – Guia de Configuração


Configuração de WiFi

1. Abra o app REALTi em seu iPad e selecione modo de Controle
2. Clique na "Aba Estetoscópio" e toque em "Configuração" (ícone de roda dentada), (Fig. 1).

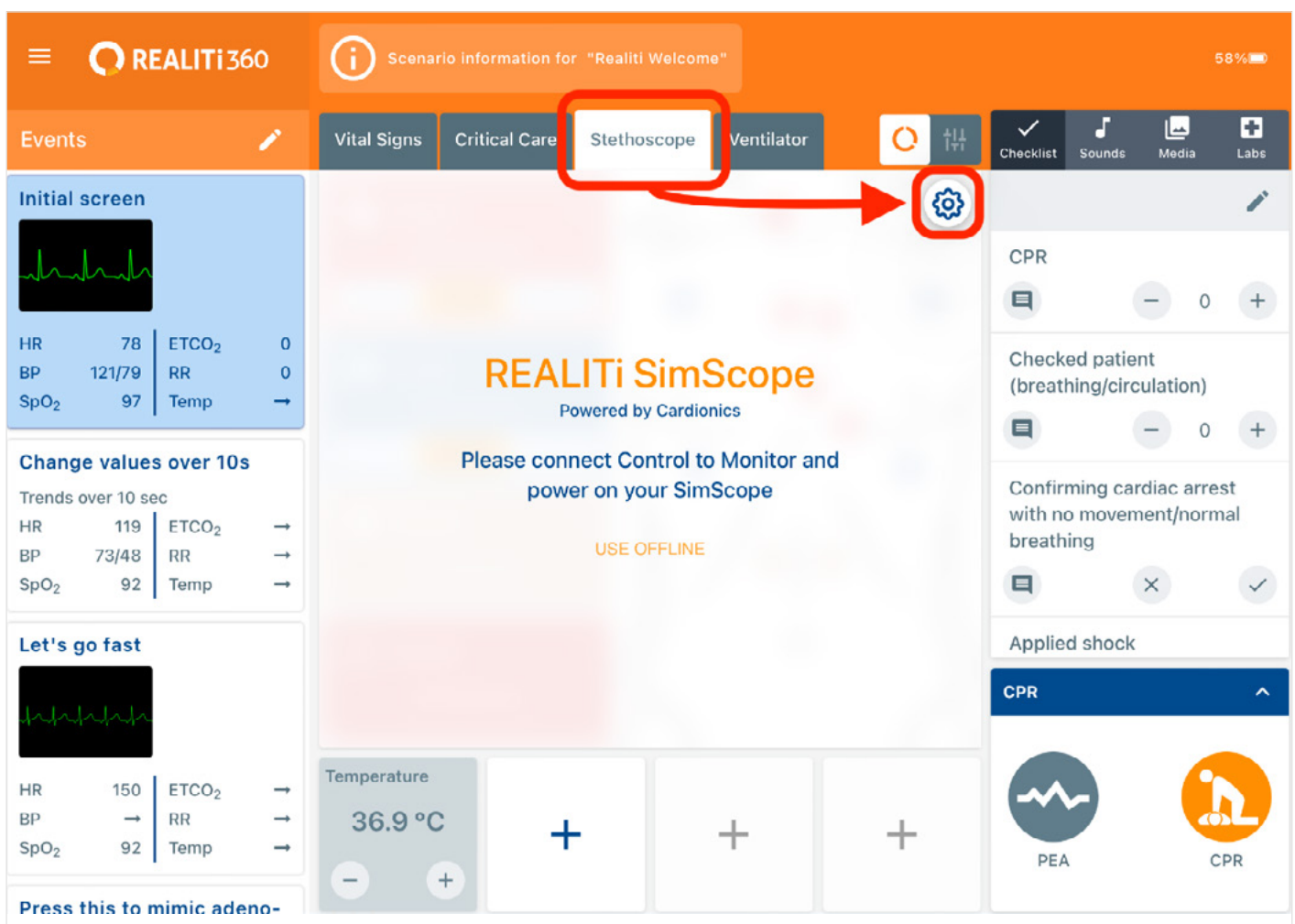

(Fig. 1)

3. Você verá a Tela de Configurações do Estetoscópio (Fig. 2)

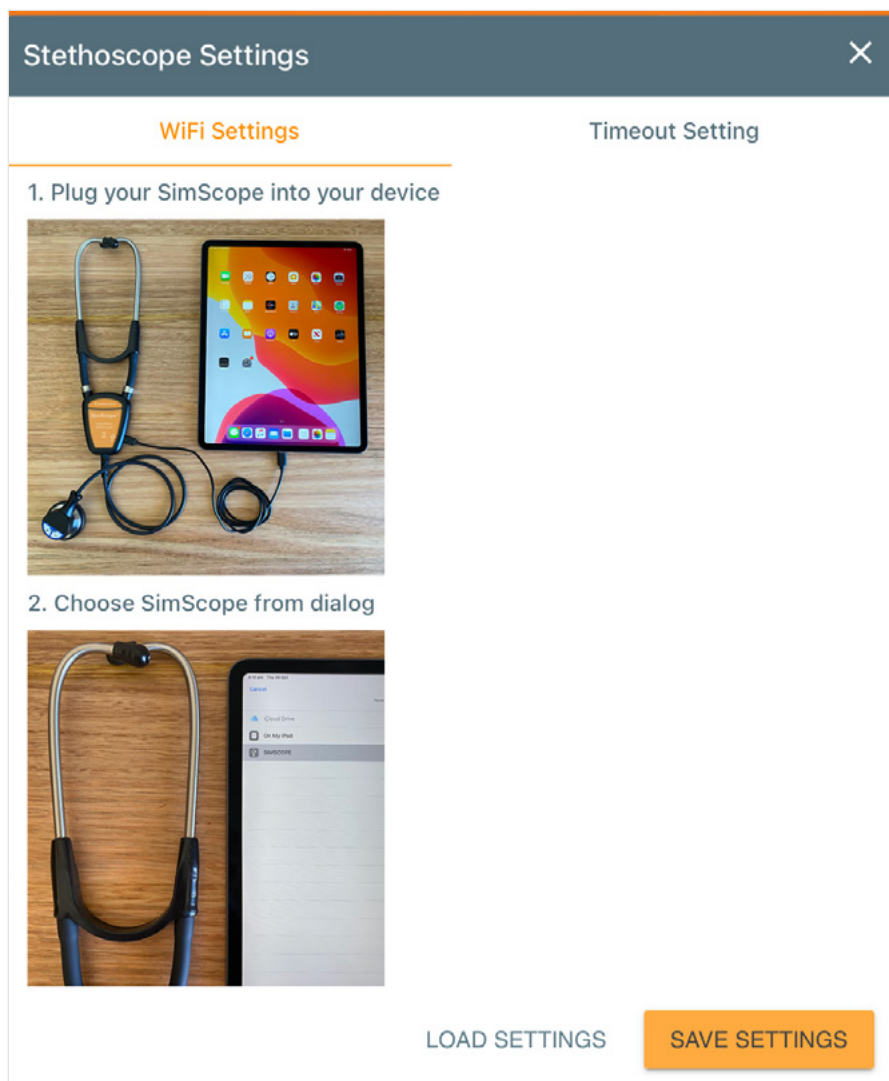

(Fig. 2)

Conectar o REALITi SimScope ao seu iPad e Configurar a WiFi

1. Conecte o REALITi SimScope ao iPad usando o cabo fornecido
2. Uma vez que o REALITi SimScope esteja conectado, toque em “Carregar Configurações” (Fig. 2)
3. Aguarde aparecer “SIMSCOPE” na lista de arquivos, isto pode demorar um pouco. Então, selecione “SIMSCOPE” e toque em “Abrir” (Fig. 3). Espere até que a próxima tela apareça.



(Fig. 3)

4. Você, então, verá opções para adicionar o Nome e a Senha de sua WiFi. Uma vez que tenha informado estes dados, toque em “SALVAR CONFIGURAÇÕES” (Fig. 4).

5. Feche a caixa de Configurações do Estetoscópio tocando no “X” no canto superior direito (Fig. 4).


Observação: O Nome e a Senha do WiFi devem ser os mesmos da rede em que o iPad está conectado.

The screenshot displays the 'Stethoscope Settings' application interface. At the top, there is a dark blue header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button (X) on the right. Below the header, the interface is divided into two main sections: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. Within the 'Basic' tab, there are two input fields: 'WiFi Name' and 'Password'. The 'WiFi Name' field contains the text 'iSimulate-Green' and is circled in red. The 'Password' field contains the text 'XXXXXXXXXXXX' and is also circled in red. A red arrow originates from the right side of the 'Password' field and points down to the 'SAVE SETTINGS' button at the bottom right of the screen. At the bottom left, there is a 'LOAD SETTINGS' button. The entire interface is enclosed in a light gray border.

(Fig. 4)


Testar a Conexão

1. Assegure-se de que o roteador WiFi selecionado está ligado e funcionando
 2. Desconecte o REALiTi SimScope pelo cabo
 3. Coloque as olivas auriculares do estetoscópio em suas orelhas
 4. Agora, pressione o botão (+) na parte da campânula do estetoscópio.
7. Agora, conecte ambos os iPads REALiTi como sempre (Fig. 5)

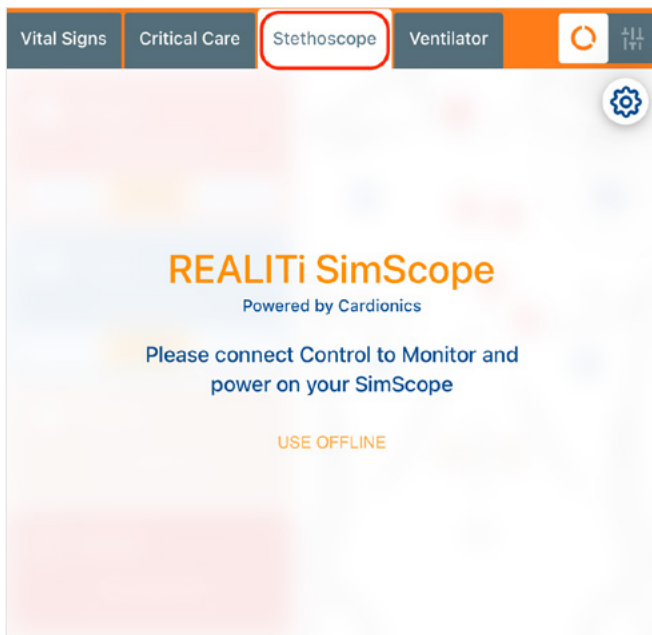


(Fig. 5)

8. Pressione o botão “Conectar” na tela conforme mostrado abaixo (Fig. 6)

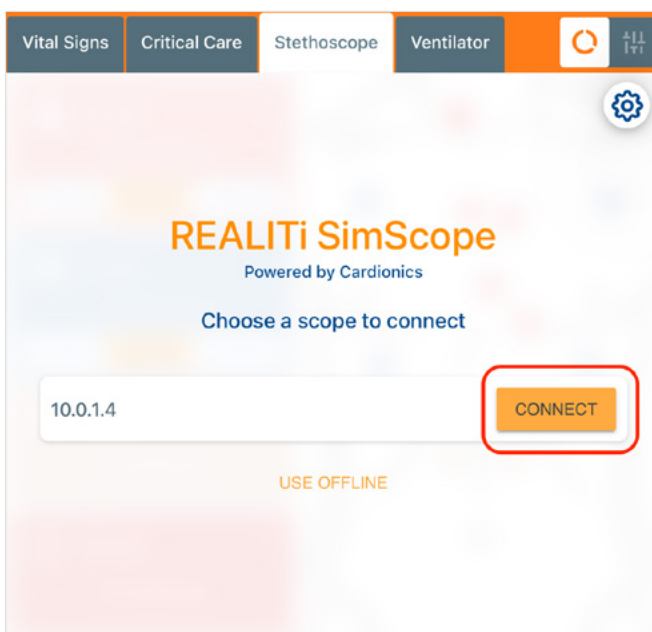


(Fig. 6)

A primeira vez que o REALITi SimScope conectar, fará o download da Biblioteca de Sons (Fig. 7).

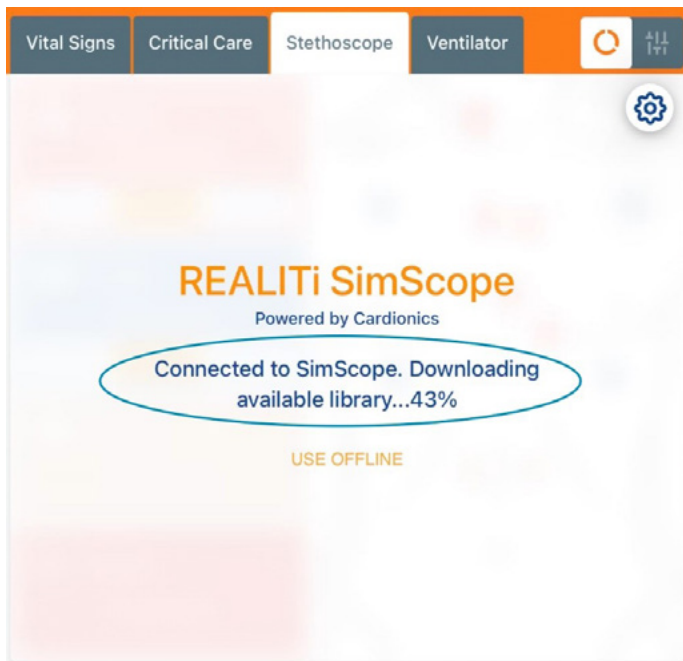

(Fig. 7)

9. Uma vez baixada a biblioteca, você verá o painel de controle principal REALITi SimScope (Fig. 8).

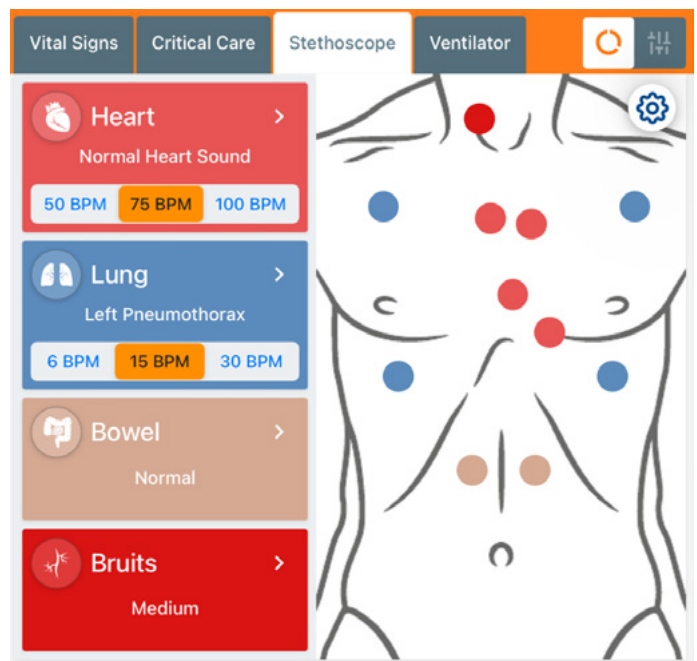

(Fig. 8)

REALITi SimScope está pronto para o uso!

Observação: Este é um procedimento único; não é necessário repetir estes passos antes de cada uso.

> DICAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Segui todas as etapas acima, mas o REALITi SimScope não conectou.

1. Assegure-se que o iPad de Controle e Monitor estão na mesma WiFi e estão conectados. Assegure-se que o Nome e Senha em ambos seus iPads e nas Configurações REALITi SimScope sejam as mesmas.

Dica: Recomendado usar o Roteador que veio com seu kit REALITi 360.

2. Configure o REALITi SimScope novamente do início.

3. O Estetoscópio não liga pressionado o botão + ou desliga rápido. Substitua a pilha por uma nova da WiFi.

Dica: Use somente Pilhas de Lítio AAA. Recomendamos Pilha “Energizer Ultimate Lithium AAA” para função ideal.

Se ainda não conseguir resolver o problema, entre em contato conosco.

