


REALiTi SimScope – Руководство по настройке


Настройка сети Wi-Fi

1. Откройте приложение REALiTi на iPad и выберите режим «Контроль» («Control»).
2. Щелкните по «Вкладке стетоскопа», а затем «Настройки» («Settings») (символ шестеренки), (Рис. 1).

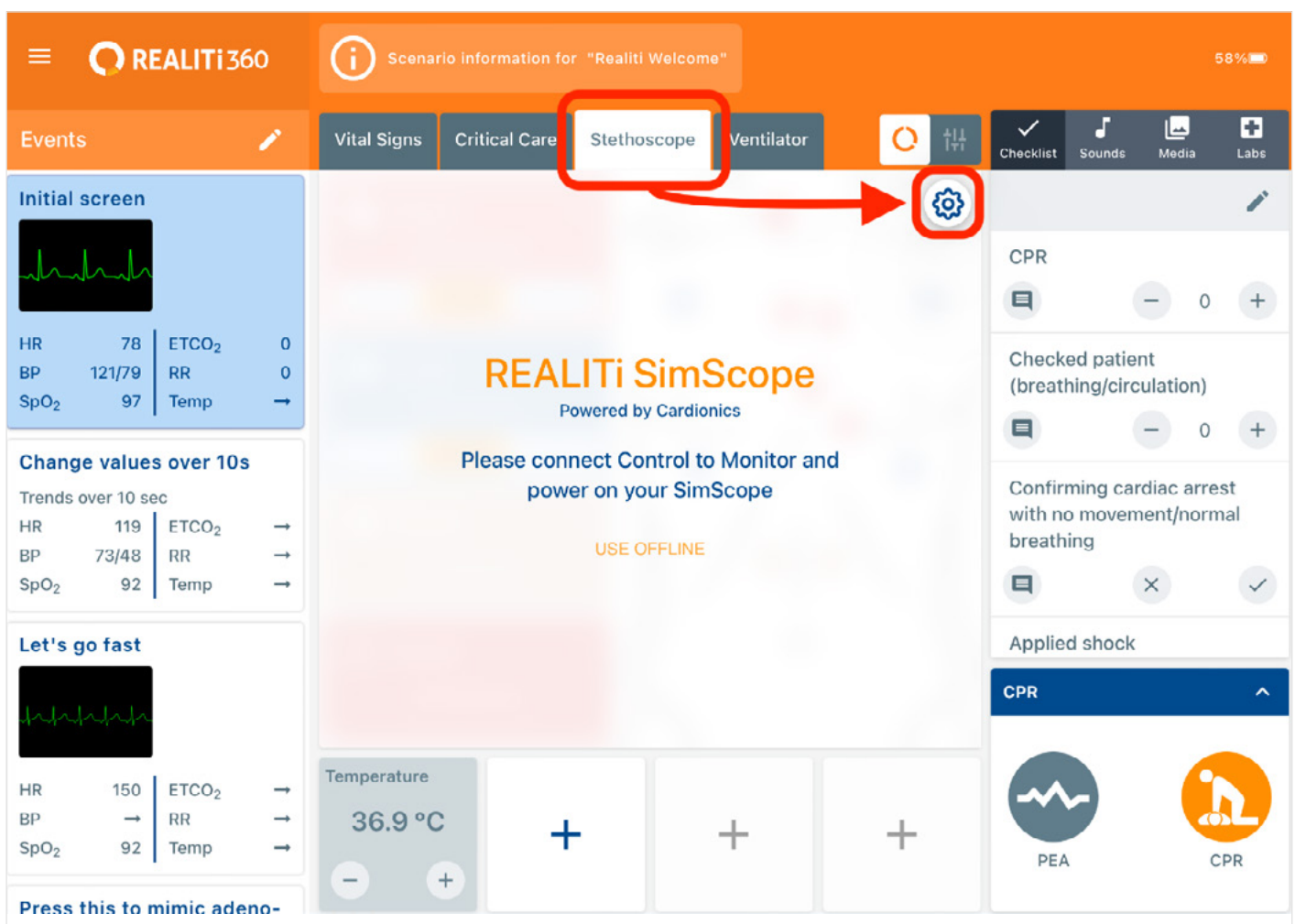

(Рис. 1)


3. Откроется экран настроек стетоскопа (Рис. 2).

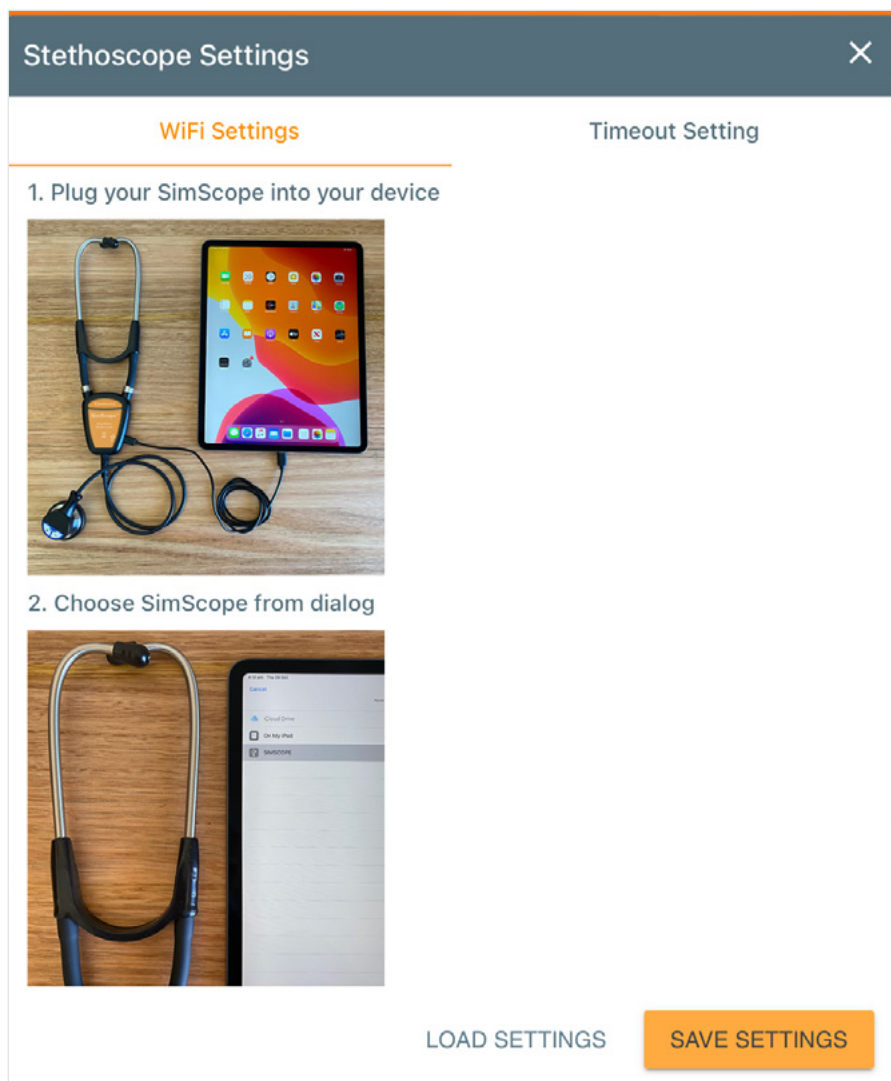

(Рис. 2)

Подключение REALiTi SimScope к iPad и конфигурирование сети Wi-Fi

1. Подсоедините REALiTi SimScope к iPad при помощи входящего в комплект шнура.
2. После подсоединения REALiTi SimScope нажмите кнопку «Загрузить настройки» («Load Settings») (Рис. 2).
3. Дождитесь появления SIMSCOPE в списке файлов; это может занять некоторое время. Выберите «SIMSCOPE» и нажмите «Готово» («Done») (Рис. 3). Подождите, пока загрузится следующий экран.

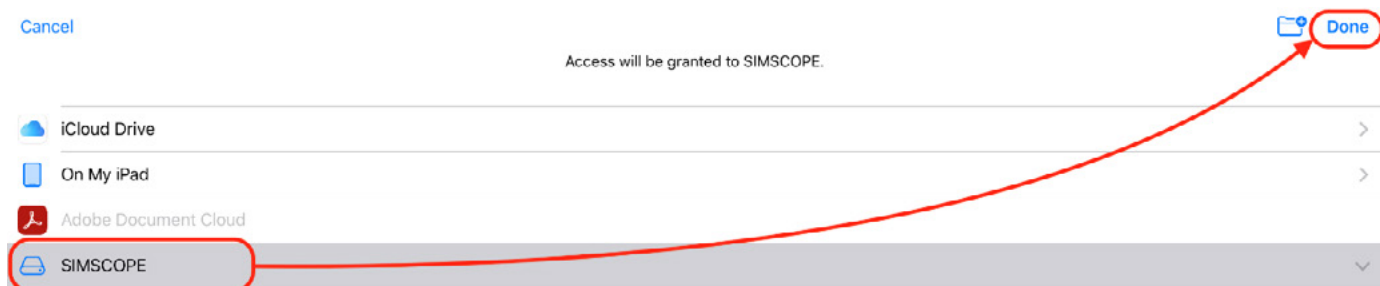

(Рис. 3)

4. Вы увидите на нем опции добавления имени и пароля сети Wi-Fi. После ввода этих данных нажмите «СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ» («SAVE SETTINGS») (Рис. 4).

5. Закройте экран настроек стетоскопа, нажав «X» в правом верхнем углу (Рис. 4).

Примечание: Имя и пароль Wi-Fi должны быть идентичны тем, которые используются для сети, к которой подсоединен ваш iPad.


The screenshot shows the 'Stethoscope Settings' app interface. At the top, there is a dark blue header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button 'X' in the top right corner. Below the header, there are two tabs: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two sub-tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. In the 'Basic' tab, there are two input fields: 'WiFi Name' and 'Password'. The 'WiFi Name' field contains the text 'iSimulate-Green' and the 'Password' field contains 'XXXXXXXXXXXX'. Both input fields are highlighted with red rounded rectangles. A red arrow originates from the right side of the 'Password' field and points down to the 'SAVE SETTINGS' button at the bottom right of the screen. At the bottom left, there is a 'LOAD SETTINGS' button.

(Рис. 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы подключение к сети Wi-Fi прошло успешно, маршрутизатор и REALiTi SimScore должны быть включены и находиться в рабочем состоянии.


Проверка подключения

1. Убедитесь, что маршрутизатор Wi-Fi включен и работает.
2. Отсоедините шнур от REALiTi SimScope.
3. Вставьте наконечники стетоскопа в уши.
4. Теперь нажмите кнопку увеличения (+) на колоколе стетоскопа.
5. Вы должны услышать следующее:
 - «System Activation» («Активация системы»)
 - «Mode 1» («Режим 1»)
 - Короткие звуковые сигналы
 - «Wi-Fi Connected» («Wi-Fi подключен»)
6. Если это не удалось, снова подключите REALiTi SimScope к iPad и повторите попытку.
7. Теперь подключите оба iPad REALiTi по стандартной схеме (Рис. 5).

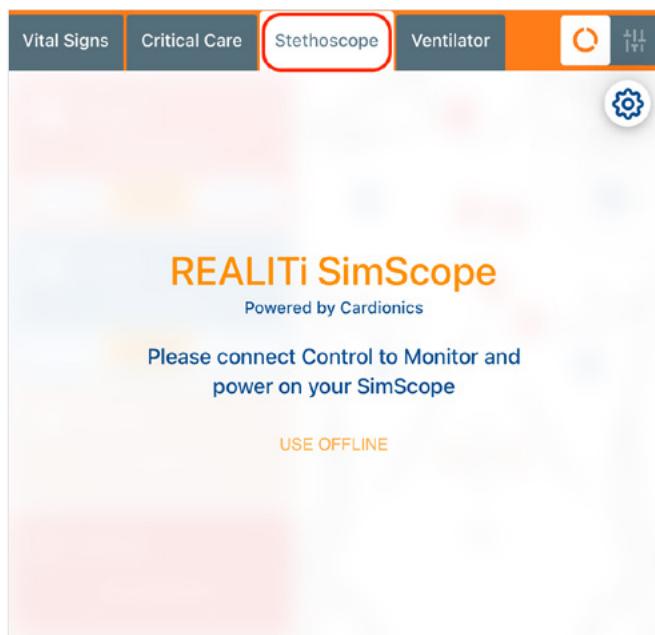


(Рис. 5)

8. Нажмите кнопку «Подключить» («Connect») на экране, как показано ниже (Рис. 6).

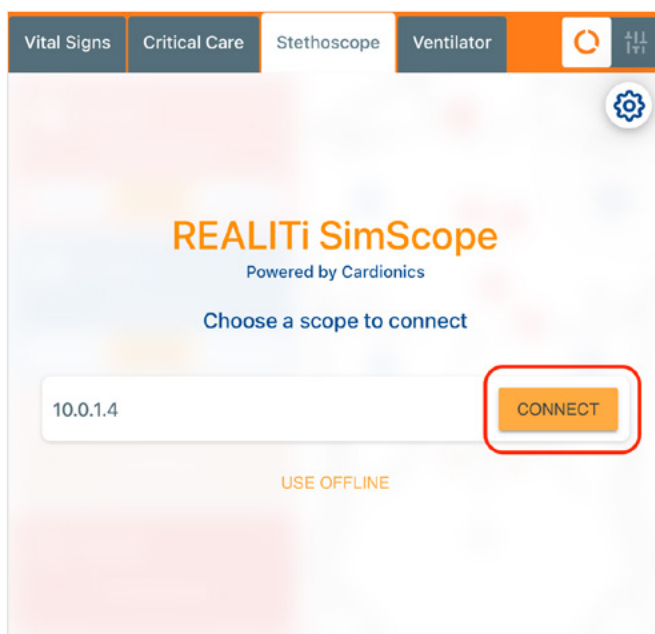


(Рис. 6)

При первом подключении REALTi SimScope загрузится библиотека звуков (Рис. 7).

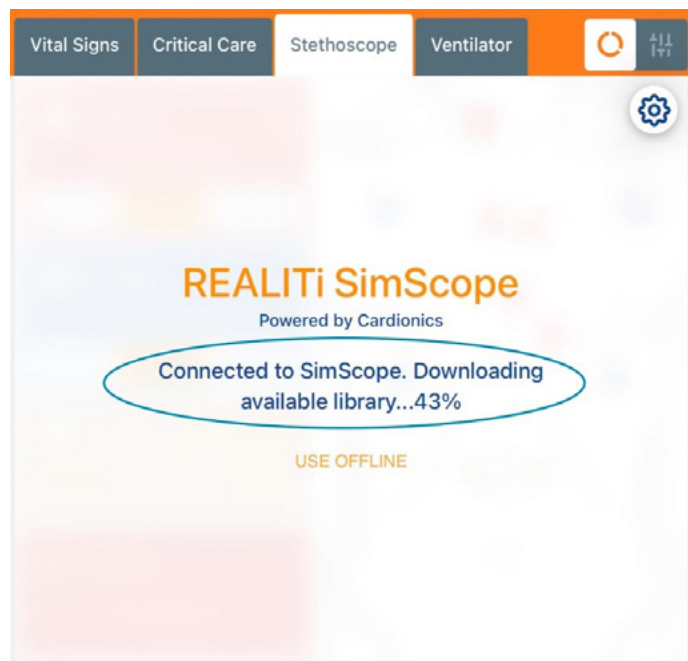

(Рис. 7)

9. После загрузки библиотеки отобразится основная панель управления REALTi SimScope (Рис. 8).

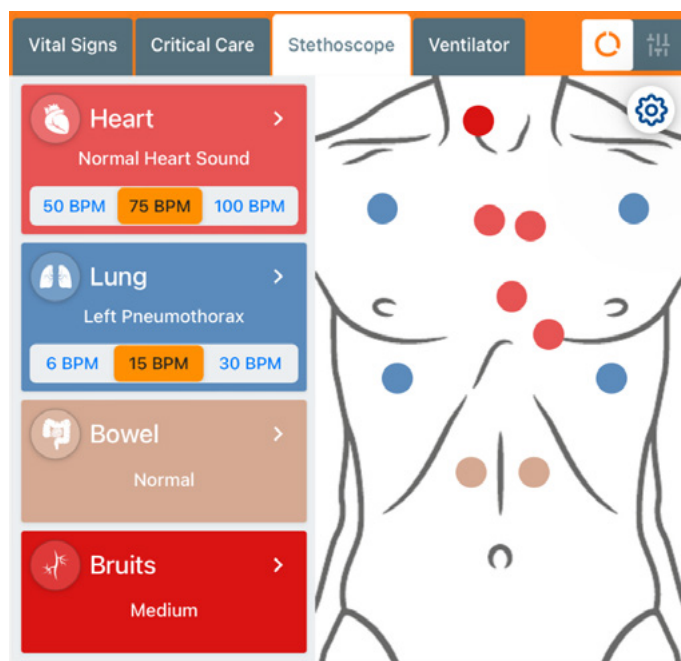

(Рис. 8)

Теперь REALTi SimScope готов к работе!

Примечание: Процедура производится только перед первым подключением и не требует повторения действий перед каждым использованием.

➤ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Были выполнены все описанные выше действия, но не удалось произвести подключение REALTi SimScope.

1. Убедитесь, что контроллер и монитор iPad подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Убедитесь, что имя сети Wi-Fi и пароль на устройствах iPad и в настройках REALTi SimScope совпадают.

Подсказка:Рекомендуется использовать маршрутизатор, входящий в комплект к REALTi 360.

2. Повторно выполните процедуру настройки REALTi SimScope с самого начала.

3. Стетоскоп не включается после нажатия кнопки «+» или сразу выключается. Замените аккумулятор.

Подсказка: Используйте только литиевый аккумулятор AAA. Для оптимальной работы устройства рекомендуется использовать элемент питания «Energizer Ultimate Lithium AAA».

Если устранить неисправность не удается, свяжитесь с нами.

