


REALiTi SimScope – Kurulum Kılavuzu


Wi-Fi Kurulumu

1. iPad'inizde REALiTi uygulamasını açın ve Control modunu seçin
2. "Stethoscope Tab" üzerine tıklayın ve "Settings"- (Dişli çark simgesi) seçeneğine dokunun (Şekil 1).

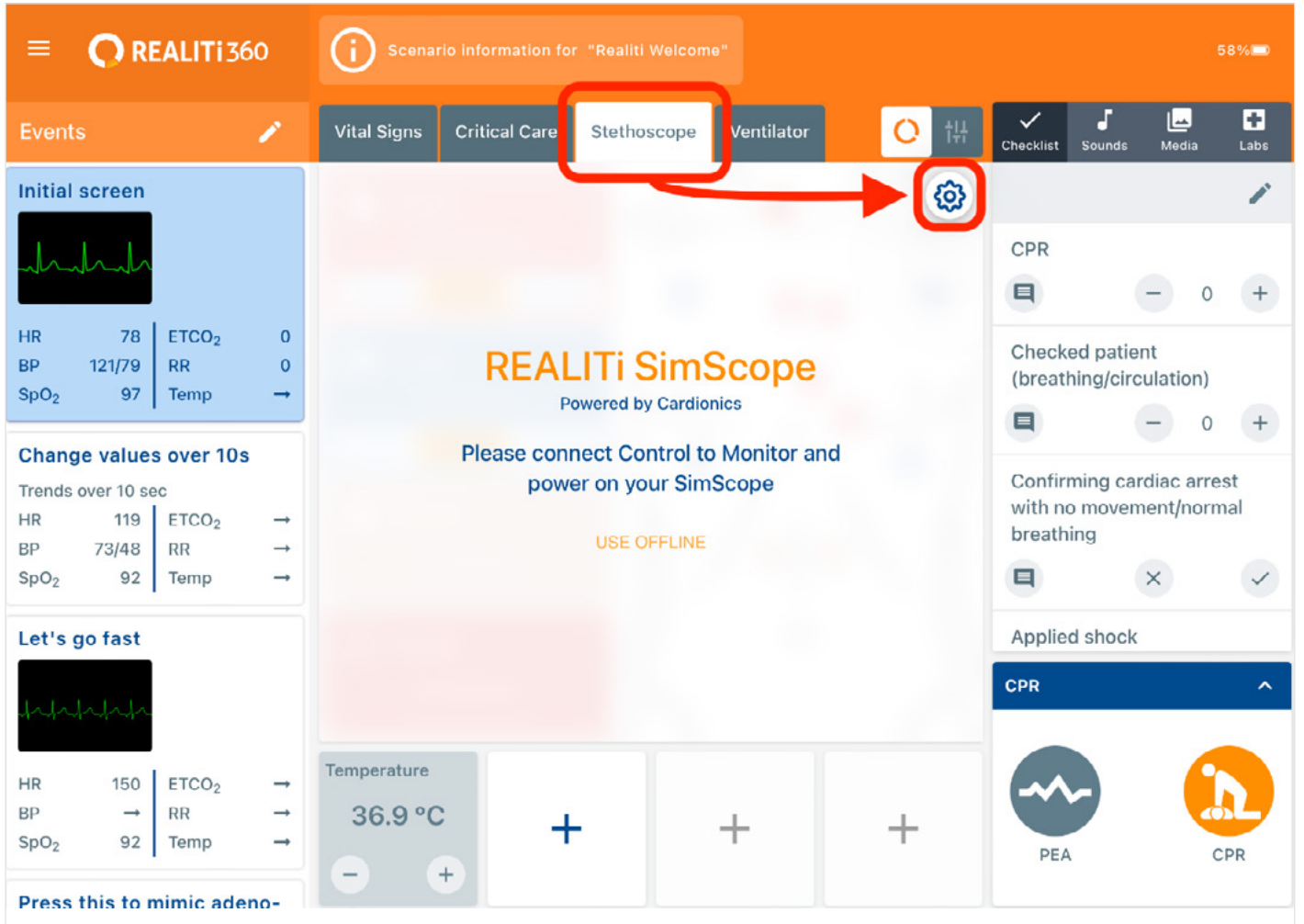

(Şekil 1)


3. Stetoskop Ayarları Ekranını göreceksiniz (Şekil 2)

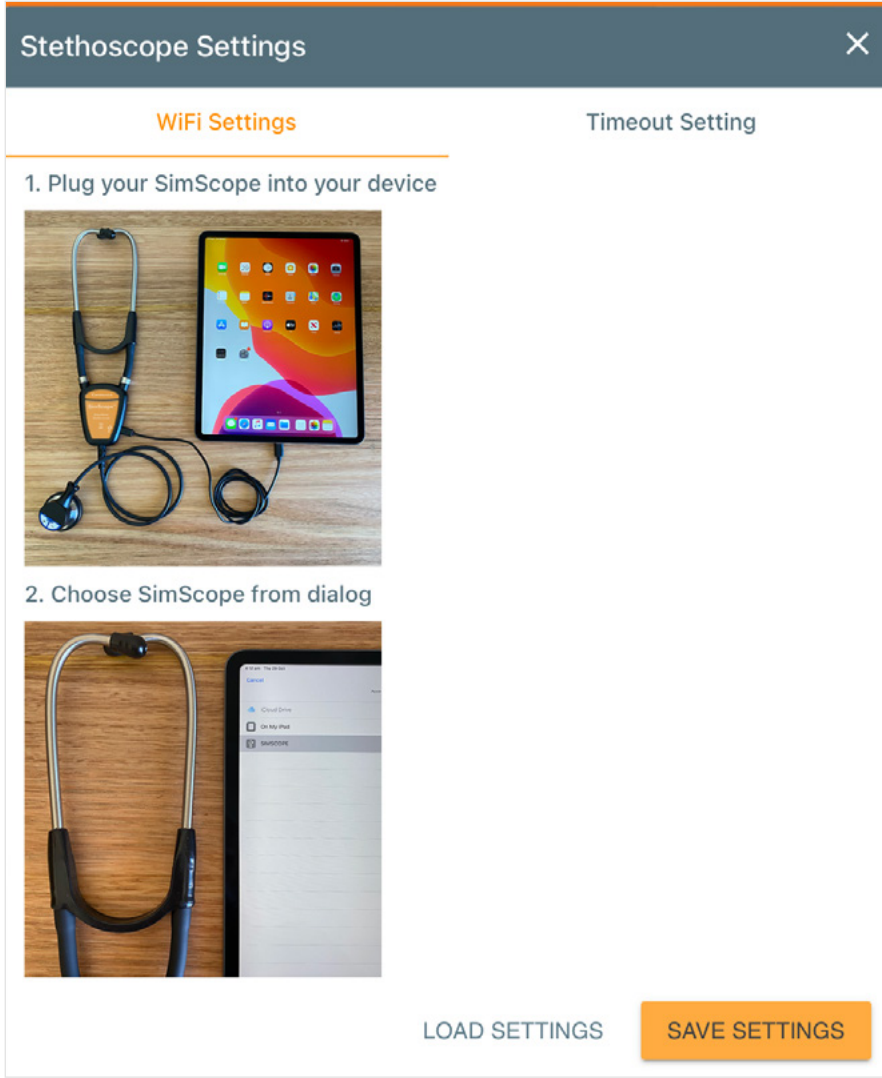

(Şekil 2)

REALiTi SimScope'un iPad'inize Bağlanması ve Wi-Fi Yapılandırması

1. Temin edilen kabloyu kullanarak REALiTi SimScope'u iPad'e takın
2. REALiTi SimScope takıldıktan sonra, "Load Settings" seçeneğine dokununuz (Şekil 2)
3. Dosya listesinde "SIMSCOPE" adının görünmesini bekleyin, bu biraz zaman alabilir. Daha sonra "SIMSCOPE" seçin ve "Done" seçeneğine dokununuz (Şekil 3). Bir sonraki ekranın görünmesini bekleyin.

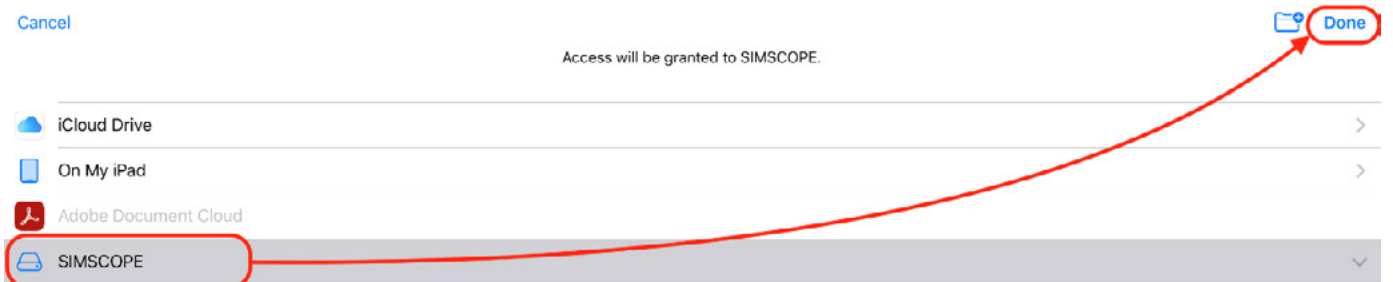

(Şekil 3)

4. Daha sonra Wi-Fi'niz için Ad ve Şifre ekleme seçeneklerini göreceksiniz. Bunları girdikten sonra "SAVE SETTINGS" seçeneğine dokununuz (Şekil 4).

5. Sağ üst köşedeki "X" işaretine basarak Stethoscope Settings kutusunu kapatın (Şekil 4).

Not: Wi-Fi Adı ve Şifresi iPad'in bağlı olduğu ile aynı olmalıdır.


The screenshot shows the 'Stethoscope Settings' app interface. At the top, there's a dark blue header with the title 'Stethoscope Settings' and a close button 'X'. Below the header, there are two tabs: 'WiFi Settings' (highlighted in orange) and 'Timeout Setting'. Under 'WiFi Settings', there are two sub-tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. It contains two input fields: 'WiFi Name' with the text 'iSimulate-Green' and 'Password' with the text 'XXXXXXXXXX'. Both input fields are circled in red. A red arrow originates from the 'Password' field and points down to the 'SAVE SETTINGS' button at the bottom right. At the bottom left, there is a 'LOAD SETTINGS' button.

(Şekil 4)

NOT: Başarılı bir Wi-Fi bağlantısı kurulumu için hem yönlendirici hem de REALiTi SimScope açık ve etkin durumda olmalıdır.


Bağlantının Test Edilmesi

1. Seçtiğiniz Wi-Fi yönlendiricinin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun
2. REALTi SimScope'u kablodan çıkarın
3. Stetoskopun kulaklığını kulaklarınıza yerleştirin
4. Şimdi stetoskopun çan kısmında bulunan artı (+) düğmesine basın.
7. Şimdi her iki REALTi iPad'i her zamanki gibi bağlayın (Şekil 5)

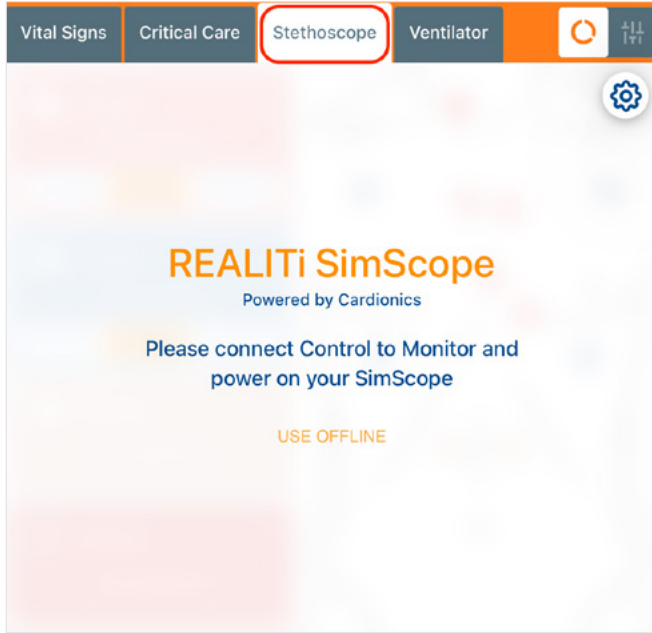

(Şekil 5)


8. Aşağıda gösterildiği gibi ekranda "Connect" düğmesine basın (Şekil 6)

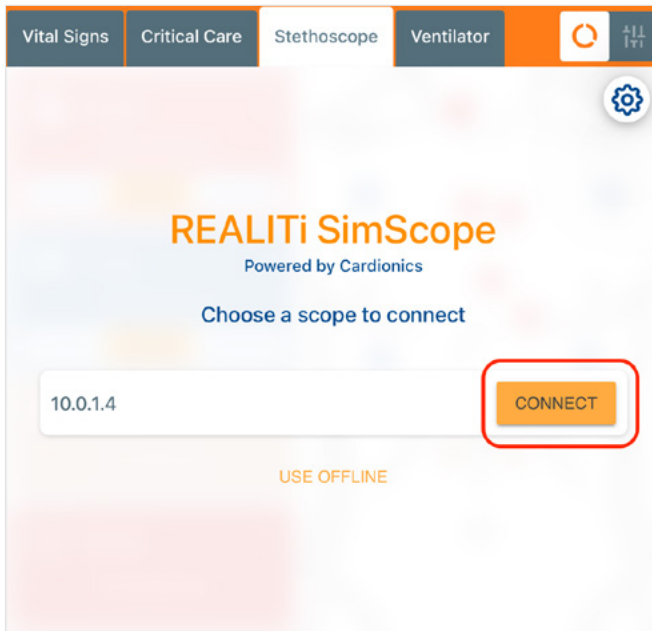

(Şekil 6)


5. Şunları duymanız gerekir:
 - 'System Activation'
 - 'Mode 1'
 - (Bir dizi) 'bip' sesi
 - 'Wi-Fi Connected'
6. Bu olmazsa, REALTi SimScope'u tekrar iPad'e takın ve yeniden deneyin.

REALiTi SimScope ilk kez bağlandığında Ses Kitaplığını indirir (Şekil 7).

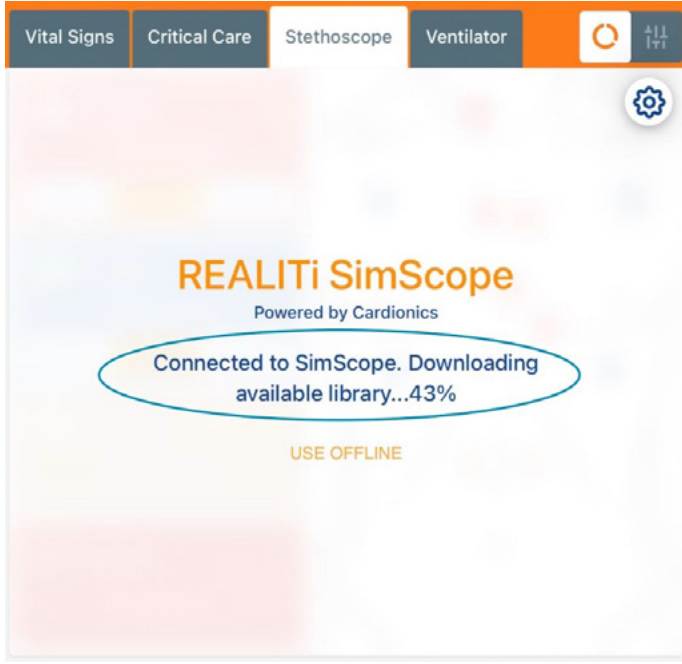

(Şekil 7)

9. Kitaplık indirildikten sonra, ana REALiTi SimScope kontrol panelini göreceksiniz (Şekil 8).

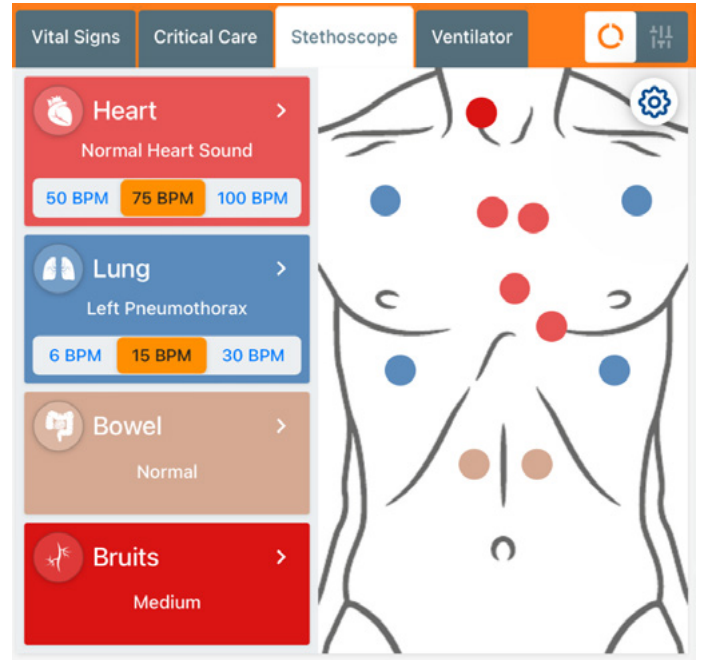

(Şekil 8)

REALiTi SimScope artık kullanıma hazırdır!

Not: Bu yalnızca tek seferlik bir işlemdir; her kullanım öncesinde bu adımları tekrarlamanız gerekmez.

➤ SORUN GİDERME İPUÇLARI

Yukarıdaki tüm adımları izledim ama REALiTi SimScope bağlanmadı.

1. Hem Control hem de Monitor iPad'in aynı Wi-Fi ağında olduğundan ve bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca her iki iPad'inizdeki ve REALiTi SimScope Ayarlarındaki Wi-Fi Adı ve Şifresinin aynı olduğundan emin olun.

İpucu: REALiTi 360 kitinizle birlikte gelen Yönlendiriciyi kullanmanız önerilir.

2. REALiTi SimScope'u en baştan yeniden kurun.

3. Stetoskop, + düğmesine basıldığında açılmıyor veya hemen kapanıyor. Pili yenisiyle değiştirin.

İpucu: Yalnızca AAA Lityum Pili kullanın. Optimum çalışma için "Energizer Ultimate Lityum AAA" pil kullanmanızı öneririz.

Sorunu hala çözemiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.



3B Scientific TR • Tekstil Kent Caddesi 10-Y Blok No:105 • 34235 Tekstilkent (B13 Blok No:36)

Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com.tr

Telefon: + 90 (0)212-422-8800 • Faks: + 90 (0)212-422-8801 • E-Posta: info.tr@3bscientific.com