



**1020628 | P94**

[3bscientific.com](http://3bscientific.com)

3B Scientific Treinador de Estágios de Parto

# TREINADOR DE ESTÁGIOS DE PARTO

## Introdução

Você adquiriu um Treinador de Estágios de Parto com o qual os estágios do parto podem ser demonstrados e praticados. O treinador possui 6 inserções que podem ser apalpadas e discutidas com os alunos. Padrões como parte da preparação profissional para o parto podem ser praticados e melhorados durante o treinamento e na prática clínica diária.

## Conteúdo do Fornecimento

6 inserções

Placa de segurança com 4 parafusos (para a inserção opcional no simulador de parto P90)

Lubrificante


Bolsa para transporte



## Funções


O conjunto compreende 6 inserções genitais diferentes que mostram os níveis de dilatação e apagamento do colo. As inserções podem ser usadas tanto como treinadores independentes quanto como módulo de extensão para o [Simulador de Parto P90](#). As inserções têm a mesma aparência externa, um código numérico na parte traseira indica a condição do colo no lado de dentro.

### Inserção nº 1

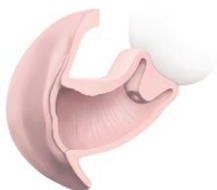

Colo fechado  
(0,5 cm)  
Posição -2

### Inserção nº 2

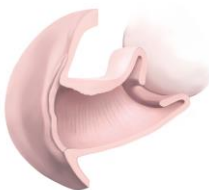

Colo aberto 2 cm,  
Posição -2

### Inserção nº 3



Colo aberto 3 cm,  
meio apagado  
Posição -2

### Inserção nº 4



Colo aberto 5 cm,  
apagado  
Posição -1

### Inserção nº 5



Colo aberto 7 cm,  
apagado  
Posição -1

### Inserção nº 6



Colo aberto 9 cm,  
apagado  
Posição 0

# TREINADOR DE ESTÁGIOS DE PARTO

## Montagem

Inserindo as inserções de estágio de parto:

- Se usado em conjunto com o Simulador de Parto P90 ([Basic](#) e [PRO](#)), várias inserções (1-6) podem ser colocadas no corpo base do simulador de parto. • Posicione os pés de borracha do simulador em superfície antideslizante, como uma mesa.
  - Remova a cobertura abdominal.
  - Remova a inserção da porção e do canal de parto (versão PRO).
  - Solte e remova os 4 parafusos.
  - Conecte a placa de segurança (Fig. 1) com os 4 parafusos integrados (que permanecem na placa de segurança) (Fig. 2).
- SOMENTE versão Basic:**
- Destaque o fecho oculto (conectado com os pinos brancos) da cobertura abdominal (pode ser usada como cobertura no uso normal para evitar que o lubrificante entre no recesso) (Fig. 3).
  - Remova a inserção da vulva da cobertura abdominal.
- Conecte a cobertura abdominal (somente ao redor do cóccix) (Fig. 4).
  - Insira a inserção de estágio de parto desejada por baixo na pelve (Fig. 5).
  - Assegure-se de que a inserção está firmemente encaixada no corpo base pelo fecho oculto.
  - Feche a cobertura abdominal completamente (Fig. 6).

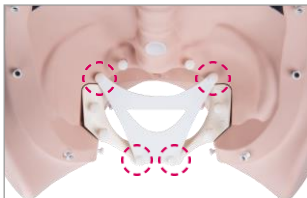
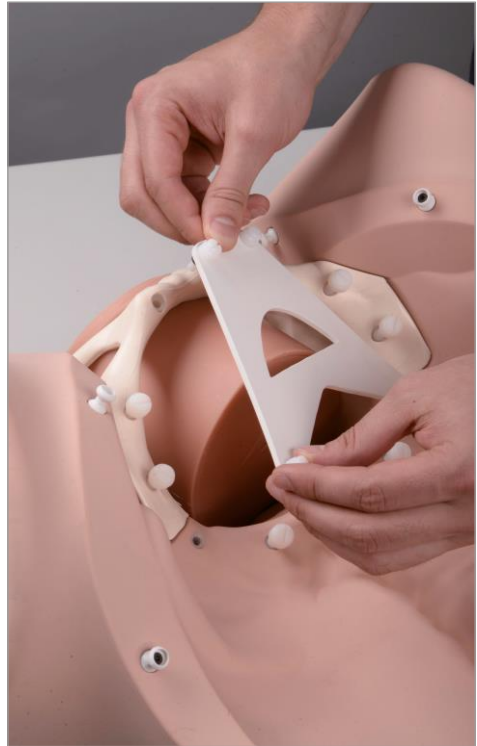


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

# TREINADOR DE ESTÁGIOS DE PARTO

de armazenar.



## DICA

Resíduos de lubrificante aplicado podem permanecer em algumas partes do simulador de parto se for usado novamente em breve. Assegure-se sempre de que foi aplicado lubrificante suficiente antes de iniciar um exame. Se não for usado por período mais extenso, limpe todas as peças

## Dados técnicos

Dimensões:

Simulador (A x L x P): 13 x 11,5 x 13 cm

Bolsa ( A x L X P): 25 x 60 x 23 cm

Peso: aprox. 5,6 kg (incluindo bolsa de transporte; 4,85 kg sem a bolsa de transporte)

Condições de operação:

Temperatura operacional: -10°C a +60°C

Temperatura de armazenamento: -20°C até +60°C

## Lista de consumíveis

[1020608 / XP90-015 lubricant \(2 x 250 ml\)](#)

## Também recomendado para treinamento de parteiras e obstetras

[1020332 | P90B Birth Simulator BASIC](#)

[1020333 | P90P Birth Simulator PRO](#)



3B Scientific GmbH • Atendimento ao Cliente Medical  
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburgo • Alemanha  
Tel.: + 49 (0) 40 739 660 • Fax: + 49 (0) 40 739 66100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 para manual de instruções e design de  
produto: 3B Scientific GmbH, Alemanha