




Belső nézet hüvelyszakadás varrása közben

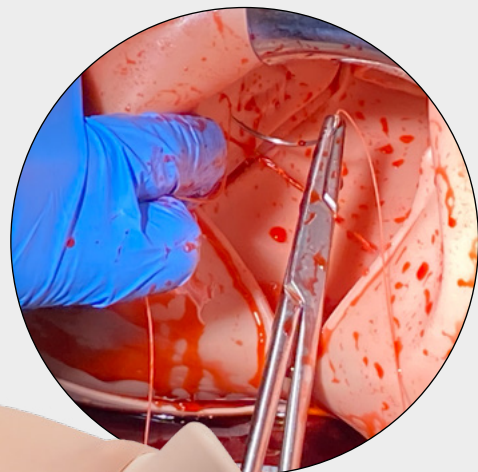

P97 PRO POSZTPARTUM HEMATÓMA SZIMULÁTOR

A németországi vezető szülészekkel együttműködésben kifejlesztett, újonnan frissített P97 PRO posztpartum hematóma (PPH) szimulátor megoldást kínál gyakorlati és valósághű tréningekre a PPH korai felismerésére, szisztematikus értékelésére és kezelésére. A szülés utáni súlyos vérzés órákon belül végzetes lehet az újdonsült anya számára, amennyiben nem diagnosztizálják és nem kezelik. A PPH eredmények javítása érdekében a 3B Scientific P97 PRO PPH trénera segíti a szülészeket és az egészségügyi szakemberek képzését, hogy a szülés utáni vérzést időben kezeljék és ellássák.


A P97 PRO-val három fő szülés utáni vérzési ok értékelhető és kezelhető: Tónusos, trauma és szöveti vérzés. A méh tónusának különböző szintjei könnyen beállíthatók. Jelen PPH tréneren még a hüvelyszakadások varrása is lehetséges, a betétek pedig cserélhetők. A méhlepény szilikonból készült a valósághű érzés és puhaság érdekében. A megtartott méhlepény manuálisan eltávolítható a méhüregből a szükséges orvosi beavatkozások elvégzéséhez. A 3000 ml-es vértartálynak és a kompakt csőrendszernek köszönhetően súlyos PPH forgatókönyvek szimulálhatók.



- Vérvesztés akár 3000 ml-ig
- Állítható véráramlási sebesség 400 ml/percig
- Többféle vérzés lehetséges

SKINlike™ magas minőségű szilikon


Valóság-hű tapintáshoz a hasfaltól a hüvelycsatornán át a méhig

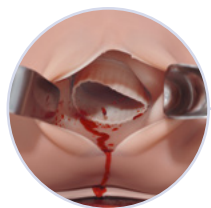

Méhnyak vérzése
Élethű posztpartum
méhnyak



Hüvelyi vérzés
Varrható
hüvelyszakadás

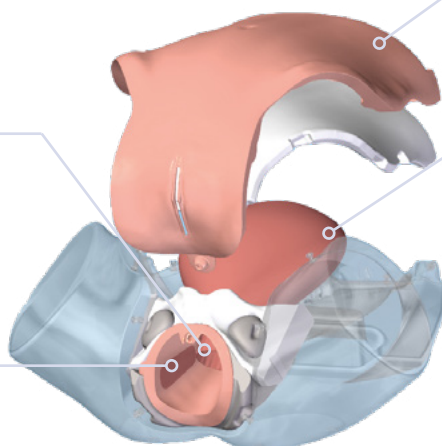

Méhvérzés
Állítható méhtónus



**Megtartott
méhlepény szállítása**



A P97 Pro PPH szimulátor ideális a következő készségek képzésére egyénileg és csapatban is:

- A méh atóniájának diagnózisa hasi vizsgálattal
- Alapmasszázs és bimanuális kompresszió gyakorlása
- Hüvelyszakadások varrása
- 360 fokos méhnyaki szemrevételezés
- A visszamaradt placenta kézi eltávolítása
- Méhen belüli ballon tamponád, pl. Bakri® ballon
- Méhűri tamponálás gézzel
- Súlyos szülészeti vérzéses esetek bemutatása
- Vérvesztés becslése
- Hólyagkatéterezés (folyadék nélkül)
- A méhkompressziós varrattechnikák bemutatása

1023727 P97 PRO PPH szimulátor

Szállítási tartalom:

- P97 Pro PPH oktató tréner
- 3000 ml-es vértartály
- Színkódolt légtelenítő csatlakozó
- Placenta három reziduális darabbal
- Két habból készült méh
- Vérpó (100 gramm))
- Kenőanyag
- Cserekészlet (1x szakítási betét, 1 készlet reziduális darabokból)
- Szárítóállvány a méhüreghez
- Hordtáska

Kiegészítő modulként is elérhető a P90 szülésszimulátorhoz:

1023731 PPH bővítőmodul

1022879 3B P90 PRO szülésszimulátor

1022878 3B P90 BASIC szülésszimulátor



10/2025

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, SZEKKENLJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com