



Ló palpációs kólika szimulátor

Ló Nyaki Vénapunkcióval és Intramuszkuláris Injekcióval

Tapasztalja meg a gyakorlati szimuláció következő szintjét a ló palpációs kólika szimulátor segítségével — egy élethű, anatómiailag pontos modell, amely az állatorvosi oktatást és a készségfejlesztést magasabb szintre emeli. Ez az egy 15 tenyér Quarter ló alapján modellezett sokoldalú szimulátor lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy magabiztosan végezzenek el alapvető beavatkozásokat, többek között a rektális tapintással végzett kolika diagnózist, a mesterséges megtermékenyítést, a hasüregi punkciót (abdominocentesis) és a vénás hozzáférési technikákat.

A még sokoldalúbb felhasználás érdekében tartozékként egy levehető Ló nyaki vénapunkciós és intramuszkuláris injekciós modell is jár hozzá, amely valósághű gyakorlást biztosít juguláris vérvételekhez, katéterbehelyezéshez és intramuszkuláris injekciókhoz. Akár integrált rendszer részeként, akár önálló egységként használják, ez a szimulátor hiteles, ismételhető képzési élményt nyújt, amely növeli a magabiztosságot, a pontosságot és az eljárási jártasságot.

FŐBB JELLEMZŐK

• Valóságshű lófelépítés

Egy 15 tenyér Quarter ló mintájára modellezve. Tartós, acélmerevített epoxi/üvegszálak kivitel, vízálló anyagokkal az egyszerű tisztításhoz.

• Részletes belső anatómia

- 5 szekciós felfújható latex gyomor-bélrendszer: jobb & bal ventrális vastagbél, jobb & bal dorzális vastagbél, valamint vakbél, továbbá egy 3m vékonybél szakasz.
- A lép és a bal vese a renosplenicus szalagon keresztül kapcsolódnak.
- Tapintható aorta szimulált pulzussal.
- Valóságshű méh méhnyakkal, húgycsővel és széles méhszalaggal.
- Három cserélhető petefészkek-készlet: anestrus, estrus, és estrus tüszőkkel.

• Abdominocentézis funkció

Cserélhető párna, folyadéktartály és tapintható linea alba lehetővé teszi a valóságshű mintavétel és folyadékgyűjtés gyakorlását.

• Külső jellemzők


Levehető farok, puha perineum-panel, poliuretán medence-másolat és felfújható vinil végbél támogatják a pontos tapintást és a kezelést.

• Levehető nyak- és fejmodul

A ló nyaki vénapunkciós & IM injekciós modell leválasztható önálló használatra vagy integrálható a szimulátorba.

Jellemzők:

- Tapintható nyaki vénák
- Cserélhető latex ér
- Nyomás alatti vénarendszer a véráramlás szimulálására
- Tartós külső borítás sörénnyel
- Intramuszkuláris (IM) injekciós hely
- Puha szilikon fej rugalmas fülekkel és részletes arci injekciós tájékoztató pontok

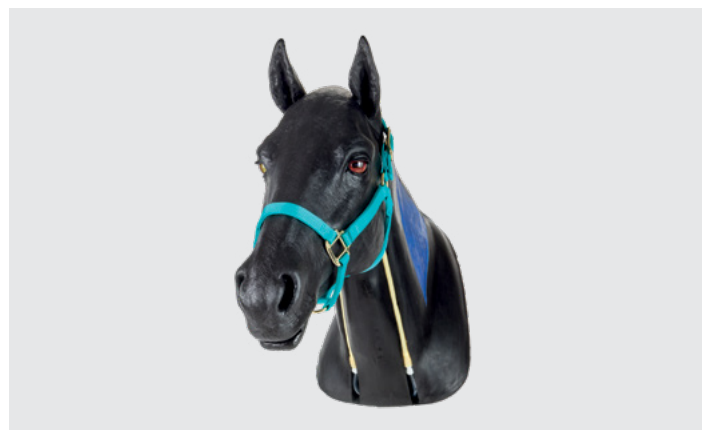

ELSŐ NAPI KÉSZSÉGEK & TERMÉKELŐNYÖK

A Ló palpációs kólika szimulátort a következőkre használhatják:

- Kólika felismerése és rektális vizsgálatok végzése a kulcsszervek, például a lép, a vese és a méh lokalizálására
- Mesterséges megtermékenyítés és egyéb reprodukív eljárások gyakorlása élethű belső anatómiával
- Hasúri punkció végzése folyadékmintavételhez tapintási pontossággal
- Érrendszeri eljárások végrehajtása, beleértve a juguláris vérvételeket és katéterbehelyezést a levehető nyakrész-modul használatával
- Intramuszkuláris injekciós technikák finomítása meghatározott anatómiai tájékoztató pontok használatával

A Ló nyaki vénapunkciós és intramuszkuláris injekciós modell eltávolítható a ló testéről, és önálló egységként is használható. Külön is megvásárolható.

Ló palpációs kólika szimulátor állvánnyal

| 1025584

Ló palpációs kólika szimulátor

| 1025566



CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

Ló Nyaki Vénák (10 Darabos Készlet)	1025577
Ló Abdominocentézis Hasüregi Punkció	1025567
Ló Aorta	1025596
Ló Kólikás Medence	1025574
Ló Emésztőrendszer Vékonybéllel	1025575
Ló Vese	1025597
Ló Nyaki Vénapunkció Sörény	1025571
Ló Nyaki Vénapunkció Bőrfedő, Fekete	1025569
Ló Nyaki Vénapunkciós és Intramuszkuláris Injekciós Modell Állvánnyal	1025599
Ló Petefészkek Készlet Tokkal	1025581
Ló Szaporítószervi Rendszer Összeállítás	1025572
Ló Vékonybél	1025573
Ló Lép	1025578

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, ITT SZKENNELJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com