



NASOGASTRISCHER SIMULATOR FÜR PFERDE

Der VSI Nasogastrische Simulator für Pferde ist ein wesentlicher Bestandteil der klinischen Ausbildung in der tierärztlichen Praxis. Unser Pferde-Simulator besticht durch realitätsgetreue Darstellung und Größe und bietet den Studierenden die Möglichkeit, anhand anatomischer Merkmale klinische Verfahren in kontrollierten Umgebungen zu üben. Durch Simulation erwerben sie Selbstvertrauen und Fachkenntnisse, bevor sie an lebenden Tieren praktizieren.

Darüber hinaus ist er mit dem Simulator für Dystokie beim Pferd kompatibel.

SOFORT EINSETZBARE FÄHIGKEITEN & PRODUKTVORTEILE

Nasogastrale Intubation

- Anatomisch korrekte, simulierte Replik des Nasengangs, zum Üben des Einführens des Intubationsschlauchs durch die Speiseröhre.
- Die detailliert dargestellte innere Anatomie ermöglicht es den Studierenden, die Lage des Schlauchs in der Speiseröhre anhand einer visuellen Referenzstelle auf der linken Halsseite zu überprüfen. Anschließend kann der Schlauch weiter in die Magenkammer eingeführt werden.
- Ein Geruchs- und/oder Saugetest kann durchgeführt werden, um die korrekte Positionierung des Schlauchs in der Magenkammer nachzuweisen.
- Die Lavage-Technik sowie die Verabreichung von Flüssigkeiten können simuliert werden.

Venenpunktion und intramuskuläre Injektion

- Juguläre Venenpunktion mit tastbaren Venen
- Leicht austauschbares Latexvenenschlauchsystem, das für Simulationszwecke mehrfach punktierbar ist.
- Das mechanische Venendrucksystem ermöglicht einen positiven Druck bei der Blutentnahme (20-22 Gauge-Nadel empfohlen für die Simulation).
- Intramuskuläre Injektionsstelle, die wiederholten Punktierungen standhält und Flüssigkeitsinjektionen zulässt.
- Weicher Silikonkopf mit flexiblen Ohren und detailliert dargestellter Anatomie ermöglicht, die Injektionsstellen im Gesicht zu lokalisieren. Der Kopf ist auch für Trense und Zaumzeug geeignet.
- Rollständer, verstellbar in Höhe, im rostralen Neigungswinkel und um 90° drehbar

Nasogastrischer Simulator für Pferde mit Rollständer 1025594

Nasogastrischer Simulator für Pferde ohne Rollständer 1025593




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- VSI Metallrollständer
- Strapazierfähiges Silikon mit Metallverstärkung
- Abnehmbarer Kopf für einen einfachen Transport und den unkomplizierten Austausch der Komponenten
- Abnehmbarer/waschbarer Überzug. Kann bei Abnutzung ersetzt werden
- Lieferung mit 5 Sätzen Ersatzvenen

AUSTAUSCHBARE TEILE

- Venen 1025577
- Intramuskuläre Pads 1025600
- Mähne 1025571
- Hautabdeckung 1025569

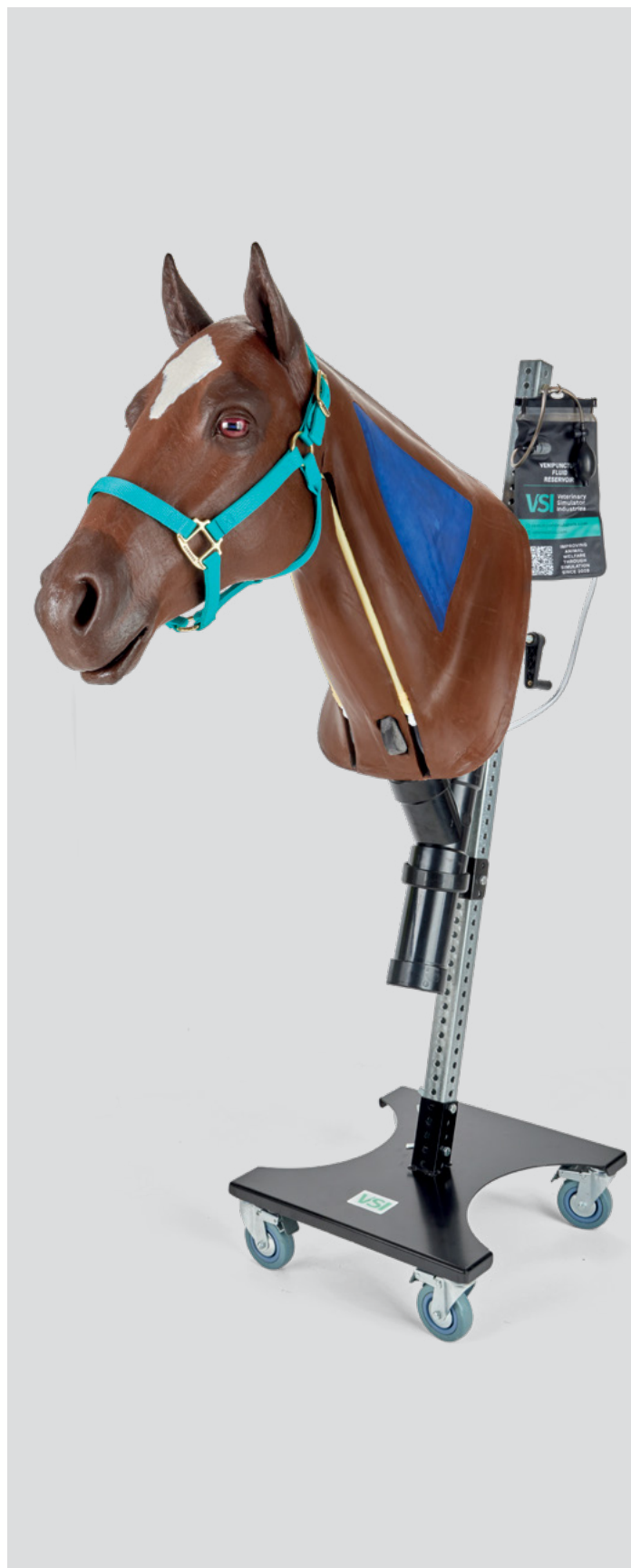

FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com