



SIMULATEUR NASOGASTRIQUE ÉQUIN

Le simulateur naso-gastrique équin VSI représente un élément essentiel des études cliniques en pratique vétérinaire. Notre simulateur équin, réaliste tant par sa présentation que par ses dimensions, offre aux étudiants l'opportunité de mettre à profit des caractéristiques anatomiques pour s'exercer à des procédures cliniques dans un environnement contrôlé. Grâce à la simulation, les étudiants gagneront en confiance et en expertise avant de passer aux animaux vivants.

De plus, il est compatible avec le simulateur de dystocie équine.

COMPÉTENCES DÈS LE PREMIER JOUR ET AVANTAGES DU PRODUIT

Intubation Nasogastrique

- Réplique de la voie nasale simulant la structure anatomique pendant que les étudiants s'exercent à faire passer le tube d'intubation par l'œsophage.
- Une anatomie interne soigneusement reproduite permet à l'étudiant de vérifier le positionnement du tube dans l'œsophage grâce à un repère visuel situé sur le côté gauche du cou. Les étudiants peuvent ensuite poursuivre le passage du tube jusqu'à la chambre gastrique.
- Un test olfactif et/ou de succion peut être réalisé pour confirmer le bon positionnement du tube dans la chambre gastrique.
- La technique de lavage et l'administration de liquides peuvent être simulées.

Ponction Veineuse et Injection Intramusculaire

- Ponction jugulaire avec des veines palpables
- Tubulure veineuse en latex, aisément remplaçable, capable de supporter de multiples ponctions à des fins de simulation
- Le système mécanique de pressurisation des veines offre une pression positive pour la prise de sang (aiguille de calibre 20-22 recommandée pour la simulation).
- Site intramusculaire conçu pour supporter de multiples ponctions et accepter des injections de liquides
- Tête en silicone souple dotée d'oreilles flexibles et d'une anatomie fidèlement reproduite, permettant aux étudiants de localiser les zones d'injection faciales. La tête accepte également mors & bride.
- Support roulant, réglable en hauteur, avec inclinaison rostrale et rotation à 90 degrés

Simulateur nasogastrique équin équipé d'un support roulant 1025594

Simulateur nasogastrique équin sans support roulant 1025593




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Support à roulettes en métal VSI
- Silicone résistant avec armature en métal
- Tête amovible pour faciliter le transport et le remplacement des composants
- Revêtement en peau amovible et lavable. Peut être remplacé en cas d'usure
- Livré avec 5 ensembles de veines de rechange

PIÈCES REMPLAÇABLES

- Veines 1025577
- Coussinet intramusculaires 1025600
- Crinière 1025571
- Revêtement de peau 1025569

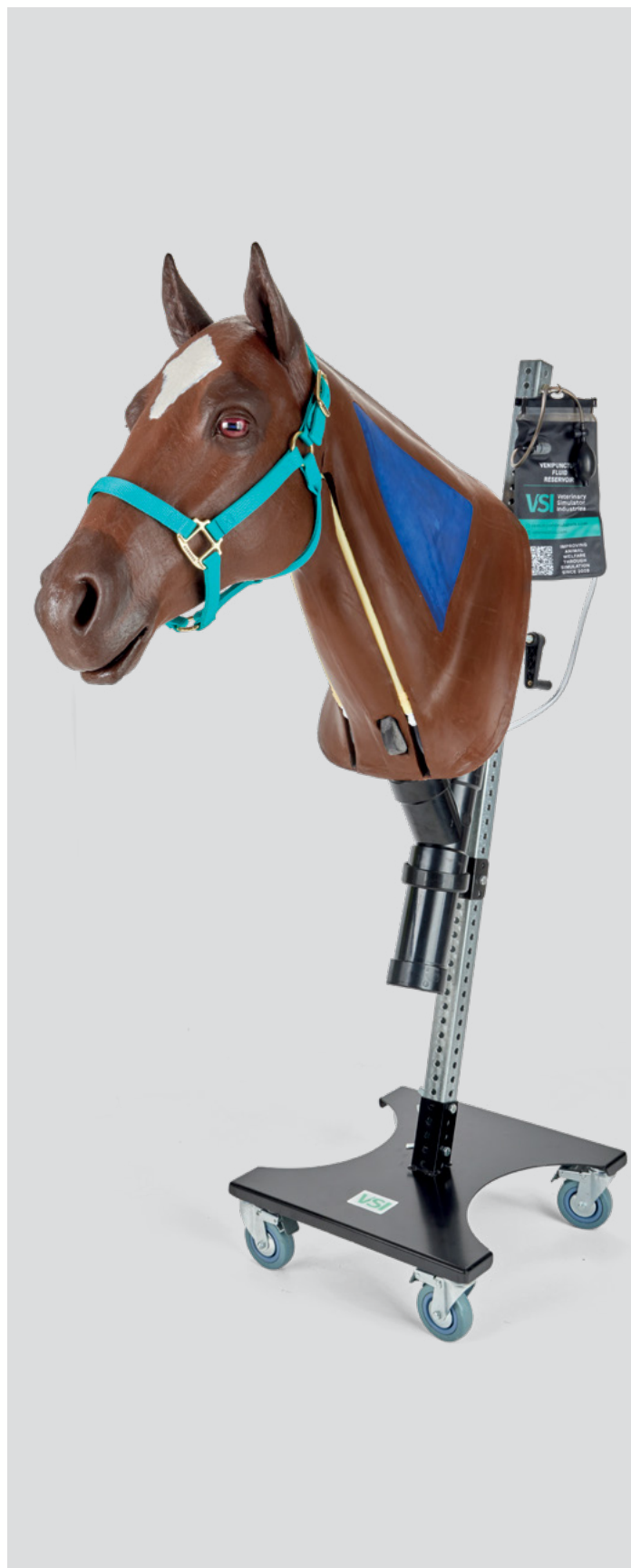

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com