



LÓ NAZOGASZTRIKUS SZIMULÁTOR

A VSI Ló nazogasztrikus szimulátor az állatorvosi praxis klinikai vizsgálataiban elengedhetetlen eszköz. A lovakra kifejlesztett szimulátorunk valósághű megjelenést és arányokat kínál, lehetővé téve a hallgatók számára, hogy anatómiai jellemzők alkalmazásával gyakorolják a klinikai beavatkozásokat ellenőrzött környezetben. A szimuláció révén a hallgatók magabiztosságot és szakértelmet szerezhhetnek, mielőtt élő állatokkal kezdenének dolgozni.

Ezen felül kompatibilis a Ló dystocia szimulátorral.

ELSŐ NAPI KÉSZSÉGEK & TERMÉK ELŐNYEI

Nazogasztrikus intubáció

- Az anatómiát hűen visszaadó replikált orrjárat lehetővé teszi a hallgatók számára a cső nyelőcsőn keresztüli behelyezésének gyakorlását.
- A részletesen kidolgozott belső anatómia segítségével a hallgató a nyak bal oldalán található vizuális referenciaterületen ellenőrizheti a cső elhelyezkedését a nyelőcsőben, majd folytathatja a cső gyomortérbe történő bevezetését.
- Illat- illetve/vagy szívóteszt alkalmazásával igazolható a cső helyes pozícionáltsága a gyomortérben.
- Szimulálhatók a gyomoröblítési technikák és a folyadékadminisztráció gyakorlata.

Vénapunkció és intramuszkuláris injekció

- Tapintható erekkel rendelkező juguláris véna punkciója.
- Könnyen cserélhető, latex vénacső, amely többszöri punkciót képes elviselni szimulációs célokra.
- Mechanikus vénanyomás-szabályozó rendszer biztosítja a pozitív nyomást a vérvételhez (20-22 gauge tű ajánlott a szimulációhoz).
- Olyan intramuszkuláris felület, amely többszöri punkciót és folyadékbefecskendezést tesz lehetővé.
- A puha szilikon fej, rugalmas fülekkel és részletesen kidolgozott anatómiával, elősegíti az arc injekciós pontjainak azonosítását. A fej kompatibilis a bit & bridle rendszerrel.
- A kerek állvány magassága, elülső döntése és 90 fokos forgathatósága állítható.

Ló nazogasztrikus szimulátor gördülő állvánnyal 1025594

Ló nazogasztrikus szimulátor gördülő állvány nélkül 1025593




MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- VSI fém, görgős állvány
- Tartós szilikon, fém alapszerkezettel
- Kivehető fej a könnyebb szállítás, illetve az alkatrészek cseréjének érdekében
- Kivehető/mosható bőrburkolat. Elhasználódás esetén cserélhető
- Öt szett pótvénával

CSEREALKATRÉSZEK

- Vénák 1025577
- Intramuszkuláris párnák 1025600
- Sörény 1025571
- Bőrburkolat 1025569

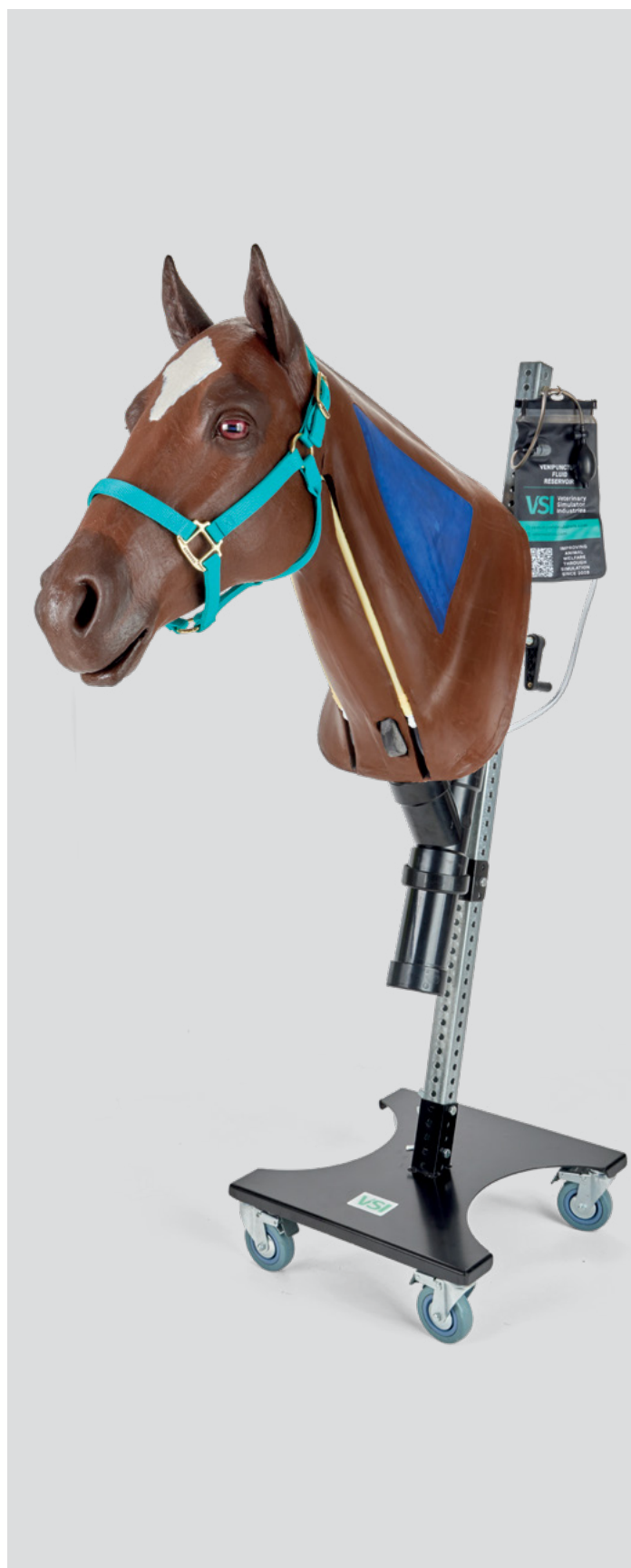

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜL FEL, VAGY TÁMOGATÁST IGÉNYEL,
KÉRJÜK, SZKENNELJE ITT



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com