



AT NAZOGASTRİK YÖNTEM VE VENİPUNKTÜRÜ

VSI At Nazogastrik ve Venipunktür Simülatörü, veteriner uygulamalarına yönelik yürütülen klinik çalışmaların temel bir parçasıdır. At simülatörümüz, sunum ve boyut açısından gerçeği yansıtarak öğrencilere, kontrollü bir ortamda klinik prosedürleri uygulamak için anatomik özelliklerden faydalanma imkânı sunar. Simülasyon sayesinde, öğrenciler canlı hayvanlara geçmeden önce güven kazanacak ve uzmanlıklarını geliştireceklerdir.

Ayrıca, At Zor Doğum Simülatörü ile uyumludur.

İLK GÜN BECERİLERİ & ÜRÜN FAYDALARI

Nazogastrik Intübasyon

- Öğrencilerin tüpü özofagus aracılığıyla ilerletirken anatomi yapısını simüle eden replika nazal geçit.
- Gerçekçi iç anatomi, öğrencilerin tüpün özofagusta, boynun sol tarafındaki görsel referans sayesinde doğru yerleştirildiğini teyit etmelerine olanak tanır. Öğrenciler daha sonra tüpü mide odacığına geçirmeye devam edebilir.
- Mide odacığında tüpün doğru konumlandığını göstermek amacıyla koku ve/veya emme testi uygulanabilir.
- Yıkama tekniği ve sıvı uygulamaları simüle edilebilir.

Venipunktür ve Intramusküler Enjeksiyon (IM Enjeksiyon)

- Palpe edilebilen damarların bulunduğu juguler venipunktür.
- Simülasyon amaçlı birden fazla delinmeye dayanabilen, kolayca değiştirilebilen lateks damar tüpü.
- Mekanik damar basınçlandırma sistemi, kan çekimi sırasında pozitif basınç sağlamaktadır (Simülasyon için 20-22 gauge iğne önerilir).
- Birden fazla delinmeye dayanıklı ve sıvı enjeksiyonlarını kabul eden intramusküler uygulama bölgesi.
- Esnek kulaklara sahip yumuşak silikon baş ve gerçekçi anatomi, öğrencilerin yüz enjeksiyon bölgelerini kolaylıkla belirlemesine olanak tanır. Baş kısmına ayrıca ağızlık ve dizginler takılabilir.
- Yükseklik, rostral eğim ve 90 derece döndürmeye ayarlanabilen yuvarlanabilir stand.

Tekerlekli Standlı At Nazogastrik Simülatörü 1025594

Tekerlekli Standsız At Nazogastrik Simülatörü 1025593


+

TEKNİK ÖZELLİKLER

- VSI metal tekerlekli stand
- Metal iskeletli, dayanıklı silikon
- Taşıma kolaylığı için çıkarılabilir başlık, ve bileşenlerin değiştirilmesi için
- Çıkarılabilir/yıkanebilir deri kaplama. Kullanım aşınması durumunda değiştirilebilir
- 5 set yedek damarla birlikte gelir

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

- Damarlar 1025577
- Kas İçi Pedler 1025600
- Yele 1025571
- Deri Örtüsü 1025569

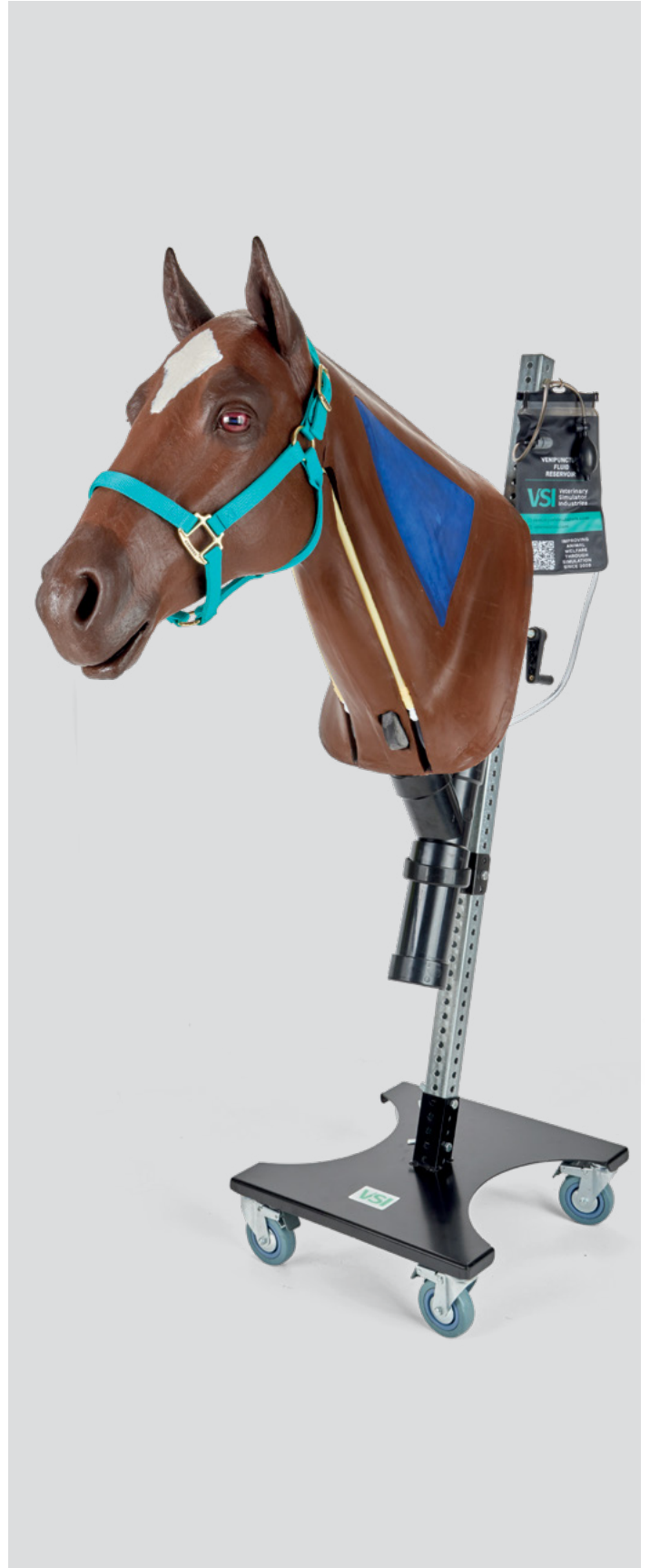

04/2025

HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORSANIZ, LÜTFEN BURAYI TARAYIN.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com