



NOVO! TREINADOR DE CUIDADOS INTESTINAIS P16

Treinador de alta qualidade de cuidados intestinais em tamanho real para treinamento de intervenções de administração de cuidado intestinal e enema. Melhore o treinamento do cuidado de paciente hospitalar para reduzir o risco de complicações associadas à administração de disfunção do intestino inferior e garantir a segurança do paciente.


As várias funções do simulador permitem que os aprendizes administrem diferentes procedimentos durante o treinamento. Um sistema seguro de reservatório de recebimento de fluidos torna o Treinador de cuidados intestinais portátil livre de vazamentos. Graças a mudança rápida e fácil da configuração (< 1 min), várias técnicas podem ser treinadas sob o controle do instrutor e durante a prática do estudante.

Treine os seguintes procedimentos de cuidados intestinais:

- Administração de enema
- Limpeza
- Retenção de óleo
- Fluxo de retorno
- Enemas medicados
- Administração de supositórios
- Administração de medicamentos
- Exame retal digital (DRE) e estímulo retal digital (DRS)
- Remoção digital das fezes (DRF)



Remoção Digital de Fezes (DRF)

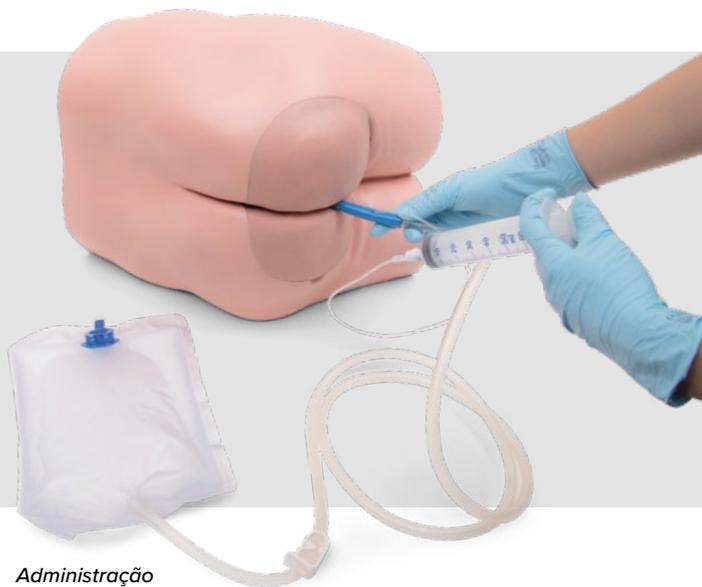

Administração de Enema

Dimensões e peso: 3,8 kg; 55 × 35 × 32 cm

1022519 3B Scientific Treinador de cuidados intestinais P16

Reposições e consumíveis:

1022521 Pó de fezes artificiais solúveis (60 g)

1022522 Pó de fezes artificiais sólidas (1 kg)

1022523 Conjunto de reposições de inserções retais digitais

Recursos técnicos do Treinador de cuidados intestinais P16:


- A nádega superior é macia e flexível para ser mais realista; o aluno deverá levantá-la para ter acesso ao ânus
- Suporta a inserção de cateteres CH16 a CH40 e sonda balão retal
- As diferentes inserções retais digitais são compostas de silicone firme SKINlike™ para simular o tato da pele e do tecido humano durante o DRE e DRS
- O ânus permanece fechado e impenetrável após a remoção do cateter devido à alta qualidade do material de inserção.
- Garante portabilidade, impermeabilidade, segurança
- Administra soluções de enema padrão sem risco até um volume de 2 litros
- O fluido pode ser drenado para o reservatório de recebimento ou diretamente para uma pia ou um recipiente próximo
- Design otimizado para permitir uma instalação rápida e simples para cada procedimento
- Fácil de limpar

+

Contém dois modelos anatômicos didáticos 3D (tridimensionais) de hemorróidas para facilitar a explicação de complicações ou contraindicações. Os modelos 3D são anexados ao modelo com ímã para que seja passado entre os estudantes durante a aula.

A: Uma seção frontal do reto com hemorróidas, fissuras e fístulas anais

B: Uma visão externa com prolapso anal inchado e nós de hemorróidas

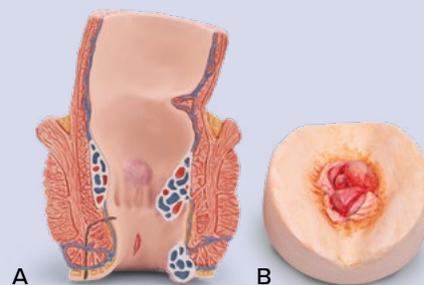

08/2022



MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM 3BSCIENTIFIC.COM



Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. • Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva • CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil
3bscientific.com.br • Fone: +55 (0) 47 3464-1818 • E-mail: vendas@3bscientific.com