



Simulateur De Palpation Pour Coliques Équines

Avec Ponction Veineuse Jugulaire Équine et Injection Intramusculaire

Passez au niveau supérieur de la formation pratique équine avec le Simulateur de palpation pour coliques équines — un modèle réaliste et anatomiquement fidèle conçu pour améliorer l'enseignement vétérinaire et le développement des compétences. Modélisé d'après un Quarter Horse de 15 mains, ce simulateur polyvalent permet aux utilisateurs d'effectuer en toute confiance des procédures essentielles telles que le diagnostic des coliques par palpation rectale, l'insémination artificielle, la ponction abdominale et les techniques d'accès vasculaire.

Pour une polyvalence encore accrue, il inclut un modèle cervical amovible pour ponction veineuse et injection intramusculaire chez le cheval, offrant une pratique réaliste pour les prélèvements sanguins jugulaires, la pose de cathéter et les injections intramusculaires. Qu'il soit utilisé comme système intégré ou comme unité autonome, ce simulateur offre une expérience de formation authentique et reproductible qui renforce la confiance, la précision et la maîtrise des procédures.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Conformation équine réaliste

Modélisé d'après un Quarter Horse de 15 mains. Construction durable en époxy/fibre de verre renforcée par une armature en acier, avec des matériaux résistants à l'eau pour un nettoyage facile.

• Anatomie interne détaillée

- Tractus gastro-intestinal gonflable en latex à 5 sections : côlon ventral droit & gauche, côlon dorsal droit & gauche, et caecum, plus une section d'intestin grêle de 3m.
- Rate et rein gauche reliés par le ligament rénosplénique.
- Aorte palpable avec pulsation simulée.
- Utérus réaliste avec col utérin, urètre et ligament large.
- Trois jeux d'ovaires interchangeables : anéstrus, œstrus, et œstrus avec follicules.

• Fonction d'abdominocentèse

Coussinet remplaçable, réservoir de liquide et linea alba palpable offrent une pratique réaliste des prélèvements et de la collecte de fluides.

• Caractéristiques externes

Queue amovible, panneau périnéal souple, réplique de pelvis en polyuréthane, et rectum gonflable en vinyle permettent une palpation et une manipulation précises.

• Module cou & tête détachable

Le modèle de ponction veineuse jugulaire du cou équin et d'injection IM se détache pour une utilisation autonome ou une intégration au simulateur.

Caractéristiques :


- Veines jugulaires palpables
- Veine en latex remplaçable
- Système veineux pressurisé simulant l'écoulement sanguin
- Revêtement durable avec crinière
- Site d'injection intramusculaire (IM)
- Tête en silicone souple avec oreilles flexibles et repères d'injection faciale détaillés

Simulateur de colique équine pour palpation
avec support

| 1025584

Simulateur de colique équine pour palpation

| 1025566

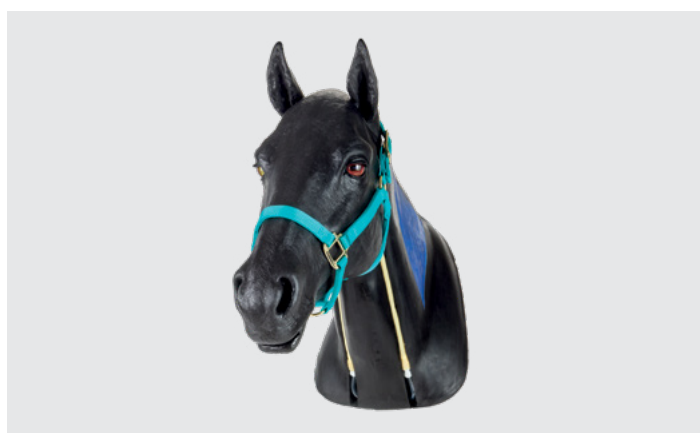

COMPÉTENCES DU PREMIER JOUR & AVANTAGES DU PRODUIT

Avec le simulateur de palpation des coliques équines, les apprenants peuvent :

- Identifier la colique et effectuer des examens rectaux pour localiser des organes clés tels que la rate, le rein et l'utérus
- S'entraîner à l'insémination artificielle et à d'autres procédures reproductives en utilisant une anatomie interne réaliste
- Réaliser une abdominocentèse pour le prélèvement de liquide avec une précision tactile
- Effectuer des procédures vasculaires, y compris des prélèvements sanguins jugulaires et la pose de cathéters en utilisant le module de cou amovible
- Perfectionner les techniques d'injection intramusculaire en s'appuyant sur des repères anatomiques définis

Le modèle de ponction jugulaire et d'injection intramusculaire pour équidés se détache du corps du cheval et peut être utilisé comme unité autonome. Il est également vendu séparément.

PIÈCES REMPLAÇABLES

Veines Jugulaires Équines (Lot de 10)	1025577
Abdominocentèse Équine (Ponction Abdominale)	1025567
Aorte Équine	1025596
Bassin Équin pour Coliques	1025574
Tractus Gastro-Intestinal Équin avec Intestin Grêle	1025575
Rein Équin	1025597
Crinière Équine pour Ponction Veineuse du Cou	1025571
Couverture Cutanée Équine pour Ponction Veineuse du Cou, Noire	1025569
Ponction Veineuse du Cou Équine et Intramusculaire	1025599
Injection avec Support	1025599
Ensemble d'Ovaires Équins avec Étui	1025581
Assemblage du Tractus Reproducteur Équin	1025572
Intestin Grêle Équin	1025573
Rate Équine	1025578

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE, VEUILLEZ
SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com