



Simulatore per la Palpazione della Colica Equina

Con venipuntura del collo equino e iniezione intramuscolare

Porta la formazione pratica equina al livello successivo con l'Equine Palpation Colic Simulator — un modello verosimile e anatomicamente accurato progettato per potenziare la formazione veterinaria e lo sviluppo delle competenze. Ispirato a un Quarter Horse di 15 mani, questo versatile simulatore consente agli utenti di eseguire con sicurezza procedure essenziali, tra cui la diagnosi di colica mediante palpazione rettale, l'inseminazione artificiale, l'addominocentesi e le tecniche di accesso vascolare.

Per una versatilità ancora maggiore, include un modello rimovibile per la venipuntura del collo e le iniezioni intramuscolari, che offre una pratica realistica per i prelievi venosi giugulari, il posizionamento di cateteri e le iniezioni intramuscolari. Sia utilizzato come sistema integrato sia come unità autonoma, questo simulatore offre un'esperienza formativa autentica e ripetibile che accresce la fiducia, la precisione e la competenza procedurale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Costruzione Equina Realistica

Modellato su un 15-hand Quarter Horse. Costruzione durevole in resina epossidica/vetroresina rinforzata con acciaio e materiali resistenti all'acqua per una facile pulizia.

• Anatomia Interna Dettagliata

- 5-section tratto gastrointestinale in lattice gonfiabile: colon ventrale destro & sinistro, colon dorsale destro & sinistro, e cieco, più una sezione di intestino tenue 3m.
- Milza e rene sinistro collegati tramite il legamento renosplenico.
- Aorta palpabile con battito simulato.
- Utero realistico con cervice, uretra e legamento largo.
- Tre set di ovaie intercambiabili: anoestro, estro e estro con follicoli.

• Funzione di Abdominocentesi

Tappetino sostituibile, serbatoio per liquidi e linea alba palpabile frono una pratica realistica di prelievo e raccolta di liquidi.

• Caratteristiche Esterne

Coda rimovibile, pannello perineale morbido, replica del bacino in poliuretano e retto in vinile gonfiabile supportano la palpazione accurata e la manipolazione.

• Modulo Collo & Testa Staccabile

Il modulo per venipuntura al collo e iniezione IM per equini si stacca per l'uso autonomo o per l'integrazione con il simulatore.

Caratteristiche includono:


- Vene giugulari palpabili
- Vena in lattice sostituibile
- Sistema venoso pressurizzato che simula il flusso sanguigno
- Rivestimento resistente con criniera
- Sito di iniezione intramuscolare (IM)
- Testa in silicone morbido con orecchie flessibili e dettagliati punti di riferimento per iniezioni facciali

**Simulatore Per La Palpazione Della Colica Equina
Con Stativo**

| 1025584

Simulatore Per La Palpazione Della Colica Equina

| 1025566

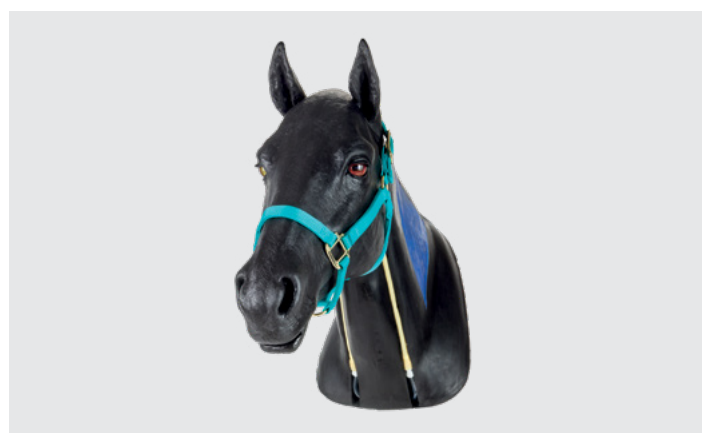

COMPETENZE DEL PRIMO GIORNO & VANTAGGI DEL PRODOTTO

Con il Simulatore per la palpazione della colica equina, gli studenti possono:

- Identificare la colica ed eseguire esami rettali per localizzare organi chiave come la milza, il rene e l'utero
- Praticare l'inseminazione artificiale e altre procedure riproduttive utilizzando un'anatomia interna realistica
- Eseguire l'addominocentesi per il prelievo di liquido con precisione tattile
- Eseguire procedure vascolari, inclusi prelievi dalla giugulare e inserimento del catetere utilizzando il modulo del collo staccabile
- Perfezionare le tecniche di iniezione intramuscolare utilizzando punti di riferimento anatomici definiti

Il Modello per Venipuntura del Collo & Iniezione Intramuscolare per Equini è rimovibile dal corpo del cavallo e può essere utilizzato come unità autonoma. È inoltre disponibile separatamente.

PARTI SOSTITUIBILI

Vene Giugulari Equine (Set da 10)	1025577
Addominocentesi Equina Puntura Addominale	1025567
Aorta Equina	1025596
Pelvi per Colica Equina	1025574
Tratto Gastrointestinale Equino con Intestino Tenue	1025575
Rene Equino	1025597
Criniera per Venipuntura del Collo Equino	1025571
Copertura Cutanea per Venipuntura del Collo, Nera	1025569
Venipuntura del Collo Equino e Iniezione Intramuscolare con Supporto	1025599
Set di Ovaie Equine con Custodia	1025581
Assemblaggio dell'Apparato Riproduttivo Equino	1025572
Intestino Tenue Equino	1025573
Milza Equina	1025578

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com