



Simulador De Palpação Para Cólica Equina

Com Punção Venosa Cervical em Equinos e Injeção Intramuscular

Experimente um novo nível de treinamento prático em equinos com o Simulador de Palpação para Cólica Equina — um modelo realista e anatomicamente preciso, projetado para aprimorar a educação veterinária e o desenvolvimento de habilidades. Modelado a partir de um cavalo Quarter Horse de 15 mãos, este simulador versátil permite aos usuários realizar com confiança procedimentos essenciais, como diagnóstico de cólica por palpação retal, inseminação artificial, abdominocentese e técnicas de acesso vascular.

Para ainda mais versatilidade, o simulador inclui um modelo removível para punção venosa do pescoço equino e injeção intramuscular, proporcionando uma prática realista de punções jugulares, colocação de cateter e administração de injeções intramusculares. Seja utilizado como parte de um sistema integrado ou como unidade independente, este simulador oferece uma experiência de treinamento autêntica e repetível, desenvolvendo confiança, precisão e competência nos procedimentos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Construção Equestre Realista

Modelado a partir de um Quarter Horse de 15 mãos. Construção durável em epóxi/fibra de vidro reforçada com aço, com materiais resistentes à água para facilitar a limpeza.

• Anatomia Interna Detalhada

- Trato gastrointestinal inflável em 5 seções de látex: cólon ventral direito e esquerdo, cólon dorsal direito e esquerdo e ceco, além de um segmento de intestino delgado de 3 m.
- Baço e rim esquerdo conectados pelo ligamento renoesplênico.
- Aorta palpável com pulso simulado.
- Útero realista com colo do útero, uretra e ligamento largo.
- Três conjuntos ováricos intercambiáveis: anestro, estro e estro com folículos.

• Função de Abdominocentese

Almofada substituível, reservatório de fluido e linha alba palpável proporcionam prática realista de amostragem e coleta de fluidos.

• Características Externas

Cauda removível, painel perineal macio, pelve réplica em poliuretano e reto inflável em vinil permitem palpação e manuseio precisos.


• Módulo de Pescoço & Cabeça Destacável

O Modelo de Venopunção do Pescoço & Injeção IM para Equinos pode ser destacado para uso independente ou integração com o simulador.

Recursos incluem:

- Veias jugulares palpáveis
- Veia de látex substituível
- Sistema venoso pressurizado simulando fluxo sanguíneo
- Cobertura durável com crina
- Local de injeção intramuscular (IM)
- Cabeça macia em silicone com orelhas flexíveis e pontos de injeção facial com referências anatômicas detalhadas.

Simulador de cólica equina para palpação com suporte | 1025584
Simulador de cólica equina para palpação | 1025566

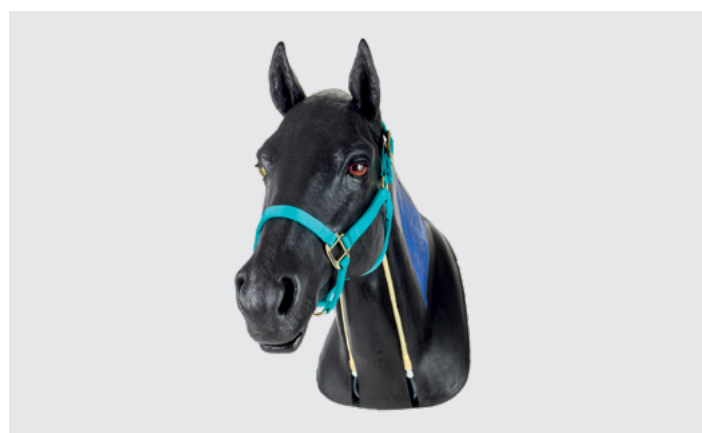

COMPETÊNCIAS DO PRIMEIRO DIA & BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Com o Simulador de Palpação para Cólicas Equinas, os alunos podem:

- Identificar sinais de cólica e realizar exames retais para localizar órgãos-chave, como o baço, o rim e o útero
- Praticar inseminação artificial e outros procedimentos reprodutivos, utilizando anatomia interna realista
- Realizar abdominocentese para coleta de líquido com precisão tátil
- Executar procedimentos vasculares, incluindo punções jugulares para coleta de sangue e colocação de cateter, utilizando o módulo de pescoço removível
- Aperfeiçoar técnicas de injeção intramuscular, utilizando marcos anatômicos bem definidos

O Modelo de Venopunção Cervical e Injeção Intramuscular Equino é removível do corpo do cavalo e pode ser utilizado como unidade independente. Também está disponível para compra separadamente.

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

Veias Jugulares Equinas (Conjunto de 10)	1025577
Abdominocentese Equina (Punção Abdominal)	1025567
Aorta Equina	1025596
Pelve para simulação de cólica equina	1025574
Trato Gastrointestinal Equino com Intestino Delgado	1025575
Rim Equino	1025597
Juba para Venopunção no Pescoço Equino	1025571
Capa de pele preta para venopunção no pescoço equino	1025569
Simulador de venopunção no pescoço equino e injeção intramuscular com suporte	1025599
Conjunto de Ovários Equinos com Estojo	1025581
Conjunto do Trato Reprodutor Equino	1025572
Intestino Delgado Equino	1025573
Baço Equino	1025578

SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com